

# Uw StarLink Mini Remote Microphone Gebruikershandleiding



---

Accessoire voor:

Draadloze hoortoestellen

## Gefeliciteerd met uw nieuwe Mini Remote Microphone!

Uw Mini Remote Mic verbetert spraak zodat u van gesprekken kunt genieten. En contact maken met de wereld om u heen. Gebruik deze eenvoudige handleiding om aan de slag te gaan.

## Inhoudsopgave

### 1. Leer uw Mini Remote Microphone kennen

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Maak kennis met uw Mini Remote Mic..... | 3  |
| Uw Mini Remote Mic instellen.....       | 4  |
| Uw Mini Remote Mic gebruiken.....       | 8  |
| Uw Mini Remote Mic opladen.....         | 13 |

### 2. Handleiding voor probleemoplossing.....15

### 3. Aanvullende informatie

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Beoogd gebruik.....              | 19 |
| FCC-informatie.....              | 23 |
| Informatie over regelgeving..... | 24 |

## Maak kennis met uw Mini Remote Mic

### Overzicht

- Aan/uit-knop**  
Schakelt de Mini Remote Mic **UIT/AAN**.
- Indicatielampje**  
Geeft aan of uw Mini Remote Mic momenteel actief is.
- Microfoon**  
Vangt de stem van de spreker op (audio) zodat u het kunt horen.
- Voedingsaansluiting (micro-USB)**  
Voor de voedingsadapter.
- Clip**  
Bevestigt de Mini Remote Mic aan de kleding of het draagkoord van de spreker.



## Uw Mini Remote Mic instellen

### AAN/UIT-schakelen

Gebruik de aan/uit-knop om uw Mini Remote Mic **AAN** of **UIT** te zetten:

- **AAN** – druk 2 seconden op de aan/uit-knop. Laat los wanneer het indicatielampje groen oplicht.
- **UIT** – druk 2 seconden op de aan/uit-knop. Laat los wanneer het groene indicatielampje niet meer verschijnt.



### Koppelen met hoortoestellen

Voordat u uw Mini Remote Mic voor het eerst gebruikt, moet u deze koppelen met uw hoortoestel(len). Hierdoor kan uw accessoire uw hoortoestellen herkennen, zodat ze kunnen samenwerken.

## STAP 1: Zet uw Mini Remote Mic AAN

### STAP 2: Zet uw hoortoestellen UIT en AAN.

- **Voor CROS-hoortoestellen:**  
Zet uw hoortoestellen en CROS-zender UIT. Zet uw hoortoestellen vervolgens **AAN**, maar laat de CROS-zender **UIT**.

### STAP 3: Uw Mini Remote Mic koppelen met uw hoortoestel(len):

1. Zorg ervoor dat uw hoortoestellen niet verbonden zijn met dichtbijzijnde Bluetooth® apparaten:
  - Schakel Bluetooth **UIT** op uw mobiele telefoon.
  - Schakel alle draadloze accessoires die al aan uw hoortoestellen zijn gekoppeld **UIT**.
2. Plaats uw hoortoestellen binnen 15 cm van uw Mini Remote Mic.

3. Wanneer het groene indicatielampje op uw Mini Remote Mic begint te knipperen, drukt u tweemaal langzaam op de aan/uit-knop. Het indicatielampje knippert vervolgens rood en blauw.



4. Voor een **paar** hoortoestellen:

| 1e statuslampje knippert | 2e statuslampje knippert | Resultaat van koppelen            | Volgende stap               |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1                        | 2                        | Beide hoortoestellen gekoppeld    | Voltooid                    |
| 1                        | 2                        | Slechts één hoortoestel gekoppeld | Herhaal 1 – 5 binnen STAP 3 |
| 1                        | N.v.t.                   | Geen hoortoestellen gekoppeld     | Herhaal 1 – 5 binnen STAP 3 |

5. Voor een **enkel** hoortoestel:

| Statuslampje knippert | Resultaat van koppelen     | Volgende stap               |
|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1                     | Hoortoestel gekoppeld      | Voltooid                    |
| 1                     | Hoortoestel niet gekoppeld | Herhaal 1 – 5 binnen STAP 3 |

Klaar! Ga naar de volgende pagina om uw Mini Remote Mic te gaan gebruiken.

## Uw Mini Remote Mic gebruiken

### STAP 1: Controleer of uw hoortoestellen AAN staan.

**Herinnering** – Voordat u begint met audio streamen, moet u ervoor zorgen dat uw hoortoestellen zijn gekoppeld aan uw Mini Remote Mic.

Zie blz. 4.

### STAP 2: Het streamen van audio starten/stoppen (de stem van een spreker). Voer een van de volgende handelingen uit:

- **Zet de Mini Remote Mic aan:**  
Audiostreamen begint automatisch in het hoortoestel.
- **Mobiele app voor hoortoestel:**  
Open de app op uw mobiele telefoon of tablet. Selecteer de optie om het streamen te starten/stoppen vanuit het scherm **Accessoires**.

- **Draadloze afstandsbediening:**  
Druk op de Favorieten-knop als uw audicien dit heeft geconfigureerd.
- **Gebruikersbediening hoortoestel:**  
Indien geconfigureerd door uw audicien, kan een specifiek gebaar (bijv. lang drukken op de drukknop van het hoortoestel) het streamen starten/stoppen.



**OPMERKING:** Er kan een geluidsindicator in uw hoortoestellen worden afgespeeld om het starten/stoppen van audiostreaming aan te geven.

**OPMERKING:** Typisch draadloos bereik is maximaal 20 meter. Deze afstand kan in de realiteit kleiner zijn door omgevingsfactoren (bijv. obstakels, interferentie, positie van mensen). Een breder bereik is wellicht mogelijk, maar de kwaliteit van uw audio of verbinding kan dan afnemen.

### STAP 3: Pas het streamingvolume aan. Voer een van de volgende handelingen uit:

- Verplaats de **volumeschuifregelaar** op het scherm Accessoires van uw compatibele mobiele app.
- Druk op de **Favorieten-knop** op uw draadloze **afstandsbediening**.\*
- Druk (of tik) op de **bedienings-elementen van uw hoortoestel**.\*

### Indicatielampje

Het indicatielampje geeft aan hoe uw Mini Remote Mic op dat moment werkt:

| Status indicatielampje                                             | Operationele status            |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Langzaam, groen knipperend                                         | AAN                            |
| Er verschijnt geen groen indicatielampje                           | UIT                            |
| Langzaam, rood knipperend (er klinkt ook een toon om de 5 minuten) | Batterij bijna leeg            |
| Effen rood                                                         | Storing of elektrisch probleem |


\*Het bedienen van uw Mini Remote Mic met deze functie moet worden ingesteld door uw audicien.

### De Mini Remote Mic dragen

Uw Mini Remote Mic kan worden bevestigd aan de kleding of het koord van de spreker. Het is het beste om het binnen 20 cm van de mond van de spreker te plaatsen.


### Instructies voor kleding:

1. Knijp in de clip van de Mini Remote Mic totdat deze opent.
2. Schuif de opening van de clip op de kleding.
3. Laat de clip los.
4. Zorg ervoor dat uw Mini Remote Mic stevig aan de kleding is bevestigd.

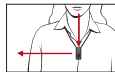

## Instructies voor draagkoord (optioneel):

1. Knijp in de clip van de Mini Remote Mic totdat deze opent.
2. Schuif de koordlus in de clipopening. Til de lus naar de bovenkant van de clip.
3. Laat de clip los.
4. Zorg ervoor dat uw Mini Remote Mic stevig aan het koord is bevestigd
5. Plaats het draagkoord om de hals.

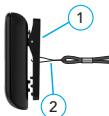

## Hoe uw Mini Remote Mic helpt

Uw Mini Remote Mic is ontworpen om spraak te verbeteren en u te helpen genieten van gesprekken met een andere persoon.



U kunt ook proberen uw Mini Remote Mic in de buurt van uw tv te plaatsen om de audio beter te horen. *Gebruik voor het beste resultaat een tv-streamer. Raadpleeg uw audicien voor meer informatie.*

## Uw Mini Remote Mic opladen

1. Sluit het micro-USB-uiteinde van de oplaadkabel aan op de micro-USB-aansluiting op uw Mini Remote Mic.
2. Sluit het micro-USB-uiteinde van de oplaadkabel aan op de aansluiting op de voedingsadapter.
3. Sluit de voedingsadapter aan op een externe stroombron, zoals een stopcontact.
4. Controleer de laadstatus met het indicatielampje op uw Mini Remote Mic.



| Status AAN/<br>UIT | Status<br>indicatielampje                                                        | Oplaadstatus       |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| UIT                | Effen groen                                                                      | Bezig met opladen  |
| UIT                | Geen                                                                             | Volledig opgeladen |
| AAN                | Effen groen, kort<br>onderbroken door<br>ander gedrag van<br>het indicatielampje | Bezig met opladen  |
| AAN                | Geen                                                                             | Volledig opgeladen |

*Uw Mini Remote Mic wordt in ongeveer 3 uur volledig opgeladen.*

**Herinnering** – Het opladen van uw Mini Remote Mic kan langer duren als u audio streamt. Het opladen gaat meestal sneller wanneer uw Mini Remote Mic UIT staat.

## Handleiding voor probleemoplossing

Problemen met uw Mini Remote Mic? Probeer deze tips. Neem contact op met uw audicien als de problemen aanhouden.

| Symptoom                                                                    | Mogelijke oorzaken                                                          | Oplossingen                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eén (of beide) hoortoestellen stopt onverwachts met het streamen van audio. | Hoortoestel bevindt zich mogelijk bijna buiten het draadloze bereik.        | Zorg ervoor dat u dichter in de buurt van uw Mini Remote Mic bent.                       |
|                                                                             | Het batterijniveau van uw hoortoestel ondersteunt geen audiostreaming meer. | Vervang de batterij van uw hoortoestel door een nieuwe.<br>OF<br>Laad uw hoortoestel op. |

| Symptoom                                                                    | Mogelijke oorzaken                                                         | Oplossingen                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eén (of beide) hoortoestellen stopt onverwachts met het streamen van audio. | Grote voorwerpen (bijv. meubels of een muur) kunnen het signaal blokkeren. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verwijder obstakels (indien mogelijk).</li> <li>2. Plaats uw hoortoestellen volledig in het zicht van de Mini Remote Mic.</li> </ol> |
|                                                                             | Draadloze verbinding met uw Mini Remote Mic is verbroken.                  | Start de audiostreaming opnieuw. Zie <i>Start/stop het streamen van audio</i> op blz. 8.                                                                                       |
| Vervormde geluids-kwaliteit van gestreamde audio.                           | Laag batterijniveau in uw Mini Remote Mic.                                 | Laad uw Mini Remote Mic op. Zie <i>Uw Mini Remote Mic opladen</i> op blz. 13.                                                                                                  |

| Symptoom                                                              | Mogelijke oorzaken                                                             | Oplossingen                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestreamde audio is te luid of te zacht.                              | Volume van audiostreaming is nog niet aangepast aan uw gehoorbehoeften.        | Pas het volume van de audiostreaming aan met behulp van de bedienings-elementen van uw compatibele mobiele app, draadloze afstandsbediening of uw hoortoestel.                                                  |
| Moeite om iemand anders te horen spreken in een lawaaierige omgeving. | Mini Remote Mic staat mogelijk te ver van de persoon die spreekt vandaag.      | Breng uw Mini Remote Mic dichterbij de mond van de spreker.                                                                                                                                                     |
|                                                                       | Mini Remote Mic is mogelijk bedekt door kleding, of is niet correct geplaatst. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zorg indien nodig dat uw Mini Remote Mic niet bedekt is.</li> <li>2. Plaats uw Mini Remote Mic op de juiste manier in de buurt van de mond van de spreker.</li> </ol> |

| Symptoom                                                                                                | Mogelijke oorzaken                                               | Oplossingen                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Het indicatie-lampje knippert langzaam groen, maar het geluid wordt niet naar hoortoestellen gestreamd. | Hoortoestellen zijn niet klaar om gestreamde audio te ontvangen. | Start de audiostream. Volg de stappen in <i>Start/stop het streamen van audio</i> op blz. 8.                                                                    |
|                                                                                                         | Hoortoestellen zijn niet gekoppeld aan uw Mini Remote Mic.       | Volg de stappen in <i>Koppelen met hoortoestellen</i> op blz. 4.                                                                                                |
| Het indicatie-lampje brandt continu rood.                                                               | Mogelijk defect of elektrisch probleem.                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zet uw Mini Remote Mic UIT.</li> <li>2. Wacht 30 seconden.</li> <li>3. Zet uw Mini Remote Mic opnieuw AAN.</li> </ol> |

## Beoogd gebruik

De Mini Remote Microphone is een accessoire voor een 2,4 GHz draadloos hoortoestel met luchtgeleiding. Het is bedoeld als een draadloze zender van geluid van een televisie of andere elektronische audiobron rechtstreeks naar een hoortoestel via luchtgeleiding. Wanneer het in een lawaaierige omgeving wordt gedragen door een spreker op afstand, fungeert het als een ondersteunend luisterapparaat.

De Mini Remote Microphone is geclassificeerd als een toegepast onderdeel van type B volgens de norm IEC 60601-1 voor medische instrumenten.

De Mini Remote Microphone is ontworpen om te voldoen aan de strengste normen voor internationale elektromagnetische compatibiliteit. Het is echter nog steeds mogelijk dat u interferentie ondervindt die wordt veroorzaakt door storingen door elektriciteitskabels, metaaldetectoren op luchthavens, elektromagnetische velden van andere medische apparaten, radiosignalen en elektrostatische ontladingen.

De Mini Remote Microphone is ontworpen om te worden gereinigd met een vochtige doek die is bevochtigd met zeepwater.

Als u andere medische apparaten gebruikt of implanteerbare medische apparaten draagt, zoals defibrillatoren of pacemakers, en u zich zorgen maakt dat uw Mini Remote Microphone interferentie met uw medische apparaat zou kunnen veroorzaken, neem dan contact op met uw arts of de fabrikant van uw medische apparaat voor informatie over het risico op verstoring. De Mini Remote Microphone mag niet worden gebruikt tijdens een MRI-procedure of in een hyperbare kamer. Uw Mini Remote Microphone is niet formeel gecertificeerd voor gebruik in explosieve atmosferen, zoals aanwezig in kolenmijnen of bepaalde chemische fabrieken.


## Gebruik in vliegtuigen

De Mini Remote Microphone mag niet worden gebruikt in vliegtuigen, tenzij specifiek toegestaan door het vlucht personeel.

## Internationaal gebruik

De Mini Remote Microphone is goedgekeurd voor gebruik met radiofrequenties die specifiek zijn voor uw land of regio en is mogelijk niet goedgekeurd voor gebruik buiten uw land of regio.

Houd er rekening mee dat gebruik tijdens internationale reizen interferentie met andere elektronische apparaten kan veroorzaken, of dat andere elektronische apparaten interferentie met uw Mini Remote Microphone kunnen veroorzaken.

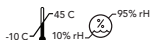

Uw Mini Remote Microphone is ontworpen voor gebruik, opslag, en vervoer binnen het

temperatuurbereik van -10 °C tot 45 °C en het relatieve vochtigheidsbereik van 10%–95%, en de hoogtegrenzen zijn 70 kPa – 106 kPa (equivalent aan hoogten van 380 m tot 3.000 m onder zeeniveau.)

Het temperatuurbereik van het opladen ligt tussen 0 °C en 40 °C.

## Klinisch voordeel

Het accessoire zelf biedt geen direct klinisch voordeel. Er wordt een indirect klinisch voordeel geboden door het moederapparaat (oplaadbare hoortoestellen) in staat te stellen hun beoogde doel te bereiken.

We zijn wettelijk verplicht om de volgende waarschuwingen te geven:

**WAARSCHUWING:** Het gebruik van de Mini Remote Microphone direct naast andere elektronische apparatuur moet worden vermeden, omdat dit kan leiden

tot onjuiste prestaties. Als dergelijk gebruik noodzakelijk is, controleer dan of uw hoortoestellen en de andere apparatuur normaal werken.

**WAARSCHUWING:** Het gebruik van andere accessoires, onderdelen of vervangingsonderdelen dan die van de fabrikant van de Mini Remote Microphone kan leiden tot verhoogde elektromagnetische emissies en verminderde elektromagnetische immuniteit en kan leiden tot verminderde prestaties.

**WAARSCHUWING:** Als draagbare radiofrequentie-communicatieapparatuur op minder dan 30 cm afstand van uw Mini Remote Microphone wordt gebruikt, kan dit leiden tot verslechtering van de prestaties van uw hoortoestel. Als dit gebeurt, ga dan weg van de communicatieapparatuur.

Hoewel de Mini Remote Microphone niet formeel is gecertificeerd (IP-gecertificeerd) voor bescherming tegen binnendringen van stof of water, is deze conform IEC 60529 getest op IP 5X-niveau. Dit betekent dat de Mini Remote Microphone beschermd is tegen stof.

De batterij in uw Mini Remote Microphone kan niet worden vervangen. Probeer niet om de batterij te vervangen. De Mini Remote Microphone bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Open het apparaat niet en maak geen aanpassingen.

De USB-wisselstroomadapter die met de Mini Remote Microphone wordt gebruikt, moet voor veiligheid worden gecertificeerd door een nationaal erkend testlaboratorium (in Noord-Amerika) of voldoen aan de toepasselijke nationale elektrische veiligheidsnormen (in andere landen).

Sluit de Mini Remote Microphone niet aan op apparaten die niet in deze gebruikershandleiding worden beschreven.

De verwachte levensduur van de Mini Remote Microphone is 3 jaar.

## Technische beschrijving draadloze technologie

De Mini Remote Microphone werkt in de 2,4-2,4835 GHz-band met een maximaal effectief uitgestraald vermogen van 8 dBm met transmissiemodulatietype GFSK met 2 MHz bandbreedte. Het ontvangergedeelte van de radio heeft een bandbreedte van 2 MHz.

De Mini Remote Microphone is getest op en geslaagd voor de volgende emissie- en immuniteitstests:

- IEC 60601-1-2 vereisen voor uitgestraalde en geleide emissies voor een apparaat van Groep 1 Klasse B, zoals vermeld in CISPR 11.
- Harmonische vervorming en spanningsschommelingen die van invloed zijn op de voedingsbron zoals vermeld in tabel 2 van IEC 60601-1-2.
- Immuniteit voor RF-straling bij een veldniveau van 10 V/m tussen 80 MHz en 2,7 GHz, evenals hogere veldniveaus van communicatieapparatuur, zoals vermeld in tabel 9 van IEC 60601-1-2.
- Immuniteit voor magnetische velden met vermogensfrequentie op een veldniveau van 30 A/m en voor magnetische velden met nabijheidsfrequentie zoals gedefinieerd in tabel 11 van IEC 60601-1-2.
- Immuniteit voor ESD-niveaus van +/- 8 kV geleide ontlading en +/- 15 kV luchtontlading.
- Immuniteit voor snelle elektrische transiënten op de voedingsingang bij een niveau van +/- 2 kV bij een herhalingsnelheid van 100 Hz.
- Immuniteit voor overspanningen op de voedingsingang van +/- 1 kV lijn naar lijn.
- Immuniteit voor geleide storingen veroorzaakt door RF-velden op de voedingsingang zoals vermeld in tabel 6 van IEC 60601-1-2.
- Immuniteit voor spanningsdalingen en onderbrekingen op de voedingsingang zoals vermeld in tabel 6 van IEC 60601-1-2.

## EU-MELDING VAN BIJWERKINGEN

Elk ernstig incident dat zich heeft voorgedaan met betrekking tot uw apparaat moet worden gemeld aan uw plaatselijke Starkey-vertegenwoordiger en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin u gevestigd bent. Een ernstig incident wordt gedefinieerd als elke storing, verslechtering van de kenmerken en/of prestaties van het apparaat, of onvolkomenheid in de gebruikershandleiding/labeling van het apparaat, die zou kunnen leiden tot de overlijden of ernstige verslechtering van de gezondheidstoestand van de gebruiker, OF dit bij herhaling veroorzaken.

## FCC-informatie

### DRAADLOZE KENNISGEVINGEN

FCC-ID: EOA-24RMQ

IC: 6903A-24RMQ (Model 950)

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels en aan ISED Canada licentievrije RSS-norm(en). De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

**OPMERKING:** De fabrikant is niet verantwoordelijk voor radio- of tv-interferentie veroorzaakt door onbevoegde wijzigingen aan deze apparatuur. Dergelijke wijzigingen kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

Starkey Laboratories, Inc. verklaart hierbij dat de Mini Remote Microphone voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. Een kopie van de conformiteitsverklaring is verkrijgbaar op de volgende adressen en op docs.starkeyhearingtechnologies.com.

Starkey Laboratories, Inc. verklaart hierbij dat de Mini Remote Microphone voldoet aan de Britse Radio Equipment Regulations SI 2017 zoals gewijzigd. Een kopie van de Britse conformiteitsverklaring is verkrijgbaar op de volgende adressen en op docs.starkeyhearingtechnologies.com.

## Informatie over regelgeving



**Starkey Laboratories, Inc.**  
6700 Washington Ave. South  
Eden Prairie, MN 55344 VS  
www.starkey.com



Starkey Laboratories (Duitsland) GmbH  
Weg beim Jäger 218-222  
22335 Hamburg  
Duitsland

Bevoegde persoon in het VK:  
Starkey UK  
William F. Austin House  
Pepper Rd, Hazel Grove  
Stockport SK7 5BX, VK  
www.starkey.co.uk



Afval van elektronische apparatuur moet worden behandeld volgens de lokale regelgeving



Raadpleeg de gebruikershandleiding



Droog houden

## Instructies voor het verwijderen van oude elektronica

Starkey Laboratories, Inc. vraagt u, de EU vereist, en uw lokale gemeenschapswetgeving vereist mogelijk, dat uw Mini Remote Microphone wordt weggegooid via uw lokale recycling-/verwijderingsproces voor elektronica.

De onderstaande instructies worden verstrekt ten behoeve van het personeel dat zich bezighoudt met het afvoeren/recyclen. Voeg deze handleiding toe wanneer u de Mini Remote Microphone afvoert.

### ALLEEN VOOR VERWIJDERINGS-/RECYCLINGPERSONEEL

Dit product bevat een lithium-ion polymeerbatterij.

Om deze batterij te verwijderen:

- Schakel de Mini Remote Microphone uit.
- Wrik de helften van de behuizing uit elkaar met een kleine schroevendraaier.
- Snijd de batterijdraden van de printplaat door om onbedoelde kortsluiting te voorkomen.
- Wrik de batterij weg van de behuizing met een breed, plat mes.

Dergelijke wijzigingen kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

| Symbol                                                                             | Betekenis symbool                                     | Toepasselijke norm                                           | Symbool-nummer              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|    | Fabrikant                                             | BS EN ISO 15223-1:2021                                       | 5.1.1                       |
|    | Bevoegde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap | BS EN ISO 15223-1:2021                                       | 5.1.2                       |
|    | Vervaardigingsdatum                                   | BS EN ISO 15223-1:2021                                       | 5.1.3                       |
|    | Catalogusnummer                                       | BS EN ISO 15223-1:2021                                       | 5.1.6                       |
|    | Serienummer                                           | BS EN ISO 15223-1:2021                                       | 5.1.7                       |
|    | Medisch hulpmiddel                                    | BS EN ISO 15223-1:2021                                       | 5.7.7                       |
|    | Droog houden                                          | BS EN ISO 15223-1:2021                                       | 5.3.4                       |
|    | Temperatuurlimiet                                     | BS EN ISO 15223-1:2021                                       | 5.3.7                       |
|    | Vochtigheidsbeperking                                 | BS EN ISO 15223-1:2021                                       | 5.3.8                       |
|    | Waarschuwing                                          | BS EN ISO 15223-1:2021                                       | 5.4.4                       |
|    | Algemeen waarschuwingspictogram                       | EC 60601-1, Referentienr. Tabel D.2, Veiligheidspictogram 2  | ISO 7010-W001               |
|    | Raadpleeg de instructiehandleiding                    | EC 60601-1, Referentienr. Tabel D.2, Veiligheidspictogram 10 | ISO 7010-M002               |
|    | Afzonderlijk verzamelen                               | RICHTLIJN 2012/19/EU (WEEE)                                  | Bijlage IX                  |
|    | Klasse II apparatuur                                  | IEC 60417 Referentienr. Tabel D.1                            | Symbool 9 (IEC 60417- 5172) |
|    | Markering voor naleving van regelgeving (RCM)         | AS/NZS 4417.1:2012                                           | N.v.t.                      |
|    | Giteki Mark                                           | Japans radiorecht                                            | N.v.t.                      |
|   | Gelijkstroom                                          | IEC 60601-1 Referentienr. Tabel D.1                          | IEC 60417-5031              |
|  | Symbool voor recycling                                | Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad     | Bijlage I-VII               |



\*P00003340\*



---

StarLink en Starkey zijn handelsmerken van Starkey Laboratories, Inc.

©2025 Starkey Laboratories, Inc. Alle rechten voorbehouden.

P00003340 11/25 BKLT3166-04-NL-XX

Octrooi: [www.starkey.com/patents](http://www.starkey.com/patents)