

Uw StarLink Remote Microphone + Gebruikershandleiding



Accessoire voor:

Draadloze hoortoestellen

P00003339

Gefeliciteerd met uw nieuwe Remote Microphone +!

Uw Remote Mic + verbetert spraak zodat u kunt genieten van gesprekken. En contact maken met de wereld om u heen. Gebruik deze handleiding om te starten.

Inhoudsopgave

1. Leer uw

Remote Microphone + kennen

Maak kennis met uw Remote Mic +	3
Uw Remote Mic + instellen	6
Uw Remote Mic + gebruiken	11
Handleiding voor probleemoplossing	25

2. Aanvullende informatie

Beoogd gebruik	32
FCC-informatie	36
Informatie over regelgeving	37

Maak kennis met uw Remote Mic +

Overzicht

1. **Multifunctionele knop**
Regelt de operationele status van de Remote Mic +.
2. **Statuslampje**
Identificeert de operationele status van de Remote Mic +.
3. **Microfoons**
 - Pikt audio (stem van spreker) op tijdens gebruik.
 - Pikt uw stem op tijdens Bluetooth® telefoongesprekken.
4. **Aansluiting FM-ontvanger**
Geschikt voor Europein FM-ontvangers.
5. **Clip**
Bevestigt de Remote Mic + aan de kleding of het draagkoord van de spreker.

6. Indicatielampjes ingangsmodus

Identificeert de audiobron.

7. Knop Invoermodus

Wijzigt de audiobron.

8. Micro-USB-aansluiting

- Maakt opladen mogelijk via USB-naar-micro-USB-kabel.
- Speelt in-line audio af via optionele kabel.

9. Volume omhoog (+) en Volume omlaag (-) toetsen

Streamvolume aanpassen omhoog of volume omlaag.



Uw Remote Mic + instellen

AAN/UIT-schakelen

Gebruik de multifunctionele knop om uw Remote Mic + **AAN** of **UIT** te schakelen:

- **AAN** – druk 3 seconden op de multifunctionele knop. Laat los wanneer het statuslampje groen oplicht.
- **UIT** – houd de multifunctionele knop 3 seconden ingedrukt. Laat los wanneer het groene statuslampje niet meer verschijnt.



Koppelen met hoortoestellen

Voordat u uw Remote Mic + voor het eerst gebruikt, moet u deze koppelen met uw hoortoestel(len). Hierdoor kan uw accessoire uw hoortoestellen herkennen, zodat ze kunnen samenwerken.

STAP 1: Zet uw Remote Mic + AAN

STAP 2: Zet uw hoortoestellen UIT en AAN.

- **Voor CROS-hoortoestellen:**
Zet uw hoortoestellen en CROS-zender UIT. Zet uw hoortoestellen vervolgens **AAN**, maar laat de CROS-zender **UIT**.

STAP 3: Koppel uw Remote Mic + aan uw hoortoestel(len):

1. Zorg ervoor dat uw hoortoestellen niet verbonden zijn met Bluetooth-apparaten in de buurt:
 - Schakel Bluetooth **UIT** op uw mobiele telefoon.
 - Schakel alle draadloze accessoires die al aan uw hoortoestellen zijn gekoppeld **UIT**.

- Plaats uw hoortoestellen binnen 15 cm van uw Remote Mic +.
- Druk gedurende 7 seconden tegelijkertijd op de knoppen Ingangsmodus en Volume +.



- Voor een **paar** hoortoestellen:

1e statuslampje knippert	2e statuslampje knippert	Resultaat van koppelen	Volgende stap
1	2	Beide hoortoestellen gekoppeld	Voltooid
1	2	Slechts één hoortoestel gekoppeld	Herhaal 1-3 binnen STAP 3
1	N.v.t.	Geen hoortoestellen gekoppeld	Herhaal 1-4 binnen STAP 3

- Voor een **enkel** hoortoestel:

Statuslampje knippert	Resultaat van koppelen	Volgende stap
1	Hoortoestel gekoppeld	Voltooid
1	Hoortoestel niet gekoppeld	Herhaal 1-3 binnen STAP 3

Koppelen met een Bluetooth-apparaat

Als u wilt dat de Remote Mic + draadloos audio van een Bluetooth-apparaat kan ontvangen, moet u ze eerst koppelen.

STAP 1: Zet uw Remote Mic + AAN.

1. Druk tegelijkertijd op de knoppen Ingangsmodus en Volume – omlaag (-) voor 7 seconden tot het statuslampje snel blauw knippert.



STAP 2: Zet uw Bluetooth-apparaat in de koppelingsmodus.

1. Wanneer Remote Mic + op uw Bluetooth-apparaat verschijnt, selecteert u deze.

OPMERKING: Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het

Bluetooth-apparaat voor meer informatie.

2. Het statuslampje van de Remote Mic + toont de koppelingsstatus
 - Succesvol koppelen = groen statuslampje brandt 2 seconden
 - Koppeling mislukt = rood statuslampje brandt 2 seconden

Uw Remote Mic + gebruiken

STAP 1: Controleer of uw hoortoestellen AAN staan.

Herinnering – Voordat u voor het eerst begint met audio streamen, moet u ervoor zorgen dat uw hoortoestellen zijn gekoppeld aan uw Remote Mic +. Zie blz. 10.

STAP 2: Het streamen van audio starten/stoppen (de stem van een spreker). Voer een van de volgende handelingen uit:

- Schakel de Remote Mic + in: Audiostreamen begint automatisch

in het hoortoestel.

- **Mobiele app voor hoortoestel:**

Open de app op uw mobiele telefoon of tablet. Selecteer de optie om het streamen te starten/stoppen vanuit het scherm **Accessoires**.

- **Gebruikersbediening hoortoestel:**

Indien ingesteld door uw audicien, kan een specifiek gebaar (bijv. lang drukken op een drukknop) het streamen starten/stoppen.

- **Draadloze afstandsbediening:**

Druk op de knop **Favoriet** als uw audicien dit heeft geconfigureerd.



OPMERKING: Er kan een geluidsindicator in uw hoortoestellen worden afgespeeld om het starten/stoppen van audiostreaming aan te geven.

STAP 3: Pas het streamingvolume aan door op de knop Volume omhoog (+) of Volume omlaag (-) op de Remote Mic + te drukken.



STAP 4: Pas de audiobron aan.

1. Om de audio te wijzigen, drukt u kort op de knop **Ingangsmodus**. Druk herhaaldelijk op de knop tot u de gewenste audiobron bereikt. Voor meer informatie over de audiobronopties, zie *Hoe uw Remote Mic + helpt* op blz. 17.

Pictogram op Remote Mic +	Audiobron die wordt gebruikt
	Afstandsmicrofoon
	Bluetooth telefoon en audio
	Ringleiding
	FM-systeem
	Lijningang

2. Om audio van een Bluetooth-apparaat te ontvangen, moet het verbonden zijn met de Remote Mic + (aangegeven door het langzaam knipperende blauwe statuslampje).



- Voordat u begint met het streamen van Bluetooth-audio, moet uw Bluetooth-apparaat gekoppeld zijn aan uw Remote Mic +. Zie *Koppelen met een Bluetooth-apparaat* op blz. 10.



OPMERKING: *Typisch draadloos bereik is maximaal 20 meter. Deze afstand kan in de realiteit kleiner zijn door omgevingsfactoren (bijv. obstakels, interferentie, positie van mensen). Een breder bereik is wellicht mogelijk, maar de kwaliteit van uw audio of verbinding kan dan afnemen.*

STAP 5: Druk op de knop + of – om het streamvolume aan te passen.



Statuslampje

Het statuslampje geeft aan hoe uw Remote Mic + momenteel werkt:

Operationele status	Status van statuslampje
UIT	Geen groen statuslampje verschijnt
AAN zonder actieve Bluetooth-verbinding	Langzaam, groen knipperend
AAN met actieve Bluetooth-verbinding	Langzaam, blauw knipperend
Batterij bijna leeg	Langzaam, rood knipperend
Storing of elektrisch probleem	Effen rood

De Remote Mic + dragen

Uw Remote Mic + kan worden bevestigd aan de kleding of het koord van de persoon die spreekt. Wanneer uw audiobron is ingesteld op de afstandsmicrofoon  of een Bluetooth-apparaat in telefoonmodus , kunt u deze het beste binnen 20 cm van de mond van de spreker plaatsen.

Instructies voor kleding:

1. Knijp in de clip van de Remote Mic + totdat deze opent.
2. Schuif de opening van de clip op de kleding.
3. Laat de clip los.
4. Zorg ervoor dat uw Remote Mic + stevig aan de kleding is bevestigd.



Instructies voor draagkoord (optioneel):

1. Knijp in de clip van de Remote Mic + totdat deze opent.
2. Schuif de koordlus in de clipopening. Til de lus naar de bovenkant van de clip.
3. Laat de clip los.
4. Zorg ervoor dat uw Remote Mic + stevig aan het koord is bevestigd.
5. Plaats het draagkoord om de hals.



Hoe uw Remote Mic + helpt

Uw Remote Mic + is ontworpen om audio van verschillende audiobronnen rechtstreeks naar uw draadloze hoortoestellen te streamen. Wanneer het in een lawaaierige omgeving wordt gedragen door een spreker op afstand, fungeert het als een ondersteunend luisterapparaat. De Remote Mic + kan

ook worden gekoppeld aan de volgende audiobronnen.

Afstandsmicrofoon

De Remote Mic + optimaliseert automatisch de microfooninstellingen op basis van de fysieke oriëntatie.



- Het helpt bij het focussen op één persoon wanneer er achtergrondgeluid aanwezig is. Wanneer de Remote Mic + door een spreker wordt gedragen, geeft hij automatisch prioriteit aan geluid van bovenaf en vermindert hij tegelijkertijd de geluidsniveaus vanuit andere richtingen.



- Hij kan in rustige omgevingen naar meerdere sprekers in de buurt luisteren als hij horizontaal op zijn clip



wordt geplaatst door geluid uit alle richtingen te ontvangen.

Bluetooth telefoon en audio

- Voer telefoongesprekken waarbij (A) u het telefoongesprek hoort in uw hoortoestellen en (B) de Remote Mic + uw stem opneemt en terugstuurt naar de telefoon.
(Handsfree profiel)



- Luister naar muziek waarbij u de gestreamde audio in uw hoortoestel hoort.
(A2DP-profiel)



- Algemene Bluetooth-functionaliteit:

Koppelen met Bluetooth-apparaten	De Remote Mic + kan worden gekoppeld aan maximaal 8 Bluetooth-apparaten.
Verbinding maken met Bluetooth-apparaat	Wanneer beide Remote Mic + Bluetooth-apparaten zijn ingeschakeld en zich binnen het draadloze bereik bevinden, moeten ze automatisch verbinding maken en moet het statuslampje van de Remote Mic + langzaam blauw knipperen.
Luisteren naar muziek (of andere gestreamde audio)	Zorg ervoor dat de ingangsmodus van de Remote Mic + is ingesteld op Bluetooth-audiobron. Wanneer u audio afspeelt op een Bluetooth-apparaat, wordt het automatisch doorgestuurd naar uw hoortoestellen.
Wijzigen naar Bluetooth-audiobron	Wanneer de Remote Mic + een inkomend of uitgaand telefoongesprek detecteert, wordt deze automatisch overgeschakeld naar de Bluetooth-audiobron.
Inkomende oproep accepteren	Wanneer u de beltoon in uw hoortoestellen hoort, drukt u kort op de multifunctionele knop op uw Remote Mic +.

Inkomende oproep afwijzen	Wanneer u de beltoon in uw hoortoestellen hoort, houdt u de multifunctionele knop op uw Remote Mic + langer dan 2 seconden ingedrukt – laat de knop los zodra de beltoon stopt.
Oproep beëindigen	Druk kort op de multifunctionele knop op uw Remote Mic +.
Oproep doorverbinden tussen telefoon en Remote Mic +	Om het gesprek te voeren op de telefoon zelf, houd de multifunctionele knop op uw Remote Mic + ingedrukt gedurende meer dan 2 seconden. Om het gesprek terug te zetten naar de Remote Mic +, houdt u de multifunctionele knop nogmaals gedurende meer dan 2 seconden ingedrukt. 
Een uitgaande oproep maken	Kies het telefoonnummer op uw Bluetooth-apparaat. Het telefoongesprek wordt automatisch doorgestuurd naar uw hoortoestel.

Ringleiding T

De Remote Mic + kan audio ontvangen van een ringleiding (beschikbaar in sommige openbare gebouwen). Het verticaal dragen van de Remote Mic + biedt de beste prestaties. In deze modus schakelt de Remote Mic + Bluetooth-verbindingen uit. Na het verlaten van deze modus probeert de Remote Mic + opnieuw een Bluetooth-verbinding tot stand te brengen.



OPMERKING: Het kan nodig zijn om handmatig opnieuw verbinding te maken. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat voor meer informatie.

FM-systeem ■■

Wanneer een optionele FM-zender wordt aangesloten via de Europin-connector, kan de Remote Mic + audio ontvangen van een FM-systeem. In deze modus



kunt u de Remote Mic + dragen of op een stabiel oppervlak in de buurt plaatsen.


Lijningang 🎵

Als een optionele lijningangskabel is aangesloten via de micro-USB-aansluiting, kan de Remote Mic + audio ontvangen van een mobiele telefoon, MP3-speler, tablet of computer waarop geen Bluetooth geactiveerd is. In deze modus kunt u de Remote Mic + het beste op een stabiel oppervlak in de buurt plaatsen.



Om uw Remote Mic + op te laden

1. Sluit het micro-USB-uiteinde van de oplaadkabel aan op de micro-USB-aansluiting op uw Remote Mic +.
2. Sluit het micro-USB-uiteinde van de oplaadkabel aan op de aansluiting op de voedingsadapter.

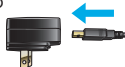

- Sluit de voedingsadapter aan op een externe stroombron, zoals een stopcontact.
- Controleer de oplaadstatus met het statuslampje op uw Remote Mic +.

Status AAN/ UIT	Status van statuslampje	Oplaadstatus
UIT	Effen groen	Bezig met opladen
UIT	Geen	Volledig opgeladen
AAN	Effen groen, kort onderbroken door ander gedrag van het statuslampje	Bezig met opladen
AAN	Geen	Volledig opgeladen

OPMERKING: Het opladen van uw Remote Mic + kan langer duren als u audio streamt. Het opladen gaat meestal sneller wanneer uw Remote Mic + UIT staat.

Handleiding voor probleemoplossing

Problemen met uw Remote Mic +?
Probeer deze tips. Neem contact op met uw audicien als de problemen aanhouden.

Symptoom	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Eén (of beide) hoortoestellen stopt onverwachts met audio-streaming.	Hoortoestellen kunnen zich aan de rand van het draadloze bereik bevinden.	Ga dichterbij de Remote Mic + toe.
	Het batterijniveau in het hoortoestel ondersteunt geen audiostreaming meer.	- Vervang de batterij van het hoortoestel door een nieuwe. - Laad uw hoortoestel op, indien van toepassing.

Symptoom	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Eén (of beide) hoortoestellen stopt onverwachts met audio-streaming.	Groot voorwerp, zoals meubels of een muur, kan het signaal afzwakken.	Voor de beste prestaties moeten uw hoortoestellen zich binnen de zichtlijn van de Remote Mic + bevinden.
	Draadloze verbinding met Remote Mic + is verbroken.	Start de audiostreaming opnieuw. Zie <i>Start/stop het streamen van audio</i> op blz. 11.
De gestreamde audiokwaliteit is vervormd.	Laag batterijniveau in Remote Mic +.	Laad de Remote Mic + op.
	Volume van audiobron is niet optimaal.	Pas het volumeniveau van de audiobron aan totdat een betere geluidskwaliteit wordt bereikt.

Symptoom	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
De gestreamde audiokwaliteit is inconsistent.	Bluetooth-modus: Bluetooth-apparaat bevindt zich mogelijk aan de rand van het draadloze bereik.	Breng Bluetooth-apparaat dichterbij Remote Mic +.
	Ringleiding-modus: Remote Mic + is mogelijk niet geplaatst voor optimale streaming.	Richt de Remote Mic + opnieuw naar een verticale positie.
Audiostream is te luid of te zacht.	Volume gestreamd van Remote Mic + naar hoortoestel niet optimaal.	Druk op de knop volume + of – op Remote Mic +.
	Volume van audiobron is niet optimaal.	Pas het volumeniveau van de audiobron aan totdat een betere geluidskwaliteit wordt bereikt.

Symptoom	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Remote Mic modus: Spreker is moeilijk te horen in lawaaierige omgevingen.	Remote Mic + is mogelijk te ver van de spreker verwijderd.	Plaats Remote Mic + dichterbij de mond van de spreker.
	Remote Mic + is mogelijk bedekt met kleding of is slecht geplaatst.	Zorg voor duidelijke toegang van Remote Mic + tot de stem van de spreker.
Bluetooth-modus: De beller kan uw stem niet horen tijdens telefoon-gesprekken.	Remote Mic + is mogelijk te ver van uw mond vandaan.	Plaats de Remote Mic + dichterbij uw mond of spreek luider.
Ringleiding-modus: Telefoon-gesprekken worden niet gehoord in hoortoestellen.	Bluetooth-verbindingen met mobiele telefoons zijn uitgeschakeld in de ringleiding-modus.	Ga naar een andere audiobron. Herstel indien nodig uw Bluetooth-verbinding.

Symptoom	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
De led knippert langzaam groen of blauw, maar in de hoortoestellen worden geen gestreamde geluiden gehoord.	Hoortoestellen zijn niet klaar om audiostreams te ontvangen.	Start de audiostreaming opnieuw. Zie <i>Start/stop het streamen van audio</i> op blz. 11.
Het statuslampje knippert langzaam groen of blauw, maar in de hoortoestellen zijn geen gestreamde geluiden te horen.	Hoortoestellen zijn niet gekoppeld aan Remote Mic +.	Volg de stappen in <i>Koppelen met hoortoestellen</i> op blz. 6.
	Er is geen inkomend audiosignaal beschikbaar.	• Schakel de elektronische audiobron in. • Hef het dempen van de elektronische audiobron op of verhoog het volume. • Zorg ervoor dat er een ringleiding of FM-systeem aanwezig is.

Symptoom	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Het statuslampje brandt continu rood.	Mogelijke foutconditie.	Schakel de Remote Mic + uit, wacht 30 seconden en schakel hem vervolgens weer in.
Het indicatie-lampje van de invoermodus knippert snel.	Er ontbreekt iets in de huidige audiobron.	Bevestig de lijningangskabel, bevestig de FM-ontvanger of breng uw Bluetooth-verbinding opnieuw tot stand.
Het indicatie-lampje van de ingangsmodus brandt niet.	Het indicatielampje van de ingangsmodus is uitgeschakeld om stroom te sparen.	Druk op de knop Ingangsmodus om het indicatielampje Ingangsmodus te laten branden.
Gewenste invoermodus niet beschikbaar.	Er ontbreekt iets in de gewenste invoer.	Bevestig de lijningangskabel, bevestig de FM-ontvanger of breng uw Bluetooth-verbinding opnieuw tot stand.

Symptoom	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Kan niet koppelen met meer dan één Bluetooth-apparaat.	Remote Mic + heeft al een actieve Bluetooth-verbinding.	Volg de stappen in <i>Koppelen met een Bluetooth-apparaat</i> op blz. 10.
Onverwacht verlies van tv-audio (optioneel product) terwijl het statuslampje langzaam blauw knippert op Remote Mic +.	Sommige Bluetooth-apparaatgeluiden hebben een hogere prioriteit dan audio van de tv-streamer.	Schakel de Bluetooth-ingangsmodus uit op Remote Mic +.

Beoogd gebruik



De Remote Microphone + is een accessoire voor een 2,4 GHz draadloos hoortoestel met luchtgeleiding. Het is bedoeld als een draadloze zender van geluid van verschillende audiobronnen naar hoortoestellen via luchtgeleiding. Wanneer het in een lawaaierige omgeving wordt gedragen door een spreker op afstand, fungeert het als een ondersteunend luisterapparaat. Hij maakt ook verbinding met ringleidingssignalen, FM-signalen als een Europin FM-ontvanger is aangesloten, analoge line-in audio en standaard Bluetooth-audio.

De Remote Microphone + is geclassificeerd als een toegepast onderdeel van type B volgens de norm IEC 60601-1 voor medische instrumenten.

De Remote Microphone + is ontworpen om te voldoen aan de strengste normen voor internationale elektromagnetische compatibiliteit. Het is echter nog steeds mogelijk dat u interferentie ondervindt die wordt veroorzaakt door storingen door elektriciteitskabels, metaaldetectoren op luchthavens, elektromagnetische velden van andere medische apparaten, radiosignalen en elektrostatische ontladingen.

De Remote Microphone + is ontworpen om te worden gereinigd met een vochtige doek die is bevochtigd met zeepwater.

Als u andere medische apparaten gebruikt of implanteerbare medische apparaten draagt, zoals defibrillatoren of pacemakers, en u zich zorgen maakt dat uw Remote Microphone + interferentie met uw medische apparaat zou kunnen veroorzaken, neem dan contact op met uw arts of de fabrikant van uw medische apparaat voor informatie over het risico op verstoring. De Remote Microphone + mag niet worden gebruikt tijdens een MRI-procedure of in een hyperbare kamer. De Remote Microphone + is niet formeel gecertificeerd voor gebruik in explosieve atmosferen, zoals aanwezig in kolenmijnen of bepaalde chemische fabrieken.

Klinisch voordeel

Het accessoire zelf biedt geen direct klinisch voordeel. Er wordt een indirect klinisch voordeel geboden door het moederapparaat (oplaadbare hoortoestellen) in staat te stellen hun beoogde doel te bereiken.

Gebruik in vliegtuigen

De Remote Microphone + mag niet worden gebruikt in vliegtuigen, tenzij specifiek toegestaan door het vluchtpersoneel.

Internationaal gebruik

De Remote Microphone + is goedgekeurd voor gebruik met radiofrequenties die specifiek zijn voor uw land of regio en mogelijk niet zijn goedgekeurd voor gebruik buiten uw land of regio.

Houd er rekening mee dat gebruik tijdens internationale reizen interferentie met andere elektronische apparaten kan veroorzaken, of dat andere elektronische apparaten interferentie met uw Remote Microphone + kunnen veroorzaken.



Uw Remote Microphone + is ontworpen voor gebruik, opslag, en vervoer binnen het temperatuurbereik van -10 °C tot 45 °C en het relatieve vochtigheidsbereik van 10%–95%, en de hoogtegrenzen zijn 70 kPa – 106 kPa (equivalent aan hoogten van 380 m tot 3.000 m onder zeeniveau.)

We zijn wettelijk verplicht om de volgende waarschuwingen te geven:

⚠ WAARSCHUWING: Het gebruik van de Remote Microphone + direct naast andere elektronische apparatuur moet worden vermeden, omdat dit kan leiden tot onjuiste prestaties. Als dergelijk gebruik noodzakelijk is, controleer dan of uw hoortoestellen en de andere apparatuur normaal werken.

⚠ WAARSCHUWING: Het gebruik van andere accessoires, onderdelen of vervangingsonderdelen dan die van de fabrikant van uw Remote Microphone + kan leiden tot verhoogde elektromagnetische emissies en verminderde elektromagnetische immuniteit en kan leiden tot verminderde prestaties.

⚠ WAARSCHUWING: Als draagbare radiofrequente communicatieapparatuur op minder dan 30 cm afstand van uw Remote Microphone + wordt gebruikt, kan dit leiden tot verslechtering van de prestaties van uw hoortoestel. Als dit gebeurt, ga dan weg van de communicatieapparatuur.

Hoewel de Remote Microphone + niet officieel is gecertificeerd (IP-gecertificeerd) voor bescherming tegen binnendringen van stof of water volgens IEC 60529, is het getest op IP 5X-niveau. Dit betekent dat de Remote Microphone + beschermd is tegen stof.

De batterij in uw Remote Microphone + kan niet worden vervangen. Probeer niet om de batterij te vervangen. De Remote Microphone + bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Open het apparaat niet en maak geen aanpassingen.

Sluit de Remote Microphone + niet aan op apparaten die niet in deze gebruikershandleiding worden beschreven.

De verwachte levensduur van de Remote Microphone + is 3 jaar.

Technische beschrijving draadloze technologie

Starkey Laboratories, Inc. Remote Microphone + werkt in de 2,4-2,4835 GHz-band met een maximaal effectief uitgestraald vermogen van 8 dBm met transmissiemodulatietype 1M12FXD en 1,1 MHz bandbreedte. Het ontvangergedeelte van de radio heeft een bandbreedte van 2 MHz.

De Remote Microphone + is getest op en geslaagd voor de volgende emissie- en immuniteitstests:

- IEC 60601-1-2 vereisen voor uitgestraalde en geleide emissies voor een apparaat van Groep 1 Klasse B, zoals vermeld in CISPR 11.

- Harmonische vervorming en spanningsschommelingen die van invloed zijn op de voedingsbron zoals vermeld in tabel 2 van IEC 60601-1-2.
- Immuniteit voor RF-straling bij een veldniveau van 10 V/m tussen 80 MHz en 2,7 GHz, evenals hogere veldniveaus van communicatieapparatuur, zoals vermeld in tabel 9 van IEC 60601-1-2.
- Immuniteit voor magnetische velden met vermogensfrequentie op een veldniveau van 30 A/m en magnetische velden met nabijheidsfrequentie zoals gedefinieerd in tabel 11 van IEC 60601-1-2
- Immuniteit voor ESD-niveaus van +/- 8 kV geleide ontlading en +/- 15 kV luchtontlading.
- Immuniteit voor snelle elektrische transiënten op de voedingsingang bij een niveau van +/- 2 kV bij een herhalingsnelheid van 100 Hz.
- Immuniteit voor overspanningen op de voedingsingang van +/- 1 kV lijn naar lijn.
- Immuniteit voor geleide storingen veroorzaakt door RF-velden op de voedingsingang zoals vermeld in tabel 6 van IEC 60601-1-2.
- Immuniteit voor spanningsdalingen en onderbrekingen op de voedingsingang zoals vermeld in tabel 6 van IEC 60601-1-2.

EU-MELDING VAN BIJWERKINGEN

Elk ernstig incident dat zich heeft voorgedaan met betrekking tot uw apparaat moet worden gemeld aan uw plaatselijke Starkey-vertegenwoordiger en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin u gevestigd bent. Een ernstig incident wordt gedefinieerd als elke storing, verslechtering van de kenmerken en/of prestaties van het apparaat, of onvolkomenheid in de gebruikershandleiding/labeling van het apparaat, die zou kunnen leiden tot de overlijden of ernstige verslechtering van de gezondheidstoestand van de gebruiker, OF dit bij herhaling veroorzaken.

FCC-informatie

DRAADLOZE KENNISGEVINGEN

FCC-ID: EOA-24MFA

IC: 6903A-24MFA (model 900)

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels en aan ISCED Canada's licentievrije RSS-norm(en). De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

OPMERKING: De fabrikant is niet verantwoordelijk voor radio- of tv-interferentie veroorzaakt door onbevoegde wijzigingen aan deze apparatuur. Dergelijke wijzigingen kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

Starkey Laboratories, Inc. verklaart hierbij dat de Remote Microphone+ voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. Een kopie van de conformiteitsverklaring is verkrijgbaar op de volgende adressen en op docs.starkeyhearingtechnologies.com.

Starkey Laboratories, Inc. verklaart hierbij dat de Remote Microphone + voldoet aan de Britse Radio Equipment Regulations SI 2017 zoals gewijzigd. Een kopie van de Britse conformiteitsverklaring is verkrijgbaar op de volgende adressen en op docs.starkeyhearingtechnologies.com.

Informatie over regelgeving



Starkey Laboratories, Inc.
6700 Washington Ave. South
Eden Prairie, MN 55344 VS
www.starkey.com



Starkey Laboratories (Duitsland) GmbH
Weg beim Jäger 218-222
22335 Hamburg
Duitsland

Bevoegde persoon in
het VK:
Starkey UK
William F. Austin House
Pepper Rd, Hazel Grove
Stockport SK7 5BX, VK
www.starkey.co.uk



Afval van elektronische apparatuur moet worden
behandeld volgens de lokale regelgeving



Raadpleeg de gebruikershandleiding



Droog houden

Instructies voor het verwijderen van oude elektronica

Starkey Laboratories, Inc. vraagt u, de EU vereist, en uw lokale gemeenschapswetgeving vereist mogelijk, dat uw Remote Microphone + wordt weggegooid via uw lokale recycling-/verwijderingsproces voor elektronica.

De onderstaande instructies worden verstrekt ten behoeve van het personeel dat zich bezighoudt met het afvoeren/recyclen. Voeg deze handleiding toe wanneer u de Remote Microphone + afvoert.

ALLEN VOOR VERWIJDERINGS-/RECYCLINGPERSONEEL

Dit product bevat een lithium-ion polymeerbatterij.

Om deze batterij te verwijderen:

- Schakel de Remote Microphone + uit.
- Wrik de helften van de behuizing uit elkaar met een kleine schroevendraaier.
- Snijd de batterijdraden van de printplaat door om onbedoelde kortsluiting te voorkomen.
- Wrik de batterij weg van de behuizing met een breed, plat mes.

Dergelijke wijzigingen kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongedig maken.

Symbol	Betekenis symbool	Toepasselijke norm	Symbool-nummer
	Fabrikant	BS EN ISO 15223-1:2021	8,444 mm
	Bevoegde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.2
	Vervaardigingsdatum	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.3
	Catalogusnummer	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.6
	Serienummer	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.7
	Medisch hulpmiddel	BS EN ISO 15223-1:2021	5.7.7
	Droog houden	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.4
	Temperatuurlimiet	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.7
	Vochtigheidsbeperking	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.8
	Waarschuwing	BS EN ISO 15223-1:2021	5.4.4
	Algemeen waarschuwingspictogram	EC 60601-1, Referentienr. Tabel D.2, Veiligheidspictogram 2	ISO 7010-W001
	Raadpleeg de instructiehandleiding	EC 60601-1, Referentienr. Tabel D.2, Veiligheidspictogram 10	ISO 7010-M002
	Afzonderlijk verzamelen	RICHTLIJN 2012/19/EU (WEEE)	Bijlage IX
	Klasse II apparatuur	IEC 60417 Referentie nr. Tabel D.1	Symbool 9 (IEC 60417-5172)
	Markering voor naleving van regelgeving (RCM)	AS/NZS 4417.1:2012	N.v.t.
	Giteki Mark	Japans radierecht	N.v.t.
	Gelijkstroom	IEC 60601-1 Referentienr. Tabel D.1	IEC 60417-5031
	Symbool voor recycling	Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad	Bijlage I-VII
	Importeur	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.8
	Vertaling	BS EN ISO 15223-1:2021	5.7.8



StarLink en Starkey zijn handelsmerken van Starkey Laboratories, Inc.

Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Starkey is onder licentie.

©2024 Starkey Laboratories, Inc. Alle rechten voorbehouden.

P00003339 8/24 BKLT3169-02-NL-XX

Octrooi: www.starkey.com/patents