

Bruksanvisning til din StarLink Ekstern mikrofon +



Tilbehør til:

Trådløse høreapparater

Gratulerer med din nye Ekstern mikrofon +!

Ekstern mikrofon+ forsterker tale slik at du kan høre samtaler bedre og koble deg til verden rundt deg. Bruk denne enkle bruksanvisningen for å komme i gang.

Innhold

1. Bli kjent med din nye Ekstern mikrofon +

Møt din Ekstern mikrofon +	3
Sett opp din Ekstern mikrofon +	5
Bruk din Ekstern mikrofon +	9
Lad opp din Ekstern mikrofon +	19

3. Feilsøking.....20

4. Ytterligere veiledning

Tiltenkt bruk	25
FCC informasjon	28
Regulatorisk informasjon	29

Møt din Ekstern mikrofon +

Oversikt

1. **Multifunksjonsknapp**

Styrer operativ status til Ekstern mikrofon +.

2. **Statusindikator LED**

Identifiserer operativ status til Ekstern mikrofon +

3. **Mikrofoner**

- Fanger opp samtalepartners stemme ved bruk som trådløs mikrofon
- Fanger opp din stemme ved Bluetooth® telefonsamtaler

4. **FM mottager port**

Kompatibel med Europin FM mottagere

5. **Klips**

Fester Ekstern mikrofon + til klær eller snor

6. **Lydkildeindikator LED**

Identifiserer lydkilde

7. **Lydkildeknapp**


Velger lydkilde.

8. MicroUSB port

- Brukes til lading med USB-til-microUSB-ledning.
- Spiller lyd via valgfri ledning.

9. Volum opp (+) og volum ned (-) knapper

Juster lyd fra strømming opp eller ned.

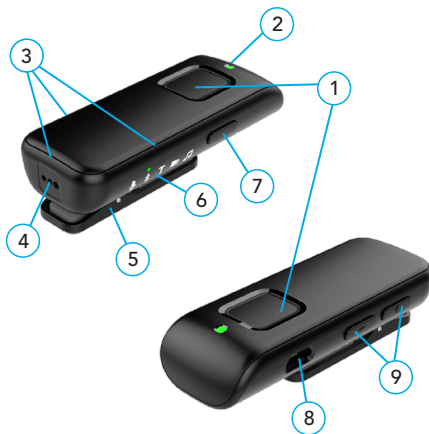

Sett opp din Ekstern mikrofon +

Slå AV/PÅ

Bruk multifunksjonsknappen for å slå på Ekstern mikrofon + **PÅ** eller **AV**:

- **PÅ** – trykk på multifunksjonsknappen i 3 sekunder. Slipp når statusindikatorlampen lyser grønt.
- **AV** – trykk på multifunksjonsknappen i 3 sekunder. Slipp når den grønne statusindikatorlampen ikke lenger lyser.



Paring med høreapparater

Før du bruker Ekstern mikrofon+ for første gang, må du pare den med høreapparatet. Dette gjør at tilbehøret ditt kan gjenkjenne høreapparatene dine slik at de kan fungere sammen.

STEG 1: Slå PÅ Ekstern mikrofon +

STEG 2: Slå dine høreapparater AV og PÅ.

- **For CROS høreapparat systemer:** Slå AV ditt høreapparat og CROS sender. Deretter, slå **PÅ** høreapparatet men la CROS senderen være **AV**.

STEG 3: Par Ekstern mikrofon+ med dine høreapparater.

1. Sørg for at høreapparatene ikke er koblet til Bluetooth-enheter i nærheten:
 - Slå **AV** Bluetooth på din mobiltelefon.
 - Slå **AV** alle trådløse tilbehør allerede paret med dine høreapparater.
2. Plasser høreapparatene dine innenfor 15 cm fra din Ekstern mikrofon +.
3. Trykk på Lydkilde- og Volum opp (+) knappene samtidig i 7 sekunder til statusindikatorlyset vekselvis blinker blått og rødt.



4. For et **sett** med høreapparater:

1st indikatorlampe blink	2nd indikatorlampe blink	Resultat	Neste steg
1	2	Begge apparater paret	Ferdig!
1	2	Bare ett apparat paret	Gjenta STEG 3, punkt 1-3
1	I/A	Ingen høreapparater paret	Gjenta STEG 3, punkt 1-4

5. For et **enkelt** høreapparat:

Indikatorlampe blink	Resultat	Neste steg
1	Høreapparat paret	ferdig!
1	Høreapparat ikke paret	Gjenta STEG 3, punkt 1-3

For å pare med en Bluetooth-enhet

For at Ekstern mikrofon + skal kunne motta lyd trådløst fra en Bluetooth-enhet, må du først pare dem.

STEG 1: Slå PÅ Ekstern mikrofon +.

1. Trykk på Input Mode og Volum ned (-) knappene samtidig for 7 sekunder til statusindikatoren lyset blinker raskt blått.



STEG 2: Sett Bluetooth-enheten i paringsmodus.

1. Når Ekstern mikrofon + vises på Bluetooth-enheten, velger du den.

MERK: For mer informasjon, se bruksanvisningen for Bluetooth-enheten.

2. Statusindikatorlampen for Ekstern mikrofon + viser sammenkoblingsstatusen
 - Vellykket paring = grønt statusindikatorlys i 2 sekunder
 - Mislykket paring = rød statusindikator i 2 sekunder

Bruk din Ekstern mikrofon +

STEG 1: Sjekk at høreapparatene er PÅ.

Påminnelse – Før du streamer lyd for første gang, sørg for at høreapparatene dine er sammenkoblet med din Ekstern mikrofon +. Se s. 5.

STEG 2: Start/stopp strømming av lyd (en stemme).

Gjør ett av følgende:

- **Slå på den eksterne mikrofonen +:**
Lydstrømming starter automatisk i høreapparatet.
- **Mobilapp for høreapparat:**
Åpne appen. Velg alternativet for å starte/stoppe strømming fra Tilbehør-skjermen.
- **Høreapparatets brukerkontroll:**
Hvis konfigurert av audiografen din, kan en spesifikk gest (f.eks. et langt trykk på en brukerkontroll) starte/stoppe strømming.
- **Trådløs fjernkontroll:**
Hvis konfigurert av audiografen din, trykk på Favoritt-knappen.



MERK: En hørbar indikator kan lyde i høreapparatene dine for å signalisere start/stopp av lydstrømming.

STEG 3: Juster strømmevolumet ved å trykke volum opp (+) eller volum ned (-) knappen på Ekstern mikrofon +.



STEG 4: Juster lydkilden.

1. For å endre lyden, trykk og slipp lydkildeknappen. Trykk på knappen gjentatte ganger til du kommer til ønsket lydkilde. For mer informasjon om lydkildealternativene, se Hvordan din Ekstern mikrofon + hjelper på s. 14.

Ikone på Ekstern mik +	Lydkilde i bruk
	Ekstern mikrofon +
	Bluetooth telefon og audio
	Teleslynge
	FM system
	Ledningsinput

2. For å få tilgang til lyd fra en Bluetooth-enhet, må den være koblet til Ekstern mikrofon + (angitt med den sakte, blinkende blå statusindikatorlampen).

- Før du strømmer Bluetooth-lyd for første gang, må Bluetooth-enheten din være paret med Ekstern mikrofon +. Se Slik parer du med en Bluetooth-enhet på s. 8.



STEG 5: Juster strømmevolumet med + eller – knappen.



Statusindikator LED

Statusindikatorlampen identifiserer hvordan din Ekstern mikrofon + fungerer:

MERK: Typisk trådløs rekkevidde er opptil 60 fot (20 M). Dette kan forkortes av miljøfaktorer (f.eks. hindringer, forstyrrelser, personers posisjon). Større driftsområder kan være mulig, men lyd- eller tilkoblingskvaliteten kan reduseres.

Driftsstatus	Statusindikator LED status
AV	Ingen LED lyser
PÅ men ingen aktiv Bluetooth tilkobling	Sakte, blinkende grønn
PÅ med aktiv Bluetooth tilkobling	Sakte, blinkende blå
Lavt batteri	Sakte, blinkende rød
Feil eller elektrisk problem	Stabil rød




Bære Ekstern mikrofon +

Din Ekstern mikrofon + kan festes til klærne eller snoren som bæres av personen som snakker. Når lydkilden er satt til den eksterne mikrofonen. 🎤 eller en Bluetooth-enhet i telefonmodus 📶, er det best å plassere den innenfor 20 cm fra personens munn.

Feste på klær:

1. Klem sammen klipset på Ekstern mikrofon + til det åpner seg.
2. Skyv åpningen av klipset inn på klærne.
3. Slipp klipset.
4. Sørg for at Remote Mic + er godt festet til klærne.

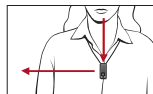

Bruke snor (valgfri):

1. Klem sammen klipset til Ekstern mikrofon + til det åpner seg.
2. Skyv snorløyken inn i klipsåpningen. Løft den mot toppen av klipset.
3. Slipp klipset.
4. Sørg for at din Ekstern mikrofon + er trygt festet til snoren.
5. Plasser snoren rundt halsen.




Hvordan din Ekstern mikrofon + hjelper

Din Ekstern mikrofon + er designet for å strøømme lyd fra forskjellige lydkilder direkte til dine trådløse høreapparater. Når den brukes til samtaler i støyende omgivelser, fungerer den som et hørselshjelpemiddel. Ekstern mikrofon+ kan også kommunisere med følgende lydkilder.

Ekstern mikrofon

- Ekstern mikrofon + optimaliserer automatisk mikrofoninnstillingene basert på dens fysiske orientering. Det hjelper med å fokusere på én person når det er bakgrunnsstøy. Når den bæres av en taler, prioriterer Ekstern mikrofon + automatisk lyd ovenfra mens den reduserer lydnivået fra andre retninger.
- Den kan lytte til flere talere i nærheten horisontalt på klipset ved å motta lyd fra alle retninger.

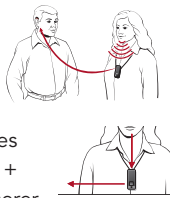

Bluetooth telefon og audio 📶

- Foreta telefonsamtaler der (A) du hører telefonsamtalen i høreapparatene dine og (B) Ekstern mikrofon + plukker opp stemmen din og sender den tilbake til telefonen. (Håndfri profil)
- Lytt til musikk der du hører den strømmede lyden i høreapparatene dine. (A2DP profil)



Pare med Bluetooth enheter	Ekstern mic + kan pares med inntil 8 Bluetooth enheter
Koble til Bluetooth enheter	Når begge er slått på og innenfor trådløs rekkevidde, vil Ekstern mic + og den parede Bluetooth enheten automatisk kobles sammen og LED status indikatoren vil sakte blinke blått. Ekstern mic + kan være tilkoblet inntil 2 Bluetooth enheter i gangen
Lytte til musikk (eller annen trådløs lyd)	Sørg for at lykilden er satt til Bluetooth på Ekstern mic +. Spill lyd fra din Bluetooth enhet og den vil automatisk sendes til dine høreapparater.
Lytte til musikk (eller annen trådløs lyd)	Sørg for at lykilden er satt til Bluetooth på Ekstern mic +. Spill lyd fra din Bluetooth enhet og den vil automatisk sendes til dine høreapparater.
Svare på innkommende samtale	Når du hører ringetonen i dine høreapparater, trykk kort på multifunksjonsknappen.

Avvis inkommende samtale	Når du hører ringetonen i dine høreapparater, hold inn multifunksjonsknappen i 2 sekunder. Slipp knappen når ringetonen slutter.
Legg på	Trykk kort på multifunksjonsknappen.
Overfør samtale mellom mobiltelefon og Ekstern mic +	Under en aktiv samtale, hold inn multifunksjonsknappen i 2 sekunder. Dette overfører samtalen direkte til din mobiltelefon. Gjør handlingen for å overføre samtalen tilbake til Ekstern mic+ 
Foreta en oppringning	Ring ønsket nummer på din Bluetooth telefon. Samtalen vil automatisk overføres til dine høreapparater.

Teleslynge T

Ekstern mikrofon + kan motta lyd fra et teleslyngeanlegg (finnes i enkelte offentlige bygninger). Å bære Ekstern mic + i en vertikal posisjon gir best ytelse. I denne innstillingen vil Ekstern mic + deaktivere Bluetooth tilkoblinger.



Når den går ut av denne innstillingen, vil Ekstern mic + prøve å re-etablere en Bluetooth tilkobling. Manuell tilkobling kan være nødvendig. Les bruksanvisningen til din Bluetooth enhet for mer informasjon

MERK: En manuell tilkobling kan være nødvendig. For mer informasjon, se driftsveiledningen for Bluetooth-enheten.

FM system ■■

Når en FM sender (tilvalg) plugges i Europin kontakten, kan Ekstern mikrofon + motta lyd fra et FM system. I denne innstillingen kan Ekstern mic + bæres på kroppen eller plasseres for eksempel på et bord.



Ledning 🎵

Når en lyd kabel plugges i microUSB-kontakt, kan Remote Mic + få lyd fra en mobiltelefon, MP3-spiller, nettbrett eller datamaskin som ikke



er Bluetooth-aktivert. I denne modusen er det best å plassere Remote Mic + på en stabil overflate i nærheten.

Å lade din Remote Mic +

- Fest microUSB-enden av ladekabelen til microUSB-kontakten på din Ekstern Mic +.
- Fest den andre enden av ladekabelen til kontakten på strømadapteren.
- Koble strømadapteren til en ekstern strømkilde, som en stikkontakt.
- Sjekk ladestatusen ved å bruke statusindikatoren på din Ekstern Mic +.



Operativ status	Indikatorlampe lyser:	Ladestatus
AV	Solid grønn	Lader
AV	Ingen	Fullt oppladet
PÅ	Solid grønn kortvarig avbrutt av annen indikatorlampe status	Ladet
PÅ	Ingen	Fullt oppladet

MERK: Lading av Remote Mic + kan ta lengre tid hvis du strømmer lyd. Lading er vanligvis raskere når Remote Mic + er AV.

Problemer med din Ekstern Mic +? Prøv disse tipsene. Hvis problemene vedvarer, kontakt din audiograf.

Symptom	Mulige årsaker	Løsninger
Ett (eller begge) høreapparat mister uventet lydstrømmen.	Høreapparater kan være på kanten av trådløs rekkevidde.	Flytt nærmere Ekstern Mic +.
	Batterinivået i høreapparatet støtter ikke lenger lydstrømming.	• Bytt batteri i høreapparatet. • Lad opp høreapparatet.
	Store gjenstander, for eksempel møbler eller en vegg, kan degradere signalet.	For best ytelse bør høreapparatene dine være innenfor synsvidde av Ekstern Mic +.
	Trådløs forbindelse med Remote Mic + ble brutt.	Start strømmingen på nytt. Se Start/stopp strømming av lyd på s. 9.

Symptom	Mulige årsaker	Løsninger
Strømmet lydkvalitet er forvrengt.	Lavt batterinivå i Ekstern Mic +.	Lad opp Ekstern Mic +.
	Volumet på lydkilden er ikke optimalt.	Juster volumnivået til lydkilden til bedre lydkvalitet oppnås.
Strømmet lydkvalitet er ustabil.	Bluetooth modus: Bluetooth-enheten kan være på kanten av trådløs rekkevidde.	Flytt Bluetooth-enheten nærmere Remote Mic +.
	Telespole modus: Ekstern Mic + er kanskje ikke plassert for optimal strømming.	Plasser Remote Mic + i en vertikal posisjon.
Lydstømmen er for sterk eller for svak.	Volume streamed from Remote Mic + to hearing aid not optimal.	Press volume + or – button on Remote Mic +.
	Volumet på lydkilden er ikke optimalt.	Juster volumnivået til lydkilden til bedre lydkvalitet oppnås.

Symptom	Mulige årsaker	Løsninger
Ekstern Mic: Vanskelig å høre samtale i støyende omgivelser.	Ekstern Mic + kan være for langt unna den som snakker.	Flytt Ekstern Mic + nærmere den som snakker.
	Ekstern Mic + kan være dekket av klær eller dårlig plassert.	Sørg for fri sikt mellom Ekstern Mic + og den som snakker.
Bluetooth: Den som ringer kan ikke høre deg under telefonsamtaler.	Ekstern Mic + kan være for langt fra munnen din.	Flytt Ekstern Mic + nærmere munnen eller snakk høyere.
Telespolemodus: Hører ikke telefonsamtaler i høreapparatene.	Bluetooth-tilkoblinger med mobiltelefoner er deaktivert i telespolemodus.	Bytt til en annen lydkilde. Gjenopprett Bluetooth-tilkoblingen, hvis nødvendig.
LED blinker sakte grønt eller blått, men ingen strømning høres i høreapparatene.	Høreapparater er ikke klargjort for strømning.	Start lydstrømmen på nytt. Se Start/stopp strømning av lyd på s. 9.

Symptom	Mulige årsaker	Løsninger
Statusindikatoren blinker sakte grønt eller blått, men ingen lydstrøm høres i høreapparatene.	Høreapparater er ikke paret med Ekstern Mic +.	Følg trinnene i Paring med høreapparater på s. 5.
	Ingen innkommende lydsignal er tilgjengelig.	• Slå på den elektroniske lydkilden. • Slå på eller øk volumet på elektronisk lydkilde. • Sørg for at telespole eller FM-system er til stede.
Statusindikatoren lyser konstant rødt.	Mulig feilstatus.	Slå av Ekstern Mic +, vent 30 sekunder, og slå den deretter på.
Lydkildeindikatoren blinker hurtig.	Noe er fraværende fra gjeldende lydkilde.	Koble til lydkabel, koble til FM-mottaker eller reetabler Bluetooth-tilkobling.
Lydkildeindikatoren lyser ikke.	Lydkildeindikatoren er slått av for å spare batteriet.	Trykk på lydkildeknappen for å tenne lydkildeindikatoren.

Symptom	Mulige årsaker	Løsninger
Ønsket lydkildemodus er ikke tilgjengelig.	Noe er fraværende ved ønsket lydkilde.	Plugg inn lydkabel, koble til FM-mottaker, eller gjenopprett Bluetooth-tilkoblingen.
Kan ikke pare med mer enn én Bluetooth-enhet.	Ekstern Mic + er allerede i en aktiv Bluetooth-tilkobling.	Følg trinnene i Paring med en Bluetooth-enhet på s. 8.
Mister uventet TV-lyden selv om statusindikatoren blinker sakte blått på Ekstern Mic +.	Lyd fra noen Bluetooth-enheter har høyere prioritet enn TV-lyd.	Slå av Bluetooth-modus på Ekstern Mic +.

Tiltenkt bruk



Ekstern mikrofon + er et tilbehør til et 2,4 GHz trådløst luftledningshøreapparat. Den er ment som en trådløs sender av lyd fra en rekke lydkilder til luftledningshøreapparater.

Når den bæres av en fjern høyttaler i støyende omgivelser, fungerer den som et hjelpeapparat. Den kobles også til sløyfesignaler, FM-signaler når en Europin FM-mottaker er koblet til, analog line-in-lyd og standard Bluetooth-lyd.

Ekstern mikrofon + er klassifisert som en type B-brukt del under IEC 60601-1 standard for medisinsk utstyr.

Ekstern mikrofon+ er designet for å overholde de strengeste standardene for internasjonal elektromagnetisk kompatibilitet. Det er imidlertid fortsatt mulig at du kan oppleve forstyrrelser forårsaket av forstyrrelser i strømledningen, metalledetektorer på flyplasser, elektromagnetiske felt fra annet medisinsk utstyr, radiosignaler og elektrostatiske utladninger.

Ekstern mikrofon + er designet for å rengjøres med en fuktig klut fuktet med såpevann.

Hvis du bruker annet medisinsk utstyr eller har på deg implanterbart medisinsk utstyr som defibrillatorer eller pacemakere og er bekymret for at din Ekstern mikrofon+ kan forårsake interferens med det medisinske utstyret ditt, vennligst kontakt legen din eller produsenten av det medisinske utstyret for informasjon om risikoen for forstyrrelser . Ekstern mikrofon + skal ikke brukes under en MR-prosedyre eller i et hyperbarisk kammer. Ekstern mikrofon + er ikke formelt sertifisert for å operere i eksplosive atmosfærer som kan finnes i kullgruver eller visse kjemiske fabrikker.

Klinisk fordel


Tilbehøret i seg selv gir ingen direkte klinisk fordel. En indirekte klinisk fordel gis ved å gjøre det mulig for foreldreenheten (trådløse høreapparater) å oppnå sitt tiltenkte formål.

Bruk ombord på fly

Ekstern mikrofon + skal ikke brukes på fly med mindre det er spesifikt tillatt av kabinpersonalet.

Bruk i utlandet

Ekstern mikrofon + er godkjent for å operere ved radiofrekvenser som er spesifikke for ditt land eller din region og er kanskje ikke godkjent for bruk utenfor ditt land eller din region. Vær oppmerksom på at bruk under internasjonale reiser kan forårsake interferens med andre elektroniske enheter, eller andre elektroniske enheter kan forårsake interferens med Ekstern mikrofon +.

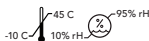

Din Ekstern mikrofon + er designet for å betjene, lagres, og transporteres innenfor temperaturområdet -10°C (14°F) til 45°C (113°F) og relativ fuktighetsområde på 10%-95%, og høydegrenser 70 kPa – 106 kPa (tilsvarer høyder fra 1200 fot (380 m) under havnivå til 10 000 fot (3 000 m).

Vi er forskriftsmessig pålagt å gi følgende advarsler:

⚠ ADVARSEL: Bruk av Ekstern mikrofon+ direkte ved siden av annet elektronisk utstyr bør unngås fordi det kan føre til feil ytelse. Hvis slik bruk er nødvendig, noter deg om dine høreapparater og det andre utstyret fungerer normalt.

⚠ ADVARSEL: Bruk av tilbehør, komponenter eller reservedeler annet enn det som er levert av produsenten av Ekstern mikrofon+ kan føre til økt elektromagnetisk stråling og redusert elektromagnetisk immunitet og kan føre til forringelse av ytelsen.

⚠ ADVARSEL: Hvis bærbart radiofrekvenskommunikasjonsutstyr brukes nærmere enn 30 cm (12 tommer) fra din Ekstern mikrofon +, kan det føre til forringelse av ytelsen til høreapparatet ditt. Hvis dette skjer, flytt deg bort fra kommunikasjonsutstyret.

Selv om Ekstern mikrofon + ikke er formelt sertifisert (IP-klassifisert) for beskyttelse mot støv eller vanninntrengning, i henhold til IEC 60529, har den blitt testet til IP 5X-nivået. Dette betyr at Ekstern mikrofon + er beskyttet mot støv.

Batteriet i din Ekstern mikrofon + kan ikke byttes ut. Ikke forsøk å bytte ut batteriet. Ekstern mikrofon + inneholder ingen deler som brukeren kan reparere. Ikke åpne eller modifier den. Ikke koble den eksterne mikrofonen + til enheter som ikke er beskrevet i denne håndboken.

Forventet levetid for den Ekstern mikrofon + er 3 år.

Trådløs teknisk beskrivelse

Starkey Laboratories, Inc. Ekstern mikrofon + opererer i 2,4- 2,4835 GHz-båndet med en maksimal effektiv utstrålt effekt på 8 dBm med overføringsmodulasjonstype på 1M12FXD og 1,1 MHz båndbredde. Mottakerdelen av radioen har en båndbredde på 2 MHz.

Ekstern mikrofon + har blitt testet for, og har bestått, følgende emisjons- og immunitetstester:

- IEC 60601-1-2 radiated and conducted emissions requirements for a Group 1 Class B device as stated in CISPR 11.
- Harmonic distortion and voltage fluctuations affecting the power input source as stated

in Table 2 of IEC 60601-1-2.

- RF radiated immunity at a field level of 10 V/m between 80 MHz and 2.7 GHz as well as higher field levels from communications devices as stated in Table 9 of IEC 60601-1-2.
- Immunity to power frequency magnetic fields at a field level of 30 A/m and proximity magnetic fields as stated in Table 11 of IEC 60601-1-2
- Immunity to ESD levels of +/- 8 kV conducted discharge and +/- 15 kV air discharge.
- Immunity to electrical fast transients on the power input at a level of +/- 2 kV at a 100 Hz repetition rate.
- Immunity to surges on the power input of +/- 1 kV line to line.
- Immunity to conducted disturbances induced by RF fields on the power input as stated in Table 6 of IEC 60601-1-2.
- Immunity to voltage dips and interruptions on the power input as stated in Table 6 of IEC 60601-1-2.

EU RAPPORTERING AV UØNSKEDE HENDELSER

Enhver alvorlig hendelse som har oppstått i forbindelse med enheten din bør rapporteres til din lokale Starkey-representant og den kompetente myndigheten i medlemsstaten du er etablert. En alvorlig hendelse er definert som enhver funksjonsfeil, forringelse av enhetens egenskaper og/eller ytelse, eller utilstrekkelighet i enhetens brukerhåndbok/merking som kan føre til død eller alvorlig forverring av brukerens helsestilstand, ELLER kan gjøre det ved gjentakelse.

FCC INFORMASJON

TRÅDLØSE MERKNADER

FCC ID: EOA-24MFA

IC: 6903A-24MFA (Model 900)

Denne enheten overholder del 15 av FCC-reglene og med ISED Canadas lisensfrie RSS-standard(er). Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må akseptere all interferens som mottas, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift av enheten.

MERK: Produsenten er ikke ansvarlig for radio- eller TV-interferens forårsaket av uautoriserte modifikasjoner av dette utstyret. Slike endringer kan ugyldiggjøre brukerens rett til å betjene utstyret.

Starkey Laboratories, Inc. erklærer herved at Ekstern mikrofon+ er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU.

En kopi av samsvarserklæringen kan fås fra følgende adresser og fra docs.starkeyhearingtechnologies.com.

Starkey Laboratories, Inc. erklærer herved at den eksterne mikrofonen + er inne i samsvar med UK Radio Equipment Regulations SI 2017 som endret. En kopi av Storbritannias samsvarserklæring kan fås fra følgende adresser og fra docs.starkeyhearingtechnologies.com.

Regulatorisk informasjon



Starkey Laboratories, Inc.
6700 Washington Ave. South
Eden Prairie, MN 55344 USA
www.starkey.com



Starkey Laboratories (Germany) GmbH
Weg beim Jäger 218-222
22335 Hamburg
Germany

UK Authorised Person:
Starkey UK
William F. Austin House
Pepper Rd, Hazel Grove
Stockport SK7 5BX, UK
www.starkey.co.uk



Avfall fra elektronisk utstyr skal håndteres i
henhold til lokale forskrifter



Les bruksanvisningen



Holdes tørt

Instruksjoner for avhending av gammel elektronikk

Starkey Laboratories, Inc. oppfordrer, EU krever, og lokalsamfunnets lover kan kreve at Ekstern mikrofon+ avhendes via din lokale prosess for resirkulering/avhending av elektronikk. Instruksjonene nedenfor er gitt til fordel for avhendings-/resirkuleringspersonell. Vennligst ta med denne håndboken når du kaster din Ekstern mikrofon +.

KUN FOR RESIRKULERINGS/AVHENDINGSPERSONELL

Dette produktet inneholder et litium-ion-polymerbatteri.

Slik fjerner du dette batteriet:

- Slå av Ekstern Mikrofon +.
- Lirk hushalvdelene fra hverandre med en liten skrutrekker.r.
- Klipp av batteriledningene fra kretskortet for å forhindre utilsiktet kortslutning.
- Lirk batteriet vekk fra huset med et bredt flatt blad..

Slike endringer kan ugyldiggjøre brukerens rett til å betjene utstyret.

Symbol	Symbol betyr	Anvendt Standard	Symbol Nummer
	Produsent	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.1
	Autorisert representant i den Europeiske unionen	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.2
	Produksjonsdato	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.3
	Katalognummer	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.6
	Serienummer	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.7
	Medisinsk utstyr	BS EN ISO 15223-1:2021	5.7.7
	Holdes tørt	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.4
	Temperaturgrense	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.7
	Fuktighetsbegrensning	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.8
	Aktsomhet	BS EN ISO 15223-1:2021	5.4.4
	Advarsel	EC 60601-1, Reference no. Table D.2, Safety sign 2	ISO 7010-W001
	Les bruksanvisningen	EC 60601-1, Reference no. Table D.2, Safety sign 10	ISO 7010-M002
	Avhendes separat	DIRECTIVE 201 2/19/EU (WEEE)	Annex IX
	Klasse II utstyr	IEC 60417 Reference no. Table D.1	Symbol 9 (IEC 60417- 5172)
	Regulatorisk samsvarmerke (RCM)	AS/NZS 4417.1:2012	N/A
	Giteki merke	Japanese Radio Law	N/A
	Likestrøm	IEC 60601-1 Reference no. Table D.1	IEC 60417-5031
	Resirkuleringssymbol	European Parliament and Council Directive 94/62/EC	Annex I-VII
	Importør	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.8
	Oversettelse	BS EN ISO 15223-1:2021	5.7.8

[illegible]

Starkey Norway AS
Postboks 74 Sentrum
4001 Stavanger



StarLink and Starkey are trademarks of Starkey Laboratories, Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Starkey is under license.

©2023 Starkey Laboratories, Inc. All Rights Reserved.

P000008308 11/23 BKLT3169-02-NO-XX

Patent: www.starkey.com/patents