

Manual do usuário do seu microfone remoto + StarLink



Acessório para:

Aparelhos auditivos com conectividade

Parabéns pelo seu novo microfone remoto +!

Seu microfone remoto + aprimora a fala para que você possa desfrutar de conversas e conectar-se com o mundo ao seu redor. Use este manual simples para começar.

Índice

1. Conheça seu microfone remoto +

Conhecendo seu microfone remoto +	2
Configurando seu microfone remoto +	4
Usando seu microfone remoto +	8
Carregando seu microfone remoto +	18

2. Guia de resolução de problemas.....19

3. Orientações adicionais

Uso pretendido	24
Informações da FCC	26
Informações regulatórias	27

4. Certificações.....29

Conhecendo seu microfone remoto +

Visão geral

- Botão multifuncional**
Controla o estado operacional do microfone remoto +.
- Luz indicadora de status**
Identifica o estado operacional do microfone remoto +.
- Microfones**
 - Capta o áudio (voz do locutor) durante o uso.
 - Capta sua voz durante chamadas telefônicas Bluetooth®.
- Tomada do receptor FM**
Aceita receptores Europin FM.
- Clipe**
Prende o microfone remoto + à roupa ou cordão do locutor.
- Luzes indicadoras do modo de entrada**
Identifica a fonte de áudio.
- Botão do modo de entrada**
Altera a fonte de áudio.

8. Conector MicroUSB

- Permite recarga via cabo USB para microUSB.
- Reproduz áudio em linha via cabo opcional.

9. Botões de aumentar o volume (+) e diminuir o volume (-)

Ajuste o volume da transmissão para cima ou para baixo.



Configurando seu microfone remoto +

Ligar/Desligar

Use o botão multifuncional para **ligar** ou **desligar** o microfone remoto +:

- **Ligar** – pressione o botão multifuncional por 3 segundos. Solte quando a luz indicadora de status ficar verde.
- **Desligar** – pressione o botão multifuncional por 3 segundos. Solte quando a luz indicadora de status verde não aparecer mais.



Para emparelhar com aparelhos auditivos

Antes de usar seu microfone remoto + pela primeira vez, você precisará emparelhar com seu(s) aparelho(s) auditivo(s). Isso permite que seu acessório reconheça seus aparelhos auditivos para que possam trabalhar juntos.

PASSO 1: Ligue seu microfone remoto +

PASSO 2: Desligue e ligue seus aparelhos auditivos

- **Para aparelhos auditivos com sistema CROS:** desligue seus aparelhos auditivos e o transmissor CROS. Em seguida, **ligue** seus aparelhos auditivos, mas deixe o transmissor CROS **desligado**.

PASSO 3: Emparelhando seu microfone remoto + com seu(s) aparelho(s) auditivo(s):

1. Certifique-se de que seus aparelhos auditivos não estejam conectados próximos a dispositivos Bluetooth®:
 - **Desligue** o Bluetooth do seu celular.
 - **Desligue** qualquer acessório com conectividade já emparelhado aos seus aparelhos auditivos.
2. Coloque seus aparelhos auditivos em uma distância de 6 polegadas (15 cm) do seu microfone remoto +.
3. Pressione os botões modo de entrada e aumentar volume (+) simultaneamente por 7 segundos até que a luz indicadora de status pisque alternadamente em azul e vermelho.



4. Para um **par** de aparelhos auditivos:

1ª luz indicadora de status piscando	2ª luz indicadora de status piscando	Resultado do emparelhamento	Próxima etapa
1	2	Ambos os aparelhos auditivos emparelhados	Completo
1	2	Apenas um aparelho auditivo emparelhado	Repita as etapas 1-3 do passo 3
1	N/A	Nenhum aparelho auditivo emparelhado	Repita as etapas 1-4 do passo 3

5. Para um **único** aparelho auditivo:

Luz indicadora de status piscando	Resultado do emparelhamento	Próxima etapa
1	Aparelho auditivo emparelhado	Completo
1	Aparelho auditivo não emparelhado	Repita as etapas 1-3 e 5 do passo 3

Para emparelhar com um dispositivo Bluetooth

Para que o microfone remoto + receba áudio sem fio de um dispositivo Bluetooth, você deve primeiro emparelhá-los.

PASSO 1: Ligue seu microfone remoto +.

1. Pressione os botões modo de entrada e diminuir volume (-) simultaneamente por 7 segundos até que a luz indicadora de status pisque rapidamente em azul.



PASSO 2: Coloque seu dispositivo Bluetooth no modo de emparelhamento.

1. Quando o microfone remoto + aparecer no seu dispositivo Bluetooth, selecione-o.

NOTA: Para obter mais detalhes, consulte o guia de operações do dispositivo Bluetooth.

2. A luz indicadora de status do microfone remoto + mostrará o status de emparelhamento
 - Emparelhamento bem-sucedido = luz indicadora de status verde por 2 segundos
 - Emparelhamento sem sucesso = luz indicadora de status vermelha por 2 segundos

Usando seu microfone remoto +

PASSO 1: Verifique se seus aparelhos auditivos estão ligados.

Lembrete – Antes de transmitir áudio pela primeira vez, certifique-se de que seus aparelhos auditivos estejam emparelhados com seu microfone remoto +. Consulte a pág. 5.

PASSO 2: Iniciar/parar a transmissão de áudio (voz de um orador). Faça um dos seguintes passos:

- **Ligue o microfone remoto +:**

A transmissão de áudio começa automaticamente no aparelho auditivo.

- **Aplicativo móvel para aparelhos auditivos:**

Abra o aplicativo em seu celular ou tablet. Selecione a opção para iniciar/parar a transmissão na tela **acessórios**.

- **Controle do usuário do aparelho auditivo:**

Se configurado pelo seu profissional da audição, um gesto específico (por exemplo, um toque longo em um controle do usuário) pode iniciar/interromper a transmissão.

- **Controle remoto com conectividade:**

Se configurado pelo seu profissional da audição, pressione o botão **favorito**.



NOTA: Um indicador sonoro pode tocar em seus aparelhos auditivos para sinalizar o início/parada da transmissão de áudio.

PASSO 3: Ajuste o volume da transmissão pressionando o botão aumentar volume (+) ou diminuir volume (-) no microfone remoto +.



PASSO 4: Ajuste a fonte de áudio.

1. Para alterar o áudio, pressione e solte o **botão modo de entrada**. Pressione o botão repetidamente até chegar à fonte de áudio desejada. Para mais detalhes sobre as opções de fonte de áudio, veja *como o seu microfone remoto + pode ajudar* na pág. 13.

Ícone no microfone remoto +	Fonte de áudio sendo usada
	Microfone remoto
	Telefone e áudio Bluetooth
	Sistema de loop
	Sistema FM
	Line-In

2. Para acessar o áudio de um dispositivo Bluetooth, ele deve estar conectado ao microfone remoto + (a luz indicadora de status piscará de forma lenta em azul).

- Antes de transmitir áudio Bluetooth pela primeira vez, seu dispositivo Bluetooth deve ser emparelhado com seu microfone remoto +. Consulte para emparelhar com um dispositivo Bluetooth na pág. 7.



PASSO 5: Para ajustar o volume da transmissão, pressione o botão + ou -.



NOTA: O alcance operacional sem fio típico é de até 60 pés (20 M). Isso pode ser encurtado por fatores ambientais (por exemplo, obstruções, interferências, posição das pessoas). Faixas de operação mais amplas podem ser possíveis, no entanto, sua qualidade de áudio ou conexão pode diminuir.

Luz indicadora de status

A luz indicadora de status identifica como seu microfone remoto + está operando no momento:




Estado operacional	Luz indicadora de status
Desligado	Nenhuma luz indicadora de status verde aparece
Ligado sem conexão Bluetooth ativa	Piscando de forma lenta em verde
Ligado com conexão Bluetooth ativa	Piscando de forma lenta em azul
Bateria fraca	Piscando de forma lenta em vermelho
Mau funcionamento ou problema elétrico	Vermelho sólido

Colocando o microfone remoto +

Seu microfone remoto + pode ser conectado à roupa ou cordão usado por a pessoa que fala. Quando sua fonte de áudio está definida para o microfone remoto  ou um dispositivo Bluetooth no modo telefone , é melhor colocar próximo de 8 polegadas (20 cm) da boca da pessoa.

Instruções de roupas:

1. Aperte o clipe do microfone remoto + até abrir.
2. Deslize a abertura do clipe na roupa.
3. Solte o clipe.
4. Garanta que seu microfone remoto + está firmemente preso à roupa.

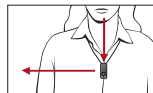

Cordão (opcional) instruções:

1. Aperte o clipe do microfone remoto + até abrir.
2. Deslize o laço do cordão na abertura do clipe. Levante-o em direção ao topo do clipe.
3. Solte o clipe.
4. Certifique-se de que seu microfone remoto + esteja preso com segurança ao cordão.
5. Coloque o cordão no pescoço.



Como o seu microfone remoto + pode ajudar

Seu microfone remoto + foi projetado para transmitir áudio de diferentes fontes de áudio diretamente para seus aparelhos auditivos sem fio. Quando por um alto-falante distante em ambientes ruidosos, funciona como um dispositivo auxiliar de escuta. O microfone remoto + também pode interagir com as seguintes fontes de áudio:

Microfone remoto

O microfone remoto + otimiza automaticamente as configurações do microfone com base em sua orientação física.



- Ajuda a focar em uma pessoa quando há ruído de fundo. Quando usado por um orador, o microfone remoto + prioriza automaticamente o som de cima enquanto reduz os níveis de som de outras direções.
- Ele pode ouvir vários oradores próximos em ambientes silenciosos quando colocado horizontalmente em seu clipe, recebendo som de todas as direções.

Telefone e áudio Bluetooth

- Realize chamadas telefônicas nas quais (A) você ouve a chamada telefônica em seus aparelhos auditivos e (B) o microfone remoto + capta sua voz e a transmite de volta ao telefone. *(Perfil viva-voz)*
- Ouça a música na qual você ouve o áudio transmitido em seus aparelhos auditivos. *(Perfil A2DP)*



- Funcionalidade geral do Bluetooth:

Emparelhar com dispositivos Bluetooth	O microfone remoto + pode emparelhar com até 8 dispositivos Bluetooth.
Conectar com dispositivo Bluetooth	Quando ambos os dispositivos microfone remoto + e Bluetooth estiverem ligados e dentro do alcance operacional sem fio, eles devem se conectar automaticamente e a luz indicadora de status do microfone remoto + deve estar piscando de forma lenta em azul.
Ouvir música (ou outro áudio transmitido)	Certifique-se de que o modo de entrada do microfone remoto + é definido como fonte de áudio Bluetooth. Ao reproduzir áudio no dispositivo Bluetooth, ele será encaminhado automaticamente para seus aparelhos auditivos.
Alterar para fonte de áudio Bluetooth	Quando o microfone remoto + detecta uma chamada telefônica recebida ou efetuada, ele muda automaticamente para a fonte de áudio Bluetooth.
Aceitar chamada recebida	Ao ouvir o toque em seus aparelhos auditivos, pressione brevemente o botão multifuncional em seu microfone remoto +.

Rejeitar chamada recebida	Ao ouvir o toque em seus aparelhos auditivos, pressione e segure o botão multifuncional no seu microfone remoto + por mais de 2 segundos. Solte o botão assim que o toque parar.
Terminar chamada	Pressione brevemente o botão multifuncional em seu microfone remoto.
Transferir chamada entre o telefone e o microfone remoto +	Conduzir a chamada você mesmo, pressione e segure o botão multifuncional no seu microfone remoto + por mais de 2 segundos. Para mover a chamada de volta para o microfone remoto +, pressione e segure o botão multifuncional novamente por mais de 2 segundos.
Fazer uma chamada	Disque o número de telefone no seu dispositivo Bluetooth. A chamada telefônica será roteada automaticamente para seus aparelhos auditivos.



Sistema de loop

O microfone remoto + pode receber áudio de um sistema loop (disponível em alguns edifícios públicos). Usar o microfone remoto + em uma orientação vertical oferece o melhor desempenho. Neste modo, o microfone remoto + desativa as conexões Bluetooth. Ao sair deste modo, o microfone remoto + tentará restabelecer uma conexão Bluetooth.



NOTA: Uma reconexão manual pode ser necessária. Para obter mais detalhes, consulte o guia de operações do dispositivo Bluetooth.

Sistema FM

Quando um transmissor FM opcional é conectado através do conector Europin, o microfone remoto + pode receber áudio de um sistema FM. Neste modo, você pode usar o microfone remoto + ou colocá-lo em uma superfície estável próxima.



Line-In

Quando um cabo Line-In opcional é conectado através do conector microUSB, o microfone remoto + pode obter áudio de um telefone celular, MP3 player, tablet ou computador que não seja habilitado para Bluetooth. Neste modo, é melhor colocar o microfone remoto + em uma superfície estável próxima.



Carregando seu microfone remoto +

1. Conecte a extremidade microUSB do cabo de carregamento ao conector microUSB no seu microfone remoto +.
2. Conecte a extremidade microUSB do cabo de carregamento ao conector do adaptador de energia.
3. Conecte o adaptador de energia em uma fonte de energia externa, como uma tomada de parede.
4. Verifique o status de carregamento usando a luz indicadora de status acesa em seu microfone remoto +.



Status de energia	Luz indicadora de status	Status de carregamento
Desligado	Verde sólido	Recarregando
Desligado	Nenhum	Completamente carregado
Ligado	Verde sólido brevemente interrompido por outros comportamentos da luz indicadora de status	Recarregando
Ligado	Nenhum	Completamente carregado

NOTA: Carregar seu microfone remoto + pode demorar mais se você estiver transmitindo áudio. O carregamento normalmente é mais rápido quando o microfone remoto + está desligado.

Problemas com seu microfone remoto +? Experimente estas dicas. Se os problemas continuarem, entre em contato com seu profissional da audição.

Sintoma	Possíveis causas	Soluções
A transmissão de áudio cai inesperadamente em um (ou ambos) os aparelhos auditivos.	Os aparelhos auditivos podem estar no limite do alcance da conectividade.	Aproxime-se do microfone remoto +.
	O nível da bateria no aparelho auditivo não suporta mais a transmissão de áudio.	• Substitua a bateria do aparelho auditivo por uma nova. • Recarregue seu aparelho auditivo, se aplicável.
	Objetos grandes, como móveis ou paredes, podem degradar o sinal.	Para um melhor desempenho, seus aparelhos auditivos devem estar dentro da linha de visão do microfone remoto +.
	A conexão sem fio com o microfone remoto + foi perdida.	Reinicie a transmissão de áudio. Consulte "Iniciar/parar a transmissão de áudio" na pág. 8.

Sintoma	Possíveis causas	Soluções
A qualidade da transmissão de áudio está distorcida.	Baixo nível de bateria no microfone remoto +.	Recarregue o microfone remoto +.
	O volume da fonte de áudio não é o ideal.	Ajuste o nível de volume da fonte de áudio até obter uma melhor qualidade de som.
A qualidade da transmissão de áudio é inconsistente.	Modo Bluetooth: O dispositivo Bluetooth pode estar no limite do alcance sem fio.	Mova o dispositivo Bluetooth para mais perto do microfone remoto +.
	Modo de loop: O microfone remoto + pode não estar posicionado para transmissão ideal.	Reoriente o microfone remoto + em uma posição vertical.
O fluxo de áudio está muito alto ou muito baixo.	O volume transmitido do microfone remoto + para o aparelho auditivo não é o ideal.	Pressione o botão de volume + ou - no microfone remoto +.
	O volume da fonte de áudio não é o ideal.	Ajuste o nível de volume da fonte de áudio até obter uma melhor qualidade de som.

Sintoma	Possíveis causas	Soluções
Modo microfone remoto: Difícil de ouvir o orador em ambientes ruidosos.	O microfone remoto + pode estar muito longe do orador.	Mova o microfone remoto + para mais perto da boca do orador.
	O microfone remoto + pode estar coberto por roupas ou mal posicionado.	Forneça acesso claro do microfone remoto + à voz do orador.
Modo Bluetooth: Quem te ligou não pode ouvir sua voz durante as chamadas de telefone.	O microfone Remoto + pode estar muito longe de sua boca.	Mova o microfone remoto + para mais perto de sua boca ou fale mais alto.
Modo de loop: Chamadas telefônicas não são ouvidas nos aparelhos auditivos.	As conexões Bluetooth com telefones celulares são desativadas no modo loop.	Mova para outra fonte de áudio. Restabeleça sua conexão Bluetooth, se necessário.
O LED lentamente pisca em verde ou azul, mas o som transmitido não é ouvido nos aparelhos auditivos.	Os aparelhos auditivos não estão prontos para receber fluxos de áudio.	Reinicie a transmissão de áudio. Consulte "Iniciar/parar a transmissão de áudio" na pág. 8.

Sintoma	Possíveis causas	Soluções
A luz indicadora de status está lentamente piscando em verde ou azul, mas o som transmitido não é ouvido nos aparelhos auditivos.	Os aparelhos auditivos não estão emparelhados com o microfone remoto +.	Siga as etapas em "Para emparelhar com aparelhos auditivos" na pág. 7.
	Nenhum sinal de áudio de entrada está disponível.	- Ligue a fonte de áudio eletrônica. - Ative o som ou aumente o volume na fonte de áudio eletrônica. - Certifique-se de que o loop ou sistema FM esteja presente.
A luz indicadora de status está vermelha sólida.	Possível condição de erro.	Desligue o microfone remoto +, aguarde 30 segundos e ligue-o.
A luz indicadora do modo de entrada está piscando rapidamente.	Algo está ausente da fonte de áudio atual.	Conecte o cabo line-in, conecte o receptor FM ou restabeleça sua conexão Bluetooth.
A luz indicadora do modo de entrada não está acesa.	A luz indicadora do modo de entrada é desligada para economizar energia da bateria.	Pressione o botão modo de entrada para iluminar a luz indicadora do modo de entrada.

Sintoma	Possíveis causas	Soluções
Modo de entrada desejado não disponível.	Algo está faltando na entrada desejada.	Conecte o cabo line-in, conecte o receptor FM ou restabeleça sua conexão Bluetooth.
Impossível emparelhar com mais do que um dispositivo Bluetooth.	O microfone remoto + já está em uma conexão Bluetooth ativa.	Siga as etapas em <i>"Para emparelhar com um dispositivo Bluetooth"</i> na pág. 7.
Inesperadamente o áudio da TV é perdido enquanto a luz indicadora de status está lentamente piscando em azul no microfone remoto +.	Alguns sons de dispositivos Bluetooth têm prioridade mais alta do que o áudio transmitido da TV.	Saia do modo de entrada Bluetooth no microfone remoto +.

Uso pretendido



O microfone remoto + é um acessório para um aparelho auditivo de condução aérea sem fio de 2,4 GHz. Destina-se a ser um transmissor sem fio de som de uma variedade de fontes de áudio para aparelhos auditivos de condução aérea. Quando usado por um orador distante em ambientes ruidosos, ele funciona como um dispositivo auxiliar de audição. Ele também se conecta a sinais de loop, sinais FM quando um receptor Europin FM está conectado, áudio analógico line-in e áudio Bluetooth padrão.

O microfone remoto + é classificado como uma peça aplicada Tipo B de acordo com o padrão de instrumentos médicos IEC 60601-1.

O microfone remoto + foi projetado para atender aos mais rigorosos Padrões de Compatibilidade Eletromagnética Internacional.

No entanto, ainda é possível que você sofra interferência causada por distúrbios na linha de energia, detectores de metal em aeroportos, campos eletromagnéticos de outros dispositivos médicos, sinais de rádio e descargas eletrostáticas.

O microfone remoto + foi projetado para ser limpo com um pano umedecido com água e sabão.

Se você usa outros dispositivos médicos ou usa dispositivos médicos implantáveis, como desfibriladores ou marca-passos, e está preocupado com a possibilidade de seu microfone remoto + causar interferência em seu dispositivo médico, entre em contato com seu médico ou com o fabricante de seu dispositivo médico para obter informações sobre o risco de perturbação. O microfone remoto + não deve ser usado durante um procedimento de ressonância magnética ou em uma câmara hiperbárica. O microfone remoto + não é formalmente certificado para operar em atmosferas explosivas, como as encontradas em minas de carvão ou certas fábricas de produtos químicos.

Benefício clínico

O acessório em si não oferece benefício clínico direto. Um benefício clínico indireto é fornecido ao permitir que o dispositivo principal (aparelhos auditivos sem fio) alcance sua finalidade pretendida.


Uso em aeronaves

O microfone remoto + não deve ser usado em aeronaves, a menos que especificamente permitido pelo pessoal do voo.

Uso internacional

O microfone remoto + foi aprovado para operar em frequências de rádio específicas de seu país ou região e pode não ser aprovado para uso fora de seu país ou região.

Esteja ciente de que a operação durante viagens internacionais pode causar interferência em outros dispositivos eletrônicos, ou outros dispositivos eletrônicos podem causar interferência em seu microfone remoto +.

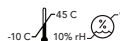

Seu microfone remoto + foi projetado para operar, ser armazenado e transportado dentro da faixa de temperatura de -10°C (14°F) a 45°C (113°F) e umidade relativa de 10%-95%, e limites de altitude 70 kPa – 106 kPa (equivalente para altitudes de 1.200 pés (380 m) abaixo do nível do mar a 10.000 pés (3.000 m).

Somos obrigados por regulamentos a fornecer os seguintes avisos:

AVISO: O uso do microfone remoto + próximo a outros equipamentos eletrônicos deve ser evitado, pois pode resultar em desempenho inadequado. Se tal uso for necessário, observe se seus aparelhos auditivos e demais equipamentos estão funcionando normalmente.

AVISO: uso de acessórios, componentes ou peças de reposição diferentes dos fornecidos pelo fabricante do microfone remoto + pode resultar em aumento das emissões eletromagnéticas e diminuição da imunidade eletromagnética e pode resultar na degradação do desempenho.

AVISO: Se o equipamento de comunicação de radiofrequência portátil for usado a menos de 30 cm (12 polegadas) de seu microfone remoto +, poderá ocorrer degradação do desempenho de seu aparelho auditivo. Se isso ocorrer, afaste-se do equipamento de comunicação.

Embora o microfone remoto + não seja formalmente certificado (classificação IP) para proteção contra entrada de poeira ou água, de acordo com IEC 60529, ele foi testado para o nível IP 5X. Isso significa que o microfone remoto + está protegido contra poeira.

A bateria do microfone remoto + não é substituível. Não tente substituir

a bateria. O microfone remoto + não contém nenhuma peça que possa ser reparada pelo usuário. Não abra ou modifique.

Não conecte o microfone remoto + a nenhum dispositivo não descrito neste manual.

A vida útil esperada do microfone remoto + é de 3 anos.

Descrição técnica de conectividade

Starkey Laboratories, Inc. O microfone remoto + opera em a banda de 2,4-2,4835 GHz com uma potência radiada efetiva máxima de 8 dBm com tipo de modulação de transmissão de 1M12FXD e largura de banda de 1,1 MHz. A seção do receptor do rádio tem uma largura de banda de 2 MHz.

O microfone remoto + foi testado e passou nos seguintes testes de emissões e imunidade:

- IEC 60601-1-2 requisitos de emissões irradiadas e conduzidas para um dispositivo Grupo 1 Classe B, conforme declarado no CISPR 11.
- Distorção harmônica e flutuações de tensão que afetam a fonte de entrada de energia, conforme indicado na Tabela 2 da IEC 60601-1-2.
- Imunidade irradiada por RF em um nível de campo de 10 V/m entre 80 MHz e 2,7 GHz, bem como níveis de campo mais altos de dispositivos de comunicação, conforme indicado na Tabela 9 da IEC 60601-1-2.
- Imunidade a campos magnéticos de frequência de energia em um nível de campo de 30 A/m e campos magnéticos de proximidade conforme indicado na Tabela 11 da IEC 60601-1-2.

- Imunidade a níveis de ESD de descarga conduzida de +/- 8 kV e descarga de ar de +/- 15 kV.
- Imunidade a transientes elétricos rápidos na entrada de energia a um nível de +/- 2 kV a uma taxa de repetição de 100 Hz.
- Imunidade a surtos na entrada de energia de +/- 1 kV linha a linha.
- Imunidade a distúrbios conduzidos induzidos por campos de RF na entrada de energia, conforme indicado na Tabela 6 da IEC 60601-1-2.
- Imunidade a quedas de tensão e interrupções na entrada de energia conforme indicado na Tabela 6 da IEC 60601-1-2.

RELATÓRIO DE EVENTOS ADVERSOS DA UE

Qualquer incidente grave ocorrido em relação ao seu dispositivo deve ser informado ao seu representante local da Starkey e à Autoridade Competente do Estado Membro em que você está estabelecido. Um incidente grave é definido como qualquer mau funcionamento, deterioração nas características e/ou desempenho do dispositivo ou inadequação no manual do usuário/rotulagem do dispositivo que possa levar à morte ou deterioração grave do estado de saúde do usuário, OU poderia fazê-lo em caso de reincidência.

Informações da FCC

AVISOS DE CONECTIVIDADE

FCC ID: EOA-24MFA

IC: 6903A-24MFA (Modelo 900)

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das regras da FCC e com os padrões RSS isentos de licença do ISED Canadá. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada do dispositivo.

NOTA: O fabricante não é responsável por qualquer interferência de rádio ou TV causada por modificações não autorizadas neste equipamento. Tais modificações podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Por meio deste, Starkey Laboratories, Inc. declara que o microfone remoto+ está em conformidade com os requisitos essenciais e outras provisões relevantes da Diretiva 2014/53/EU. Uma cópia da Declaração de Conformidade pode ser obtida nos seguintes endereços e em docs.starkeyhearingtechnologies.com.

Por meio deste, Starkey Laboratories, Inc. declara que o microfone remoto + está em conformidade com os Regulamentos de Equipamentos de Rádio do Reino Unido SI 2017 conforme alterado. Uma cópia da Declaração de Conformidade do Reino Unido pode ser obtida nos seguintes endereços e em docs.starkeyhearingtechnologies.com.

Informações regulatórias



Starkey Laboratories, Inc.
6700 Washington Ave. South
Eden Prairie, MN 55344 USA
www.starkey.com



Starkey Laboratories (Alemanha) GmbH
Weg beim Jäger 218-222
22335 Hamburg
Alemanha

Pessoa autorizada do Reino Unido:
Starkey Reino Unido
William F. Austin House
Pepper Rd, Hazel Grove
Stockport SK7 5BX, Reino Unido
www.starkey.co.uk



Os resíduos de equipamentos eletrônicos devem ser manuseados de acordo com as regulamentações locais.



ou



Consulte o manual de operações.



Manter seco.

Instruções para descarte de eletrônicos antigos

A Starkey Laboratories, Inc. incentiva, a UE exige e as leis de sua comunidade local podem exigir que seu microfone remoto + seja descartado por meio do processo local de reciclagem/descarte de eletrônicos.

As instruções abaixo são fornecidas para o benefício do pessoal de descarte/reciclagem. Inclua este manual ao descartar seu microfone remoto +.

SOMENTE PARA PESSOAL DE DESCARTE/RECICLAGEM

Este produto contém uma bateria de polímero de íons de lítio.

Para remover esta bateria:

- Desligue o microfone remoto +.
- Separe as metades do invólucro com uma pequena chave de fenda.
- Corte os fios da bateria da placa de circuito para evitar curto acidental.
- Afaste a bateria do compartimento usando uma lâmina larga e plana.

Tais modificações podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Símbolo	Significado do símbolo	Padrão aplicável	Número do símbolo
	Fabricante	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.1
	Representante autorizado na comunidade Europeia	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.2
	Data de fabricação	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.3
	Número de catálogo	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.6
	Número de série	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.7
	Dispositivo médico	BS EN ISO 15223-1:2021	5.7.7
	Mantenha seco	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.4
	Limite de temperatura	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.7
	Limitação de umidade	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.8
	Cuidado	BS EN ISO 15223-1:2021	5.4.4
	Sinal de alerta geral	EC 60601-1, N° referência tabela D.2, sinal de segurança 2	ISO 7010-W001
	Consulte o manual de instruções	EC 60601-1, N° referência tabela D.2, sinal de segurança 10	ISO 7010-M002
	Coletar separadamente	DIRETIVA 201 2/19/EU (WEEE)	Anexo IX
	Equipamento de Classe II	IEC 60417 N° referência tabela D.1	Símbolo 9 (IEC 60417- 5172)
	Marca de Conformidade Regulatória (RCM)	AS/NZS 4417.1:2012	N/A
	Marca Giteki	Lei de rádio Japonesa	N/A
	Corrente direta	IEC 60601-1 N° referência tabela D.1	IEC 60417-5031
	Símbolo de reciclagem	Diretiva 94/62/CE do parlamento europeu e do conselho	Anexo I-VII
	Importador	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.8
	Tradução	BS EN ISO 15223-1:2021	5.7.8

Certificações

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela resolução N° 715/2019 e atende aos requisitos técnicos aplicados.



Para mais informações, consulte o site da Anatel:
www.gov.br/anatel/pt-br/

Res. 680

“Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados”

[illegible]

[illegible][illegible]

Importado por:
Starkey do Brasil LTDA.
Rua Doutor Fernão Pompeu de Camargo, 832 – Jd. Leonor
Campinas/SP 13041-025



StarLink e Starkey são marcas comerciais da Starkey Laboratories, Inc.

A marca e os logos Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc.
e qualquer uso de tais marcas pela Starkey é feito sob licença.

©2023 Starkey Laboratories, Inc. Todos os direitos reservados. P00000363 11/23 BKL3169-02-PT-XX

Patente: www.starkey.com/patents

Versão 01/BR/2024