

Manual del usuario de su micrófono remoto + StarLink



Accesorio para:

Audífonos inalámbricos

P00000735

¡Enhorabuena por su nuevo micrófono remoto +!

Su micrófono remoto + mejora el habla para que pueda disfrutar de las conversaciones.

Y le conecta con el mundo que le rodea. Utilice este sencillo manual para comenzar.

Índice

1. Conozca su micrófono remoto +

Conozca su micrófono remoto + 3

Configure su micrófono remoto + 6

Utilice su micrófono remoto + 11

Guía de resolución de problemas 25

2. Orientación adicional

Uso previsto 32

Información de la FCC 36

Información regulatoria 37

Conozca su micrófono remoto +

Visión general

1. Botón multifunción

Controla el estado operativo del micrófono remoto +.

2. Luz indicadora de estado

Identifica el estado operativo del micrófono remoto +.

3. Micrófonos

- Capta audio (voz del altavoz) durante el uso.
- Capta su voz durante las llamadas telefónicas Bluetooth®.

4. Conector del receptor FM

Acepta receptores Europin FM.

5. Clip

Conecta el micrófono remoto + a la ropa o al cordón del hablante.

6. Luces indicadoras del modo de entrada

Identifican la fuente de audio.

7. Botón de modo de entrada


Cambia la fuente de audio.

8. Conector MicroUSB

- Permite recargar mediante cable USB a microUSB.
- Reproduce audio en línea a través de un cable opcional.

9. Botones para subir el volumen (+) y bajar el volumen (-)

Ajuste el volumen de la transmisión hacia arriba o hacia abajo.

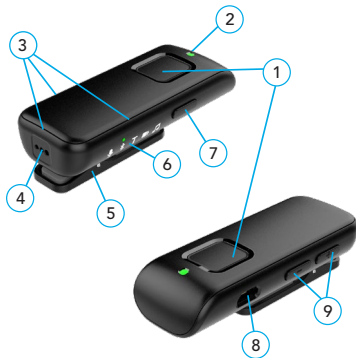

Configure su micrófono remoto + ENCENDIDO/APAGADO

Utilice el botón multifunción para **encender** o **apagar** su micrófono remoto +:

- **ENCENDIDO:** pulse el botón multifunción durante 3 segundos. Suelte cuando la luz indicadora de estado se encienda en verde.
- **APAGADO:** pulse el botón multifunción durante 3 segundos. Suelte cuando ya no aparezca la luz indicadora de estado verde.



Para emparejar con audífonos

Antes de utilizar el micrófono remoto + por primera vez, deberá emparejarlo con su(s) audífono(s). Esto permite que su

accesorio reconozca sus audífonos para que puedan funcionar juntos.

PASO 1: Encienda su micrófono remoto +.

PASO 2: Apague y encienda sus audífonos.

- **Para sistemas de audífonos CROS:** Apague los audífonos y el transmisor CROS. A continuación, **encienda** sus audífonos, pero deje el transmisor CROS **apagado**.

PASO 3: Empareje su micrófono remoto + con su(s) audífono(s):

1. Asegúrese de que sus audífonos no estén conectados a dispositivos Bluetooth cercanos:
 - **Desactive** el Bluetooth en su teléfono móvil.
 - **Apague** los accesorios inalámbricos que ya estén emparejados con sus audífonos.

- Coloque sus audífonos a 15 cm de su micrófono remoto +.
- Presione los botones Modo de entrada y Subir volumen (+) simultáneamente durante 7 segundos hasta que la luz indicadora de estado parpadee alternativamente en azul y rojo.



- Para un **conjunto** de audífonos:

1.er parpadeo de la luz indicadora de estado	2.º parpadeo de la luz indicadora de estado	Resultado del emparejamiento	Siguiente paso
1	2	Ambos audífonos emparejados	Completado
1	2	Solo se ha emparejado un audífono	Repita del 1 al 3 en el PASO 3
1	N/A	No hay audífonos emparejados	Repita del 1 al 4 en el PASO 3

- Para un **solo** audífono:

La luz indicadora de estado parpadea	Resultado del emparejamiento	Siguiente paso
1	Audífono emparejado	Completado
1	Audífono no emparejado	Repita del 1 al 3 en el PASO 3

Para emparejar con un dispositivo Bluetooth

Para que el micrófono remoto + reciba audio de forma inalámbrica desde un dispositivo Bluetooth, primero debe vincularlos.



PASO 1: Encienda su micrófono remoto +.

1. Presione los botones Modo de entrada y Bajar volumen (-) simultáneamente durante 7 segundos hasta que la luz indicadora de estado parpadee rápidamente en azul.

PASO 2: Ponga su dispositivo Bluetooth en modo de emparejamiento.

1. Cuando aparezca micrófono remoto + en su dispositivo Bluetooth, selecciónelo.

NOTA: Para obtener más detalles, consulte la guía de operaciones del dispositivo Bluetooth.

2. La luz indicadora de estado del micrófono remoto + mostrará el estado de emparejamiento

- Emparejamiento correcto = luz indicadora de estado verde durante 2 segundos
- Emparejamiento erróneo = luz indicadora de estado roja durante 2 segundos

Para usar su micrófono remoto +

PASO 1: Compruebe que sus audífonos estén encendidos.

Recordatorio: antes de transmitir audio por primera vez, asegúrese de que sus audífonos estén emparejados con su micrófono remoto +. Consulte la pág. 10.

PASO 2: Inicie/detenga la transmisión de audio (la voz de un hablante).

Realice una de las siguientes acciones:

- **Encienda el micrófono remoto +:**
La transmisión de audio se inicia automáticamente en el audífono.

- **Aplicación móvil del audífono:**

Abra la aplicación en su teléfono móvil o tableta. Seleccione la opción para iniciar/detener la transmisión desde la pantalla **Accesorios**.

- **Control de usuario del audífono:**

Si su profesional de atención auditiva o audioprotesista lo configura, un gesto específico (por ejemplo, una pulsación prolongada en un control de usuario) puede iniciar o detener la transmisión.

- **Control remoto:**

Si su profesional de atención auditiva lo ha configurado, pulse el botón **Favorito**.



NOTA: Es posible que se reproduzca un indicador audible en sus audífonos para indicar el inicio/parada de la transmisión de audio.

PASO 3: Ajuste el volumen de transmisión presionando el botón Subir volumen (+) o Bajar volumen (-) en el micrófono remoto +.



PASO 4: Ajuste la fuente de audio.

1. Para cambiar el audio, pulse y suelte el **botón Modo de entrada**. Presione el botón repetidamente hasta llegar a la fuente de audio deseada.

Para obtener más detalles sobre las opciones de fuente de audio, consulte *Cómo ayuda su micrófono remoto +* en la pág. 17.

Icono en el micrófono remoto +	Fuente de audio en uso
	Micrófono remoto +
	Teléfono y audio Bluetooth
	Sistema de lazo
	Sistema de FM
	En línea

2. Para acceder al audio desde un dispositivo Bluetooth, debe estar conectado al micrófono remoto + (indicado por la luz indicadora de estado azul que parpadea lentamente).



- Antes de transmitir audio Bluetooth por primera vez, el dispositivo Bluetooth debe estar emparejado con el micrófono remoto +. Consulte *Para emparejar con un dispositivo Bluetooth* en la pág. 10.



NOTA: El alcance de funcionamiento inalámbrico típico es de hasta 20 m. Puede verse reducido por factores ambientales (p. ej., obstrucciones, interferencia, posición de las personas). Es posible que haya rangos de funcionamiento más amplios; sin embargo, la calidad del audio o de la conexión puede disminuir.

PASO 5: Para ajustar el volumen de la transmisión, presione el botón + o –.



Luz indicadora de estado

La luz indicadora de estado identifica cómo está funcionando actualmente el micrófono remoto +:


Estado operativo	Estado de la luz indicadora de estado
Apagado	No aparece ninguna luz indicadora de estado verde
Encendido sin conexión Bluetooth activa	Verde lento intermitente
Encendido con conexión Bluetooth activa	Azul lento intermitente
Batería baja	Rojo lento intermitente
Mal funcionamiento o problema eléctrico	Rojo fijo

Cómo usar el micrófono remoto +

Su micrófono remoto + se puede fijar a la ropa o al cordón que lleva la persona que habla. Cuando su fuente de audio está configurada en el micrófono remoto  o en un dispositivo Bluetooth en modo teléfono , es mejor colocarlo a 20 cm de la boca de la persona.

Instrucciones para llevarlo en la ropa:

1. Apriete el clip del micrófono remoto + hasta que se abra.
2. Deslice la abertura del clip en la ropa.
3. Suelte el clip.
4. Asegúrese de que su micrófono remoto + esté bien sujeto a la ropa.

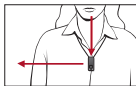

Instrucciones para el cordón (opcional):

1. Apriete el clip del micrófono remoto + hasta que se abra.
2. Deslice el lazo del cordón en la abertura del clip. Levántelo hacia la parte superior del clip.
3. Suelte el clip.
4. Asegúrese de que su micrófono remoto + esté bien sujeto al cordón.
5. Coloque el cordón alrededor del cuello.



Cómo ayuda su micrófono remoto +

Su micrófono remoto + está diseñado para transmitir audio desde diferentes fuentes de audio directamente a sus audífonos inalámbricos. Cuando lo usa un hablante distante en ambientes ruidosos, funciona como un dispositivo de

asistencia auditiva. El micrófono remoto + también puede interactuar con las siguientes fuentes de audio.

Micrófono remoto +

El micrófono remoto + optimiza automáticamente la configuración del micrófono en función de su orientación física.



- Ayuda a focalizarse en una persona cuando hay ruido de fondo. Cuando lo usa un hablante, el micrófono remoto + prioriza automáticamente el sonido desde arriba mientras reduce los niveles de sonido que provienen de otras direcciones.
- Puede escuchar varios



hablantes cercanos en ambientes silenciosos cuando se coloca horizontalmente en su clip y recibe sonido que proviene de todas las direcciones.

Teléfono y audio Bluetooth

- Realice llamadas telefónicas en las que (A) escuche la llamada telefónica en sus audífonos y (B) el micrófono remoto + capte su voz y la transmita al teléfono. *(Perfil manos libres)*
- Escuche música en la que escuche el audio transmitido en sus audífonos. *(Perfil A2DP)*



- Funcionalidad general de Bluetooth:

Emparejar con dispositivos Bluetooth	El micrófono remoto + puede emparejarse con hasta 8 dispositivos Bluetooth.
Conectar con un dispositivo Bluetooth	Cuando ambos dispositivos de micrófono remoto + Bluetooth están encendidos y dentro del alcance operativo inalámbrico, deberían conectarse automáticamente y la luz indicadora de estado de micrófono remoto + debería parpadear lentamente en azul.
Escuchar música (u otro audio transmitido)	Asegúrese de que el modo de entrada micrófono remoto + esté configurado en fuente de audio Bluetooth. Al reproducir audio en un dispositivo Bluetooth, se enrutará automáticamente a sus audífonos.
Cambiar a fuente de audio Bluetooth	Cuando el micrófono remoto + detecta una llamada telefónica entrante o saliente, cambiará automáticamente a la fuente de audio Bluetooth.
Aceptar llamada entrante	Cuando escuche el tono de llamada en sus audífonos, presione brevemente el botón multifunción en su micrófono remoto +.

Rechazar llamada entrante	Cuando escuche el tono de llamada en sus audífonos, mantenga presionado el botón multifunción en su micrófono remoto + durante más de 2 segundos; suelte el botón una vez que se detenga el tono de llamada.
Finalizar llamada	Pulse brevemente el botón multifunción en su micrófono remoto +.
Transferir llamada entre teléfono y micrófono remoto +	Para realizar la llamada en el propio teléfono, mantenga pulsado el botón multifunción en su micrófono remoto + durante más de 2 segundos. Para volver a mover la llamada al micrófono remoto +, mantenga pulsado el botón multifunción de nuevo durante más de 2 segundos. 
Hacer una llamada saliente	Marque el número de teléfono en su dispositivo Bluetooth. La llamada telefónica se dirigirá automáticamente a sus audífonos.

Sistema de circuito T

El micrófono remoto + puede recibir audio de un sistema de bucle (disponible en algunos edificios públicos). Usar el micrófono remoto + en orientación vertical proporciona el mejor rendimiento. En este modo, el micrófono remoto + desactiva las conexiones Bluetooth. Al salir de este modo, el micrófono remoto + intentará restablecer una conexión Bluetooth.



NOTA: Puede ser necesaria una reconexión manual. Para obtener más detalles, consulte la guía de operaciones del dispositivo Bluetooth.

Sistema de FM

Cuando se conecta un transmisor de FM opcional a través del conector Europin, el micrófono remoto + puede recibir audio de un sistema FM. En este modo, puede usar



el micrófono remoto + o colocarlo en una superficie estable cercana.

En línea

Cuando se conecta un cable de entrada de línea opcional a través del conector microUSB, el micrófono remoto + puede obtener audio de un teléfono móvil, reproductor de MP3, tableta u ordenador que no tenga Bluetooth habilitado. En este modo, es mejor colocar el micrófono remoto + en una superficie estable cercana.



Para cargar su micrófono remoto +

1. Conecte el extremo microUSB del cable de carga a la toma microUSB del micrófono remoto +.
2. Conecte el extremo microUSB del cable de carga al conector del adaptador de alimentación.



3. Conecte el adaptador de corriente a una fuente de alimentación externa, como una toma de corriente de pared.
4. Compruebe el estado de carga utilizando la luz indicadora de estado del micrófono remoto +.

Estado de alimentación	Estado de la luz indicadora de estado	Estado de carga
Apagado	Verde fijo	Recargando
Apagado	Ninguno	Completamente cargado
Encendido	Verde fijo interrumpido brevemente por otros comportamientos de la luz indicadora de estado	Recargando
Encendido	Ninguno	Completamente cargado

NOTA: Cargar su micrófono remoto + puede tardar más si está transmitiendo audio. La carga suele ser más rápida cuando el micrófono remoto + está apagado.

Guía de resolución de problemas

¿Tiene problemas con su micrófono remoto +? Pruebe estos consejos. Si los problemas continúan, póngase en contacto con su profesional de atención auditiva.

Síntoma	Posibles causas	Soluciones
Uno (o ambos) audífonos deja de transmitir audio inesperadamente.	Los audífonos pueden estar al borde del alcance inalámbrico.	Acérquese al micrófono remoto +.
	El nivel de batería del audífono ya no admite la transmisión de audio.	• Sustituya la batería de su audífono por una nueva. • Recargue su audífono, si corresponde.

Síntoma	Posibles causas	Soluciones
Uno (o ambos) audífonos deja de transmitir audio inesperadamente.	Los objetos grandes, como muebles o una pared, pueden degradar la señal.	Para un mejor rendimiento, sus audífonos deben estar dentro de la línea de visión del micrófono remoto +.
	Se perdió la conexión inalámbrica con micrófono remoto +.	Reinicie la transmisión de audio. Consulte <i>Iniciar/detener la transmisión de audio</i> en la pág. 11.
La calidad del audio transmitido está distorsionada.	Nivel bajo de batería en el micrófono remoto +.	Recargue el micrófono remoto +.
	El volumen de la fuente de audio no es óptimo.	Ajuste el nivel de volumen de la fuente de audio hasta lograr una mejor calidad de sonido.

Síntoma	Posibles causas	Soluciones
La calidad del audio transmitido es inconsistente.	Modo Bluetooth: El dispositivo Bluetooth puede estar en el borde del alcance inalámbrico.	Acerque el dispositivo Bluetooth al micrófono remoto +.
	Modo de Bucle: Es posible que el micrófono remoto + no esté colocado para una transmisión óptima.	Vuelva a orientar el micrófono remoto + a una posición vertical.
El audio transmitido es demasiado alto o demasiado suave.	El volumen transmitido desde el micrófono remoto + al audífono no es óptimo.	Presione el botón de volumen + o – en el micrófono remoto +.
	El volumen de la fuente de audio no es óptimo.	Ajuste el nivel de volumen de la fuente de audio hasta lograr una mejor calidad de sonido.

Síntoma	Posibles causas	Soluciones
Modo de micrófono remoto: Dificultad de escuchar al hablante en ambientes ruidosos.	El micrófono remoto + puede estar demasiado lejos del hablante.	Acerque el micrófono remoto + a la boca del hablante.
	El micrófono remoto + puede estar cubierto por ropa o mal colocado.	Proporcione acceso claro desde el micrófono remoto + a la voz del hablante.
Modo Bluetooth: La persona que llama no puede escuchar su voz durante las llamadas telefónicas.	El micrófono remoto puede estar demasiado lejos de su boca.	Acerque el micrófono remoto + a su boca o hable más alto.
Modo de Bucle: Las llamadas telefónicas no se escuchan con los audífonos.	Las conexiones Bluetooth con teléfonos móviles se desactivan en el modo de lazo.	Cambie a otra fuente de audio. Restablezca su conexión Bluetooth, si es necesario.

Síntoma	Posibles causas	Soluciones
El LED parpadea lentamente en verde o azul, pero no se escucha ningún sonido transmitido en los audífonos.	Los audífonos no están listos para recibir transmisión de audio.	Reinicie la transmisión de audio. Consulte <i>Iniciar/detener la transmisión de audio</i> en la pág. 11.
La luz indicadora de estado parpadea lentamente en verde o azul, pero no se escucha ningún sonido transmitido en los audífonos.	Los audífonos no están emparejados con el micrófono remoto +.	Siga los pasos de <i>Para emparejar con audífonos</i> en la pág. 6.
	No hay señal de audio entrante disponible.	• Encienda la fuente de audio electrónica. • Desactive el silencio o aumente el volumen en la fuente de audio electrónica. • Asegúrese de que el lazo o el sistema FM estén presentes.

Síntoma	Posibles causas	Soluciones
La luz indicadora de estado es de color rojo fijo.	Posible condición de error.	Apague el micrófono remoto +, espere 30 segundos y luego enciéndalo.
La luz indicadora del modo de entrada parpadea rápidamente.	Algo falta en la fuente de audio actual.	Conecte el cable de entrada de línea, conecte el receptor de FM o restablezca su conexión Bluetooth.
La luz indicadora del modo de entrada no está iluminada.	La luz indicadora del modo de entrada se apaga para conservar la energía de la batería.	Presione el botón modo de entrada para iluminar la luz indicadora del modo de entrada.
El modo de entrada deseado no está disponible.	Falta algo en la entrada deseada.	Conecte el cable de entrada de línea, conecte el receptor de FM o restablezca su conexión Bluetooth.

Síntoma	Posibles causas	Soluciones
No se puede emparejar con más de un dispositivo Bluetooth.	El micrófono remoto + ya está en una conexión Bluetooth activa.	Siga los pasos de <i>Para emparejar con un dispositivo Bluetooth</i> en la pág. 10.
Se pierde inesperadamente el audio del televisor (producto opcional) mientras la luz indicadora de estado parpadea lentamente en azul en el micrófono remoto +.	Algunos sonidos de dispositivos Bluetooth tienen mayor prioridad que el audio del transmisor para TV.	Salga del modo de entrada Bluetooth en el micrófono remoto +.

Uso previsto



El micrófono remoto + es un accesorio para un audífono inalámbrico de conducción aérea de 2,4 GHz. Está diseñado como un transmisor inalámbrico de sonido desde una variedad de fuentes de audio a audífonos de conducción aérea. Cuando lo usa un hablante distante en ambientes ruidosos, funciona como un dispositivo de asistencia auditiva. También se conecta a señales de un bucle, señales de FM cuando se conecta un receptor de FM Europin, audio de entrada de línea analógica y audio Bluetooth estándar.

El micrófono remoto + está clasificado como pieza aplicada de tipo B según la norma IEC 60601-1 para instrumentos médicos.

El micrófono remoto + está diseñado para cumplir con las normas más estrictas de compatibilidad electromagnética internacional. Sin embargo, es posible que experimente igualmente interferencias causadas por perturbaciones en la línea eléctrica, detectores de metales en aeropuertos, campos electromagnéticos de otros dispositivos médicos, señales de radio y descargas electrostáticas.

El micrófono remoto + está diseñado para limpiarse con un paño húmedo humedecido con agua jabonosa.

Si utiliza otros dispositivos médicos o lleva dispositivos médicos implantables como desfibriladores o marcapasos y le preocupa que su micrófono remoto + pueda causar interferencias con su dispositivo médico, póngase en contacto con su médico o con el fabricante de su dispositivo médico para obtener información sobre el riesgo de interferencia. El micrófono remoto + no debe utilizarse durante un procedimiento de resonancia magnética ni en una cámara hiperbárica. Su micrófono remoto + no está certificado formalmente para funcionar en zonas con riesgo de explosión, como en minas de carbón o ciertas plantas químicas.

Beneficio clínico

El accesorio en sí no proporciona un beneficio clínico directo. Proporciona un beneficio clínico indirecto al permitir que los

dispositivos matriz (audífonos inalámbricos) logren su propósito previsto.


Uso en aviones

El micrófono remoto + no debe utilizarse en aviones a menos que el personal de vuelo lo permita específicamente.

Uso internacional

El micrófono remoto + está aprobado para funcionar a una radiofrecuencia que es específica a su país o región y puede que no esté aprobado para su uso fuera de su país o región.

Tenga en cuenta que el funcionamiento durante viajes internacionales puede causar interferencias con otros dispositivos electrónicos, u otros dispositivos electrónicos pueden causar interferencias con su micrófono remoto +.

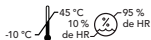

Su micrófono remoto + está diseñado para funcionar, almacenarse y transportarse dentro

de un rango de temperatura de -10 a 45 °C y un rango de humedad relativa del 10 al 95 %, y límites de altitud entre 70 y 106 kPa (equivalente a altitudes desde 380 m por debajo del nivel del mar hasta 3000 m).

Las normativas nos obligan a proporcionar las siguientes advertencias:

⚠ ADVERTENCIA: Debe evitarse el uso del micrófono remoto + directamente junto a otros equipos electrónicos, ya que esto podría dar lugar a un rendimiento inadecuado. Si dicho uso es necesario, compruebe si sus audífonos y el resto del equipo funcionan con normalidad.

⚠ ADVERTENCIA: El uso de accesorios, componentes o piezas de repuesto que no sean los proporcionados por el fabricante del micrófono remoto + podría provocar un aumento de las emisiones electromagnéticas y una disminución de la inmunidad electromagnética, lo cual puede derivar en una degradación del rendimiento.

⚠ ADVERTENCIA: Si se utiliza un equipo portátil de comunicaciones por radiofrecuencia a menos de 30 cm del micrófono remoto +, podría producirse una degradación del rendimiento de su audífono. Si esto ocurre, aléjese del equipo de comunicaciones.

Aunque el micrófono remoto + no está certificado formalmente (con clasificación IP) para la protección contra la entrada de polvo o agua, según IEC 60529, se ha probado al nivel IP 5X. Esto significa que el micrófono remoto + está protegido del polvo.

La batería del micrófono remoto + no se puede sustituir. No intente sustituir la batería. El micrófono remoto + no contiene ninguna pieza que el usuario pueda reparar. No lo abra ni lo modifique.

No conecte el micrófono remoto + a ningún dispositivo que no se describa en este manual.

La vida útil prevista del micrófono remoto + es de 3 años.

Descripción técnica inalámbrica

El micrófono remoto + de Starkey Laboratories, Inc. opera en la banda de 2,4-2,4835 GHz con una potencia radiada efectiva máxima de 8 dBm con un tipo de modulación de transmisión de 1M12FXD y un ancho de banda de 1,1 MHz. La sección receptora de la radio tiene un ancho de banda de 2 MHz.

El micrófono remoto + ha sido probado y ha superado las siguientes pruebas de emisiones e inmunidad:

- Requisitos de emisiones radiadas y conducidas IEC 60601-1-2 para un dispositivo de Grupo 1 y Clase B como se indica en la CISPR 11.
- Distorsión armónica y fluctuaciones de tensión que afectan a la fuente de entrada de alimentación según se indica en la Tabla 2 de la IEC 60601-1-2.

- Inmunidad a RF radiada a un nivel de campo de 10 V/m entre 80 MHz y 2,7 GHz, así como niveles de campo más altos de dispositivos de comunicaciones según se indica en la Tabla 9 de la IEC 60601-1-2.
- Inmunidad a los campos magnéticos de frecuencia de potencia a un nivel de campo de 30 A/m y campos magnéticos de proximidad como se indica en la Tabla 11 de la IEC 60601-1-2.
- Inmunidad a niveles de ESD de +/- 8 kV de descarga conducida y +/- 15 kV de descarga de aire.
- Inmunidad a transitorios eléctricos rápidos en la entrada de alimentación a un nivel de +/- 2 kV a una tasa de repetición de 100 Hz.
- Inmunidad a sobretensiones en la entrada de alimentación de +/- 1 kV entre fases.
- Inmunidad a perturbaciones conducidas inducidas por campos de RF en la entrada de alimentación según se indica en la Tabla 6 de la IEC 60601-1-2.
- Inmunidad a caídas e interrupciones de tensión en la entrada de alimentación según se indica en la Tabla 6 de la IEC 60601-1-2.

NOTIFICACIÓN DE ACONTECIMIENTOS ADVERSOS EN LA UE

Cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con su dispositivo debe notificarse a su representante local de Starkey y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentre. Un incidente grave se define como cualquier mal funcionamiento, deterioro de las características y/o rendimiento del dispositivo, o error en el manual del usuario/etiquetado del dispositivo que pueda provocar la muerte o deterioro grave del estado de salud del usuario O podría hacerlo con la recurrencia.

Información de la FCC

AVISOS INALÁMBRICOS

ID de la FCC: EOA-24MFA

IC: 6903A-24MFA (Modelo 900)

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC y con los estándares RSS exentos de licencia de ISED Canada. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

NOTA: El fabricante no se hace responsable de ninguna interferencia de radio o televisión causada por modificaciones no autorizadas en este equipo. Dichas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Por la presente, Starkey Laboratories, Inc. declara que el micrófono remoto + cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE. Se puede obtener una copia de la Declaración de conformidad en las siguientes direcciones y en docs.starkeyhearingtechnologies.com.

Por la presente, Starkey Laboratories, Inc. declara que el micrófono remoto + cumple con la normativa SI 2017 sobre equipos de radio del Reino Unido, en su versión modificada. Se puede obtener una copia de la Declaración de conformidad en las siguientes direcciones y en docs.starkeyhearingtechnologies.com.

Información regulatoria



Starkey Laboratories, Inc.
6700 Washington Ave. South
Eden Prairie, MN 55344 EE. UU.
www.starkey.com



Starkey Laboratories (Alemania) GmbH
Weg beim Jäger 218-222
22335 Hamburgo
Alemania

Persona autorizada del
Reino Unido:
Starkey UK
William F. Austin House
Pepper Rd, Hazel Grove
Stockport SK7 5BX, Reino
Unido
www.starkey.co.uk



Los residuos de equipos electrónicos deben manipularse de acuerdo con las normativas locales



Consulte el manual del usuario



Mantener seco

Instrucciones para desechar equipos electrónicos que no necesite

Starkey Laboratories, Inc. recomienda, la UE exige, y las leyes de su comunidad local pueden exigir, que su micrófono remoto + se deseche mediante el proceso local de reciclaje/eliminación de productos electrónicos.

Las siguientes instrucciones se proporcionan para conveniencia del personal de eliminación/reciclaje. Incluya este manual al desechar el micrófono remoto +.

SOLO PARA EL PERSONAL DE ELIMINACIÓN/RECICLAJE

Este producto contiene una batería de polímero de iones de litio.

Para extraer esta batería:

- Apague el micrófono remoto +.
- Separe las mitades de la carcasa con un destornillador pequeño.
- Corte los cables de la batería de la tarjeta de circuitos para evitar cortocircuitos accidentales.
- Haga palanca para separar la batería de la carcasa con una hoja plana ancha.

Dichas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Símbolo	Significado del símbolo	Norma aplicable	Número de símbolo
	Fabricante	BS EN ISO 15223-1:2021	8,444 mm
	Representante autorizado en la Comunidad Europea	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.2
	Fecha de fabricación	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.3
	Número de catálogo	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.6
	Número de serie	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.7
	Dispositivo médico	BS EN ISO 15223-1:2021	5.7.7
	Mantener seco	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.4
	Limite de temperatura	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.7
	Limitación de humedad	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.8
	Precaución	BS EN ISO 15223-1:2021	5.4.4
	Señal de advertencia general	EC 60601-1, n.º de referencia. Tabla D.2, Señal de seguridad 2	ISO 7010-W001
	Consulte el manual/folleto de instrucciones	EC 60601-1, n.º de referencia. Tabla D.2, Señal de seguridad 10	ISO 7010-M002
	Recoger por separado	DIRECTIVA 201 2/19/ UE (WEEE)	Anexo IX
	Equipo de clase II	IEC 60417 n.º de referencia Tabla D.1	Símbolo 9 (IEC 60417-5172)
	Marca de cumplimiento normativo (RCM)	AS/NZS 4417.1:2012	N/A
	Giteki Mark	Japanese Radio Law (Ley de radio japonesa)	N/A
	Corriente continua	IEC 60601-1 n.º de referencia Tabla D.1	IEC 60417-5031
	Símbolo de reciclaje	Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo	Anexo I-VII
	Importador	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.8
	Traducción	BS EN ISO 15223-1:2021	5.7.8



P00000735



StarLink y Starkey son marcas comerciales de Starkey Laboratories, Inc.

La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Starkey se realiza bajo licencia.

© 2024 Starkey Laboratories, Inc. Todos los derechos reservados.
P00000735 10/24 BKLT3169-03-LS-XX

Patente: www.starkey.com/patents