

Manual do usuário do seu microfone de mesa StarLink



Acessório para:

Aparelhos auditivos com conectividade

Parabéns pelo seu novo microfone de mesa!

Seu microfone de mesa foi projetado para melhorar a audição em locais com ruído, permitindo que você consiga focar no orador principal em locais com várias pessoas, como reuniões ou encontros familiares e conectar você com o mundo ao seu redor. Use este manual simples para começar.

Conteúdo da embalagem:

- Microfone de mesa
- Adaptador de energia
- Cabo USB para microUSB
- Opções de plugue para:
 - Estados Unidos
 - Europa
 - Austrália
 - Reino Unido
- Bolso para transporte
- Fones de ouvido com oliva
- Cabo de transmissão da TV
- Cordão para pescoço
- Capa de silicone
- Manual do usuário

Índice

1. Conheça seu microfone de mesa

Conhecendo seu microfone de mesa.....	3
Configurando seu microfone de mesa.....	6
Usando seu microfone de mesa.....	8
Carregando seu microfone de mesa.....	17

2. Guia de resolução de problemas.....19

3. Orientações adicionais

Uso pretendido.....	22
Informações da FCC.....	23
Informações regulatórias.....	24

4. Certificações.....26

Conhecendo seu microfone de mesa

Visão geral

1. Conector MicroUSB

- Recarregável via cabo USB para MicroUSB.
- Transmissão de áudio via cabo de transmissão da TV.

2. Teclas de toque direcionais

Seleção manual de direção única ou dupla.

3. Segmentos

- Indica a(s) direção(ões) selecionada(s).
- Indicadores operacionais:
 - Status de carregamento
 - Energia
 - Estado da bateria
 - Status de emparelhamento
 - Volume
 - Conectividade de entrada/saída

4. Indicador de modo automático

- Ligado indica o modo automático.
- Desligado indica o modo surround ou manual.

5. Botão de mudança de modo

Alterna entre automático e modos surround.

6. Botão de energia

Liga/desliga o microfone de mesa.

7. Conector de áudio de 3,5 mm

Para conectar fones de ouvido com fio.

8. Botões de aumentar (+) e diminuir (-) o volume

Ajustar o nível de volume.

9. Microfones


Oito microfones embutidos para escolher aumentar a voz do orador.

10. Botão de emparelhamento do aparelho auditivo

Emparelha e conecta ao(s) aparelho(s) auditivo(s).


11. Interface magnética para suporte

Para usar no modo de microfone remoto.

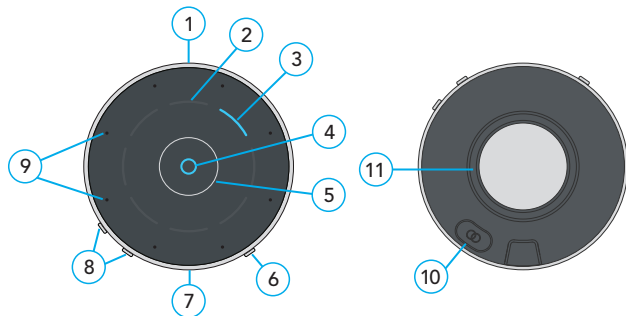

Visão geral dos fones de ouvido com fio

- 1. Olivas (pequena/média/grande)**
Para ajuste pessoal.
- 2. Botões aumentar (+) e diminuir o volume (-)**
Ajusta o nível de volume.
- 3. Botão de mudança de modo**
Alterna entre automático e modos surround.
- 4. Plugue de áudio de 3,5 mm**
Conecta o microfone de mesa a uma entrada de áudio de 3,5 mm.

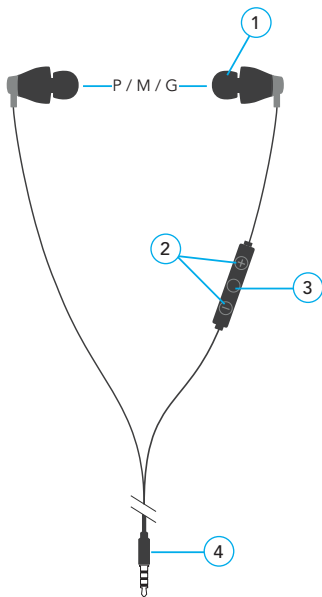


Configurando seu microfone de mesa

Ligar/desligar

Use o botão liga/desliga para ligar ou desligar o seu microfone de mesa:

- **Ligar** – aperte o botão liga/desliga por 1 segundo e solte. Os leds verdes indicam o nível de carga da bateria.
- **NOTA:** Se o microfone de mesa precisar ser carregado, consulte “Carregando seu microfone de mesa” na pág. 17.
- **Desligar** – pressione o botão liga/desliga por 1 segundo e solte.

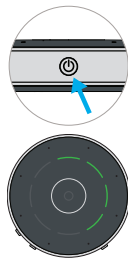

Para emparelhar com aparelhos auditivos:

Antes de usar seu microfone de mesa pela primeira vez, você precisará emparelhá-lo com seu(s) aparelho(s) auditivo(s). Isso permite que seu acessório reconheça seus aparelhos auditivos para que possam trabalhar juntos.


PASSO 1: Ligue seu microfone de mesa.

PASSO 2: Desligue e ligue seus aparelhos auditivos.

- **Para sistemas de aparelhos auditivos CROS:** Desligue seus aparelhos auditivos e o transmissor CROS. Em seguida, **ligue** seus aparelhos auditivos, mas deixe o transmissor CROS **desligado**.

PASSO 3: Emparelhe seu microfone de mesa com seu(s) aparelho(s) auditivo(s): garanta que seus aparelhos auditivos não estejam conectados próximos de dispositivos Bluetooth®:

- **Desligue** o Bluetooth do seu celular.
 - **Desligue** qualquer acessório com conectividade já emparelhado com seus aparelhos auditivos.
2. Coloque seus aparelhos auditivos dentro de 6 polegadas (15 cm) do seu microfone de mesa.
 3. Pressione o botão de emparelhamento do aparelho auditivo por 2 segundos e coloque o microfone de mesa virado para cima em uma superfície estável. Os leds azuis piscando indicam que o Bluetooth® está pronto para emparelhar.

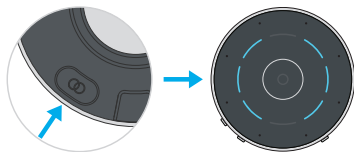

4. Para um **par** de aparelhos auditivos:

Leds esquerdos	Leds direitos	Resultado do emparelhamento	Próxima etapa
(	)	Ambos os aparelhos auditivos emparelhados.	Completo
(	)	Apenas o aparelho auditivo esquerdo emparelhado.	Repita as etapas 1-3 do passo 3
(	)	Apenas o aparelho auditivo direito emparelhado.	Repita as etapas 1-3 do passo 3
(	)	Nenhum aparelho auditivo emparelhado.	Repita as etapas 1-3 do passo 3

5. Para um **único** aparelho auditivo:

Leds esquerdos	Leds direitos	Resultado do emparelhamento	Próxima etapa
(		Aparelho auditivo esquerdo emparelhado.	Completo
	)	Aparelho auditivo direito emparelhado.	Completo
(		Aparelho auditivo esquerdo não emparelhado.	Repita as etapas 1-3 do passo 3
	)	Aparelho auditivo direito não emparelhado.	Repita as etapas 1-3 do passo 3

Feito! Veja abaixo para começar a usar seu microfone de mesa.

Usando seu microfone de mesa

O seu microfone de mesa é um dispositivo auxiliar da audição e transmissor de TV. Ele transmite áudio diretamente para seus aparelhos auditivos com conectividade

Modos de uso chave:

- **Microfone de mesa:** transmite a voz de destino de uma direção selecionada nos modos abaixo. Para obter detalhes, consulte "transmissão de conversas" na pág. 13.
 - Automático
 - Manual
 - Direção única
 - Direção dupla

- Surround
- **Microfone remoto:** Transmite a voz da pessoa que usa o microfone de mesa. Para obter detalhes, consulte “*como colocar seu microfone de mesa*” na pág. 13.
- **Transmissor de TV:** Transmite áudio via entrada microUSB line-in. Para detalhes, consulte “*transmissão de áudio da TV*” na pág. 16.

Para usar seu microfone de mesa:

PASSO 1: Verifique se seus aparelhos auditivos estão ligados.

Lembrete – Antes de transmitir áudio pela primeira vez, certifique-se de que seus aparelhos auditivos estejam emparelhados com seu microfone de mesa. Consulte a pág. 6.

PASSO 2: Para iniciar/parar a transmissão de áudio faça um dos seguintes passos:

- **Ligue o microfone de mesa:** A transmissão de áudio automaticamente começa no aparelho auditivo.
- **Aplicativo para aparelhos auditivos:** Abra o aplicativo em seu celular ou tablet. Selecione a opção para iniciar/parar a transmissão na tela **acessórios**.

NOTA: Normalmente o alcance operacional da conectividade é de até 60 pés (20 m). Isto pode ser encurtado por fatores ambientais (por exemplo, obstruções, interferências, posição das pessoas). Faixas operacionais mais amplas podem ser possíveis, no entanto, a qualidade do áudio ou da conexão pode diminuir.

• Controle remoto com conectividade:

Se configurado pelo seu profissional da audição, pressione o botão favorito.



• Controle do usuário do aparelho auditivo:

Se configurado pelo seu profissional da audição, um gesto específico (por exemplo, um toque longo em um controle de usuário) pode iniciar/parar a transmissão.

NOTA: Um indicador sonoro pode tocar em seus aparelhos auditivos para sinalizar o início/parada da transmissão de áudio.

PASSO 3: Ajuste o volume da transmissão. Faça um dos seguintes passos:


- Pressione o **botão aumentar (+) ou diminuir (-)** volume no microfone de mesa.
- Mova o **controle deslizante de volume** na tela acessórios do seu aplicativo móvel compatível.
- Pressione o **botão favorito** em seu **controle remoto** com conectividade.*
- Pressione (ou toque) **nos controles do usuário do seu aparelho auditivo**.*

*O controle do seu microfone de mesa usando esta função deve ser configurado pelo seu profissional da audição.


Segmentos

Os segmentos identificam como seu o microfone de mesa está operando no momento.

Operacional

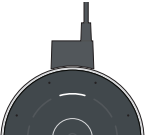	Orientação do produto Para melhor desempenho, tenha certeza de que os botões de volume e ligar/desligar do microfone de mesa estejam direcionados para você.
	Line-in Led superior branco indica conexão line-in (por exemplo, áudio da TV).
	Line-out Led inferior branco piscando indica conexão line-out (fones de ouvido).
	Volume + O led superior branco pisca quando o volume é aumentado.
	Volume - O led inferior branco pisca quando o volume é diminuído.

Emparelhamento do aparelho auditivo

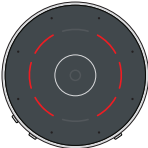	Leds azuis piscando Procurando por aparelho(s) auditivo(s).
	Leds verdes piscando Emparelhamento do aparelho auditivo bem-sucedido.
	Leds vermelhos piscando Emparelhamento do aparelho auditivo mal sucedido.


Consulte a pág. 6 para obter detalhes sobre como emparelhar um conjunto de aparelhos auditivos ou um único aparelho auditivo.

Transmissão de conversas

	Automática Indicador de modo automático (O) azul sólido. O led azul indica a direção de escuta ativa.
	Manual único/duplo Um ou dois leds azuis indicam a direção de escuta selecionada.
	Surround Todos os leds azuis indicam escuta em todas as direções.

Colocando o microfone de mesa

Seu microfone de mesa pode ser usado em um cordão junto ao suporte fornecido, utilizado pela pessoa que fala. É melhor colocá-lo a 20 cm da boca do orador.

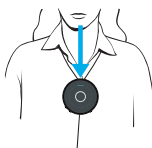

Instruções do cordão:

1. Prenda o gancho magnético na parte de trás do microfone de mesa. Certifique-se de que o suporte esteja inserido e preso corretamente.
2. Coloque o cordão em volta do pescoço. Para ajustar o comprimento, segure o cilindro e puxe o fecho.
3. Quando o microfone de mesa é usado pelo orador, o indicador superior acende por 3 segundos.



Como o seu microfone de mesa pode ajudar

Modos de transmissão de conversa

O microfone de mesa é um produto versátil e inteligente. Ele segue o orador principal em ambientes silenciosos ou ruidosos automaticamente para fornecer a melhor compreensão de fala possível. O microfone de mesa permite substituir o modo automático e selecionar manualmente até dois oradores do grupo. O modo surround é otimizado para grandes reuniões em grupo em ambientes silenciosos. Além disso, o microfone de mesa pode ser usado por um orador distante em ambientes ruidosos.


Sobre a mesa

Coloque seu microfone de mesa no meio de uma mesa para ouvir um grupo de pessoas. Para melhor compreensão da fala, sempre aproxime seu microfone de mesa o mais próximo possível do(s) parceiro(s) de conversa.

	Automático Quando o indicador do modo automático acende, o microfone de mesa segue o orador principal automaticamente. Se o indicador do modo automático estiver desligado, aperte a tecla de toque automático/surround para ativá-la.
	Orador único manual Toque em qualquer led para focar em um orador específico.
	Orador duplo manual Toque e segure outro led durante um segundo para focar em um orador adicional.
	Surround Toque na tecla de toque automático/surround para ouvir várias pessoas em ambientes silenciosos. Toque na tecla novamente para voltar ao modo automático.

Transmissão de áudio da TV (Line-in)

Transmissão de áudio da sua TV para seus aparelhos auditivos.

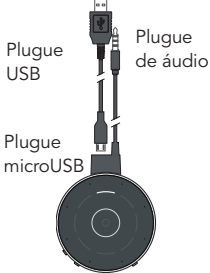 Plugue de áudio	Insira o cabo de transmissão de TV no conector microUSB do microfone de mesa. Insira o plugue de áudio de 3,5 mm do cabo de transmissão de TV na entrada de áudio da TV.
 Plugue USB Plugue de áudio Plugue microUSB	Para recarregar o microfone de mesa durante a transmissão de áudio da sua TV, você pode inserir o plugue microUSB do cabo de carregamento no conector microUSB do cabo de transmissão da TV. Insira o plugue USB do cabo de carregamento na tomada da fonte de alimentação. Conecte a fonte de alimentação na tomada da parede.

Carregando seu microfone de mesa

Para carregar seu microfone de mesa:

1. Conecte a extremidade microUSB do cabo de carregamento ao conector microUSB do seu microfone de mesa.
2. Conecte a extremidade microUSB do cabo de carregamento no adaptador de energia.
3. Conecte o adaptador de energia a uma fonte de energia externa, como uma tomada de parede.
4. Verifique o status de carregamento usando os leds do seu microfone de mesa. Veja abaixo.



Status do led	Status de carregamento
	Os leds verdes indicam o nível de carga da bateria. Cada led representa cerca de 1 hora. O led verde piscando indica o nível atual. Se estiver carregando durante o uso, todos os leds verdes interromperão brevemente outros indicadores quando a bateria estiver totalmente carregada.
	Os leds laranja indicam menos de 2 horas de duração da bateria.
	O led vermelho indica menos de 1 hora de duração da bateria. O led vermelho piscando indica uma bateria vazia.


Uma carga completa alimenta o microfone de mesa por até 12 horas de transmissão. Seu microfone de mesa será totalmente carregado em cerca de 2 horas.

Montando seu adaptador de energia

Seu microfone de mesa pode vir com várias opções de plugue para uso em diferentes países. Se o adaptador de energia exigir montagem, siga as etapas abaixo.

Para conectar uma opção de plugue ao seu adaptador de energia:

1. Escolha a opção de plugue para o país onde você está usando seu microfone de mesa.
2. Deslize a opção de plugue no adaptador de energia até que se encaixe no lugar.
3. Para remover a opção de plugue, pressione a aba e deslize a opção de plugue para fora do adaptador de energia.

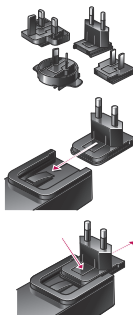

Guia de resolução de problemas

Problemas com seu microfone de mesa? Experimente estas dicas. Se os problemas continuarem, entre em contato com seu profissional da audição.

Sintoma	Possíveis causas	Soluções
Um (ou ambos) os aparelhos auditivos saem inesperadamente da transmissão de áudio.	Os aparelhos auditivos podem estar no limite do alcance da conectividade.	Aproxime-se do microfone de mesa.
	O nível da bateria no aparelho auditivo não suporta mais a transmissão de áudio.	• Substitua a bateria do aparelho auditivo por uma nova. • Recarregue seu aparelho auditivo, se aplicável.
	Objetos grandes, como móveis ou paredes, podem degradar o sinal.	Para um melhor desempenho, seus aparelhos auditivos devem estar dentro linha de visão do microfone de mesa.
	A conexão sem fio com o microfone de mesa foi perdida.	Para reiniciar o fluxo de áudio, siga as etapas em <i>iniciar/parar a transmissão de áudio</i> na pág. 9.

Sintoma	Possíveis causas	Soluções
A qualidade da transmissão de áudio está distorcida.	Nível de bateria baixo no microfone de mesa.	Recarregue o microfone de mesa. Consulte “Carregando seu microfone de mesa” na pág. 17.
	O volume da fonte de áudio não é o ideal.	Ajuste o nível de volume da fonte de áudio até obter uma melhor qualidade de som.
A qualidade da transmissão de áudio está inconsistente.	O dispositivo Bluetooth pode estar no limite do alcance de conectividade.	Aproxime o dispositivo Bluetooth do microfone de mesa.
A transmissão de áudio está muito alta ou muito baixa.	O volume transmitido do microfone de mesa para o aparelho auditivo não é o ideal.	Pressione o botão de volume + ou – no microfone de mesa.
Modo microfone de mesa: Difícil ouvir o orador em ambientes barulhentos.	O microfone de mesa pode estar muito longe do orador.	Mova o microfone de mesa para mais perto da boca do orador.

Sintoma	Possíveis causas	Soluções
Modo microfone remoto: Difícil ouvir o orador em ambientes barulhentos.	O microfone de mesa pode estar coberto por roupas ou mal posicionado.	Forneça acesso claro do microfone de mesa à voz do orador.
Nenhum som transmitido é ouvido nos aparelhos auditivos.	Os aparelhos auditivos não estão emparelhados com o microfone de mesa.	Siga as etapas em “Para emparelhar com aparelho(s) auditivo(s)” na pág. 6.
	Nenhum sinal de áudio de entrada está disponível.	• Ligue a fonte de áudio eletrônica. • Ative o som ou aumente o volume na fonte de áudio eletrônica.
O dispositivo não está respondendo.	Possível condição de erro.	Pressione o botão liga/desliga por 8 segundos para forçar o desligamento. Ligue como de costume.

Uso pretendido

O microfone de mesa é um dispositivo auxiliar da audição que transmite som por meio de fones de ouvido com fio ou para aparelhos auditivos de condução aérea com conectividade de 2,4 GHz. Quando usado por um orador distante ou em ambientes ruidosos, ele funciona como um microfone remoto. Também funciona como transmissor de TV quando conectado à saída de áudio da TV.

O microfone de mesa foi projetado para atender aos padrões internacionais de compatibilidade eletromagnética. No entanto, ainda é possível que você experimente interferências causadas por perturbações na linha de energia, detectores de metais em aeroportos, campos eletromagnéticos de outros dispositivos médicos, sinais de rádio e descargas eletrostáticas.

O microfone de mesa foi projetado para ser limpo com um pano úmido umedecido com água e sabão.

Se você usa outros dispositivos médicos ou dispositivos médicos implantáveis, como desfibriladores ou marcapassos, e está preocupado com a possibilidade de seu microfone de mesa causar interferência em seu dispositivo médico, entre em contato com seu médico ou com o fabricante de seu dispositivo médico para obter informações sobre o risco de perturbação. O microfone de mesa não deve ser usado durante um procedimento de ressonância magnética ou em uma câmara hiperbárica. O microfone de mesa não está formalmente certificado para operar em atmosferas explosivas, como as que podem ser encontradas em minas de carvão ou em certas fábricas de produtos químicos.

Qualquer incidente grave ocorrido em relação ao seu dispositivo deve ser relatado ao representante local da Starkey Hearing Technologies e à autoridade competente do estado-membro em que você está estabelecido. Um incidente grave é definido como qualquer mau funcionamento, deterioração nas características e/ou desempenho do dispositivo, ou inadequação no manual de operações/rotulagem do dispositivo que possa levar à morte ou deterioração grave no estado de saúde do usuário, OU pode fazê-lo após a recorrência.


Uso em aeronaves

O microfone de mesa não deve ser usado em aeronaves, a menos que especificamente permitido pelo pessoal de voo.

Uso internacional

O microfone de mesa foi aprovado para operar em frequências de rádio específicas de seu país ou região e pode não ser aprovado para uso fora de seu país ou região.

Esteja ciente de que a operação durante viagens internacionais pode causar interferência em outros dispositivos eletrônicos ou outros dispositivos eletrônicos podem causar interferência em seu microfone de mesa.

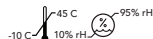

Seu microfone de mesa foi projetado para operar, ser armazenado e transportado dentro da faixa de temperatura de -10°C (14°F) a 45°C (113°F) e faixa de umidade relativa de 10%-95% e altitude limites 70 kPa - 106 kPa (equivalente a altitudes de 1.200 pés (380 m) abaixo do nível do mar a 10.000 pés (3.000 m).

Somos obrigados por regulamentos a fornecer os seguintes avisos:



AVISO: O uso do microfone de mesa próximo a outros equipamentos eletrônicos deve ser evitado, pois pode resultar em desempenho inadequado. Se tal uso for necessário, observe se seus aparelhos auditivos e demais equipamentos estão funcionando normalmente.

AVISO: O uso de acessórios, componentes ou peças de reposição diferentes dos fornecidos pelo fabricante do microfone de mesa pode resultar em aumento das emissões eletromagnéticas e diminuição da imunidade eletromagnética e pode resultar na degradação do desempenho.

AVISO: Se o equipamento de comunicação de radiofrequência portátil for usado a menos de 30 cm (12") do seu microfone de mesa, poderá ocorrer degradação do desempenho do seu aparelho auditivo. Se isso ocorrer, afaste-se do equipamento de comunicação.

Embora o microfone de mesa não seja formalmente certificado (classificação IP) para proteção contra entrada de poeira ou água, de acordo com IEC 60529, ele foi testado para o nível IP 52. Isso significa que o microfone de mesa está protegido contra poeira. A bateria do microfone de mesa não é substituível. Não tente substituir a bateria. O microfone de mesa não contém nenhuma peça que possa ser reparada pelo usuário. Não abra ou modifique.

Não conecte o microfone de mesa a nenhum dispositivo não descrito neste manual. A vida útil esperada do microfone de mesa é de 3 anos.

Descrição técnica de conectividade

O microfone de mesa opera na banda de 2,4-2,4835 GHz com uma potência irradiada efetiva máxima de 8 dBm com tipo de modulação de transmissão de 1M12FXD e largura de banda de 1,1 MHz. A seção do receptor do rádio tem uma largura de banda de 2 MHz.

AVISOS DE CONECTIVIDADE

FCC ID: 2AS2V-TM10

IC: 24964-TM10 (Modelo TM10)

Informações da FCC/IC

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das regras da FCC e com os padrões RSS isentos de licença do ISED Canadá. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada do dispositivo.

NOTA: fabricante não é responsável por qualquer interferência de rádio ou TV causada por modificações não autorizadas neste equipamento. Tais modificações podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Por meio deste, a Nuance Hearing declara que o microfone de mesa da Starkey Laboratories Inc. está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/EU. Uma cópia da Declaração de Conformidade pode ser obtida em info@nuancehear.com.

AVISO NCC

Sem permissão concedida pelo NCC, qualquer empresa, empreendimento ou usuário não tem permissão para alterar a frequência, aumentar a potência de transmissão ou alterar as características originais, bem como o desempenho de dispositivos de radiofrequência de baixa potência aprovados. Os dispositivos de radiofrequência de baixa potência não devem influenciar a segurança da aeronave e interferir nas

comunicações legais. Se encontrado, o usuário deve interromper a operação imediatamente até que nenhuma interferência seja alcançada. As referidas comunicações legais significam que as comunicações de rádio são operadas em conformidade com a Lei de Gestão de Telecomunicações. Os dispositivos de radiofrequência de baixa potência devem ser suscetíveis à interferência de comunicações legais ou dispositivos irradiados por ondas de rádio ISM.

Informações regulatórias



Nuance Hearing
24 Raoul Wallenberg St.
Tel Aviv 6971920
Israel



Nuance Hearing
Packhorse Lane Bibury
Cirencester GL7 5NT
Inglaterra



Os resíduos de equipamentos eletrônicos devem ser manuseados de acordo com as regulamentações locais.



OU



Consulte o manual de operações.



Manter seco.

Instruções para descarte de eletrônicos antigos

A Starkey Laboratories, Inc. incentiva, a UE exige e as leis de sua comunidade local podem exigir que seu microfone de mesa seja descartado por meio do processo local de reciclagem/descarte de eletrônicos.

As instruções abaixo são fornecidas para o benefício do pessoal de descarte/reciclagem. Inclua este manual ao descartar seu microfone de mesa.

SOMENTE PARA PESSOAL DE DESCARTE/RECICLAGEM

Este produto contém uma bateria de polímero de íon de lítio.

Para remover esta bateria:

- Desligue o microfone de mesa.
- Separe as metades do invólucro com uma pequena chave de fenda.
- Corte os fios da bateria da placa de circuito para evitar curto acidental.
- Retire a bateria do compartimento usando uma lâmina larga e plana

Tais modificações podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Símbolo	Significado do símbolo	Padrão aplicável	Número do símbolo
	Fabricante	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.1
	Representante autorizado na comunidade Europeia	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.2
	Data de fabricação	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.3
	Número de catálogo	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.6
	Número de série	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.7
	Dispositivo médico	BS EN ISO 15223-1:2021	5.7.7
	Mantenha seco	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.4
	Limite de temperatura	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.7
	Limitação de umidade	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.8
	Cuidado	BS EN ISO 15223-1:2021	5.4.4
	Sinal de alerta geral	EC 60601-1, N° referência tabela D.2, sinal de segurança 2	ISO 7010-W001
	Consulte o manual de instruções	EC 60601-1, N° referência tabela D.2, sinal de segurança 10	ISO 7010-M002
	Coletar separadamente	DIRETIVA 201 2/19/EU (WEEE)	Anexo IX
	Equipamento de Classe II	IEC 60417 N° referência tabela D.1	Símbolo 9 (IEC 60417- 5172)
	Marca de Conformidade Regulatória (RCM)	AS/NZS 4417.1:2012	N/A
	Marca Giteki	Lei de rádio Japonesa	N/A
	Corrente direta	IEC 60601-1 N° referência tabela D.1	IEC 60417-5031
	Símbolo de reciclagem	Diretiva 94/62/CE do parlamento europeu e do conselho	Anexo I-VII

Certificações

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela resolução N° 715/2019 e atende aos requisitos técnicos aplicados.



Para mais informações, consulte o site da Anatel:
www.gov.br/anatel/pt-br/

Res. 680

“Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados”

[illegible][illegible]

Importado por:
Starkey do Brasil LTDA.
Rua Doutor Fernão Pompeu de Camargo, 832 – Jd. Leonor
Campinas/SP 13041-025



StarLink e Starkey são marcas comerciais da Starkey Laboratories, Inc.

A marca e os logos Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc.
e qualquer uso de tais marcas pela Starkey é feito sob licença.

©2023 Starkey Laboratories, Inc. Todos os direitos reservados. P00000365 12/23 BKLT3171-01-PT-XX

Patente: www.starkey.com/patents

Versão 01/BR/2024