

Manual del usuario de su micrófono de mesa StarLink



Accesorio para:

Audífonos inalámbricos

¡Enhorabuena por su nuevo micrófono de mesa!

El micrófono de mesa está diseñado para mejorar la escucha en entornos ruidosos al permitirle centrarse en el hablante principal en entornos con varios hablantes, como reuniones o encuentros familiares. Y le conecta con el mundo que le rodea.

Utilice este sencillo manual para comenzar.

Contenido del paquete:

- Micrófono de mesa
- Adaptador de corriente
- Cable USB a microUSB
- Opciones de enchufe para:
 - Estados Unidos
 - Europa
 - Australia
 - Reino Unido
- Bolsa
- Auriculares con cable y almohadillas para los oídos
- Cable de transmisión de televisión
- Colgador con cordón
- Caja de silicona
- Manual del usuario

Índice

1. Conozca su micrófono de mesa

Conozca su micrófono de mesa.....	4
Cómo configurar su micrófono de mesa.....	7
Como utilizar micrófono de mesa.....	9
Cómo cargar su micrófono de mesa.....	18

3. Guía de resolución de problemas.....20

4. Orientación adicional

Uso previsto.....	23
Información de la FCC.....	24
Información regulatoria.....	25

Conozca su micrófono de mesa

Visión general

1. Conector MicroUSB

- Recargable mediante cable USB a microUSB.
- Transmite audio a través del cable de transmisión de TV.

2. Teclas táctiles direccionales

Selección manual de una dirección simple o doble.

3. Segmentos

- Indica la dirección o direcciones seleccionadas.
- Indicadores operativos, muestran:
 - Estado de carga
 - Potencia
 - Estado de la batería
 - Estado de emparejamiento
 - Volumen
 - Conectividad de entrada/salida de línea

4. Indicador de modo automático

- Activado indica el modo automático.
- Desactivado indica el modo Envoltente o Manual.

5. Botón de cambio de modo

Cambia entre los modos Automático y Envoltente.

6. Botón de encendido

Activa/desactiva el micrófono de mesa.

7. Conector de audio de 3,5 mm

Para conectar auriculares con cable.

8. Botones de aumento (+) y disminución (-) de volumen

Ajustan la corriente de volumen.

9. Micrófonos


Ocho micrófonos integrados para captar la voz del hablante.

10. Botón de emparejamiento de audífonos

Se empareja y se conecta a audífonos.

11. Interfaz magnética para percha


Para usar en el modo de micrófono remoto.

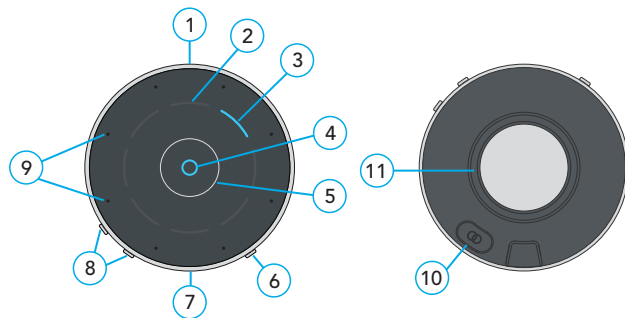

Conozca su micrófono de mesa

Descripción general de los auriculares con cable

- Consejos para los oídos (pequeño/mediano/grande)**
Para un ajuste personal.
- Botones de aumento (+) y disminución (-) de volumen**
Ajustan la corriente de volumen.
- Botón de cambio de modo**
Cambia entre los modos Automático y Envolvente.
- Conector de audio de 3,5 mm**
Conecta el micrófono de mesa en un conector de audio de 3,5 mm.

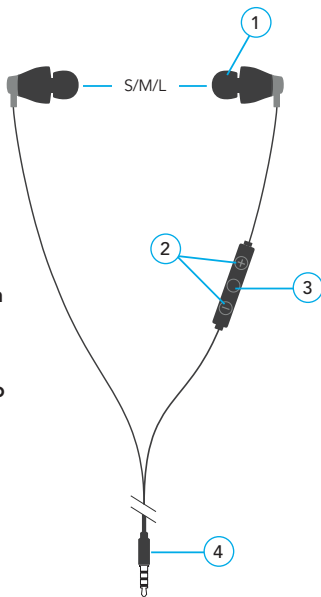

Cómo configurar su micrófono de mesa

ENCENDIDO/APAGADO

Utilice el botón de encendido para encender o apagar el micrófono de mesa:

- ENCENDIDO:** pulse el botón de encendido durante 1 segundo y suéltelo. Los segmentos verdes indican el nivel de carga de la batería.
- NOTA:** Si es necesario cargar el micrófono de mesa, consulte *Cómo cargar su micrófono de mesa en la pág. 18*.
- APAGADO:** pulse el botón de encendido durante 1 segundo y suéltelo.



Para emparejar con audífonos:

Antes de usar el micrófono de mesa por primera vez, deberá emparejarlo con su(s) audífono(s). Esto permite que su accesorio reconozca sus audífonos para que puedan funcionar juntos.

PASO 1: Encienda su micrófono de mesa.


PASO 2: Apague y encienda sus audífonos.

- Para sistemas de audífonos CROS:** Apague los audífonos y el transmisor CROS. A continuación, **encienda** sus audífonos, pero deje el transmisor CROS **apagado**.

PASO 3: Empareje su micrófono de mesa con su(s) audífono(s):

- Asegúrese de que sus audífonos no estén conectados a dispositivos Bluetooth® cercanos:

- **Desactive** el Bluetooth en su teléfono móvil.
 - **Apague** los accesorios inalámbricos que ya estén emparejados con sus audífonos.
2. Coloque sus audífonos a menos de 15 cm de su micrófono de mesa.
 3. Pulse el botón de emparejamiento del audífono durante 2 segundos y coloque el micrófono de mesa boca arriba sobre una superficie estable. Los corchetes azules intermitentes indican que el Bluetooth® está listo para emparejarse.

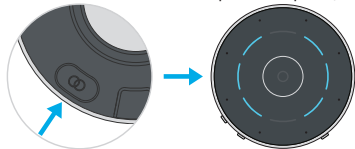

4. Para un **conjunto** de audífonos:

Soporte izquierdo	Soporte derecho	Resultado del emparejamiento	Siguiente paso
(	)	Ambos audífonos emparejados.	Completado
(	)	Solo se ha emparejado el audífono izquierdo.	Repita del 1 al 3 en el PASO 3
(	)	Solo se ha emparejado el audífono derecho.	Repita del 1 al 3 en el PASO 3
(	)	No hay audífonos emparejados.	Repita del 1 al 3 en el PASO 3

5. Para un **solo** audífono:

Soporte izquierdo	Soporte derecho	Resultado del emparejamiento	Siguiente paso
(		Audífono izquierdo emparejado.	Completado
	)	Audífono derecho emparejado.	Completado
(		El audífono izquierdo no está emparejado.	Repita del 1 al 3 en el PASO 3
	)	El audífono derecho no está emparejado.	Repita del 1 al 3 en el PASO 3

¡Listo! Vaya a la página siguiente para empezar a usar su micrófono de mesa.

Como utilizar micrófono de mesa

El micrófono de mesa es un dispositivo de escucha asistida y un transmisor para TV. Transmite audio directamente a sus audífonos inalámbricos.

Modos de uso clave:

- **Micrófono de mesa:** transmisión de la voz objetivo desde una dirección seleccionada en los modos siguientes. Para obtener más detalles, consulte *Transmisión de conversaciones* en la pág. 14.
- Automático
- Manual

- Una sola dirección
- Doble dirección
- **Envolvente**
- **Micrófono remoto:** transmite la voz de la persona que lleva el micrófono de mesa. Para obtener más información, consulte *Cómo llevar el micrófono de mesa* en la pág. 14.
- **Transmisor para TV:** transmisión de audio a través de microUSB de entrada de línea. Para obtener más información, consulte *Transmisión de audio de TV* en la pág. 17.

Para usar el micrófono de mesa:

PASO 1: Compruebe que sus audífonos estén encendidos.

Recordatorio: Antes de transmitir audio por primera vez, asegúrese de que sus audífonos estén emparejados con su micrófono de mesa. Consulte la pág. 7.

PASO 2: Inicie/detenga la transmisión de audio

Realice una de las siguientes acciones:

- **Encienda el micrófono de mesa:**
La transmisión de audio se inicia automáticamente en el audífono.
- **Aplicación móvil del audífono:** Abra la aplicación en su teléfono móvil o tableta. Seleccione la opción para iniciar/detener la transmisión desde la pantalla **Accesorios**.

NOTA: El alcance de funcionamiento inalámbrico típico es de hasta 20 m. Puede verse reducido por factores ambientales (p. ej., obstrucciones, interferencias, posición de las personas). Es posible que haya rangos de funcionamiento más amplios; sin embargo, la calidad del audio o de la conexión puede disminuir.

• **Control remoto:**

Si su profesional de atención auditiva lo ha configurado, pulse el botón Favorito.



• **Control de usuario del audífono:**

Si su profesional de atención auditiva o audioprotesista lo configura, un gesto específico (por ejemplo, una pulsación prolongada en un control de usuario) puede iniciar o detener la transmisión.

NOTA: Es posible que se reproduzca un indicador audible en sus audífonos para indicar el inicio/parada de la transmisión de audio.

PASO 3: Ajuste el volumen de transmisión. Realice una de las siguientes acciones:


- Presione el botón para **subir (+) o bajar (-) el volumen** en el micrófono de mesa.
- Mueva el **control deslizante de volumen** en la pantalla Accesorios de su aplicación móvil compatible.
- Pulse el **botón Favorito** en su **control remoto** inalámbrico.*
- Pulse (o toque) los **controles de usuario de su audífono**.*

* El profesional de atención auditiva debe configurar el micrófono de mesa con esta función.

Segmentos

Los segmentos identifican cómo está funcionando actualmente su micrófono de mesa.

Funcionamiento

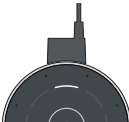	Orientación del producto Para obtener el mejor rendimiento, asegúrese de que los botones de encendido y volumen del micrófono de mesa estén frente a usted.
	En línea El segmento superior blanco indica conexión de entrada de línea (por ejemplo, audio de televisión).
	Fuera de línea El parpadeo del segmento inferior blanco indica una conexión de salida de línea (auriculares).
	Volumen + El segmento superior blanco parpadea cuando se aumenta el volumen.
	Volumen - El segmento inferior blanco parpadea cuando se reduce el volumen.

Emparejamiento de audífonos

	Soportes luminosos azules intermitentes Búsqueda de audífonos.
	Soportes luminosos verdes fijos Emparejamiento de audífonos realizado correctamente.
	Soportes luminosos rojos fijos El emparejamiento de audífonos no se ha realizado correctamente.


Ver pág. 7 para obtener detalles sobre cómo emparejar un conjunto de audífonos o un solo audífono.

Transmisión de conversaciones

	Automático Indicador de modo automático (O) azul fijo. El segmento azul indica la dirección de escucha activa.
	Manual sencillo/dual Uno o dos segmentos azules indican las direcciones de escucha seleccionadas.
	Envolverte Todos los segmentos azules indican escucha en todas direcciones.

Cómo usar el micrófono de mesa

Su micrófono de mesa se puede usar con un cordón usando el colgador provisto, usado por la persona que habla. Es mejor colocarlo a menos de 20 cm de la boca del hablante.

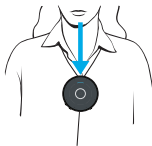

Instrucciones de cordón:

1. Coloque el colgador magnético en la parte posterior del micrófono de mesa. Asegúrese de que el colgador esté correctamente insertado y asegurado.
2. Coloque el cordón alrededor del cuello. Para ajustar la longitud, sujete el cilindro y tire del cierre.
3. Cuando el hablante usa el micrófono de mesa, el indicador superior se iluminará durante 3 segundos.



Cómo ayuda su micrófono de mesa

Modos de transmisión de conversaciones

El micrófono de mesa es un producto versátil e inteligente. Sigue automáticamente al hablante principal en entornos silenciosos o ruidosos para proporcionarle la mejor comprensión del habla posible. El micrófono de mesa le permite anular el modo automático y seleccionar manualmente hasta dos hablantes entre el grupo. El modo Envolverte está optimizado para conversaciones de grupos grandes en entornos silenciosos. Además, un hablante distante puede usar el micrófono de mesa en entornos ruidosos.



Mesa

Coloque su micrófono de mesa en medio de una mesa para escuchar a un grupo de personas. Para una mejor comprensión del habla, acerque siempre su micrófono de mesa lo más posible a su(s) interlocutor(es).

	Automático Cuando se ilumina el indicador del modo Automático, el micrófono de mesa sigue al hablante principal automáticamente. Si el indicador del modo Automático está apagado, toque la tecla táctil Automático/Envolvente para activarlo.
	Hablante único manual Toque cualquier segmento para centrarse en un hablante específico.
	Hablante dual manual Mantenga presionado (1 segundo) un segundo segmento para centrarse en un hablante adicional.
	Envolvente Toque la tecla táctil Automático/Envolvente para escuchar a varias personas en entornos silenciosos. Toque la tecla táctil Automático/Envolvente para regresar al modo Automático.

Transmisión de audio de TV (entrada de línea)


Transmitir audio desde su televisor a sus audífonos.

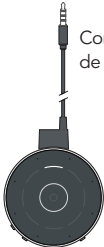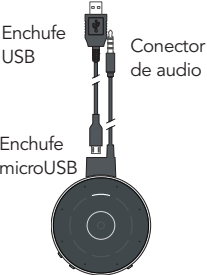 Conector de audio	Inserte el cable de transmisión de TV en el conector microUSB del micrófono de mesa. Inserte el conector de audio de 3,5 mm del cable de transmisión de TV en el conector de audio del televisor.
 Enchufe USB Conector de audio Enchufe microUSB	Para recargar el micrófono de mesa mientras transmite audio desde su televisor, puede insertar el conector microUSB del cable de carga en el conector microUSB del cable de transmisión de TV. Inserte el conector USB del cable de carga en el conector de fuente de alimentación. Conecte la fuente de alimentación a la toma de pared.

Cómo cargar su micrófono de mesa

Para cargar su micrófono de mesa:

1. Conecte el extremo microUSB del cable de carga a la toma microUSB del micrófono de mesa.
2. Conecte el extremo microUSB del cable de carga al conector del adaptador de alimentación.
3. Conecte el adaptador de corriente a una fuente de alimentación externa, como una toma de corriente de pared.
4. Verifique el estado de carga usando los segmentos de su micrófono de mesa. Vea la página siguiente.

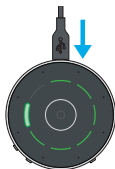

Estado del segmento	Estado de carga
	Los segmentos verdes indican el nivel de carga de la batería. Cada segmento representa aproximadamente 1 hora. El segmento verde intermitente indica el nivel actual. Si se carga durante el uso, todos los segmentos verdes interrumpirán brevemente otros indicadores cuando la batería esté completamente cargada.
	Los segmentos naranjas indican menos de 2 horas de duración de la batería.
	El segmento rojo indica menos de 1 hora de duración de la batería. El segmento rojo intermitente indica que la batería está vacía.


Una carga completa alimenta el micrófono de mesa para hasta 12 horas de transmisión. Su micrófono de mesa se cargará completamente en aproximadamente 2 horas.

Montaje de su adaptador de corriente

Su micrófono de mesa puede venir con varias opciones de enchufe para usar en diferentes países. Si el adaptador de corriente requiere montaje, siga los pasos a continuación.

Para conectar una opción de enchufe a su adaptador de corriente:

1. Elija la opción de enchufe para el país donde está usando su micrófono de mesa.
2. Deslice la opción de enchufe en el adaptador de corriente hasta que encaje en su sitio.
3. Para quitar la opción de enchufe, presione la pestaña y deslice la opción de enchufe hacia afuera del adaptador de corriente.

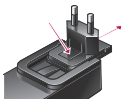

Guía de resolución de problemas

¿Problemas con su micrófono de mesa? Pruebe estos consejos. Si los problemas continúan, póngase en contacto con su profesional de atención auditiva.

Síntoma	Posibles causas	Soluciones
Uno (o ambos) audífonos deja de transmitir audio inesperadamente.	Los audífonos pueden estar al borde del alcance inalámbrico.	Acérquese al micrófono de mesa.
	El nivel de batería del audífono ya no admite la transmisión de audio.	• Sustituya la batería de su audífono por una nueva. • Recargue su audífono, si corresponde.
	Los objetos grandes, como muebles o una pared, pueden degradar la señal.	Para un mejor rendimiento, sus audífonos deben estar dentro de la línea de visión del micrófono de mesa.
	Se ha perdido la conexión inalámbrica con el micrófono de mesa.	Para reiniciar la transmisión de audio, siga los pasos en <i>Iniciar/ detener transmisión de audio</i> en la pág. 10.

Síntoma	Posibles causas	Soluciones
La calidad del audio transmitido está distorsionada.	Nivel de batería bajo en micrófono de mesa.	Recargar el micrófono de mesa. Consulte <i>Cómo cargar su micrófono de mesa</i> en la pág. 18.
	El volumen de la fuente de audio no es óptimo.	Ajuste el nivel de volumen de la fuente de audio hasta lograr una mejor calidad de sonido.
La calidad del audio transmitido es inconsistente.	El dispositivo Bluetooth puede estar en el borde del alcance inalámbrico.	Acerque el dispositivo Bluetooth al micrófono de mesa.
El audio transmitido es demasiado alto o demasiado suave.	El volumen transmitido desde el micrófono de mesa hasta el audífono no es óptimo.	Pulse el botón de volumen + o – en el micrófono de mesa.
Modo de micrófono de mesa: Habla difícil de escuchar en ambientes ruidosos.	El micrófono de mesa puede estar demasiado lejos del hablante.	Acerque el micrófono de mesa a la boca del hablante.

Síntoma	Posibles causas	Soluciones
Modo de micrófono remoto: Habla difícil de escuchar en ambientes ruidosos.	El micrófono de mesa puede estar cubierto por ropa o mal colocado.	Proporcione acceso claro desde el micrófono de mesa a la voz del hablante.
No se escucha ningún sonido transmitido en los audífonos.	Los audífonos no están emparejados con micrófono de mesa.	Siga los pasos de <i>Emparejamiento con su(s) audífono(s)</i> en la pág. 7.
	No hay señal de audio entrante disponible.	• Encienda la fuente de audio electrónica. • Desactive el silencio o aumente el volumen en la fuente de audio electrónica.
El dispositivo no responde.	Posible condición de error.	Pulse el botón de encendido durante 8 segundos para forzar el apagado. Enciéndalo como de costumbre.

Uso previsto

El micrófono de mesa es un dispositivo de asistencia auditiva que transmite sonido a través de auriculares con cable o audífonos inalámbricos de conducción aérea de 2,4 GHz. Cuando lo lleva un hablante distante o se utiliza en entornos ruidosos, funciona como un micrófono remoto. También funciona como transmisor para TV cuando se conecta a la salida de audio del televisor.

El micrófono de mesa está diseñado para cumplir con los Estándares de Compatibilidad Electromagnética Internacional. Sin embargo, es posible que experimente igualmente interferencias causadas por perturbaciones en la línea eléctrica, detectores de metales en aeropuertos, campos electromagnéticos de otros dispositivos médicos, señales de radio y descargas electrostáticas.

El micrófono de mesa está diseñado para limpiarse con un paño húmedo humedecido con agua jabonosa.

Si utiliza otros dispositivos médicos o lleva dispositivos médicos implantables como desfibriladores o marcapasos y le preocupa que su micrófono de mesa pueda causar interferencias con su dispositivo médico, póngase en contacto con su médico o con el fabricante de su dispositivo médico para obtener información sobre el riesgo de interferencia. El micrófono de mesa no debe utilizarse durante un procedimiento de resonancia magnética ni en una cámara hiperbárica. Su micrófono de mesa no está certificado formalmente para funcionar en zonas con riesgo de explosión, como en minas de carbón o ciertas plantas químicas.

Cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con su dispositivo Starkey debe notificarse a su representante local de Starkey Hearing Technologies y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentre. Un incidente grave se define como cualquier mal funcionamiento, deterioro de las características y/o rendimiento del dispositivo, o error en el manual del usuario/ etiquetado del dispositivo que pueda provocar la muerte o deterioro grave del estado de salud del usuario. O podría hacerlo con la recurrencia.

Uso en aviones

El micrófono de mesa no debe utilizarse en aviones a menos que el personal de vuelo lo permita específicamente.

Uso internacional

El micrófono de mesa está aprobado para funcionar a una radiofrecuencia que es específica a su país o región y puede que no esté aprobado para su uso fuera de su país o región.

Tenga en cuenta que el funcionamiento durante viajes internacionales puede causar interferencias con otros dispositivos electrónicos, u otros dispositivos electrónicos pueden causar interferencias con su micrófono de mesa.



Su micrófono de mesa está diseñado para funcionar, almacenarse y transportarse dentro de un rango de temperatura de -10 a 45 °C y un rango de humedad relativa del 10 al 95 %, y límites de altitud entre 70 y 106 kPa (equivalente a altitudes desde 380 m por debajo del nivel del mar hasta 3000 m)

Las normativas nos obligan a proporcionar las siguientes advertencias:



ADVERTENCIA: Debe evitarse el uso del micrófono de mesa directamente junto a otros equipos electrónicos, ya que esto podría dar lugar a un rendimiento inadecuado. Si dicho uso es necesario, compruebe si sus audífonos y el resto del equipo funcionan con normalidad.

⚠️ ADVERTENCIA: El uso de accesorios, componentes o piezas de repuesto que no sean los proporcionados por el fabricante del micrófono de mesa podría provocar un aumento de las emisiones electromagnéticas y una disminución de la inmunidad electromagnética, lo cual puede derivar en una degradación del rendimiento.

⚠️ ADVERTENCIA: Si se utiliza un equipo portátil de comunicaciones por radiofrecuencia a menos de 30 cm del micrófono de mesa, podría producirse una degradación del rendimiento de su audífono. Si esto ocurre, aléjese del equipo de comunicaciones.

Aunque el micrófono de mesa no está certificado formalmente (con clasificación IP) para la protección contra la entrada de polvo o agua, según IEC 60529, se ha probado al nivel IP 52. Esto significa que el micrófono de mesa está protegido del polvo. La batería de su micrófono de mesa no es reemplazable. No intente sustituir la batería. El micrófono de mesa no contiene ninguna pieza que el usuario pueda reparar. No lo abra ni lo modifique.

No conecte el micrófono de mesa a ningún dispositivo que no se describa en este manual. La vida útil prevista del micrófono de mesa es de 3 años.

Descripción técnica inalámbrica

El micrófono de mesa de Starkey Laboratories, Inc. opera en la banda de 2,4-2,4835 GHz con una potencia radiada efectiva máxima de 8 dBm con un tipo de modulación de transmisión de 1M12FXD y un ancho de banda de 1,1 MHz. La sección receptora de la radio tiene un ancho de banda de 2 MHz.

AVISOS INALÁMBRICOS

ID de la FCC: 2AS2V-TM10

IC: 24964-TM10 (Modelo TM10)

AVISO FCC/IC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC y con los estándares RSS exentos de licencia de ISED Canada. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

NOTA: El fabricante no se hace responsable de ninguna interferencia de radio o televisión causada por modificaciones no autorizadas en este equipo. Dichas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Por la presente, Nuance Hearing declara que el micrófono de mesa de Starkey Laboratories Inc. cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE. Puede obtener una copia de la Declaración de conformidad en info@nuancehear.com


AVISO DE LA NCC

Sin el permiso otorgado por la NCC, ninguna empresa, compañía o usuario puede cambiar la frecuencia, mejorar la potencia de transmisión o alterar las características originales ni el rendimiento de dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia aprobados. Los dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia no influirán en la seguridad de los aviones ni interferirán en las comunicaciones legales. Si se encuentra, el usuario deberá dejar de operar inmediatamente

hasta que no se logre ninguna interferencia. Dichas comunicaciones legales significan que las comunicaciones por radio se operan de conformidad con la Ley de Gestión de Telecomunicaciones. Los dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia deben ser susceptibles a la interferencia de comunicaciones legales o dispositivos irradiados por ondas de radio ISM.

Información regulatoria

Nuance Hearing
24 Raoul Wallenberg St.
Tel Aviv 6971920
Israel

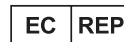

Nuance Hearing
Packhorse Lane Bibury
Cirencester GL7 5NT
Inglaterra



Los residuos de equipos electrónicos deben manipularse de acuerdo con las normativas locales



Consulte el manual del usuario



Mantener seco

Instrucciones para desechar equipos electrónicos que no necesite

Starkey Laboratories, Inc. recomienda, la UE exige, y las leyes de su comunidad local pueden exigir, que su micrófono de mesa se deseche mediante el proceso local de reciclaje/eliminación de productos electrónicos.

Las siguientes instrucciones se proporcionan para conveniencia del personal de eliminación/reciclaje. Incluya este manual al desechar el micrófono de mesa.

SOLO PARA EL PERSONAL DE ELIMINACIÓN/RECICLAJE

Este producto contiene una batería de polímero de iones de litio.

Para extraer esta batería:

- Apague el micrófono de mesa.
- Separe las mitades de la carcasa con un destornillador pequeño.
- Corte los cables de la batería de la tarjeta de circuitos para evitar cortocircuitos accidentales.
- Haga palanca para separar la batería de la carcasa con una hoja plana ancha.

Dichas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.



P00000927



StarLink y Starkey son marcas comerciales de Starkey Laboratories, Inc.

La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Starkey se realiza bajo licencia.

© 2025 Starkey Laboratories, Inc. Todos los derechos reservados. P00000927 12/25 BKL3171-03-LS-XX
Patente: www.starkey.com/patents