

Uw StarLink Tafelmicrofoon Gebruikershandleiding



Accessoire voor:

Draadloze hoortoestellen

Gefeliciteerd met uw nieuwe tafelmicrofoon!

Uw tafelmicrofoon is ontworpen om het luisteren in een luide omgeving te verbeteren door u in staat te stellen zich te concentreren op de primaire spreker in een omgeving met meerdere sprekers, zoals vergaderingen of familiebijeenkomsten. En contact maken met de wereld om u heen.

Gebruik deze eenvoudige handleiding om aan de slag te gaan.

Inhoud van de verpakking:

- Tafelmicrofoon
- Voedingsadapter
- USB-naar-micro-USB-kabel
- Stekkeropties voor:
 - Verenigde Staten
 - Europa
 - Australië
 - Verenigd Koninkrijk
- Foedraal
- Bedrade oortjes met oordopjes
- TV-streamingkabel
- Hanger met koord
- Siliconen hoes
- Gebruikershandleiding

Inhoudsopgave

1. Leer uw tafelmicrofoon kennen

Maak kennis met uw tafelmicrofoon.....	4
Uw tafelmicrofoon instellen.....	7
Uw tafelmicrofoon gebruiken.....	9
Uw tafelmicrofoon opladen.....	18

3. Handleiding voor probleemoplossing..... 20

4. Aanvullende informatie

Beoogd gebruik.....	23
FCC-informatie.....	24
Informatie over regelgeving.....	25

Maak kennis met uw tafelmicrofoon

Overzicht

1. Micro-USB-aansluiting

- Oplaadbaar via USB-naar-micro-USB-kabel.
- Streamt audio via een tv-streamingkabel.

2. Directionele aanraaktoetsen

Handmatige selectie van een enkele of dubbele richting.

3. Segmenten

- Geeft de geselecteerde richting(en) aan.
- Operationele indicatoren die het volgende tonen:
 - Oplaadstatus
 - Status
 - Batterijstatus
 - Koppelingsstatus
 - Volume
 - Connectiviteit voor lijningang/-uitgang

4. Automatische modusindicator

- Aan geeft de automatische modus aan.
- Uit geeft de modus Surround of Handmatig aan.

5. Knop voor moduswissel

Schakelt tussen automatische en surround-modi.

6. Aan/uit-knop

Zet de tafelmicrofoon AAN/UIT.

7. 3,5 mm audio-aansluiting

Voor het aansluiten van bedrade oortjes.

8. Knoppen Volume omhoog (+) en omlaag (-)

Volumestream aanpassen.

9. Microfoons


Acht ingebouwde microfoons om de stem van de spreker op te vangen.

10. Knop voor het koppelen van hoortoestellen

Koppelt en maakt verbinding met hoortoestel(len).

11. Magnetische interface voor hanger


Voor gebruik in de modus voor microfoon op afstand.

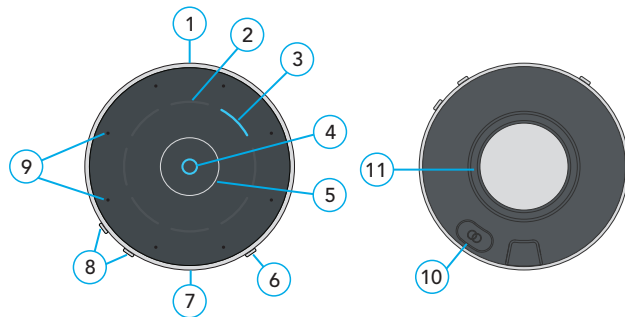

Maak kennis met uw tafelmicrofoon

Overzicht bedrade oortjes

1. **Oordopjes (klein/middelgroot/groot)**
Voor een persoonlijke pasvorm.
2. **Knoppen Volume omhoog (+) en omlaag (-)**
Volumestroom aanpassen.
3. **Knop voor moduswissel**
Schakelt tussen automatische en surround-modi.
4. **3,5 mm audiostekker**
Aansluiten op tafelmicrofoon in een audio-aansluiting van 3,5 mm.

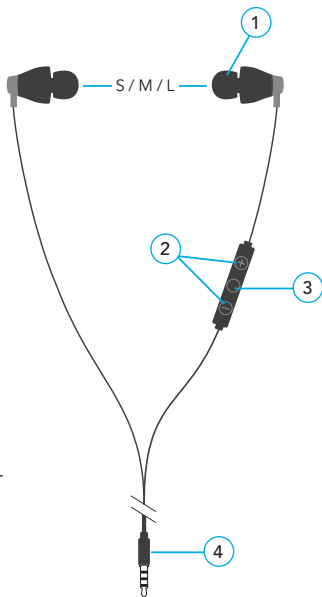

Uw tafelmicrofoon instellen

AAN/UIT-knop

Gebruik de aan/uit-knop om uw tafelmicrofoon **AAN** of **UIT** te zetten:

- **AAN** – druk 1 seconde op de aan/uit-knop en laat deze weer los. De groene segmenten tonen het laadniveau van de batterij.
- **OPMERKING:** Als de tafelmicrofoon moet worden opgeladen, zie *Uw tafelmicrofoon opladen op blz. 18*.
- **UIT** – druk 1 seconde op de aan/uit-knop en laat deze weer los.



Koppelen met hoortoestellen:

Voordat u uw tafelmicrofoon voor het eerst gebruikt, moet u deze koppelen met uw hoortoestel(len). Hierdoor kan uw accessoire uw hoortoestellen herkennen, zodat ze kunnen samenwerken.

STAP 1: Zet uw tafelmicrofoon AAN


STAP 2: Zet uw hoortoestellen UIT en AAN.

- **Voor CROS-hoortoestellen:** Zet uw hoortoestellen en CROS-zender UIT. Zet uw hoortoestellen vervolgens **AAN** maar laat de CROS-zender **UIT**.

STAP 3: Uw tafelmicrofoon koppelen aan uw hoortoestel(len):

1. Zorg ervoor dat uw hoortoestellen niet verbonden zijn met dichtbijzijnde Bluetooth® apparaten:

- Schakel Bluetooth **UIT** op uw mobiele telefoon.
 - Schakel alle draadloze accessoires die al aan uw hoortoestellen zijn gekoppeld **UIT**.
- Plaats uw hoortoestellen binnen 15 cm van uw tafelmicrofoon.
 - Houd de koppelingssknop van het hoortoestel 2 seconden ingedrukt en plaats de tafelmicrofoon met de voorkant naar boven op een stabiel oppervlak. De knipperende blauwe haakjes geven aan dat Bluetooth® klaar is om te worden gekoppeld.

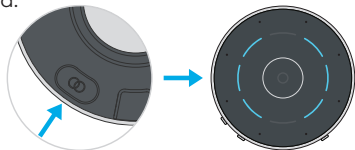

- Voor een **paar** hoortoestellen:

Linkerhaakje	Rechterhaakje	Resultaat van koppelen	Volgende stap
(	)	Beide hoortoestellen gekoppeld.	Voltooid
(	)	Alleen het linkerhoortoestel gekoppeld.	Herhaal 1-3 binnen STAP 3
(	)	Alleen het rechterhoortoestel gekoppeld.	Herhaal 1-3 binnen STAP 3
(	)	Geen hoortoestellen gekoppeld.	Herhaal 1-3 binnen STAP 3

- Voor een **enkel** hoortoestel:

Linkerhaakje	Rechterhaakje	Resultaat van koppelen	Volgende stap
(		Linkerhoortoestel gekoppeld.	Voltooid
	)	Rechterhoortoestel gekoppeld.	Voltooid
(		Linkerhoortoestel niet gekoppeld.	Herhaal 1-3 binnen STAP 3
	)	Rechterhoortoestel niet gekoppeld.	Herhaal 1-3 binnen STAP 3

Klaar! Ga naar de volgende pagina om uw tafelmicrofoon te gaan gebruiken.

Uw tafelmicrofoon gebruiken

Uw tafelmicrofoon is een ondersteunend luisterapparaat en TV-streamer. Het streamt audio rechtstreeks naar uw draadloze hoortoestellen.

Belangrijkste gebruiksmodi:

- **Tafelmicrofoon:** streamen van de doelstem vanuit een geselecteerde richting in de onderstaande modi. Zie voor meer informatie *Streamen van gesprekken* op blz. 14.
- Automatisch
- Handmatig
 - Enkele richting
 - Dubbele richting

- Surround
- **Microfoon op afstand:** streamen van de stem van de persoon die de tafelmicrofoon draagt. Zie voor meer informatie *Uw tafelmicrofoon dragen* op blz. 14.
- **TV-streamer:** audio streamen via lijningang micro-USB. Voor meer informatie, zie *Streamen van tv-audio* op blz. 17.

Uw tafelmicrofoon gebruiken:

STAP 1:

Controleer of uw hoortoestellen AAN staan.

Herinnering – Voordat u voor het eerst begint met het streamen van audio, moet u ervoor zorgen dat uw hoortoestellen zijn gekoppeld aan uw tafelmicrofoon. Zie blz. 7.

STAP 2: Het streamen van audio starten/stoppen

Voer een van de volgende handelingen uit:

- **Zet de tafelmicrofoon aan:**
Audiostreamen begint automatisch in het hoortoestel.
- **Mobiele app voor hoortoestel:** Open de app op uw mobiele telefoon of tablet. Selecteer de optie om het streamen te starten/stoppen vanuit het scherm **Accessoires**.

OPMERKING: Typisch draadloos bereik is maximaal 20 meter. Deze afstand kan in de realiteit kleiner zijn door omgevingsfactoren (bijv. obstakels, interferentie, positie van mensen). Een breder bereik is wellicht mogelijk, maar de kwaliteit van uw audio of verbinding kan dan afnemen.

• Draadloze afstandsbediening:

Druk op de knop Favoriet als uw audicien dit heeft geconfigureerd.



• Gebruikersbediening hoortoestel:

Indien geconfigureerd door uw audicien, kan een specifiek gebaar (bijv. een lange druk op een gebruikersbediening) het streamen starten/stoppen.

OPMERKING: Er kan een geluidsindicator in uw hoortoestellen worden afgespeeld om het starten/stoppen van audiostreaming aan te geven.

STAP 3: Pas het streamingvolume aan. Voer een van de volgende handelingen uit:



- Druk op de knop **Volume omhoog (+) of omlaag (-)** op de tafelmicrofoon.
- Verplaats de **volumeschuifregelaar** op het scherm **Accessoires** van uw compatibele mobiele app.
- Druk op de knop **Favoriet** op uw draadloze **Remote**.*
- Druk (of tik) op de **bedieningselementen van uw hoortoestel**.*

*Het bedienen van uw tafelmicrofoon met deze functie moet worden ingesteld door uw audicien.

Segmenten

De segmenten geven aan hoe uw tafelmicrofoon momenteel werkt.

Operationeel

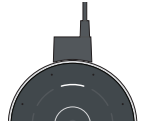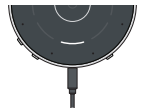	Productoriëntatie Voor de beste resultaten moet u ervoor zorgen dat de knoppen voor het volume en de Aan/Uit-knop van de tafelmicrofoon naar u toe wijzen.
	Lijningang Wit bovenste segment geeft lijningangverbinding aan (bijv. TV-audio).
	Lijnuitgang Als het witte onderste segment knippert, betekent dit dat er een lijnuitgangverbinding is (oortjes).
	Volume + Het witte bovenste segment knippert wanneer het volume wordt verhoogd.
	Volume - Het witte onderste segment knippert wanneer het volume wordt verlaagd.

Hoortoestel koppelen

	Knipperende blauwe haakjes Zoeken naar hoortoestel(len).
	Effen groene haakjes Koppelen van hoortoestel gelukt.
	Effen rode haakjes Koppelen van hoortoestel mislukt.


Zie blz. 7 voor meer informatie over het koppelen van een set hoortoestellen of een enkel hoortoestel.

Streamen van gesprekken

	Automatisch Automatische modusindicator (O) continu blauw. Blauw segment geeft actieve luisterrichting aan.
	Handmatig enkel/dubbel Een of twee blauwe segmenten geven de geselecteerde luisterrichting(en) aan.
	Surround Alle blauwe segmenten geven aan dat er in alle richtingen geluisterd wordt.

De tafelmicrofoon dragen

Uw tafelmicrofoon kan aan een koord worden gedragen met behulp van de meegeleverde hanger, die wordt gedragen door de persoon die spreekt. U kunt deze het beste binnen 20 cm van de mond van de spreker plaatsen.

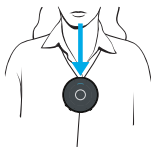

Instructies voor het koord:

1. Bevestig de magnetische hanger aan de achterkant van de tafelmicrofoon. Zorg ervoor dat de hanger correct is geplaatst en vastgezet.
2. Plaats het draagkoord om de hals. Om de lengte aan te passen, houdt u de cilinder vast en trekt u aan de sluiting.
3. Wanneer de tafelmicrofoon door de spreker wordt gedragen, gaat het bovenste indicatielampje gedurende 3 seconden branden.



Hoe uw tafelmicrofoon helpt

Modi voor het streamen van gesprekken

De tafelmicrofoon is een veelzijdig, intelligent product. Het volgt de belangrijkste spreker automatisch in een stille of lawaaierige omgeving, om u het best mogelijke spraakbegrip te bieden. Met de tafelmicrofoon kunt u de automatische modus opheffen en handmatig maximaal twee sprekers in de groep selecteren. De Surround-modus is geoptimaliseerd voor een discussie met een grote groep in een rustige omgeving. Daarnaast kan de tafelmicrofoon worden gedragen door een spreker op afstand in een lawaaierige omgeving.



Tafelblad

Plaats uw tafelmicrofoon in het midden van een tafel om naar een groep mensen te luisteren. Breng voor het beste spraakbegrip uw tafelmicrofoon altijd zo dicht mogelijk bij de gesprekspartner(s).

	Automatisch Wanneer het indicatielampje van de automatische modus brandt, volgt de tafelmicrofoon automatisch de belangrijkste spreker. Als het indicatielampje van de automatische modus uit is, tikt u op de aanraaktoets Automatisch/Surround om deze te activeren.
	Handmatig enkele spreker Tik op een segment om u te concentreren op een specifieke spreker.
	Handmatige meerdere sprekers Tik op een tweede segment en houd het ingedrukt (1 seconde) om u op nog een spreker te concentreren.
	Surround Tik op de aanraaktoets Automatisch/Surround om naar meerdere mensen te luisteren in een rustige omgeving. Tik op de aanraaktoets Automatisch/Surround om terug te keren naar de automatische modus.

Streamen van tv-audio (lijningang)


Audio streamen van uw tv naar uw hoortoestellen.

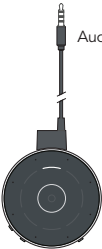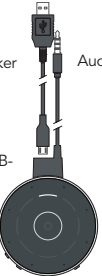 Audiostekker	Steek de tv-streamingkabel in de micro-USB-aansluiting van de tafelmicrofoon. Steek de 3,5 mm audiostekker van de tv-streamingkabel in de audio-aansluiting van de tv.
 USB-stekker Audiostekker Micro-USB-stekker	Om de tafelmicrofoon op te laden tijdens het streamen van audio vanaf uw tv, kunt u de micro-USB-stekker van de oplaadkabel in de micro-USB-aansluiting van de tv-streamingkabel steken. Steek de USB-stekker van de oplaadkabel in de voedingsaansluiting. Steek de stekker van de voeding in het stopcontact.

Uw tafelmicrofoon opladen

Om uw tafelmicrofoon op te laden:

1. Sluit het micro-USB-uiteinde van de oplaadkabel aan op de micro-USB-aansluiting op uw tafelmicrofoon.
2. Sluit het micro-USB-uiteinde van de oplaadkabel aan op de aansluiting op de voedingsadapter.
3. Sluit de voedingsadapter aan op een externe stroombron, zoals een stopcontact.
4. Controleer de laadstatus met behulp van de segmenten op uw tafelmicrofoon. Zie volgende pagina.

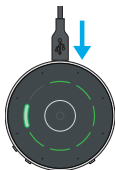

Segmentstatus	Oplaadstatus
	De groene segmenten tonen het laadniveau van de batterij. Elk segment vertegenwoordigt ongeveer 1 uur. Het knipperende groene segment toont het huidige niveau. Als de batterij tijdens gebruik wordt opgeladen, onderbreken alle groene segmenten kortstondig andere indicatielampjes wanneer de batterij volledig is opgeladen.
	Oranje segmenten geven aan dat de batterij nog minder dan 2 uur meegaat.
	Rood segment geeft aan dat de batterij nog minder dan 1 uur meegaat. Knipperend rood segment geeft een lege batterij aan.

Een volledige lading voorziet de tafelmicrofoon van stroom voor maximaal 12 uur streamen. Uw tafelmicrofoon wordt in ongeveer 2 uur volledig opgeladen.

Uw voedingsadapter in elkaar zetten

Uw tafelmicrofoon kan worden geleverd met verschillende stekkeropties voor gebruik in verschillende landen. Als de voedingsadapter in elkaar gezet moet worden, volg dan de onderstaande stappen.

Om een stekkeroptie aan te sluiten op uw voedingsadapter:

1. Kies de stekkeroptie voor het land waar u uw tafelmicrofoon gebruikt.
2. Schuif de stekkeroptie in de voedingsadapter totdat hij op zijn plaats klikt.
3. Om de stekkeroptie te verwijderen, drukt u op het lipje en schuift u de stekkeroptie weg van de voedingsadapter.



Handleiding voor probleemoplossing

Problemen met uw tafelmicrofoon? Probeer deze tips. Neem contact op met uw hoorspecialist als de problemen aanhouden.

Symptoom	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Eén (of beide) hoortoestel(len) stopt onverwachts met audiostreamen.	Hoortoestellen kunnen zich aan de rand van het draadloze bereik bevinden.	Ga dichterbij de tafelmicrofoon toe.
	Het batterijniveau in het hoortoestel ondersteunt geen audiostreaming meer.	- Vervang de batterij van het hoortoestel door een nieuwe. - Laad uw hoortoestel op, indien van toepassing.
	Groot voorwerp, zoals meubels of een muur, kan het signaal afzwakken.	Voor de beste prestaties moeten uw hoortoestellen zich binnen de zichtlijn van de tafelmicrofoon bevinden.
	Draadloze verbinding met tafelmicrofoon is verbroken.	Om de audiostream opnieuw te starten, volgt u de stappen in <i>Het streamen van audio starten/stoppen</i> op blz. 10.

Symptoom	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
De gestreamde audiokwaliteit is vervormd.	Laag batterijniveau in tafelmicrofoon.	Laad de tafelmicrofoon op <i>Zie Uw tafelmicrofoon opladen</i> op blz. 18.
	Volume van audiobron is niet optimaal.	Pas het volumeniveau van de audiobron aan totdat een betere geluidskwaliteit wordt bereikt.
De gestreamde audiokwaliteit is inconsistent.	Bluetooth-apparaat bevindt zich mogelijk aan de rand van het draadloze bereik.	Breng Bluetooth-apparaat dichterbij de tafelmicrofoon.
Audiostream is te luid of te zacht.	Volume gestreamd van tafelmicrofoon naar hoortoestel is niet optimaal.	Druk op de knop Volume + of – op de tafelmicrofoon.
Modus tafelmicrofoon: Spreker is moeilijk te horen in lawaaierige omgeving.	Tafelmicrofoon is mogelijk te ver van de spreker verwijderd.	Breng de tafelmicrofoon dichterbij de mond van de spreker.

Symptoom	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Modus microfoon op afstand: Spreker is moeilijk te horen in lawaaierige omgeving.	Tafelmicrofoon is mogelijk bedekt met kleding of is slecht geplaatst.	Zorg voor duidelijke toegang van de tafelmicrofoon tot de stem van de spreker.
Er worden geen gestreamde geluiden gehoord in de hoortoestellen.	Hoortoestellen zijn niet gekoppeld aan de tafelmicrofoon.	Volg de stappen in <i>Koppelen aan uw hoortoestel(len)</i> op blz. 7.
	Er is geen inkomend audiosignaal beschikbaar.	- Schakel de elektronische audiobron in. - Hef het dempen van de elektronische audiobron op of verhoog het volume.
Apparaat reageert niet.	Mogelijke foutconditie.	Druk op de aan/uit-knop gedurende 8 seconden om uitschakeling te forceren. Schakel in zoals gewoonlijk.

Beoogd gebruik

De tafelmicrofoon is een ondersteunend luisterapparaat dat geluid verzendt via bedrade oortjes of naar een 2,4 GHz draadloos hoortoestel met luchtgeleiding. Als het gedragen wordt door een spreker op afstand of in een lawaaierige omgeving, werkt het als een microfoon op afstand. Het werkt ook als tv-streamer wanneer het is aangesloten op de audio-uitgang van de tv.

De tafelmicrofoon is ontworpen om te voldoen aan de normen voor internationale elektromagnetische compatibiliteit. Het is echter nog steeds mogelijk dat u interferentie ondervindt die wordt veroorzaakt door storingen door elektriciteitskabels, metaaldetectoren op luchthavens, elektromagnetische velden van andere medische apparaten, radiosignalen en elektrostatische ontladingen. De tafelmicrofoon is ontworpen om te worden gereinigd met een vochtige doek die is bevochtigd met zeepwater.

Als u andere medische apparaten gebruikt of implanteerbare medische apparaten draagt, zoals defibrillatoren of pacemakers, en u zich zorgen maakt dat uw tafelmicrofoon interferentie met uw medische apparaat zou kunnen veroorzaken, neem dan contact op met uw arts of de fabrikant van uw medische apparaat voor informatie over het risico op verstoring. De tafelmicrofoon mag niet worden gedragen tijdens een MRI-procedure of in een hyperbare kamer. De tafelmicrofoon is niet formeel gecertificeerd voor gebruik in explosieve atmosferen, zoals aanwezig in kolenmijnen of bepaalde chemische fabrieken.

Elk ernstig incident dat zich heeft voorgedaan met betrekking tot uw Starkey-apparaat moet worden gemeld aan uw plaatselijke vertegenwoordiger van Starkey Hearing Technologies en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin u gevestigd bent. Een ernstig incident wordt gedefinieerd als elke storing, verslechtering van de kenmerken en/of prestaties van het apparaat, of onvolkomenheid in de gebruikershandleiding/labeling van het apparaat, die zou kunnen leiden tot de overlijden of ernstige verslechtering van de gezondheidstoestand van de gebruiker, OF dit bij herhaling veroorzaken.


Gebruik in vliegtuigen

De tafelmicrofoon mag niet worden gebruikt in vliegtuigen, tenzij specifiek toegestaan door het vlucht personeel.

Internationaal gebruik

De tafelmicrofoon is goedgekeurd voor gebruik met radiofrequenties die specifiek zijn voor uw land of regio en is mogelijk niet goedgekeurd voor gebruik buiten uw land of regio.

Houd er rekening mee dat gebruik tijdens internationale reizen interferentie met andere elektronische apparaten kan veroorzaken, of dat andere elektronische apparaten interferentie met uw tafelmicrofoon kunnen veroorzaken.

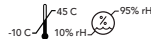

Uw tafelmicrofoon is ontworpen voor gebruik, opslag en vervoer binnen het temperatuurbereik van -10 °C tot 45 °C en een relatieve vochtigheid van 10%-95%, en hoogtelimieten van 70 kPa – 106 kPa (equivalent aan hoogtes vanaf 380 m tot 3000 m onder zeeniveau).

We zijn wettelijk verplicht om de volgende waarschuwingen te geven:



WAARSCHUWING: Het gebruik van de tafelmicrofoon direct naast andere elektronische apparatuur moet worden vermeden, omdat dit kan leiden tot onjuiste prestaties. Als dergelijk gebruik noodzakelijk is, controleer dan of uw hoortoestellen en de andere apparatuur normaal werken.

⚠ WAARSCHUWING: Het gebruik van andere accessoires, onderdelen of vervangings-onderdelen dan die van de fabrikant van de tafelmicrofoon kan leiden tot verhoogde elektromagnetische emissies en verminderde elektromagnetische immuniteit en kan leiden tot verminderde prestaties.

⚠ WAARSCHUWING: Als draagbare radiofrequentie-communicatieapparatuur op minder dan 30 cm afstand van uw tafelmicrofoon wordt gebruikt, kan dit leiden tot verslechtering van de prestaties van uw hoortoestel. Als dit gebeurt, ga dan weg van de communicatieapparatuur.

Hoewel de tafelmicrofoon niet formeel is gecertificeerd (IP-gecertificeerd) voor bescherming tegen binnendringen van stof of water volgens IEC 60529, is deze getest op het IP 52-niveau. Dit betekent dat de tafelmicrofoon beschermd is tegen stof. De batterij in uw tafelmicrofoon kan niet worden vervangen. Probeer niet om de batterij te vervangen. De tafelmicrofoon bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Open het apparaat niet en maak geen aanpassingen.

Sluit de tafelmicrofoon niet aan op apparaten die niet in deze gebruikershandleiding worden beschreven. De verwachte levensduur van de tafelmicrofoon is 3 jaar.

Technische beschrijving draadloze technologie

De tafelmicrofoon werkt in de 2,4-2,4835 GHz-band met een maximaal effectief uitgestraald vermogen van 8 dBm met transmissiemodulatietype 1M12FXD en 1,1 MHz bandbreedte. Het ontvangergedeelte van de radio heeft een bandbreedte van 2 MHz.

DRAADLOZE KENNISGEVINGEN

FCC-ID: 2AS2V-TM10

IC: 24964-TM10 (Model TM10)

FCC/IC-KENNISGEVING

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels en aan ISED Canada's licentievrije RSS-norm(en). De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

OPMERKING: De fabrikant is niet verantwoordelijk voor radio- of tv-interferentie veroorzaakt door onbevoegde wijzigingen aan deze apparatuur. Dergelijke wijzigingen kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

Hierbij verklaart Nuance Hearing dat de tafelmicrofoon van Starkey Laboratories Inc. voldoet aan de essentiële vereisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. Een kopie van de conformiteitsverklaring is verkrijgbaar via info@nuancehear.com

NCC-KENNISGEVING

Zonder toestemming van de NCC is het geen enkel bedrijf, onderneming of gebruiker toegestaan om de frequentie te wijzigen, het zendvermogen te verbeteren of de oorspronkelijke kenmerken en prestaties te wijzigen van een goedgekeurd radiofrequentie-apparaat met laag vermogen. De radiofrequentie-apparatuur met laag vermogen mag de veiligheid van het vliegtuig niet beïnvloeden en de wettelijke communicatie niet verstoren; indien dit wel het geval is, moet de gebruiker het

gebruik onmiddellijk staken totdat er geen interferentie meer is. De genoemde juridische communicatie betekent dat radiocommunicatie wordt uitgevoerd in overeenstemming met de Telecommunications Management Act. De radiofrequentie-apparatuur met laag vermogen moet gevoelig zijn voor de interferentie van juridische communicatie of ISM-apparaten die radiogolven uitzenden.

Informatie over regelgeving

Nuance Hearing
24 Raoul Wallenberg St.
Tel Aviv 6971920
Israël



Nuance Hearing
Packhorse Lane Bibury
Cirencester GL7 5NT
Engeland



Afval van elektronische apparatuur moet worden behandeld volgens de lokale regelgeving



Raadpleeg de gebruikershandleiding



Droog houden

Instructies voor het verwijderen van oude elektronica

Starkey Laboratories, Inc. vraagt u, de EU vereist, en uw lokale gemeenschapswetgeving vereist mogelijk, dat uw tafelmicrofoon wordt weggegooid via uw lokale recycling-/verwijderingsproces voor elektronica.

De onderstaande instructies worden verstrekt ten behoeve van het personeel dat zich bezighoudt met het afvoeren/recyclen. Voeg deze handleiding toe wanneer u de tafelmicrofoon afvoert.

ALLEEN VOOR VERWIJDERINGS-/RECYCLINGPERSONEEL

Dit product bevat een lithium-ion polymeerbatterij. Om deze batterij te verwijderen:

- Zet de tafelmicrofoon uit.
- Wrik de helften van de behuizing uit elkaar met een kleine schroevendraaier.
- Snijd de batterijdraden van de printplaat door om onbedoelde kortsluiting te voorkomen.
- Wrik de batterij weg van de behuizing met een breed, plat mes.

Dergelijke wijzigingen kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

[illegible]



P00003342



StarLink en Starkey zijn handelsmerken van Starkey Laboratories, Inc.

Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Starkey is onder licentie.

©2025 Starkey Laboratories, Inc. Alle rechten voorbehouden. P00003342 12/25 BKL3171-03-NL-XX

Octrooi: www.starkey.com/patents