

Bruksanvisning til din StarLink Bordmikrofon



Tilbehør til:

Trådløse høreapparater

Gratulerer med din nye bordmikrofon!

Bordmikrofonen din er designet for å forbedre lytting i støy ved å la deg fokusere på hovedtaleren i situasjoner hvor flere snakker samtidig, som i møter eller familiesammenkomster. Og få kontakt med verden rundt deg.

Bruk denne enkle håndboken for å komme i gang.

Pakken inneholder:

- Bordmikrofon
- Strømadapter
- USB-til-microUSB-kabel
- Pluggalternativer for:
 - USA
 - Europa
 - Australia
 - Storbritannia
- Pose
- Kablede øretelefoner med øretupper
- TV streaming kabel
- Holder og snor
- Silikonetui
- Brukermanual

Innhold

1. Bli kjent med din bordmikrofon

Møt din bordmikrofon.....	4
Sett opp din bordmikrofon.....	7
Bruk din bordmikrofon.....	9
Lad din bordmikrofon.....	18

3. Feilsøking.....20

4. Ytterligere veiledning

Tiltenkt bruk.....	23
FCC informasjon.....	24
Regulatorisk informasjon.....	25

Møt din bordmikrofon

Oversikt

1. MicroUSB port

- Lading med USB-til-MicroUSB-kabel.
- Strøm lyd med TV-streamingkabel.

2. Berøringstaster for retningsbestemmelse

Manuelt valg av fokus på en eller to retninger.

3. Segmenter

- Indikerer valgt(e) retning(er).
- Driftsindikator, viser:
 - Ladestatus
 - Av/På
 - Batteristatus
 - Paringsstatus
 - Volum
 - Ledningsforbindelse

4. Automatisk modus indikator

- På indikerer Automatisk modus.
- Av indikerer Surround eller Manuell modus.

5. Knapp for å skifte modus

Veksler mellom Automatisk og Surround modus.

6. Strømbryter

Slår Bordmikrofonen PÅ/AV.

7. 3.5 mm lydutgang

For tilkobling av kablede øretelefoner.

8. Volum opp (+) og ned (-) knapper

Juster volum.

9. Mikrofoner


Åtte innebygde mikrofoner for å fange opp talerens stemme.

10. Knapp for paring av høreapparater

Parer og kobler til høreapparat(er).

11. Magnetisk feste for snor


For bruk som samtaleforsterker/ekstern mikrofon.

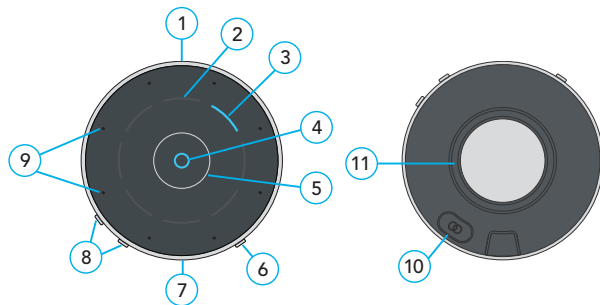

Møt din bordmikrofon

Oversikt over kablede hodetelefoner

1. **Øreplugger (small/medium/large)**
For personlig tilpasning.
2. **Volum opp (+) og ned (-) knapper**
Justerer volum.
3. **Knapp for å skifte modus**
Veksler mellom Automatisk og Surround modus
4. **3.5mm audio plugg**
Koble til bordmikrofonen i 3.5mm lydutgang.

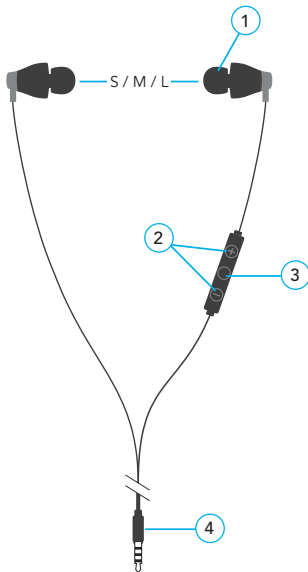

Sett opp din bordmikrofon

Slå PÅ/AV

Slå bordmikrofonen **PÅ** eller **AV** ved å trykke på strømbryteren:

- **PÅ** – hold inn strømbryteren i 1 sekund og slipp. Det grønne segmentet indikerer batteriets ladestatus.
- **MERK:** Hvis bordmikrofonen må lades, se *Lad din bordmikrofon på s. 18.*
- **AV** – hold inn strømbryteren i 1 sekund og slipp.



For å pare med høreapparater:

Før du bruker bordmikrofonen for første gang, må du pare den med høreapparatene. Dette gjør at tilbehøret ditt kan gjenkjenne høreapparatene dine slik at de kan fungere sammen.

STEG 1: Slå På din bordmikrofon


STEG 2: Slå dine høreapparater AV og PÅ.

- **For CROS høreapparat systemer:** Slå AV ditt høreapparat og CROS sender. Deretter, slå **PÅ** høreapparatet men la CROS senderen være **AV**.

STEG 3: Par bordmikrofonen med dine høreapparater.

1. Sørg for at høreapparatene ikke er koblet til Bluetooth-enheter i nærheten:

- Slå **AV** Bluetooth på din mobiltelefon.
 - Slå **AV** alle trådløse tilbehør allerede parete med dine høreapparater.
2. Plasser høreapparatene dine innenfor 15 cm fra din bordmikrofon.
 3. Hold inn paringsknappen i 2 sekunder og plasser bordmikrofonen med forsiden opp på en stabil overflate. De blinkende blå parentesene indikerer at Bluetooth® er klar til sammenkobling.

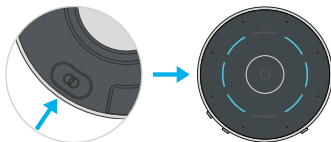

4. For et **par** høreapparater:

Venstre parentes	Høyre parentes	Parings resultat	Neste steg
(	)	Begge apparater parete	Ferdig!
(	)	Bare venstre apparat parete	Gjenta STEG 3, punkt 1-3
(	)	Bare høyre apparat parete	Gjenta STEG 3, punkt 1-3
(	)	Ingen høreapparater parete	Gjenta STEG 3, punkt 1-3

5. For et **enkelt** høreapparat:

Venstre parentes	Høyre parentes	Parings resultat	Neste steg
(		Venstre apparat parete.	Ferdig!
	)	Høyre apparat parete.	Ferdig!
(		Venstre apparat ikke parete.	Gjenta STEG 3, punkt 1-3
	)	Høyre apparat ikke parete.	Gjenta STEG 3, punkt 1-3

Ferdig! Gå til neste side for å begynne å bruke bordmikrofonen din.

Bruk din bordmikrofon

Din bordmikrofon er både en samtaleforsterker og en TV-streamer. Den strømmes lyd direkte til dine trådløse høreapparater.

Viktige bruksområder:

- **Bordmikrofon:** strømming av tale fra en valgt retning i modusene nedenfor. For detaljer, se Samtalestrømming på s. 14.
- Automatisk
- Manuell
 - En retning
 - To retninger

- Surround
- **Ekstern mikrofon:** strømmer stemmen til den som bærer bordmikrofonen. For detaljer, se *Hvordan bære din bordmikrofon* på s. 14.
- **TV streamer:** strømmer lyd med microUSB-kabel. For detaljer, se *TV Audio Streaming* på s.17.

Bruk din bordmikrofon:

STEG 1:

Sørg for at høreapparatene dine er PÅ

Påminnelse – Før du strømmer lyd for første gang, sørg for at høreapparatene dine er parat med bordmikrofonen. Se s. 7.

STEG 2: Start/stopp strømming av lyd

Gjør en av følgende:

- **Slå på den bordmikrofonen:**
Lydstrømming starter automatisk i høreapparatet.
- **Mobilapp for høreapparat:**
Åpne appen. Velg alternativet for å starte/stoppe strømming fra Tilbehør-skjermen.
- **Høreapparatets brukerkontroll:**
Hvis konfigurert av audiografen din, kan en spesifikk gest (f.eks. et langt trykk på en brukerkontroll) starte/stoppe strømming.

• Fernkontroll:

Hvis konfigurert av audiografen din, trykk på Favoritt-knappen.

MERK: En hørbar indikator kan lyde i høreapparatene dine for å signalisere start/stopp av lydstrømming.



STEG 3: Juster volumet. Gjør en av følgende:

- Trykk på **Volum opp (+) eller ned (-) knappen** på bordmikrofonen.
- Skyv **volumkontrollen** i Tilbehørsmenyen på din kompatible mobil app.
- Trykk på **Favorittknappen** på din **fjernkontroll**, bruk deretter volum opp/ned på fjernkontrollen*
- Trykk (eller tæpp) på **høreapparatets brukerkontroll**.*



MERK: Typisk trådløs rekkevidde er opptil 60 fot (20 M). Dette kan forkortes av miljøfaktorer (f.eks. hindringer, forstyrrelser, personers posisjon). Større driftsområder kan være mulig, men lyd- eller tilkoblingskvaliteten kan reduseres.

*Å kontrollere din bordmikrofon med denne funksjonen må konfigureres av audiografen din..

Segmenter

Segmentene identifiserer hvordan din bordmikrofon virker.

Drift

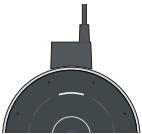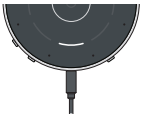	Orientering For best ytelse, sørg for at volumknappene og strømbryteren vender mot deg.
	Ledning - lyd ut Hvitt toppsegment indikerer linjeinngang (f.eks. TV-lyd).
	Ledning - lyd ut Hvitt bunnsegment-blink indikerer line-out-tilkobling (Hodetelefoner).
	Volum + Hvitt toppsegment blinker når volumet økes.
	Volum - Hvitt bunnsegment blinker når volumet senkes.

Pare høreapparater

	Blinkende blå parenteser Søker etter høreapparat(er).
	Stabile grønne parenteser Paring av høreapparat vellykket.
	Stabile røde parenteser Paring av høreapparat mislykket.


Se s. 7 for detaljer om paring av høreapparater.

Strømming av samtaler

	Automatisk Automatisk modus indikator (O) stabil blå. Blått segment indikerer retning på aktiv lytting.
	Manuell en/flu Ett eller to blue segmenter indikerer valgt(e) lytterretning(er).
	Surround Alle blå segmenter indikerer lytting i alle retninger.

Bære bordmikrofonen

Bordmikrofonen din kan bæres på en snor ved hjelp av hengeren som følger med, som bæres av personen som snakker. Det er best å plassere den innenfor 20 cm fra den som snakker.

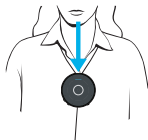

Instruksjoner for bruk av snor:

1. Fest den magnetiske holderen på undersiden av bordmikrofonen. Sørg for at den sitter godt fast.
2. Heng snoren rundt halsen. For å justere lengden, hold sylindren og trekk i lukkemekanismen. Når bordmikrofonen bæres av taleren, vil toppindikatoren lyse i 3 sekunder.

Hvordan din bordmikrofon hjelper

Strømming av samtaler

Bordmikrofonen er et allsidig, intelligent produkt. Den følger automatisk hovedtaleren i stille eller støyende innstillinger for å gi deg best mulig taleforståelse. Bordmikrofonen lar deg overstyre den automatiske modusen og manuelt velge opptil to talere blant gruppen. Surround-modusen er optimalisert for en stor gruppediskusjon i stille omgivelser. I tillegg kan bordmikrofonen bæres av en samtalepartner i støyende omgivelser.





På et bord

Plasser bordmikrofonen din midt på et bord for å lytte til en gruppe mennesker. For best taleforståelse, plasser alltid bordmikrofonen så nær samtalepartneren(e) som mulig.

	Automatisk Når indikatoren for automatisk modus lyser, følger bordmikrofonen automatisk hovedtaleren. Hvis indikatoren for automatisk modus er av, trykker du på berøringstasten Automatisk/surround for å aktivere den.
	Manuell, en taler Trykk på et hvilket som helst segment for å fokusere på en bestemt taler.
	Manuell, to talere Trykk og hold (1 sekund) et andre segment for å fokusere på en ekstra høyttaler.
	Surround Trykk på Automatisk/Surround-berøringstasten for å lytte til flere personer i stille omgivelser. Trykk på Automatisk/Surround-berøringstasten for å gå tilbake til Automatisk modus.

Strømming av TV-lyd (Ledning)

Strøm lyd fra din TV til dine høreapparater.

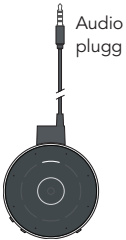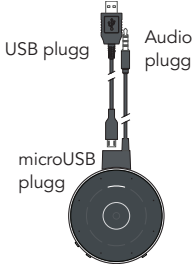	Sett TV-streamingkabelen inn i bordmikrofonens microUSB-kontakt. Sett inn 3,5 mm lydpluggen til TV-streamingkabelen i TV-ens lydutgang.
	For å lade opp bordmikrofonen mens du streamer lyd fra TV-en din, kan du sette inn microUSB-pluggen på ladekabelen i mikroUSB-kontakten for TV-streamingkabelen. Sett USB-pluggen til ladekabelen inn i strømforsyningskontakten. Koble strømforsyningen til stikkontakten.

Lade bordmikrofonen

For å lade din bordmikrofon:

1. Fest microUSB-enden av ladekabelen til microUSB-kontakten på bordmikrofonen.
2. Fest microUSB-enden av ladekabelen til kontakten på strømadapteren.
3. Koble strømadapteren til en ekstern strømkilde, som en stikkontakt.
4. Sjekk ladestatusen ved å bruke segmentene på bordmikrofonen.
Se neste side.



Segment status	Ladestatus
	Grønne segmenter indikerer batteriladenivået. Hvert segment representerer ca. 1 time. Det blinkende grønne segmentet indikerer gjeldende nivå. Hvis det lades under bruk, vil alle grønne segmenter kort avbryte andre indikatorer når batteriet er fulladet.
	Orange segmenter indikerer mindre enn 2 timer batterilevetid.
	Rødt segment indikerer mindre enn 1 time batterilevetid. Blinkende rødt segment indikerer et tomt batteri.


Fulladet kan bordmikrofonen strømmen lyd opptil 12 timer. Bordmikrofonen vil lades helt opp på ca. 2 timer.

Montere strømadapteren

Din bordmikrofon kan leveres med flere pluggalternativer som kan brukes i forskjellige land. Hvis strømadapteren krever montering, følg trinnene nedenfor.

Slik kobler du et pluggalternativ til strømadapteren:

1. Velg pluggalternativet for landet der du bruker bordmikrofonen.
2. Skyv pluggen inn i strømadapteren til den klikker på plass.
3. For å fjerne pluggalternativet, trykk på tappen og skyv pluggalternativet bort fra strømadapteren.

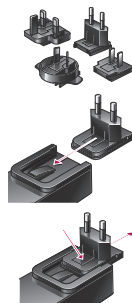

Troubleshooting guide

Problems with your Table Mic? Try these tips. If issues continue, contact your hearing care professional.

Symptom	Mulige årsaker	Løsninger
Ett (eller begge) høreapparat mister uventet lydstrømmen.	Høreapparater kan være på kanten av trådløs rekkevidde.	Flytt deg nærmere bordmikrofonen.
	Batterinivået i høreapparatet støtter ikke lenger lydstrømming.	• Bytt batteri i høreapparatet. • Lad opp høreapparatet.
	Store gjenstander, for eksempel møbler eller en vegg, kan degradere signalet.	For best ytelse bør høreapparatene dine være innenfor synsvidde av bordmikrofonen.
	Trådløs forbindelse med bordmikrofonen ble brutt.	Start strømmingen på nytt. Se Start/stopp strømming av lyd på s. 10.

Symptom	Mulige årsaker	Løsninger
Strømmet lyd kvalitet er forvrengt.	Lavt batterinivå i bordmikrofonen.	Lad opp bordmikrofonen. Se <i>Lad din bordmikrofon</i> på s. 18.
	Lydkildens volum er ikke optimalt.	Juster lydkildens lydstyrke til bedre lyd kvalitet oppnås.
Strømmet lyd kvalitet er ustabil.	Bluetooth device may be on the edge of wireless range.	Flytt Bluetooth-enhet nærmere bordmikrofonen.
Lydstrømmen er for sterk eller for svak.	Volume streamed from Table Mic to hearing aid not optimal.	Trykk på volum + eller – på bordmikrofonen.
Bordmikrofon modus: Vanskelig å høre samtale i støyende omgivelser.	Bordmikrofonen kan være for langt unna den som snakker.	Flytt bordmikrofonen nærmere den som snakker.

Symptom	Mulige årsaker	Løsninger
Ekstern mikrofon modus: Vanskelig å høre samtale i støyende omgivelser.	Bordmikrofonen kan være dekket av klær eller dårlig plassert.	Sørg for fri sikt mellom bordmikrofonen og den som snakker
Hører ingen strømmet lyd i høreapparatene.	Høreapparatene er ikke parett med bordmikrofonen.	Follow steps in <i>Pair to your hearing aid(s)</i> on p. 7.
	Ingen innkommende lydsignal er tilgjengelig.	• Slå på den elektroniske lydkilden • Slå på eller øk volumet på elektronisk lydkilde.
Enheten reagerer ikke.	Mulig feilstatus.	Hold inn strømbryteren i 8 sekunder for tvungen avstengning. Slå på som vanlig.

Tiltenkt bruk

Bordmikrofonen er et hjelpeapparat som overfører lyd via kablede øretelefoner eller til et 2,4 GHz trådløst luftledningshøreapparat. Når den bæres av en fjern høyttaler eller brukes i støyende omgivelser, fungerer den som en ekstern mikrofon. Den fungerer også som en TV-streamer når den er koblet til TV-ens lydutgang.

Bordmikrofonen er designet for å overholde de strengeste standardene for internasjonal elektromagnetisk kompatibilitet. Det er imidlertid fortsatt mulig at du kan oppleve forstyrrelser forårsaket av forstyrrelser i strømledningen, metalldetektorer på flyplasser, elektromagnetiske felt fra annet medisinsk utstyr, radiosignaler og elektrostatisk utladninger.

Bordmikrofonen er designet for å rengjøres med en fuktig klut fuktet med såpevann.

Hvis du bruker annet medisinsk utstyr eller har på deg implanterbart medisinsk utstyr som defibrillatorer eller pacemakere og er bekymret for at din bordmikrofonen kan forårsake interferens med det medisinske utstyret ditt, vennligst kontakt legen din eller produsenten av det medisinske utstyret for informasjon om risikoen for forstyrrelser. Bordmikrofonen skal ikke brukes under en MR-prosedyre eller i et hyperbarisk kammer. Bordmikrofonen er ikke formelt sertifisert for å operere i eksplosive atmosfærer som kan finnes i kullgruver eller visse kjemiske fabrikker.


Enhver alvorlig hendelse som har oppstått i forhold til Starkey-enheden din bør rapporteres til din lokale Starkey Hearing Technologies-representant og den kompetente myndigheten i medlemsstaten du er etablert. En alvorlig hendelse er definert som enhver funksjonsfeil, forringelse av enhetens egenskaper og/eller ytelse, eller utilstrekkelighet i enhetens driftshåndbok/merking som kan føre til død eller alvorlig forverring av helsestanden til brukeren, ELLER kan gjøre det ved gjentakelse.

Bruk ombord på fly

Bordmikrofonenskal ikke brukes på fly med mindre det er spesifikt tillatt av kabinpersonalet.

Bruk i utlandet

Bordmikrofonen er godkjent for å operere ved radiofrekvenser som er spesifikke for ditt land eller din region og er kanskje ikke godkjent for bruk utenfor ditt land eller din region. Vær oppmerksom på at bruk under internasjonale reiser kan forårsake interferens med andre elektroniske enheter, eller andre elektroniske enheter kan forårsake interferens med Bordmikrofonen

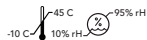

Bordmikrofonen din er utformet for å fungere, lagres og transporteres innenfor temperaturområdet -10°C (14°F) til 45°C (113°F) og relativ fuktighetsområde på 10%-95%, og høyde grenser 70 kPa – 106 kPa (tilsvarer høyder fra 1200 fot (380 m) under havoverflaten til 10 000 fot (3 000 m))

Vi er forskriftsmessig pålagt å gi følgende advarsler:



ADVARSEL: Bruk av bordmikrofonen direkte ved siden av annet elektronisk utstyr bør unngås fordi det kan føre til feil ytelse. Hvis slik bruk er nødvendig, noter deg om dine høreapparater og det andre utstyret fungerer normalt.

ADVARSEL: Bruk av annet tilbehør, komponenter eller reservedeler enn de som er levert av produsenten av bordmikrofonen, kan føre til økt elektromagnetisk stråling og redusert elektromagnetisk immunitet og kan føre til forringelse av ytelsen.

ADVARSEL: Hvis bærbart radiofrekvenskommunikasjonsutstyr brukes nærmere enn 30 cm (12") fra bordmikrofonen, kan det føre til forringelse av ytelsen til høreapparatet. Hvis dette skjer, flytt deg bort fra kommunikasjonsutstyret.

Selv om bordmikrofonen ikke er formelt sertifisert (IP-klassifisert) for beskyttelse mot støv eller vanninntrengning, i henhold til IEC 60529, har den blitt testet til IP 52-nivået. Dette betyr at bordmikrofonen er beskyttet mot støv. Batteriet i bordmikrofonen kan ikke byttes ut. Ikke forsøk å bytte ut batteriet. Bordmikrofonen inneholder ingen deler som brukeren kan reparere. Ikke åpne eller modifier den.

Ikke koble bordmikrofonen til enheter som ikke er beskrevet i denne håndboken. Forventet levetid for bordmikrofonen er 3 år.

Trådløs teknisk beskrivelse

Bordmikrofonen opererer i 2,4-2,4835 GHz-båndet med en maksimal effektiv utstrålt effekt på 8 dBm med overføringsmodulasjonstype på 1M12FXD og 1,1 MHz båndbredde. Mottakerdelen av radioen har en båndbredde på 2 MHz.

TRÅDLØSE MERKNADER

FCC ID: 2AS2V-TM10

IC: 24964-TM10 (Model TM10)

FCC/IC MERKNAD

Denne enheten overholder del 15 av FCC-reglene og med ISED Canadas lisensfrie RSS-standard(er). Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må akseptere all interferens som mottas, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift av enheten.

MERK: Produsenten er ikke ansvarlig for radio- eller TV-interferens forårsaket av uautoriserte modifikasjoner av dette utstyret. Slike endringer kan ugyldiggjøre brukerens rett til å betjene utstyret.

Herved erklærer Nuance Hearing at Starkey Laboratories Inc. Bordmikrofon er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. En kopi av samsvarserklæringen kan fås fra info@nuancehear.com

NCC MERKNAD

Uten tillatelse gitt av NCC, har ikke noe selskap, foretak eller bruker lov til å endre frekvens, forbedre sendekraft eller endre originale egenskaper samt ytelse til godkjente laveffekts radiofrekvensenheter. Laveffekts radiofrekvensenheter skal ikke påvirke flysikkerheten og forstyrre lovlig kommunikasjon; Hvis det blir funnet, skal brukeren slutte å operere umiddelbart inntil ingen forstyrrelser oppnås. Den nevnte lovlige kommunikasjonen betyr at radiokommunikasjon drives i samsvar med

Telekommunikasjonsforvaltningsloven. Radiofrekvensenheter med lav effekt må være følsomme for forstyrrelser fra lovlig kommunikasjon eller ISM-radiobølgeutstrålte enheter.

Regulatorisk informasjon



Nuance Hearing
24 Raoul Wallenberg St.
Tel Aviv 6971920
Israel



Nuance Hearing
Packhorse Lane Bibury
Cirencester GL7 5NT
England



Avfall fra elektronisk utstyr skal håndteres i henhold til lokale forskrifter



Les bruksanvisningen



Holdes tørt

Instruksjoner for avhending av gammel elektronikk

Starkey Laboratories, Inc. oppfordrer, EU krever, og lokalsamfunnets lover kan kreve at Ekstern mikrofon+ avhendes via din lokale prosess for resirkulering/avhending av elektronikk. Instruksjonene nedenfor er gitt til fordel for avhendings-/resirkuleringspersonell. Vennligst ta med denne håndboken når du kaster din Ekstern mikrofon +.

KUN FOR RESIRKULERINGS/AVHENDINGSPERSONELL

Dette produktet inneholder et litium-ion-polymerbatteri.


Slik fjerner du dette batteriet:

- Slå av Ekstern Mikrofon +.
- Lirk hushalvdelen fra hverandre med en liten skrutrekker.r.
- Klipp av batteriledningene fra kretskortet for å forhindre utilsiktet kortslutning.
- Lirk batteriet vekk fra huset med et bredt flatt blad..

Slike endringer kan ugyldiggjøre brukerens rett til å betjene utstyret.

Symbol	Symbol betyr	Anvendt Standard	Symbol Nummer
	Produsent	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.1
	Autorisert representant i den Europeiske unionen	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.2
	Produksjonsdato	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.3
	Katalognummer	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.6
	Serienummer	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.7
	Medisinsk utstyr	BS EN ISO 15223-1:2021	5.7.7
	Holdes tørt	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.4
	Temperaturgrense	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.7
	Fuktighetsbegrensning	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.8
	Aktsomhet	BS EN ISO 15223-1:2021	5.4.4
	Advarsel	EC 60601-1, Reference no. Table D.2, Safety sign 2	ISO 7010-W001
	Les bruksanvisningen	EC 60601-1, Reference no. Table D.2, Safety sign 10	ISO 7010-M002
	Avhendes separat	DIRECTIVE 201 2/19/EU (WEEE)	Annex IX
	Klasse II utstyr	IEC 60417 Reference no. Table D.1	Symbol 9 (IEC 60417- 5172)
	Regulatorisk samsvarmerke (RCM)	AS/NZS 4417.1:2012	N/A
	Giteki merke	Japanese Radio Law	N/A
	Likestrøm	IEC 60601-1 Reference no. Table D.1	IEC 60417-5031
	Resirkuleringssymbol	European Parliament and Council Directive 94/62/EC	Annex I-VII
	Importør	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.8
	Oversettelse	BS EN ISO 15223-1:2021	5.7.8

Starkey Norway AS
Postboks 74 Sentrum
4001 Stavanger

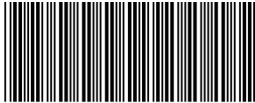

P00008336



StarLink and Starkey are trademarks of Starkey Laboratories, Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Starkey is under license.

©2025 Starkey Laboratories, Inc. All Rights Reserved. P000008336 12/25 BKL3171-03-NO-XX

Patent: www.starkey.com/patents