

Instrukcja obsługi

Mikrofon stołowy

StarLink



Akcesorium dla:

bezprzewodowych aparatów słuchowych

Spis treści

1. Wprowadzenie	3
Budowa Mikrofonu Stołowego	4
Parowanie Mikrofonu Stołowego	7
Użytkowanie Mikrofonu Stołowego	10
Wskaźniki Mikrofonu Stołowego	12
Tryby Mikrofonu Stołowego	15
Ładowanie Mikrofonu Stołowego	18
3. Przewodnik rozwiązywania problemów	19
4. Dodatkowe informacje	22
Przeznaczenie	22
Informacje regulacyjne	24

Wprowadzenie

Mikrofon stołowy to urządzenie wspomagające słyszenie oraz streamer telewizyjny. Przesyła dźwięk bezpośrednio do bezprzewodowych aparatów słuchowych 2,4 GHz. Główne tryby użytkowania:

- Mikrofon stołowy: przesyłanie głosu mówcy z wybranego kierunku w następujących trybach:
 - o Automatyczny,
 - o Manualny (Pojedynczy kierunek, Podwójny kierunek),
 - o Wszechkierunkowy.
- Zdalny mikrofon: przesyłanie głosu osoby noszącej urządzenie
- TV Streamer: strumieniowe przesyłanie audio przy użyciu wejścia microUSB.

Zawartość opakowania

- Mikrofon stołowy
- Instrukcja użytkowania
- Woreczek
- Słuchawki przewodowe
- Kabel do strumieniowania TV
- Smycz
- Silikonowe opakowanie

1. Wejście MicroUSB

- Ładowanie za pomocą kabla USB-MicroUSB
- Strumieniowanie dźwięków za pomocą kabla TV

2. Kierunkowość - przycisk dotykowy

- Manualny wybór jednego lub podwójnego kierunku

3. Wskaźniki

- Wskaźnik wybranej kierunkowości
- Wskaźniki operacyjne informujące o:
 - o Poziomie naładowania
 - o Zasilaniu
 - o Poziomie baterii
 - o Statusie parowania
 - o Głośności
 - o łączności Line-in/out

4. Tryb automatyczny

- Włączony wskazuje na tryb Automatyczny
- Wyłączony wskazuje na Wszechkierunkowość lub tryb Manualny

5. Przycisk zmiany trybu

- Przełącza między trybem Automatycznym, a Wszechkierunkowym

6. Przycisk zasilania

- Naciśnij, aby Włączyć/Wyłączyć

7. Wejście 3.5mm audio jack

- Do podłączenia słuchawek przewodowych

8. Głośność +/-

- Dostosowanie poziomu głośności

9. Mikrofon


- Zbiera głos mówcy

10. Przycisk parowania

- Łączy z aparatami słuchowymi

11. Magnetyczny zaczep do powieszenia

- Do noszenia Mikrofonu Stołowego

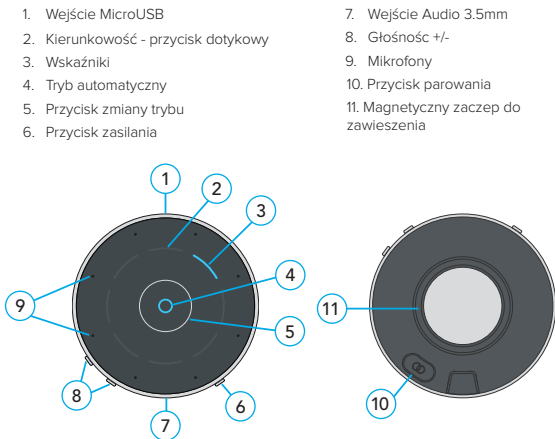

Słuchawki przewodowe

1. Miękki uchwyt

Opcjonalnie, dla indywidualnego dopasowania i komfortowego noszenia

2. Nasadki douszne (małe/średnie/duże)

Dla precyzyjnego dopasowania

3. Pilot

Szybki dostęp do funkcji


4. Głośność +/-

Dostosowanie głośności strumieniowanego dźwięku

5. Przełącznik trybów

Przełącza tryby Manualny oraz Wzręczkierunkowy Przełącznik trybów

6. Wtyczka Audio 3,5mm

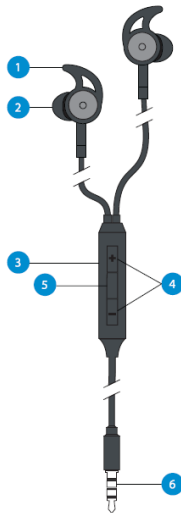

Parowanie

Aby Mikrofon stołowy działał z aparatami słuchowymi, najpierw należy go sparować z każdym aparatem słuchowym. Ta czynność wykonywana jest tylko raz, ponieważ mikrofon stołowy i aparaty słuchowe powinny się automatycznie rozpoznawać.


Aby sparować Mikrofon stołowy z aparatami słuchowymi:

1. Upewnij się, że Twoje aparaty słuchowe nie są podłączone do pobliskich urządzeń Bluetooth®. Aby to zrobić:
 - Wyłącz Bluetooth w Twoim telefonie.
 - Wyłącz znajdujące się w pobliżu akcesoria TV lub zdalny mikrofon +, które wcześniej sparowałeś z aparatami słuchowymi.
 - Wyłącz, a następnie włącz aparaty słuchowe.


Uwaga: W przypadku systemu CROS wyłącz zarówno aparat słuchowy, jak i nadajnik CROS. Włącz tylko aparat słuchowy, upewniając się, że nadajnik CROS pozostaje wyłączony.

* Typowy zasięg działania wynosi do 10 metrów (~ 30 stóp). Zasięg działania może zostać zmniejszony przez czynniki środowiskowe, takie jak przeszkody, zakłócenia i położenie ciała. Możliwe są większe odległości operacyjne, chociaż jakość dźwięku i łączność mogą się pogorszyć.

2. Umieść aparaty słuchowe w odległości 15cm od Mikrofonu.

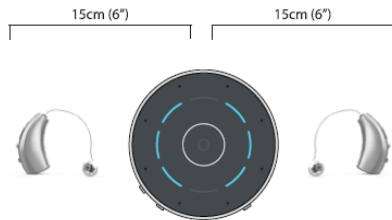

3. Przytrzymaj Przycisk Parowania przez 2 sekundy i umieść 15cm (6") 15cm (6") Mikrofon stołowy ekranem do góry na płaskiej powierzchni. Migające niebieskie "nawiasy" oznaczają, że urządzenie jest gotowe do sparowania.

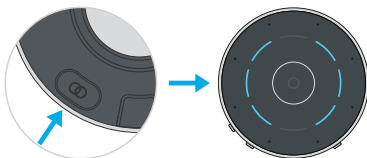

5. Dla **1** aparatów słuchowych:

Lewy Wskaźnik	Prawy Wskaźnik	Status parowania	Następny krok
(		Lewy aparat został sparowany	Ukończony
	)	Prawy aparat został sparowany	Ukończony
(		Lewy aparat nie został sparowany	Powtórz 1 – 3
	)	Prawy aparat nie został sparowany	Powtórz 1 – 3

4. Dla **2** aparatów słuchowych:


Lewy Wskaźnik	Prawy Wskaźnik	Status parowania	Następny krok
(	)	Oba aparaty zostały sparowane	Ukończony
(	)	Tylko lewy aparat został sparowany	Powtórz 1 – 3
(	)	Tylko prawy aparat został sparowany	Powtórz 1 – 3
(	)	Oba aparaty nie zostały sparowane	Powtórz 1 – 3

Noszenie Mikrofonu stołowego

Mikrofon stołowy można nosić na dołączonej smyczy. Powinien być umieszczony na środku w odległości 20 cm (8 ") od ust mówcy.

Smycz:

- Przymocuj zaczep magnetyczny z tyłu mikrofonu stołowego. Upewnij się, że jest prawidłowo włożony i zabezpieczony.
- Umieść smycz na szyi. Aby wyregulować długość, przytrzymaj cylinder i pociągnij zamknięcie.
- Kiedy mikrofon stołowy jest noszony przez mówcę, górny wskaźnik zaświeci się na 3 sekundy.

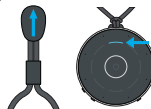

Użytkowanie

1. Aby wyłączyć Mikrofon stołowy, wciśnij przycisk Zasilania
2. Zielony wskaźnik poinformuje o poziomie naładowania baterii.
3. Upewnij się, że aparaty słuchowe są włączone.
4. Aby uruchomić strumieniowanie, otwórz aplikację do aparatów słuchowych na smartfonie i uruchom tryb strumieniowania na ekranie Akcesoria.
5. Aby dostosować poziom głośności strumieniowanego dźwięku wciśnij przycisk +/-
6. Aby wyłączyć strumieniowanie, wyłącz Mikrofon.

Codzienne użytkowanie

Włączanie zasilania

Wciśnij przycisk zasilania przez 1 sekundę.

Wyłączanie zasilania

Wciśnij przycisk zasilania przez 1 sekundę. Zielony wskaźnik poinformuje o poziomie naładowania baterii, następnie urządzenie wyłączy się.

Ładowanie akumulatora

Podłącz koniec kabla microUSB do gniazda microUSB w mikrofonie stołowym. Podłącz koniec USB kabla ładującego do gniazda USB w zasilaczu. Pełne naładowanie zasil mikrofon stołowy na **12 godzin** strumieniowania. Całkowite naładowanie urządzenia zajmuje około **2 godzin**.



Wskaźniki operacyjne

	Położenie produktu Aby uzyskać najlepszą wydajność, upewnij się, że przyciski głośności i zasilania skierowane są w Twoją stronę.
	Połączenie Line-in Biały górny wskaźnik wskazuje połączenie Line-in (np. Dźwięk telewizora).
	Połączenie Line-out Biały dolny wskaźnik wskazuje połączenie Line-in (słuchawki).
	Głośność + Biały górny wskaźnik miga, gdy głośność jest zwiększana.
	Głośność - Biały dolny wskaźnik miga, gdy głośność jest zmniejszana.

Wskaźniki parowania

	Migający niebieski Szuka aparatów słuchowych
	Stały zielony Parowanie zakończone
	Stały czerwony Parowanie przerwane/ nieudane

Sprawdź „Parowanie” na stronie 7, aby uzyskać więcej informacji na temat parowania aparatów słuchowych.

Wskaźniki strumieniowania

	Automatyczny Wskaźnik Trybu Automatycznego (O) stały niebieski. Niebieski wskaźnik informuje o aktywnym kierunku słuchania.
	Manualny pojedynczy/podwójny Jeden lub dwa niebieskie wskaźniki informują o wybranym kierunku/kierunkach słuchania.
	Wszechkierunkowy Wszystkie niebieskie wskaźniki włączone.

Włączanie/ Wyłączanie Auto Strumieniowania

Strumieniowe przesyłanie dźwięku z mikrofonu stołowego można uruchamiać lub zatrzymywać na różne sposoby:

- Włączenie Mikrofonu stołowego: Autostrumieniowanie włączy się automatycznie.
- Pilot: Jeśli protetyk słuchu skonfigurował to ustawienie, naciśnij przycisk Ulubione.
- Kontrola użytkownika aparatu słuchowego: Jeśli protetyk słuchu skonfigurował to ustawienie, wykonaj odpowiedni "gest" (np. długie naciśnięcie kontrolki użytkownika) może rozpocząć / zatrzymać transmisję.

Strumieniowe przesyłanie dźwięku zatrzyma się również po wyłączeniu mikrofonu stołowego.

W aparatach słuchowych odtwarzany jest dźwięk sygnalizujący rozpoczęcie / zakończenie transmisji audio.

Tryb strumieniowania konwersacji

Mikrofon stołowy to wszechstronne i inteligentne urządzenie.

Automatycznie podąża za głównym źródłem dźwięku (mowy) w cichych lub hałaśliwych środowiskach akustycznych, aby zapewnić najlepsze zrozumienie mowy. Mikrofon stołowy pozwala wyłączyć tryb automatyczny i ręcznie wybrać do dwóch mówców w grupie. Tryb Wszechkierunkowy jest zoptymalizowany do dyskusji w dużej grupie w cichych środowiskach akustycznych.



Tryb grupowy

Umieść mikrofon stołowy na środku stołu, aby dobrze słyszeć grupę ludzi. Aby jeszcze lepiej rozumieć mowę, zawsze zbliżaj mikrofon stołowy do rozmówcy.

	Automatyczny Gdy zaświeci się wskaźnik trybu automatycznego, mikrofon stołowy głównym mówcą. Jeśli wskaźnik trybu automatycznego jest wyłączony, dotknij przycisk Tryb Automatyczny / Wszechkierunkowy, aby go włączyć.
	Jedno źródło dźwięku Stuknij dowolny wskaźnik aby skupić się na określonym źródle dźwięku (mowy).
	Dwa źródła dźwięku Naciśnij i przytrzymaj (1 sekundę) drugi wskaźnik, aby skupić się na dodatkowym źródle dźwięku (mowy).
	Wszechkierunkowy Naciśnij przycisk Trybu Automatyczny / Wszechkierunkowy, aby słuchać wielu osób w cichych środowiskach akustycznych. Naciśnij przycisk Trybu Automatyczny / wszechkierunkowy, aby powrócić do trybu automatycznego.


Strumieniowanie TV (Line-in)

Strumieniowanie dźwięku z telewizora do aparatów słuchowych.

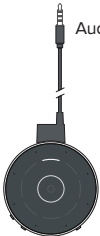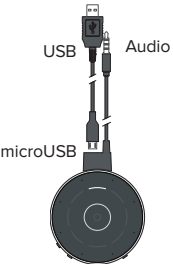	Audio Włóż kabel strumieniowania TV do gniazda microUSB Mikrofonu stołowego. Włóż wtyczkę 3,5 mm kabla TV do przesyłania strumieniowego do gniazda audio telewizora.
	USB Audio Aby naładować mikrofon stołowy podczas przesyłania strumieniowego dźwięku z telewizora, możesz włożyć wtyczkę microUSB kabla ładującego do gniazda microUSB Włóż wtyczkę USB kabla ładującego do gniazda zasilania. Podłącz zasilacz do gniazdka ściennego.

Ładowanie akumulatora

Podłącz koniec kabla microUSB do gniazda microUSB w mikrofonie stołowym. Podłącz koniec USB kabla ładującego do gniazda USB w zasilaczu. Pełne naładowanie zasila mikrofon stołowy na 12 godzin strumieniowania. Całkowite naładowanie urządzenia zajmuje około 2 godzin.

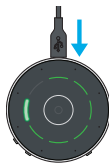

	Zielone wskaźniki informują o poziomie naładowania baterii. Każdy wskaźnik reprezentuje około 1 godziny. Migający zielony wskaźnik informuje o aktualnym poziomie naładowania. Jeśli urządzenie jest ładowane podczas użytkowania, wszystkie zielone wskaźniki na krótko przerywają działanie innych funkcji, dopóki akumulator nie będzie w pełni naładowany.
	Pomarańczowe wskaźniki informują o naładowaniu baterii umożliwiającym działanie urządzenia mniej niż 2 godziny.
	Czerwony wskaźnik informuje o naładowaniu baterii umożliwiającym działanie urządzenia mniej niż 1 godzinę. Migający wskazuje na rozładowaną baterie.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Jeden lub oba aparaty słuchowe nieoczekiwanie przestają strumieniować dźwięk	Aparaty słuchowe mogą być poza zasięgiem bezprzewodowym.	Zmniejsz zasięg do Mikrofonu stołowego.
	Poziom naładowania baterii jest za niski do strumieniowania dźwięku.	• Wymień baterie na nową. • Naładuj akumulator.
	Duży przedmiot, taki jak meble lub ściana, może osłabiać sygnał.	Aparaty słuchowe powinny znajdować się w zasięgu Mikrofonu stołowego.
	Utracono połączenie bezprzewodowe z Mikrofonem stołowym.	Aby ponownie uruchomić strumień audio, wykonaj czynności opisane w sekcji Włącz/ Wyłącz przesyłanie strumieniowe audio.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Strumieniowany dźwięk jest zniekształcony	Niski poziom baterii w Mikrofonie stołowym.	Naładuj Mikrofon stołowy.
	Głośność źródła dźwięku nie jest wystarczająca.	Dostosuj poziom głośności źródła dźwięku, aż do uzyskania lepszej jakości.
Strumieniowany dźwięk jest niespójny	Urządzenie może znajdować się na granicy zasięgu bezprzewodowego.	Przenieś urządzenie Bluetooth bliżej Mikrofonu stołowego.
Strumieniowany dźwięk jest za głośny lub za cichy	Głośność strumieniowanego dźwięku z Mikrofonu stołowego dźwięku nie jest wystarczająca.	Naciśnij przycisk głośności + lub - na Mikrofonie stołowym.
Tryb Mikrofonu stołowego: Problem z usłyszeniem mówcy w hałaśliwym otoczeniu	Mikrofon stołowy może znajdować się zbyt daleko od mówcy.	Przesuń Mikrofon stołowy bliżej ust mówcy.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Tryb Zdalnego Mikrofonu : Problem z usłyszeniem mówcy w hałaśliwym otoczeniu	Mikrofon stołowy może być przykryty odzieżą lub źle położony.	Zapewnij odpowiednie ułożenie Mikrofonu stołowego u mówcy.
Strumieniowany dźwięk nie jest słyszalny w aparatach słuchowych	Aparaty słuchowe nie są sparowane z Mikrofonem stołowym.	Postępuj zgodnie z instrukcjami w sekcji Parowanie.
	Brak przychodzącego sygnału audio.	• Włącz elektroniczne źródło dźwięku. • Wyłącz wyciszenie lub zwiększ głośność w elektronicznym źródle dźwięku.
Urządzenie nie odpowiada	Możliwy błąd urządzenia.	Naciśnij przycisk zasilania przez 8 sekund, aby wymusić wyłączenie. Włącz urządzenie.

Przeznaczenie

Mikrofon Stołowy jest urządzeniem wspomagającym słyszenie, które przesyła dźwięk za pomocą przewodowych słuchawek lub bezprzewodowych aparatów słuchowych na przewodnictwo powietrzne. Gdy jest noszony przez mówcę znajdującego się w oddali lub używany w hałaśliwych środowiskach, pełni funkcję Mikrofonu Zdalnego. Działa również jako Streamer TV po podłączeniu do wyjścia audio telewizora.

Mikrofon Stołowy jest zaprojektowany zgodnie ze standardami międzynarodowej kompatybilności elektromagnetycznej. Niemniej jednak, możliwe jest doświadczanie zakłóceń spowodowanych przez zaburzenia linii energetycznych, detektory metalu na lotniskach, pola elektromagnetyczne od innych urządzeń medycznych, sygnały radiowe i wyładowania elektrostatyczne.

Jeśli używasz innych urządzeń medycznych lub nosisz implantowane urządzenia medyczne, takie jak defibrylatory czy rozruszniki serca, i obawiasz się, że Mikrofon Stołowy może powodować zakłócenia z Twoim urządzeniem medycznym, skontaktuj się z lekarzem lub producentem swojego urządzenia medycznego w celu uzyskania informacji o ryzyku zakłóceń. Mikrofon Stołowy nie powinien być używany podczas procedury MRI ani w komorze hiperbarycznej. Mikrofon Stołowy nie jest formalnie certyfikowany do pracy w przestrzeniach zagrożonym wybuchem, takich, które mogą występować np. w kopalniach węgla lub niektórych fabrykach chemicznych.

Każdy poważny incydent związany z urządzeniem Starkey powinien być zgłoszony lokalnemu przedstawicielowi Starkey oraz właściwemu organowi Państwa Członkowskiego, w którym masz miejsce zamieszkania. Poważny incydent definiuje się jako każde uszkodzenie, pogorszenie charakterystyki i/lub wydajności urządzenia lub nieadekwatność w Instrukcji Obsługi/etykietowaniu urządzenia, które mogłyby prowadzić do śmierci lub poważnego pogorszenia stanu zdrowia użytkownika LUB mogłyby to zrobić w przypadku ponownego wystąpienia.


Używanie w samolotach

Mikrofon Stołowy nie powinien być używany w samolotach, chyba że personel pokładowy wyraźnie na to pozwoli.

Używanie międzynarodowe

Mikrofon Stołowy jest zatwierdzony do działania na częstotliwościach radiowych specyficznych dla Twojego kraju lub regionu i może nie być zatwierdzony do użytku poza Twoim krajem lub regionem.

Pamiętaj, że użytkowanie podczas podróży międzynarodowych może powodować zakłócenia z innymi urządzeniami elektronicznymi lub inne urządzenia elektroniczne mogą powodować zakłócenia z Twoim Mikrofonem Stołowym.

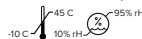

Twój Mikrofon Stołowy jest zaprojektowany do pracy, przechowywania i transportu w zakresie temperatur od -10°C (14°F) do 45°C (113°F), przy względnej wilgotności powietrza od 10% do 95% i w zakresie wysokości od 70 kPa do 106 kPa (co odpowiada wysokości od 380 m poniżej poziomu morza do 3,000 m n.p.m.).

Zgodnie z przepisami jesteśmy zobowiązani do przekazania następujących ostrzeżeń:

⚠️ OSTRZEŻENIE: Należy unikać używania Mikrofonu Stołowego bezpośrednio obok innych urządzeń elektronicznych, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie. Jeśli takie użycie jest konieczne, sprawdź, czy Twoje aparaty słuchowe i inne urządzenia działają prawidłowo.

⚠️ OSTRZEŻENIE: Użycie akcesoriów, komponentów lub części zamiennych innych niż te dostarczone przez producenta Mikrofonu Stołowego może skutkować zwiększoną emisją elektromagnetyczną i zmniejszoną odpornością elektromagnetyczną, co może prowadzić do pogorszenia wydajności urządzenia.

⚠️ OSTRZEŻENIE: Jeśli przenośne urządzenia komunikacji radiowej są używane bliżej niż 30 cm (12") od Twojego Mikrofonu Stołowego, może to spowodować pogorszenie działania aparatu słuchowego. W przypadku wystąpienia tego zjawiska, oddal się od urządzenia komunikacyjnego.

Chociaż Mikrofon Stołowy nie jest formalnie certyfikowany (oceniony według normy IP) w zakresie ochrony przed wnikaniem kurzu lub wody zgodnie z normą IEC 60529, został przetestowany na poziomie IP 52. Oznacza to, że Mikrofon Stołowy jest chroniony przed kurzem. Bateria w Twoim Mikrofonie Stołowym nie jest wymienna. Nie próbuj jej wymieniać. Mikrofon Stołowy nie zawiera żadnych części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Nie otwieraj ani nie modyfikuj urządzenia.

Nie podłączaj Mikrofonu Stołowego do żadnych urządzeń nieopisanych w niniejszej instrukcji.

Przewidywana żywotność Mikrofonu Stołowego wynosi 3 lata.

Dane techniczne łączności bezprzewodowej

Mikrofon Stołowy działa w paśmie 2.4-2.4835 GHz z maksymalną efektywną mocą wypromieniowaną wynoszącą 8 dBm, z modulacją transmisji typu IM12FXD i szerokością pasma 1,1 MHz. Sekcja odbiorcza radia ma szerokość pasma 2 MHz.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPRZEWODOWOŚCI

FCC ID: 2AS2V-TM10

IC: 24964-TM10 (Model TM10)

OSTRZEŻENIE FCC/IC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 zasad FCC oraz ze standardami RSS ISSED Kanada dotyczącymi urządzeń bez licencji. Działanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń, oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie urządzenia.

UWAGA: Producent nie odpowiada za zakłócenia radiowe lub telewizyjne spowodowane nieautoryzowanymi modyfikacjami tego sprzętu. Takie modyfikacje mogą spowodować unieważnienie prawa do użytkowania urządzenia.

Niniejszym Nuance Hearing oświadcza, że Mikrofon Stołowy Starkey Laboratories Inc. jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi odpowiednimi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/EU. Kopię Deklaracji Zgodności można uzyskać, pisząc na adres info@nuancehear.com.

OSTRZEŻENIE NCC

WiBeZ zgody NCC żadna firma, przedsiębiorstwo ani użytkownik nie ma prawa zmieniać częstotliwości, zwiększać mocy nadawania ani zmieniać oryginalnych cech oraz wydajności zatwierdzonych urządzeń niskiej mocy częstotliwości radiowej. Urządzenia niskiej mocy częstotliwości radiowej nie mogą wpływać

na bezpieczeństwo samolotów ani zakłócać komunikacji radiowej; w przypadku stwierdzenia takich zakłóceń, użytkownik musi natychmiast zaprzestać użytkowania urządzenia, aż do ustania zakłóceń. Wspomniana komunikacja radiowa oznacza komunikację legalną prowadzoną zgodnie z Ustawą o Zarządzaniu Telekomunikacją. Urządzenia niskiej mocy częstotliwości radiowej muszą być podatne na zakłócenia komunikacji radiowej lub urządzeń emitujących fale radiowe ISM.

Informacje regulacyjne

 Nuance Hearing
ul. Raoula Wallenberga 24
Tel Awiw 6971920
Izrael



Nuance Hearing
Packhorse Lane Bibury
Cirencester GL7 5NT
Anglia

Przedstawiciel w Polsce:
Starkey Laboratories Poland Sp. z o.o.
ul. Postępu 15
02 - 676 Warszawa



Odpady z urządzeń elektronicznych muszą być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami.



Zapoznaj się z instrukcją obsługi.



Przechowywać w suchym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji starych urządzeń elektronicznych

Starkey Laboratories, Inc. zachęca, UE wymaga, a lokalne przepisy mogą wymagać, aby Twój Mikrofon Stołowy był utylizowany za pośrednictwem lokalnego procesu recyklingu/utylizacji elektroniki. Poniższe instrukcje są dostarczone z myślą o pracownikach zajmujących się utylizacją/recyklingiem. Proszę dołączyć ten podręcznik podczas utylizacji Mikrofonu Stołowego.

DLA PRACOWNIKÓW UTYLIZACJI/RECYKLINGU

Ten produkt zawiera akumulator litowo-polimerowy.

Aby usunąć ten akumulator:

- Wyłączyć Mikrofon Stołowy.
- Rozdzielić połówki obudowy za pomocą małego śrubokręta.
- Odciąć przewody akumulatora od płytki drukowanej, aby zapobiec przypadkowemu zwarceniu.
- Odłączyć akumulator od obudowy za pomocą szerokiego, płaskiego ostrza.

Modyfikacje mogą spowodować unieważnienie prawa do użytkowania urządzenia.

Symbol	Znaczenie symbolu	Odpowiedni standard	Numer symbolu
	Producent	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.1
	Upoważniony przedstawiciel w Wspólnocie Europejskiej	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.2
	Data produkcji	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.3
	Numer katalogowy - Wskazuje numer katalogowy producenta, umożliwiając identyfikację wyrobu medycznego	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.6
	Numer seryjny	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.7
	Wyrób medyczny	BS EN ISO 15223-1:2021	5.7.7
	Przechowywać w suchym miejscu	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.4
	Ograniczenie temperatury	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.7
	Ograniczenie wilgotności	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.8
	Uwaga	BS EN ISO 15223-1:2021	5.4.4
	Ogólny znak ostrzegawczy	EC 60601-1, Nr ref. Tabela D.2, Znak bezpieczeństwa 2	ISO 7010-W001
	Patrz instrukcja obsługi/broszura	EC 60601-1, Nr ref. Tabela D.2, Znak bezpieczeństwa 10	ISO 7010-M002
	Symbol dyrektywy WEEE (w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego)	DIRECTIVE 2012/19/EU (WEEE)	Annex IX
	Symbol klasy II lub podwójnie izolowanego urządzenia elektrycznego	IEC 60417 Reference no. Table D.1	Symbol 9 (IEC 60417-5172)
	Australijski znak zgodności z przepisami ACMA	AS/NZS 4417:2012	N/A
	Znak Giteki	Japońskie prawo radiowe	N/A
	Prąd stały	IEC 60601-1 Nr ref. Tabela D.1	IEC 60417-5031
	Symbol recyklingu	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE	Annex I-VII



P00009753



StarLink i Starkey są znakami towarowymi Starkey Laboratories, Inc.

Znak towarowy Bluetooth® oraz logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc., a wszelkie użycie tych znaków przez Starkey odbywa się na podstawie licencji.

©2025 Starkey Laboratories, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. P00009753 12/25 BKL T3171-03-PL-XX

Patent: www.starkey.com/patents