

# Manual do usuário do seu dispositivo TV



---

Acessório para:

Aparelhos auditivos com conectividade

## Parabéns pelo seu novo dispositivo TV!

Seu dispositivo TV foi projetado para transmitir áudio de várias fontes eletrônicas de áudio – como televisores, computadores, MP3 players, DVD players e TV a cabo – diretamente para seus aparelhos auditivos com conectividade.

Ele pode transmitir áudio simultaneamente para um número ilimitado de usuários, permitindo-lhes compartilhar a mesma experiência auditiva.

Use este manual simples para começar.

## Índice

### 1. Conheça seu dispositivo TV

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Conhecendo seu dispositivo TV.....   | 2  |
| Configurando seu dispositivo TV..... | 4  |
| Usando seu dispositivo TV.....       | 10 |

### 2. Guia de resolução de problemas.....12

### 3. Orientações adicionais


|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Uso pretendido.....           | 15 |
| Informações da FCC.....       | 17 |
| Informações regulatórias..... | 18 |

### 4. Certificações.....20


## Conhecendo seu dispositivo TV

### Visão geral

- Botão liga/desliga**  
Liga/desliga o dispositivo TV.
- Aumentar volume (+)**  
Para aumentar o volume da transmissão.
- Diminuir volume (-)**  
Para diminuir o volume da transmissão.
- Botão de parear**  
Para emparelhar seus aparelhos auditivos.
- Luz indicadora**  
Fornece o status operacional do dispositivo TV.
- Conector da fonte de alimentação (microUSB)**  
Para o adaptador de energia.
- Conector óptico TOSLINK**  
Para o cabo óptico TOSLINK.
- Tomada analógica**  
Para entrada de 3,5 mm para cabo RCA.
- Interruptor mono/estéreo**  
 Mono  
Para usar com um aparelho auditivo.  
 Estéreo  
Para usar com dois aparelhos auditivos.

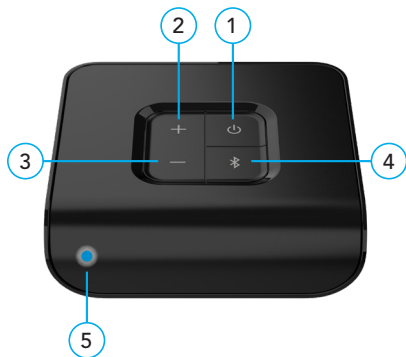

Parte traseira do dispositivo TV

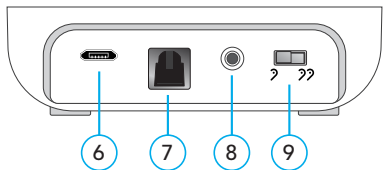

## Configurando seu dispositivo TV

### Ligar/desligar

Use o botão liga/desliga para **ligar** ou **desligar** o seu dispositivo TV:

- **Ligar** – pressione o botão liga/desliga. Solte quando a luz indicadora acender em verde.
- **Desligar** – pressione o botão liga/desliga. Solte quando a luz indicadora não aparecer mais.

### Para emparelhar com aparelhos auditivos

Antes de usar seu dispositivo TV pela primeira vez, você precisará emparelhá-lo com seu(s) aparelho(s) auditivo(s). Isso permite que seu acessório reconheça seus aparelhos auditivos para que possam trabalhar juntos.

**PASSO 1: Ligue o seu dispositivo TV.**

**PASSO 2: Desligue e ligue seus aparelhos auditivos.**

- **Para sistemas de aparelhos auditivos CROS:** Desligue seus aparelhos auditivos e o transmissor CROS. Em seguida, **ligue** seus aparelhos auditivos, mas deixe o transmissor CROS **desligado**.

### PASSO 3: Emparelhe seu dispositivo TV com seu(s) aparelho(s) auditivo(s):

- Garanta que seus aparelhos auditivos não estejam conectados nas proximidades de dispositivos Bluetooth®:
  - **Desligue** o Bluetooth do seu celular.
  - **Desligue** qualquer acessório com conectividade já emparelhado com seus aparelhos auditivos.
- Coloque seus aparelhos auditivos em uma distância de 6 polegadas (15 cm) do seu dispositivo TV.
- Pressione o botão **emparelhar** no dispositivo TV. A luz indicadora começará a piscar em azul.
  - **NOTA:** A transmissão de áudio será interrompida temporariamente durante esta etapa.

- Para um **par** de aparelhos auditivos:






| 1ª luz indicadora de status piscando | 2ª luz indicadora de status piscando | Resultado do emparelhamento               | Próxima etapa                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| 1                                    | 2                                    | Ambos os aparelhos auditivos emparelhados | Completo                        |
| 1                                    | 2                                    | Apenas um aparelho auditivo emparelhado   | Repita as etapas 1-4 do passo 3 |
| 1                                    | N/A                                  | Nenhum aparelho auditivo emparelhado      | Repita as etapas 1-4 do passo 3 |

- Para um **único** aparelho auditivo:


| Luz indicadora de status piscando | Resultado do emparelhamento       | Próxima etapa                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1                                 | Aparelho auditivo emparelhado     | Completo                            |
| 1                                 | Aparelho auditivo não emparelhado | Repita as etapas 1-3 e 5 do passo 3 |

### Para conectar seu dispositivo TV a uma fonte de áudio eletrônica

Existem várias maneiras de conectar uma fonte de áudio ao seu dispositivo TV. Observe cuidadosamente sua fonte de áudio eletrônica (por exemplo, uma televisão, computador, MP3 players, DVD players ou TV a cabo) para determinar quais opções de SAÍDA DE ÁUDIO ele possui.

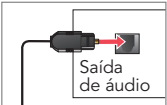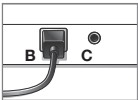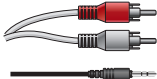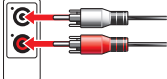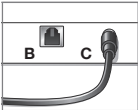
|                                                                                                             | Insira o cabo no conector de SAÍDA DE ÁUDIO da sua fonte de áudio eletrônica                                                                                 | Conecte a outra extremidade do cabo na parte traseira do dispositivo TV                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOSLINK óptico<br>          |                                                                             | Use a entrada B<br> |
| RCA analógico de 3,5 mm<br> |  <p><b>Nota:</b> Conecte o vermelho com vermelho e o branco com branco.</p> | Use a entrada C<br> |

1. Remova as tampas plásticas de ambas as extremidades do cabo óptico TOSLINK.
2. Conecte o cabo óptico TOSLINK ao conector de saída de áudio da sua fonte de áudio eletrônica. Ligue sua fonte de áudio eletrônica.

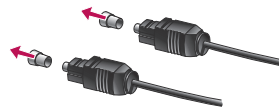

- **NOTA:** Se não houver nenhuma saída de áudio TOSLINK no seu dispositivo de som, tente uma outra fonte ou ainda um cabo RCA de 3,5 mm.

3. Conecte a outra extremidade do cabo óptico TOSLINK no conector óptico TOSLINK na parte traseira do dispositivo TV.
4. Conecte o adaptador de energia na parede.
5. Insira o adaptador de energia no conector da fonte de alimentação na parte traseira do dispositivo TV.

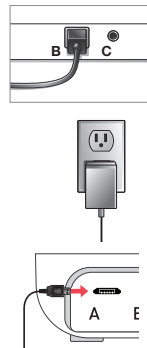

6. A luz indicadora do seu dispositivo TV ficará azul para uma configuração bem-sucedida. Ele detectou áudio e agora está transmitindo.

- **NOTA:** Se a luz indicadora permanecer verde sólida, repita 1-6 ou consulte o "Guia de resolução de problemas" na pág. 12.



### Configuração típica



Feito! Vá para a próxima página para começar a usar o seu dispositivo TV.

## Usando seu dispositivo TV

### PASSO 1: Verifique se seus aparelhos auditivos estão ligados.

Antes de transmitir áudio pela primeira vez, certifique-se de que seus aparelhos auditivos estejam emparelhados com seu dispositivo TV. Consulte a pág. 4.

### PASSO 2: Iniciar/parar a transmissão de áudio (de uma fonte de áudio eletrônica). Faça um dos seguintes passos:

- **Aplicativo para aparelhos auditivos:** Abra o aplicativo em seu celular ou tablet. Selecione a opção para iniciar/parar a transmissão na tela **acessórios**.
- **Controle remoto com conectividade:** Se configurado pelo seu profissional da audição, pressione o botão favorito.
- **Controle do usuário do aparelho auditivo:** Se configurado pelo seu profissional da audição, um gesto específico (por exemplo, um toque longo em um botão controle do usuário) pode iniciar/parar a transmissão.



**Lembrete –** A transmissão de áudio também será interrompida quando um sinal de áudio recebido não for detectado ou se o dispositivo TV for desligado.

**PASSO 3: Ajuste o volume da transmissão.**

- Pressione o botão de aumentar volume (+) ou diminuir volume (-) em seu dispositivo TV.

**Luz indicadora**

A luz indicadora identifica como o seu dispositivo TV está operando no momento:

| Luz indicadora de status       | Estado operacional                          |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Verde sólido                   | Ligado e sem transmissão de áudio           |
| Azul sólido                    | Ligado e transmitindo áudio                 |
| Nenhuma luz indicadora aparece | Desligado                                   |
| Azul piscando                  | Modo de emparelhamento do aparelho auditivo |
| Vermelho sólido                | Mau funcionamento ou problema elétrico      |

Problemas com seu dispositivo TV? Experimente estas dicas. Se os problemas continuarem, entre em contato com seu profissional da audição.

| Sintoma                                                                             | Possíveis causas                                                                 | Soluções                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A transmissão de áudio cai inesperadamente em um (ou ambos) os aparelhos auditivos. | Os aparelhos auditivos podem estar no limite do alcance da conectividade.        | Aproxime-se do dispositivo TV.                                                                                                                                        |
|                                                                                     | O nível da bateria no aparelho auditivo não suporta mais a transmissão de áudio. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Substitua a bateria do aparelho auditivo por uma nova.</li> <li>• Recarregue seu aparelho auditivo, se aplicável.</li> </ul> |
|                                                                                     | O dispositivo TV pode não estar posicionado para transmissão ideal.              | Reorienta o dispositivo TV especialmente girando alguns graus para a direita ou para a esquerda.                                                                      |
|                                                                                     | Objetos grandes, como móveis ou paredes, podem degradar o sinal.                 | Para obter o melhor desempenho, seus aparelhos auditivos devem estar na linha de visão do dispositivo TV.                                                             |

| Sintoma                                                                                         | Possíveis causas                                                                           | Soluções                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A luz indicadora está azul sólida, mas nenhum som transmitido é ouvido nos aparelhos auditivos. | Os aparelhos auditivos não estão dentro do alcance da conectividade.                       | Aproxime-se do dispositivo TV.                                                                                                                            |
|                                                                                                 | O fluxo de áudio precisa ser iniciado manualmente para ser ouvido nos aparelhos auditivos. | Inicie manualmente o fluxo de áudio por meio do aplicativo do seu aparelho auditivo, controle remoto sem fio ou controle do usuário do aparelho auditivo. |
|                                                                                                 | Os aparelhos auditivos não estão emparelhados com o dispositivo TV.                        | Consulte <i>"Para emparelhar com aparelhos auditivos"</i> na pág. 4.                                                                                      |
| Eu espero ouvir áudio da transmissão, mas a luz indicadora está sólida verde.                   | O cabo de áudio pode ser conectado a "entrada de áudio" na fonte de áudio eletrônica.      | Certifique-se de que o cabo esteja conectado a "saída de áudio" na fonte de áudio eletrônica.                                                             |
|                                                                                                 | Nenhum sinal de áudio de entrada está disponível.                                          | Ligue a fonte de áudio eletrônica.                                                                                                                        |
|                                                                                                 | A saída da fonte de áudio eletrônica não está no formato correto.                          | Defina a saída digital em sua fonte de áudio eletrônica para PCM ou Dolby Áudio.                                                                          |

| Sintoma                                                              | Possíveis causas                                                                                                                                 | Soluções                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A luz indicadora está vermelho sólido.                               | Possível condição de erro.                                                                                                                       | Remova o adaptador de energia do conector A, aguarde 5 segundos e reinsira o adaptador de energia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| O áudio transmitido não está sincronizado com a imagem da televisão. | Muitas televisões novas (como HDTVs) demoram muito para processar o sinal de vídeo, portanto, podem atrasar o áudio para manter a sincronização. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tente usar outra tomada de saída de áudio (que pode exigir um tipo diferente de cabo) na sua televisão.</li> <li>• Tente usar outra fonte de áudio eletrônica. por exemplo, se estiver usando o dispositivo de TV a cabo, tente usar A SAÍDA de áudio de uma televisão ou vice versa.</li> <li>• Algumas fontes de áudio eletrônicas (como televisões ou receptores A/V) possuem uma opção integrada para ajustar a sequência de tempo de áudio e vídeo.</li> </ul> |

## Uso pretendido

O dispositivo TV é um acessório para um aparelho auditivo de condução aérea com conectividade de 2,4 GHz. Destina-se a ser um transmissor sem fio de som de uma televisão ou outra fonte eletrônica de áudio diretamente para um aparelho auditivo de condução aérea.

O dispositivo TV foi projetado para atender aos mais rigorosos padrões de compatibilidade eletromagnética internacional. No entanto, ainda é possível que você experimente interferências causadas por perturbações na linha de energia, detectores de metais em aeroportos, campos eletromagnéticos de outros dispositivos médicos, sinais de rádio e descargas eletrostáticas.

O dispositivo TV foi projetado para ser limpo com um pano úmido umedecido com água e sabão.

Se você usa outros dispositivos médicos ou dispositivos médicos implantáveis, como desfibriladores ou marca-passos, e está preocupado com a possibilidade de seu dispositivo TV causar interferência em seu dispositivo médico, entre em contato com seu médico ou com o fabricante de seu dispositivo médico para obter informações sobre o risco de perturbação.

Seu dispositivo TV não deve ser usado durante um procedimento de ressonância magnética ou em uma câmara hiperbárica ou em outros ambientes ricos em oxigênio.


Seu dispositivo TV não está formalmente certificado para operar em atmosferas explosivas, como as que podem ser encontradas em minas de carvão ou em certas fábricas de produtos químicos.

## Uso em aeronaves

O dispositivo TV não deve ser usado em aeronaves, a menos que especificamente permitido pelo pessoal de voo.

## Uso internacional

Seu dispositivo TV foi aprovado para operar em uma frequência de rádio específica do seu país ou região e pode não ser aprovado para uso fora do seu país ou região. Esteja ciente de que a operação durante viagens internacionais pode causar interferência em outros instrumentos eletrônicos, ou outros instrumentos eletrônicos podem causar interferência em seu dispositivo TV.

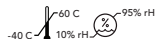

O dispositivo TV deve ser armazenado e transportado dentro das faixas de temperatura e umidade de -40°C (-40°F) a +60°C (140°F) e 10% - 95% de umidade relativa e limites de altitude de 70 kPa - 106 kPa (equivalente a altitudes de 1.200 pés (380 m) abaixo do nível do mar a 10.000 pés (3.000 m).

O dispositivo TV foi projetado para operar em ambientes internos na faixa de temperaturas de 0°C (32°F) a 40°C (104°F).

## Benefício clínico

O acessório em si não proporciona benefício clínico direto. Um benefício clínico indireto é fornecido ao permitir que o dispositivo original (aparelhos auditivos com conectividade) atinja a finalidade pretendida.

Somos obrigados por regulamentos a fornecer os seguintes avisos:

**AVISO:** O uso do dispositivo TV diretamente próximo a outros equipamentos eletrônicos deve ser evitado, pois pode resultar em desempenho inadequado. Caso tal uso seja necessário, observe se seus aparelhos auditivos e demais equipamentos estão funcionando normalmente.

**AVISO:** O uso de acessórios, componentes ou peças de reposição diferentes daqueles fornecidos pelo fabricante do dispositivo TV pode resultar em aumento de emissões eletromagnéticas e diminuição da imunidade eletromagnética e pode resultar na degradação do desempenho.

**AVISO:** Se o equipamento portátil de comunicação por radiofrequência for usado a menos de 30 cm (12 polegadas) do seu dispositivo TV, poderá ocorrer degradação do desempenho do seu aparelho auditivo. Se isto ocorrer, afaste-se do equipamento de comunicação.

Embora o dispositivo TV não seja formalmente certificado (classificação IP) para proteção contra entrada de poeira ou água, de acordo com a norma IEC 60529, ele foi testado no nível IP 5X. Isso significa que o dispositivo TV está protegido contra poeira.

O dispositivo TV não contém peças que possam ser reparadas pelo usuário. Não abra ou modifique-o.

Não conecte o dispositivo TV a nenhum dispositivo não descrito neste manual.

A vida útil esperada do dispositivo TV é de 5 anos.

## Descrição técnica de conectividade

Starkey Laboratories, Inc. O dispositivo TV opera na banda de 2,4-2,4835 GHz com potência irradiada efetiva máxima de 21 dBm (América do Norte), 10 dBm (resto do mundo) com modulação de transmissão tipo GFSK e largura de banda de 2 MHz. A seção receptora do rádio tem uma largura de banda de 2 MHz.

O dispositivo TV foi testado e passou nos seguintes testes de emissões e imunidade:

- Requisitos de emissões irradiadas e conduzidas da IEC 60601-1-2 para um dispositivo Grupo 1 Classe B, conforme indicado na CISPR 11.
- Distorção harmônica e flutuações de tensão que afetam a fonte de entrada de energia conforme indicado na Tabela 2 da IEC 60601-1-2.
- Imunidade irradiada por RF em um nível de campo de 10 V/m entre 80 MHz e 2,7 GHz, bem como níveis de campo mais elevados de dispositivos de comunicação, conforme indicado na Tabela 9 da IEC 60601-1-2.
- Imunidade a campos magnéticos de frequência de energia em nível de campo de 30 A/m e a campos magnéticos de proximidade conforme indicado na Tabela 11 da IEC 60601-1-2.
- Imunidade a níveis de ESD de descarga conduzida de +/- 8 kV e descarga de ar de +/- 15 kV.
- Imunidade a transientes elétricos rápidos na entrada de energia em um nível de +/- 2 kV a uma taxa de repetição de 100 Hz.
- Imunidade a surtos na entrada de potência de +/- 1 kV linha a linha.
- Imunidade a distúrbios conduzidos induzidos por campos de RF em a entrada de energia conforme indicado na Tabela 6 da IEC 60601-1-2.
- Imunidade a quedas de tensão e interrupções na entrada de energia conforme indicado na Tabela 6 da IEC 60601-1-2.

## RELATÓRIO DE EVENTOS ADVERSOS DA UE

Qualquer incidente grave ocorrido em relação aos seus dispositivos deverá ser comunicada ao seu representante local da Starkey e à Autoridade Competente do Estado Membro em que você está estabelecido. Um incidente grave é definido como qualquer mau funcionamento, deterioração nas características e/ou desempenho do dispositivo, ou inadequação no manual/rotulagem do usuário do dispositivo que possa levar à morte ou grave deterioração do estado de saúde do usuário, OU poderia fazê-lo em caso de reincidência.

## Informações da FCC

### AVISOS DE CONECTIVIDADE

FCC ID: EOA-24TV

IC: 6903A-24TV (Modelos 800 e 801)

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das regras da FCC e com os padrões RSS isentos de licença do ISED Canadá. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que pode causar operação indesejada do dispositivo. A FCC e o ISED Canadá exigem que este dispositivo seja mantido pelo menos 20 cm (8 polegadas) do corpo de uma pessoa.

**NOTA:** O fabricante não se responsabiliza por qualquer interferência de rádio ou TV causada por modificações não autorizadas neste equipamento. Tais modificações podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.


Por meio deste, a Starkey Laboratories, Inc declara que o Starkey Laboratories, Inc. dispositivo TV está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. Uma cópia da Declaração de Conformidade pode ser obtida nos seguintes endereços e em docs. starkeyhearingtechnologies.com.

Por meio deste, a Starkey Laboratories, Inc. declara que o dispositivo TV está em conformidade com os Regulamentos de Equipamentos de Rádio do Reino Unido SI 2017 conforme alterados. Uma cópia da Declaração de Conformidade do Reino Unido pode ser obtida nos seguintes endereços e em docs. starkeyhearingtechnologies.com.

## Informações regulatórias



**Starkey Laboratories, Inc.**  
6700 Washington Ave. South  
Eden Prairie, MN 55344 USA  
www.starkey.com

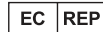

Starkey Laboratories (Alemanha) GmbH  
Weg beim Jäger 218-222  
22335 Hamburg  
Alemanha

Pessoa autorizada do Reino Unido:  
Starkey Reino Unido  
William F. Austin House  
Pepper Rd, Hazel Grove  
Stockport SK7 5BX, Reino Unido  
www.starkey.co.uk



Os resíduos de equipamentos eletrônicos devem ser manuseados de acordo com as regulamentações locais.



ou



Consulte o manual de operações.



Manter seco.

### Instruções para descarte de eletrônicos antigos

Starkey Laboratories, Inc. incentiva, a UE exige, e as leis da comunidade local podem exigir, que seu dispositivo TV seja descartado por meio do processo local de reciclagem/descarte de eletrônicos.

Inclua este manual do usuário ao descartar seu dispositivo TV.

| Símbolo                                                                          | Significado do símbolo                          | Padrão aplicável                                            | Número do símbolo           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | Fabricante                                      | BS EN ISO 15223-1:2021                                      | 5.1.1                       |
|  | Representante autorizado na comunidade Europeia | BS EN ISO 15223-1:2021                                      | 5.1.2                       |
|  | Data de fabricação                              | BS EN ISO 15223-1:2021                                      | 5.1.3                       |
|  | Número de catálogo                              | BS EN ISO 15223-1:2021                                      | 5.1.6                       |
|  | Número de série                                 | BS EN ISO 15223-1:2021                                      | 5.1.7                       |
|  | Dispositivo médico                              | BS EN ISO 15223-1:2021                                      | 5.7.7                       |
|  | Mantenha seco                                   | BS EN ISO 15223-1:2021                                      | 5.3.4                       |
|  | Limite de temperatura                           | BS EN ISO 15223-1:2021                                      | 5.3.7                       |
|  | Limitação de umidade                            | BS EN ISO 15223-1:2021                                      | 5.3.8                       |
|  | Cuidado                                         | BS EN ISO 15223-1:2021                                      | 5.4.4                       |
|  | Sinal de alerta geral                           | EC 60601-1, N° referência tabela D.2, sinal de segurança 2  | ISO 7010-W001               |
|  | Consulte o manual de instruções                 | EC 60601-1, N° referência tabela D.2, sinal de segurança 10 | ISO 7010-M002               |
|  | Coletar separadamente                           | DIRETIVA 2012/19/EU (WEEE)                                  | Anexo IX                    |
|  | Equipamento de Classe II                        | IEC 60417 N° referência tabela D.1                          | Símbolo 9 (IEC 60417- 5172) |
|  | Marca de Conformidade Regulatória (RCM)         | AS/NZS 4417.1:2012                                          | N/A                         |
|  | Marca Giteki                                    | Lei de rádio Japonesa                                       | N/A                         |
|  | Corrente direta                                 | IEC 60601-1 N° referência tabela D.1                        | IEC 60417-5031              |
|  | Símbolo de reciclagem                           | Diretiva 94/62/CE do parlamento europeu e do conselho       | Anexo I-VII                 |

## Certificações

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela resolução N° 715/2019 e atende aos requisitos técnicos aplicados.



Para mais informações, consulte o site da Anatel:  
[www.gov.br/anatel/pt-br/](http://www.gov.br/anatel/pt-br/)

**Res. 680**

“Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados”

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

Importado por:  
Starkey do Brasil LTDA.  
Rua Doutor Fernão Pompeu de Camargo, 832 – Jd. Leonor  
Campinas/SP 13041-025



---

StarLink e Starkey são marcas comerciais da Starkey Laboratories, Inc.

A marca e os logos Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc.  
e qualquer uso de tais marcas pela Starkey é feito sob licença.

©2023 Starkey Laboratories, Inc. Todos os direitos reservados. P00000366 11/23 BKL3172-02-PT-XX

Patente: [www.starkey.com/patents](http://www.starkey.com/patents)

Versão 01/BR/2024