

دليل مستخدم ناقل أصوات StarLink التلفاز



جهاز ملحق لـ:

السماعات الطبية اللاسلكية

تعرف على ناقل أصوات التلفاز

نظرة عامة

1. زر الطاقة
يقوم بتشغيل/إيقاف تشغيل ناقل أصوات التلفاز.
2. رفع مستوى الصوت (+)
لزيادة مستوى الصوت المتدفق.
3. خفض مستوى الصوت (-)
لخفض مستوى الصوت المتدفق.
4. زر الإقران
لإقران السماعات الطبية.
5. ضوء المؤشر
يوفر حالة تشغيل ناقل أصوات التلفاز.
6. مقبس إمداد الطاقة (microUSB)
لمهايئ الطاقة.
7. مقبس TOSLINK البصري
لكابل TOSLINK البصري.
8. مقبس تناظري
لكابل 3.5 مم إلى RCA.
9. مفتاح أحادي/ستريو
أحادي
للاستخدام مع سماعة طبية واحدة.
- ستريو
للاستخدام مع سماعتين طبييتين.

تهانينا على ناقل أصوات التلفاز الجديد!

صُمم ناقل أصوات التلفاز بهدف تشغيل الصوت من

مصادر الصوت الإلكترونية المختلفة - مثل أجهزة

التلفزيون، وأجهزة الكمبيوتر، ومشغلات MP3،

ومشغلات أقراص DVD، وصناديق الكابل - مباشرة إلى

السماعات الطبية اللاسلكية.

ويمكنه تشغيل الصوت إلى عدد غير محدود من

المستخدمين في نفس الوقت، مما يسمح لهم بمشاركة

نفس تجربة الاستماع.

استخدم هذا الدليل المبسط لبدء الاستخدام.

جدول المحتويات

1. تعرف على ناقل أصوات التلفاز 3
- إعداد ناقل أصوات التلفاز 5
- استخدام ناقل أصوات التلفاز 11
3. دليل استكشاف الأعطال وإصلاحها 13
4. إرشادات إضافية 16
- الاستخدام المقصود 18
- معلومات هيئة الاتصالات الفيدرالية 19
- المعلومات التنظيمية 19

إعداد ناقل أصوات التلفاز

التشغيل/إيقاف التشغيل

استخدم زر الطاقة لتشغيل ناقل أصوات التلفاز أو إيقاف تشغيله :

- تشغيل – اضغط على زر الطاقة. حرر الزر عندما يضيء مصباح المؤشر باللون الأخضر.
- إيقاف التشغيل – اضغط على زر الطاقة. حرر الزر عندما يتوقف ضوء المؤشر عن الظهور.


الإقران مع السماعات الطبية

قبل استخدام ناقل أصوات التلفاز لأول مرة، ستحتاج إلى إقرانه بالسماعة (السماعات) الطبية. يتيح ذلك للجهاز الملحق الخاص بك التعرف على سماعاتك الطبية حتى يتمكن من العمل معًا.


الخطوة 1: قُم بتشغيل ناقل أصوات التلفاز

الخطوة 2: قُم بإيقاف تشغيل السماعات الطبية ثم أعد تشغيلها.

- لأنظمة السماعات الطبية **CROS**: قُم بإيقاف تشغيل السماعات الطبية وجهاز إرسال CROS. بعد ذلك، قُم بتشغيل السماعات الطبية ولكن اترك جهاز إرسال CROS في وضع إيقاف التشغيل.

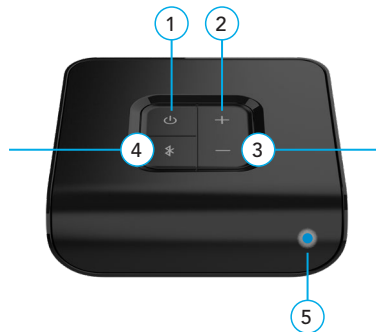

الجزء الخلفي من ناقل أصوات التلفاز

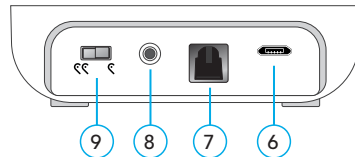

الخطوة 3: قُم بإقران ناقل أصوات التلفاز
بالسماعة (السماعات) الطبية:

1. تأكد من أن السماعات الطبية غير متصلة بأجهزة
Bluetooth® قريبة:

- قُم بإيقاف تشغيل خاصية Bluetooth على
هاتفك المحمول.
 - قُم بإيقاف تشغيل أي ملحقات لاسلكية
مقترنة بالفعل بالسماعات الطبية.
2. ضع السماعات الطبية في نطاق 6 بوصات
(15 سم) من ناقل أصوات التلفاز.
3. اضغط على زر الإقران في ناقل أصوات
التلفاز. سيبدأ ضوء المؤشر في الوميض باللون
الأزرق.

- **ملاحظة:** سيتم إيقاف بث الصوت مؤقتًا
خلال هذه الخطوة.

4. إقرانه مع طقم السماعات الطبية:

يومض ضوء مؤشر الحالة الأول	يومض ضوء مؤشر الحالة الثاني	نتيجة الإقران	الخطوة التالية
1	2	تم إقران كلا السماعتين الطبيتين	مكتمل
1	2	تم إقران سماعة طبية واحدة فقط	كرر الخطوة 3 من 1 إلى 4
1	لا ينطبق	لم يتم إقران أي من السماعتين الطبيتين	كرر الخطوة 3 من 1 إلى 4

5. إقرانه مع سماعة طبية واحدة:

يومض ضوء مؤشر الحالة	نتيجة الإقران	الخطوة التالية
1	تم إقران السماعة الطبية	مكتمل
1	لم يتم إقران السماعة الطبية	كرر الخطوة 3 من 1 إلى 3 و 5

لتوصيل ناقل أصوات التلفاز بمصدر صوت إلكتروني

هناك عدة طرق لتوصيل مصدر الصوت بناقل أصوات التلفاز. انظر بعناية إلى مصدر الصوت الإلكتروني الخاص بك (على سبيل المثال، تلفزيون، أو كمبيوتر، أو مشغل MP3، أو مشغل أقراص DVD، أو صندوق كابل) لتحديد خيارات إخراج الصوت المتوفرة لديه.

أدخل الكابل في مقبس إخراج الصوت الموجود بمصدر الصوت الإلكتروني لديك	فُـم بتوصيل الطرف الآخر من الكابل بالجزء الخلفي من جهاز التلفزيون	
استخدم المقبس B	إخراج الصوت	
استخدم المقبس C	ملاحظة: فُـم بتوصيل الطرف الأحمر بالأحمر والطرف الأبيض بالأبيض.	كابل RCA-to-3.5 مم تناظري

1. أزل الأغطية البلاستيكية

من طرفي كابل TOSLINK البصري.



2. فُـم بتوصيل كابل TOSLINK البصري بمقبس إخراج الصوت بمصدر الصوت الإلكتروني. فُـم بتشغيل مصدر الصوت الإلكتروني.

• **ملاحظة:** في حالة عدم وجود مقبس إخراج صوت TOSLINK بمصدر الصوت الإلكتروني، جرّب مصدر صوت إلكتروني مختلف أو جرّب كابل 3.5 مم إلى RCA.

3. فُـم بتوصيل الطرف الآخر من كابل TOSLINK البصري بمقبس TOSLINK البصري الموجود في الجزء الخلفي من ناقل أصوات التلفاز.

4. فُـم بتوصيل مهائئ الطاقة بالحائط.

5. أدخل مهائئ الطاقة في مقبس مصدر الطاقة الموجود بالجزء الخلفي من ناقل أصوات التلفاز.

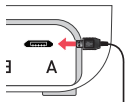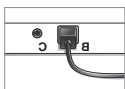




6. سيتهيج ضوء المؤشر على ناقل أصوات التلفاز باللون الأزرق للإشارة إلى نجاح الإعداد. لقد اكتشف الجهاز صوتًا ويعمل الآن.

- **ملاحظة:** إذا ظل ضوء المؤشر أخضر ثابتًا، فكرر الخطوات من 1 إلى 6 أو راجع دليل استكشاف الأعطال وإصلاحها في الصفحة 13.

الإعداد النموذجي

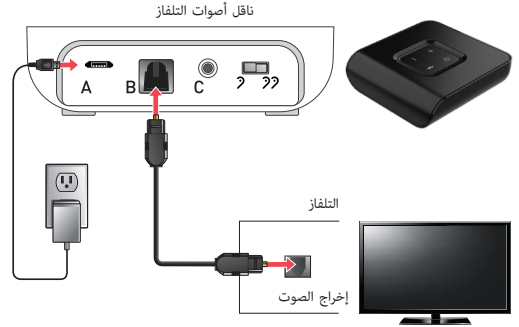

اكتملت العملية! انتقل إلى الصفحة التالية لبدء استخدام ناقل أصوات التلفاز.

استخدام ناقل أصوات التلفاز

الخطوة 1: تأكد من أن سماعاتك الطبية في وضع التشغيل.

قبل بث الصوت لأول مرة، تأكد من إقران السماعات الطبية بناقل أصوات التلفاز. انظر صفحة 5.

الخطوة 2: بدء إيقاف بث الصوت (من مصدر صوت إلكتروني). فُهم بأحد الإجراءات التالية:

- تطبيق الهاتف المحمول للسماعة الطبية: افتح التطبيق على هاتفك المحمول أو جهازك اللوحي. حدد الخيار لبدء/إيقاف بث الصوت من شاشة الملحق.
- جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي: إذا أجرى اختصاصي رعاية السمع المتابع لك عملية التكوين، فاضغط على زر المفضلة.
- تحكم المستخدم في السماعة الطبية: إذا أجرى اختصاصي رعاية السمع المتابع لك عملية التكوين، فيمكنك بدء/إيقاف بث الصوت باستخدام إيماء معينة (مثل الضغط لفترة طويلة على مفتاح تحكم المستخدم).

تذكير - سيتوقف بث الصوت أيضًا عند عدم اكتشاف إشارة صوتية واردة أو في حالة إيقاف تشغيل ناقل أصوات التلفاز.



الخطوة 3: اضبط مستوى الصوت المتدفق.

- اضغط على زر رفع مستوى الصوت (+) أو خفض مستوى الصوت (-) في ناقل أصوات التلفاز.

ضوء المؤشر

يحدد ضوء المؤشر طريقة تشغيل ناقل أصوات التلفاز
حاليًا:

حالة ضوء المؤشر	حالة التشغيل
أخضر ثابت	ناقل الصوت يعمل ولا يوجد بث صوتي
أزرق ثابت	ناقل الصوت يعمل والصوت يتدفق
لا يظهر ضوء مؤشر	إيقاف التشغيل
أزرق وامض	وضع إقران السماعة الطبية
ضوء أحمر ثابت	عطل أو مشكلة كهربائية

هل لديك مشكلات مع ناقل أصوات التلفاز؟ جرّب هذه النصائح. إذا استمرت المشكلات، فاتصل باختصاصي رعاية السمع المتابع لك.

المشكلة	الأسباب المحتملة	الحلول
توقف إحدى السماعتين الطبيتين (أو كليهما) بشكل غير متوقع عن بث الصوت.	قد تكون السماعات الطبية على حافة النطاق الاسلكي.	اقرب أكثر من ناقل أصوات التلفاز.
	مستوى البطارية في السماعة الطبية لم يعد قادرًا على دعم بث الصوت.	استبدل بطارية السماعة الطبية ببطارية جديدة.
	قد لا يكون ناقل أصوات التلفاز في موضع يسمح بالحصول على تدفق مثالي.	أعد توجيه ناقل أصوات التلفاز مكانيًا عن طريق تدويره بضع درجات إلى اليمين أو اليسار.
	قد تعيق الأجسام الكبيرة، مثل الأثاث أو الحائط، الإشارة.	للحصول على أفضل أداء، يجب أن تكون السماعات الطبية في نطاق رؤية ناقل أصوات التلفاز.

المشكلة	الأسباب المحتملة	الحلول
ضوء المؤشر أزرق ثابت، ولكن لا يتم سماع أي أصوات متدفقة في السماعات الطبية.	السماعات الطبية ليست ضمن النطاق اللاسلكي.	اقترُب أكثر من ناقل أصوات التلفاز.
	يجب بدء بث الصوت يديويًا ليتم سماعه في السماعات الطبية.	ابدأ بث الصوت يديويًا عبر تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالسماعة الطبية أو جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي أو التحكم في مستخدم السماعة الطبية.
	السماعات الطبية غير مقترنة بناقل أصوات التلفاز.	انظر الإقرآن مع السماعات الطبية في صفحة 10.
أوقع سماع الصوت المتدفق، ولكن ضوء المؤشر لدي أخضر ثابت.	يمكن توصيل كابل الصوت بـ "audio IN" (دخل الصوت) بمصدر الصوت الإلكتروني.	تأكد من توصيل الكابل بمقبس "audio OUT" (خرج الصوت) بمصدر الصوت الإلكتروني.
	لا تتوفر إشارة صوتية واردة.	فُهم بتشغيل مصدر الصوت الإلكتروني.
	خرج مصدر الصوت الإلكتروني ليس تنسيقًا صحيحًا.	اضبط المخرج الرقمي بمصدر الصوت الإلكتروني على PCM أو Dolby Audio.

المشكلة	الأسباب المحتملة	الحلول
ضوء المؤشر أحمر ثابت.	حالة الخطأ المحتمل.	انزع مهاتن الطاقة من المقيس A، وانتظر لمدة 5 ثواني وأعد إدخال مهاتن الطاقة.
الصوت المتدفق غير متزامن مع صورة التلفزيون.	تستغرق العديد من أجهزة التلفزيون الجديدة (مثل HDTVs) وقتًا طويلًا لمعالجة إشارة الفيديو، لذا قد تؤخر الصوت للحفاظ على التزامن.	- حاول استخدام مقيس خرج صوت آخر (قد يتطلب نوعًا مختلفًا من الكابلات) على التلفزيون. - حاول استخدام مصدر صوت إلكتروني آخر. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم حاليًا صندوق كابل، فحُزب audio OUT (خرج الصوت) على التلفزيون أو العكس. - تحتوي بعض مصادر الصوت الإلكترونية (مثل أجهزة التلفزيون أو أجهزة استقبال الصوت/الفيديو) على خيار مدمج لضبط تسلسل توقيت الصوت والفيديو.

الاستخدام المقصود

تُناقل أصوات التلفاز هو جهاز ملحق يعمل مع الساعات الطبية اللاسلكية ذات التوصيل البولي بسرعة 2.4 جيجا هرتز، وهو مصمم ليكون جهاز إرسال لاسلكي للصوت الصادر من التلفزيون أو أي مصدر صوت إلكتروني آخر مباشرة إلى الساعة الطبية ذات التوصيل البولي.

تم تصميم ناقل أصوات التلفاز ليتوافق مع أكثر معايير التوافق الكهرومغناطيسي الدولي صرامة، ومع ذلك، لا يزال من الممكن أن تواجه تداخلًا ناجمًا عن اضطرابات خطوط الطاقة، وأجهزة الكشف عن المغاند في المطارات، والمجالات الكهرومغناطيسية من الأجهزة الطبية الأخرى، والإشارات اللاسلكية، والتفريعات الإلكترونية.

شُمع ناقل أصوات التلفاز ليتم تنظيفه بقطعة قماش مبللة بالماء والصابون.

إذا كنت تستخدم أجهزة طبية أخرى أو ترتدي أجهزة قابلة للزرع مثل مزيلات الرجفان أو أجهزة تنظيم ضربات القلب ونشعر بالقلق من أن ناقل أصوات التلفاز قد يُسبب تداخلًا مع جهازك الطبي، يُرجى الاتصال بطبيبك أو الشركة المصنعة لجهازك الطبي للحصول على معلومات حول خطر الاضطراب.

يجب عدم استخدام ناقل أصوات التلفاز أثناء إجراء التصوير بالرنين المغناطيسي، أو في غرفة ضغط عالٍ أو بيئات أخرى غنية بالأكسجين.


لم يتم اعتماد ناقل أصوات التلفاز رسميًا للعمل في الأجواء القابلة للانفجار كما هو الحال في مناجم الفحم أو بعض المصانع الكيميائية.

الاستخدام على الطائرات

يجب عدم استخدام ناقل أصوات التلفاز على الطائرات إلا إذا سمح بذلك طاقم الطائرة على وجه التحديد.

الاستخدام الدولي

تم الموافقة على ناقل أصوات التلفاز للعمل على ترددات لاسلكية خاصة ببلدك أو منطقتك وقد لا تتم الموافقة عليه للاستخدام خارج بلدك أو منطقتك. يُرجى العلم أن التشغيل أثناء السفر الدولي قد يتسبب في حدوث تداخل مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى، أو قد تتسبب الأجهزة الإلكترونية الأخرى في حدوث تداخل مع ناقل أصوات التلفاز.

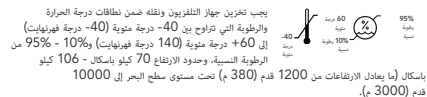

تم تصميم جهاز التلفزيون للعمل في الأماكن المغلقة في نطاق درجات حرارة تتراوح بين 0 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت) و 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت).

الفائدة السريرية

لا يوفر الملحق نفسه فائدة سريرية مباشرة. يتم توفير فائدة سريرية غير مباشرة من خلال يمكن الجهاز الأصلي (الساعات الطبية اللاسلكية) من تحقيق الغرض المقصود منها.

نحن مطالبون بموجب اللوائح بتقديم التحذيرات التالية:

تحذير: يجب تجنب استخدام ناقل أصوات التلفاز بجوار الأجهزة الإلكترونية الأخرى مباشرة لأن ذلك قد يؤدي إلى أداء غير سليم. إذا كان هذا الاستخدام ضروريًا، فلاحظ ما إذا كانت الساعات الطبية والأجهزة الأخرى تعمل بشكل طبيعي.

تحذير: قد يؤدي استخدام ملحقات أو مكونات أو قطع غيار بخلاف تلك التي توفرها الشركة المصنعة لناقل أصوات التلفاز إلى زيادة الانبعاثات الكهرومغناطيسية وانخفاض المناعة الكهرومغناطيسية وقد يؤدي إلى تدهور الأداء.

تحذير: إذا تم استخدام أجهزة الصالات الترددات الراديوية المحمولة على مسافة أقرب من 30 سم (12 بوصة) من ناقل أصوات التلفاز، فقد يؤدي ذلك إلى تدهور أداء الساعة الطبية. في حالة حدوث ذلك، ابتعد عن أجهزة الاتصالات.

على الرغم من أن ناقل أصوات التلفاز غير معتمد رسميًا (مصنف IP) للحماية من دخول الغبار أو الماء، وفقًا للمعيار IEC 60529. فقد تم اختياره وفقًا لمستوى الحماية IP 5X. وهذا يعني أن ناقل أصوات التلفاز محمي من الغبار.

لا يحتوي ناقل أصوات التلفاز على أي أجزاء يمكن للمستخدم صيانتها. فلا تقم بفتح الميكروفون أو تعديله.

لا نطمح بتوصيل ناقل أصوات التلفاز بأي أجهزة غير موصلة في هذا الدليل.

يبلغ عمر الخدمة المتوقع لناقل أصوات التلفاز 5 سنوات.

الوصف الفني اللاسلكي

يعمل ناقل أصوات التلفاز من شركة Starke Laboratories, Inc. في نطاق 2.4835 - 2.4835 10 جيجاهرتز مع أقصى قدرة إشعاعية فعالة تبلغ 21 ديسيبل ميلي واط (أمريكا الشمالية)، و 10 ديسيبل ميلي واط (باقي دول العالم) مع نوع تعديل (الرسال GFSK) وعرض النطاق الترددي 2 ميجاهرتز. يحتوي القسم المستقبل في الراديو على عرض نطاق ترددي قدره 2 ميجاهرتز.

خضع ناقل أصوات التلفاز للاختبار، وقد اجتاز اختبارات الانبعاثات والمناعة التالية:

- متطلبات الانبعاثات المشعة والموصلة IEC 60601-1-2 لجهاز المجموعة 1 من الفئة ب كما هو مذكور في CISPR 11.
- التشوه التوافقي وتقلبات الجهد الكهربائي التي تؤثر على مصدر إدخال الطاقة كما هو مذكور في الجدول 2 من المعيار IEC 60601-1-2.
- الحصانة للملحمة للتردد اللاسلكي عند مستوى مجال يبلغ 10 فولت/م 80 ميجاهرتز و 2.7 ميجاهرتز وكذلك مستويات مجال أعلى من أجهزة الاتصالات كما هو مذكور في الجدول 9 من IEC 60601-1-2.

- الحماية من المجالات المغناطيسية للتردد الكهربائي عند مستوى مجال يبلغ 30 أمبير/م والمجالات المغناطيسية القريبة كما هو موضح في الجدول 11 من المعيار IEC 60601-1-2.
- الحماية من مستويات ESD التي تبلغ $+/-$ 8 كيلو فولت من التفريغ التوصيلي و $+/-$ 15 كيلو فولت من التفريغ الهوائي.
- الحماية من الإشارات الكهربائية السريعة على دخل الطاقة عند مستوى $+/-$ 2 كيلو فولت بمعدل تكرار 100 هرتز.
- الحماية من الزيادات المفاجئة في مدخلات الطاقة من خط إلى خط $+/-$ 1 كيلو فولت.
- الحماية من الاضطرابات التوصيل التي تحدث نتيجة مجالات التردد اللاسلكي على مدخلات الطاقة كما هو مذكور في الجدول 6 من المعيار IEC 60601-1-2.
- الحماية من انخفاضات الجهد وانقطاعه في مدخلات الطاقة كما هو موضح في الجدول 6 من المعيار IEC 60601-1-2.

الإبلاغ عن الآثار العكسية في الاتحاد الأوروبي

يجب الإبلاغ عن أي حادث خطير وقع فيما يتعلق بأجهزتك إلى ممثل شركة Starkey المحلي والسلطة المختصة في الدولة العضو التي تقيم فيها. يُعرف الحادث الخطير بأنه أي عطل أو تدهور في خصائص وأداء الجهاز أو عدم كفاية دليل مستخدم/ملصق الجهاز مما قد يؤدي إلى الوفاة أو تدهور خطير في الحالة الصحية للمستخدم، أو قد يحدث ذلك عند تكراره.

معلومات هيئة الاتصالات الفيدرالية

إشعارات لاسلكية

معرف هيئة الاتصالات الفيدرالية: EOA-24TV
IC: 6903A-24TV (إطرازان 800 و 801)

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 15 من قواعد هيئة الاتصالات الفيدرالية ومع معيار (معايير) RSS المخفضة من الترخيص الصادرة عن مؤسسة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية في كندا.

يخضع التشغيل للشروطين التاليين:

- (1) قد لا يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار. (2) يجب أن يقلل هذا الجهاز أي تداخل يتم استقباله، بما في ذلك التداخل الذي قد يسبب تشغيلاً غير مرغوب فيه للجهاز. يتطلب كل من هيئة الاتصالات الفيدرالية ومؤسسة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية في كندا الحفاظ على هذا الجهاز على بعد 8 بوصات (20 سم) على الأقل من جسم الشخص.

ملاحظة: الشركة المصنعة غير مسؤولة عن أي تداخل في الراديو أو التلفزيون بسبب التعديلات غير المصرح بها على هذا الجهاز. حيث يمكن أن تؤدي هذه التعديلات إلى إلغاء سلطة المستخدم لتشغيل الجهاز.

هوبج هذا، تعلن شركة Starkey Laboratories, Inc أن ناقل أصوات التلفاز من شركة Starkey Laboratories, Inc يتوافق مع للمتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة بالتوجيه EU/2014/53. يمكن الحصول على نسخة من إعلان المطابقة من العناوين التالية docs.starkeyhearingtechnologies.com.

هوبج هذا، تُقر شركة Starkey Laboratories, Inc أن ناقل أصوات التلفاز يتوافق مع لوائح

المملكة المتحدة الخاصة بالأجهزة اللاسلكية SI 2017 بصيغتها المعدلة. يمكن الحصول على نسخة من إعلان المطابقة الخاص بالمملكة المتحدة من العناوين التالية ومن docs.starkeyhearingtechnologies.com.

المعلومات التنظيمية

Starkey Laboratories, Inc
Washington Ave. South 6700
Eden Prairie, MN 55344
الولايات المتحدة الأمريكية
www.starkey.com



Starkey Laboratories (Germany) GmbH
Weg beim Jäger 218-222
Hamburg 22335
ألمانيا

الخصص المفوض في المملكة المتحدة:

Starkey UK
William F. Austin House
Pepper Rd, Hazel Grove
Stockport SK7 5BX
www.starkey.co.uk

يجب التعامل مع النفايات الناتجة من المعدات الإلكترونية وفقاً للوائح المحلية



راجع دليل المستخدم



حافظ على جفاف الجهاز



تعليمات التخلص من الأجهزة الإلكترونية القديمة

تُشجع شركة Starkey Laboratories, Inc على التخلص من ناقل أصوات التلفاز غير عملية إعادة التدوير/التخلص من الإلكترونيات المحلية فضلاً عن أن قوانين الاتحاد الأوروبي والمجتمع المحلي تشترط ذلك.

يُرجى تضمين دليل المستخدم هذا عند التخلص من ناقل أصوات التلفاز.

ملاحظات

الرمز	معنى الرمز	المعيار المعمول به	رقم الرمز
	الشركة المصنعة	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.1
	الممثل المعتمد في المجتمع الأوروبي	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.2
	تاريخ التصنيع	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.3
	رقم الكatalog	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.6
	الرقم التسلسلي	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.7
	الجهاز الطبي	BS EN ISO 15223-1:2021	5.7.7
	حافظ على جفاف الجهاز	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.4
	حد درجة الحرارة	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.7
	حد الرطوبة	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.8
	تنبيه	BS EN ISO 15223-1:2021	5.4.4
	علامة تحذير عامة	ISO 7010-W001 الجدول د.2، علامة السلامة 2 EC 60601-1، المرجع رقم	
	راجع دليل/كتيب التعليمات	ISO 7010-M002 الجدول د.2، علامة السلامة 10 EC 60601-1، المرجع رقم	
	يُجمَع بشكل منفصل	التوجيه (EU) (WEEE/2/19 201)	الملحق التاسع
	أجهزة الفئة الثانية	IEC 60417 الرقم المرجعي الجدول د.1، الرمز 9 (IEC) 60417-5172	
	علامة الامتثال التنظيمي (RCM)	AS/NZS 4417.1:2012	لا ينطبق
	علامة Giteki	قانون الراديو الياباني	لا ينطبق
	التيار المبادر	IEC 60601-1، المرجع رقم الجدول د.1، IEC 60417-5031	
	رمز إعادة التدوير	توجيه البرلمان والمجلس الأوروبي EC/94/62	الملحق 1-7

ملاحظات

ملاحظات



P00007522

Starkey و StarLink علامتان تجاريتان مملوكتان لشركة Starkey Laboratories, Inc.

تُعد كلمة العلامة التجارية Bluetooth® وشعاراتها علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لهذه العلامات من قبل شركة Starkey يكون بموجب ترخيص.

© 2025 Starkey Laboratories, Inc. جميع الحقوق محفوظة.

P00007522 11/25 BKLT3172-04-AR-XX

براءة الاختراع: www.starkey.com/patents