

Manual do usuário do seu controle remoto StarLink 2.0



Acessório para:

Aparelhos auditivos com conectividade

Parabéns pelo seu novo controle remoto 2.0!

Use este manual para conhecer seu novo controle remoto e melhore o controle que você tem sobre seus aparelhos auditivos com ajustes fáceis e discretos.

Índice

1. Conheça seu controle remoto 2.0

Conhecendo seu controle remoto 2.0.....	2
Configurando seu controle remoto 2.0.....	3
Usando seu controle remoto 2.0.....	4

2. Guia de resolução de problemas.....8

3. Orientações adicionais


Uso pretendido.....	10
Informações da FCC.....	12
Informações regulatórias.....	13

4. Certificações.....15

Conhecendo seu controle remoto

Visão geral

1. Luz indicadora
2. Aumentar o volume
3. Diminuir o volume
4. Botão favorito
5. Botão interruptor bloquear/desbloquear
6. Mudança de programa
7. Cordão (acessório incluso)

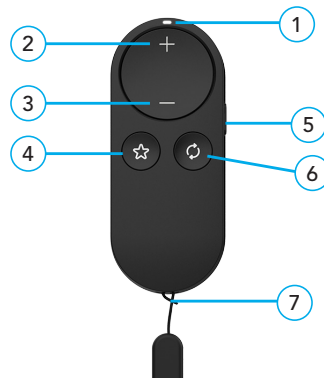

Configurando seu controle remoto

Para um par de aparelhos auditivos:

Antes de usar seu controle remoto pela primeira vez, você precisará emparelhá-lo com seu(s) aparelho(s) auditivo(s). Isso permite que seu acessório reconheça seus aparelhos auditivos para que possam trabalhar juntos.

NOTA: *Desligue o Bluetooth do seu telefone antes de emparelhar o controle remoto e os aparelhos auditivos. Ligue o Bluetooth no seu telefone após a conclusão do emparelhamento.*

PASSO 1: Desligue e ligue seus aparelhos auditivos.

- **Para sistemas de aparelhos auditivos CROS:** Desligue seus aparelhos auditivos e o transmissor CROS. Em seguida, **ligue** seus aparelhos auditivos, mas deixe o transmissor CROS **desligado**.

PASSO 2: Emparelhe seu controle remoto com seu(s) aparelho(s) auditivo(s):

1. Coloque seus aparelhos auditivos em uma distância de 15 centímetros do seu controle remoto.
2. Pressione e segure o **botão favorito** por 5 segundos até que a luz indicadora comece a piscar rapidamente.

3. Para um **par** ou para um **único** aparelho auditivo:

- **Emparelhamento bem sucedido:**
A luz indicadora fica sólida por 2 segundos.
- **Emparelhamento mal sucedido:**
A luz indicadora não fica sólida por 2 segundos. Repita o PASSO 1 e 2.

4. Verifique se a configuração foi bem-sucedida pressionando o botão aumentar ou diminuir volume e confirmando se o volume do aparelho auditivo está ajustado de acordo.

Usando seu controle remoto

Luz indicadora

A luz indicadora acende quando um comando de pressionar um botão é enviado ao(s) aparelho(s) auditivo(s).

Aumentar e diminuir volume

Pressionar o botão de aumentar volume aumentará o volume do(s) seu(s) aparelho(s) auditivo(s).

Pressionar o botão de diminuir volume diminuirá o volume do(s) seu(s) aparelho(s) auditivo(s).

NOTA: *Quando você está transmitindo áudio para seu(s) aparelho(s) auditivo(s), os botões de volume controlam o volume da transmissão de áudio.*



Mudança de programa

Seu profissional da audição pode criar vários programas dentro do seu aparelho auditivo. Ao pressionar este botão, você pode acessar e percorrer os programas disponíveis.



Botão favorito

Seu profissional da audição pode definir uma configuração favorita para você. Ao pressionar este botão, você pode acessar essa configuração específica.



- Se nenhuma configuração de favorito tiver sido definida, pressionar este botão não terá efeito nos seus aparelhos auditivos.

Botão interruptor bloquear/desbloquear

Use esta opção para fazer um ajuste em seus aparelhos auditivos ou para evitar alterações não intencionais nos aparelhos auditivos.

• Posição travada (para baixo):

Mova o botão para baixo para bloquear o controle remoto. Manter o controle remoto bloqueado evitará alterações não intencionais e também poderá ajudar a prolongar a vida útil da bateria.



• Posição desbloqueada (para cima):

Mova a chave para cima para ajustar seus aparelhos auditivos.




Cordão (acessório incluso)


O cordão pode ser usado ao redor do pulso para manter seu controle remoto seguro.

Bateria


1. Insira um objeto pontiagudo no furo.

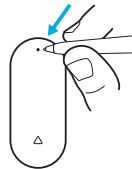


2. Deslize o compartimento da bateria para cima para abri-la.

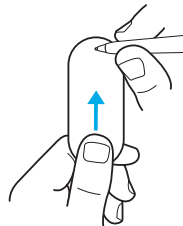


3. Remova a bateria usada.

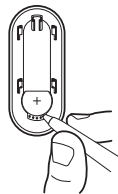

4. Insira a nova bateria (CR 2032).

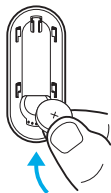

5. Deslize o compartimento da bateria para baixo para fechá-lo.

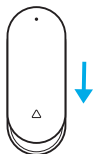

Guia de resolução de problemas

Problemas com seu controle remoto? Experimente estas dicas.

Se os problemas persistirem, entre em contato com seu profissional da audição.

Sintoma	Possíveis causas	Soluções
A luz indicadora não acende quando o botão é pressionado.	O controle remoto está no estado bloqueado.	Mova o botão interruptor bloquear/desbloquear da posição bloqueado (para baixo) para desbloqueado (para cima).
A luz indicadora acende, mas os aparelhos auditivos não respondem ao pressionar de um botão.	Depois de mover o botão interruptor bloquear/desbloquear para a posição desbloqueado, pode demorar um pouco para "localizar" seus aparelhos auditivos.	Aguarde cerca de um segundo após desbloquear antes de apertar um botão.

Sintoma	Possíveis causas	Soluções
A luz indicadora acende, mas os aparelhos auditivos não respondem ao pressionar de um botão.	Os aparelhos auditivos não estão emparelhados com o controle remoto.	Execute o processo de emparelhamento com seus aparelhos auditivos e controle remoto. Consulte <i>para emparelhar com aparelhos auditivos</i> na pág. 3.
	O nível da bateria do aparelho auditivo não suporta mais atividades com conectividade.	Insira uma nova bateria no aparelho auditivo.
Um conjunto de aparelhos auditivos não consegue emparelhar com o controle remoto.	Menos de dois aparelhos auditivos foram encontrados durante o processo de emparelhamento.	Durante o processo de emparelhamento, certifique-se de que ambos os aparelhos auditivos estejam disponíveis.

Uso pretendido

O controle remoto 2.0 é um acessório para um aparelho auditivo de condução aérea sem fio. O objetivo é permitir que um usuário faça remotamente ajustes de volume e programação em um aparelho auditivo de condução aérea.

O controle remoto 2.0 é classificado como uma peça aplicada Tipo B de acordo com o padrão de instrumentos médicos IEC 60601-1.

O controle remoto 2.0 foi projetado para atender aos mais rigorosos Padrões de Compatibilidade Eletromagnética Internacional. No entanto, ainda é possível que você experimente interferências causadas por perturbações na linha de energia, detectores de metais em aeroportos, campos eletromagnéticos de outros dispositivos médicos, sinais de rádio e descargas eletrostáticas.

O controle remoto 2.0 foi projetado para ser limpo com um pano úmido umedecido em água e sabão.

Se você usa outros dispositivos médicos ou dispositivos médicos implantáveis, como desfibriladores ou marca-passos, e está preocupado com a possibilidade de seu controle remoto 2.0 causar interferência em seu dispositivo médico, entre em contato com seu médico ou com o fabricante de seu dispositivo médico para obter informações sobre o risco de perturbação. O controle remoto 2.0 não deve ser usado durante um procedimento de ressonância magnética ou em uma câmara hiperbárica. O controle remoto 2.0 não está formalmente certificado para operar em atmosferas explosivas, como as que podem ser encontradas em minas de carvão ou em certas fábricas de produtos químicos.

Benefício clínico

O acessório em si não proporciona benefício clínico direto. Um benefício clínico indireto é fornecido ao permitir que o dispositivo original (aparelhos auditivos sem fio) atinja a finalidade pretendida.

Uso em aeronaves

O controle remoto 2.0 não deve ser usado em aeronaves, a menos que seja especificamente permitido pelo pessoal de voo.

Uso internacional

O controle remoto 2.0 foi aprovado para operar em frequências de rádio específicas do seu país ou região e pode não ser aprovado para uso fora do seu país ou região.

Esteja ciente de que a operação durante viagens internacionais pode causar interferência com outros dispositivos eletrônicos, ou outros dispositivos eletrônicos podem causar interferência com o seu controle remoto 2.0.

Seu controle remoto 2.0 foi projetado para operar dentro da faixa de temperatura de -20°C a +60°C (-4°F a 140°F), faixa de umidade relativa de 10%-95% e limites de altitude de 70 kPa – 106 kPa (equivalente a altitudes de 1.200 pés (380 m) abaixo do nível do mar a 10.000 pés (3.000 m)).

Seu controle remoto 2.0 foi projetado para ser transportado dentro da faixa de temperatura de -40°C (-40°F) a 60°C (140°F), faixa de umidade relativa de 10%-95% e limites de altitude de 70 kPa – 106 kPa (equivalente a altitudes de 1.200 pés (380 m) abaixo do nível do mar a 10.000 pés (3.000 m)).



Somos obrigados por regulamentos a fornecer os seguintes avisos:

⚠️ AVISO: O uso do controle remoto 2.0 diretamente próximo a outros equipamentos eletrônicos deve ser evitado, pois pode resultar em desempenho inadequado. Caso tal uso seja necessário, observe se seus aparelhos auditivos e demais equipamentos estão funcionando normalmente.

⚠️ AVISO: O uso de acessórios, componentes ou peças de reposição diferentes daqueles fornecidos pelo fabricante do controle remoto 2.0 pode resultar em aumento de emissões eletromagnéticas e diminuição da imunidade eletromagnética e pode resultar em degradação de desempenho.

⚠️ AVISO: Se o equipamento portátil de comunicação por radiofrequência for usado a menos de 30 cm (12 polegadas) do seu controle remoto 2.0, poderá ocorrer degradação do desempenho do seu aparelho auditivo. Se isto ocorrer, afaste-se do equipamento de comunicação.

O controle remoto 2.0 tem uma classificação IP 52 de acordo com IEC 60529.

Isto significa que o controle remoto 2.0 está protegido contra poeira.

Não conecte o controle remoto 2.0 a nenhum dispositivo externo.

A vida útil esperada do controle remoto 2.0 é de 3 anos.

Descrição técnica de conectividade

Starkey Laboratories, Inc. Controle remoto 2.0 opera na faixa de 2.4 - 2.4835 GHz com a potência máxima irradiada efetiva de 3dBm com o tipo de modulação de transmissão de 1M061F1W. a seção do receptor do rádio tem uma largura de banda de 2MHz.

O controle remoto 2.0 foi testado e passou nos seguintes testes de emissões e imunidade:

- Requisitos de emissões irradiadas e conduzidas da IEC 60601-1-2 para um dispositivo Grupo 1 Classe B, conforme declarado na CISPR 11.
- Imunidade RF irradiada em um nível de campo de 10 V/m entre 80 MHz e 2,7 GHz, bem como níveis de campo mais altos de dispositivos de comunicação, conforme indicado na Tabela 9 da IEC 60601-1-2.
- Imunidade a campos magnéticos de frequência de energia em um nível de campo de 30 A/m e a campos magnéticos de proximidade conforme indicado na Tabela 11 da IEC 60601-1-2.
- Imunidade a níveis de ESD de descarga conduzida de +/- 8 kV e descarga de ar de +/- 15 kV.

RELATÓRIO DE EVENTOS ADVERSOS DA UE

Qualquer incidente grave ocorrido em relação ao seu dispositivo deve ser relatado ao representante local da Starkey e à autoridade competente do Estado-Membro em que você está estabelecido.

Um incidente grave é definido como qualquer mau funcionamento, deterioração nas características e/ou desempenho do dispositivo, ou inadequação no manual/rotulagem do usuário do dispositivo, que pode levar à morte ou grave deterioração do estado de saúde do usuário, ou pode fazer isso em caso de recorrência.

Informações da FCC

AVISOS DE CONECTIVIDADE

FCC ID: EOA-24WR

IC: 6903A-24WR (Modelo 620)

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das regras da FCC e com os padrões RSS isentos de licença do ISED Canadá. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada do dispositivo.

NOTA: O fabricante não se responsabiliza por qualquer interferência de rádio ou TV causada por modificações não autorizadas neste equipamento. Tais modificações podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Por meio deste, a Starkey Laboratories, Inc. declara que o controle remoto 2.0 está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. Uma cópia da Declaração de Conformidade pode ser obtida nos seguintes endereços e em docs. starkeyhearingtechnologies.com.

Por meio deste, Starkey Laboratories, Inc. declara que o controle remoto 2.0 está em conformidade com os Regulamentos de Equipamentos de Rádio do Reino Unido SI 2017 conforme alterados. Uma cópia de a Declaração de Conformidade do Reino Unido pode ser obtida nos seguintes endereços e em docs. starkeyhearingtechnologies.com.

Informações regulatórias

Para manutenção ou reparo, entre em contato com seu profissional da audição.



Starkey Laboratories, Inc.
6700 Washington Ave. South
Eden Prairie, MN 55344 USA
www.starkey.com



Starkey Laboratories (Alemanha) GmbH
Weg beim Jäger 218-222
22335 Hamburg
Alemanha

Pessoa autorizada do Reino Unido:
Starkey Reino Unido
William F. Austin House
Pepper Rd, Hazel Grove
Stockport SK7 5BX, Reino Unido
www.starkey.co.uk



Os resíduos de equipamentos eletrônicos devem ser manuseados de acordo com as regulamentações locais.



ou



Consulte o manual de operações.



Manter seco.

Símbolo	Significado do símbolo	Padrão aplicável	Número do símbolo
	Fabricante	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.1
	Representante autorizado na comunidade Europeia	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.2
	Data de fabricação	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.3
	Número de catálogo	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.6
	Número de série	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.7
	Dispositivo médico	BS EN ISO 15223-1:2021	5.7.7
	Mantenha seco	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.4
	Limite de temperatura	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.7
	Limitação de umidade	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.8
	Cuidado	BS EN ISO 15223-1:2021	5.4.4
	Sinal de alerta geral	EC 60601-1, N° referência tabela D.2, sinal de segurança 2	ISO 7010-W001
	Consulte o manual de instruções	EC 60601-1, N° referência tabela D.2, sinal de segurança 10	ISO 7010-M002
	Coletar separadamente	DIRETIVA 2012/19/EU (WEEE)	Anexo IX
	Equipamento de Classe II	IEC 60417 N° referência tabela D.1	Símbolo 9 (IEC 60417-5172)
	Corrente direta	IEC 60601-1 N° referência tabela D.1	IEC 60417-5031
	Símbolo de reciclagem	Diretiva 94/62/CE do parlamento europeu e do conselho	Anexo I-VII 5.1.8 5.7.8

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

Importado por:
Starkey do Brasil LTDA.
Rua Doutor Fernão Pompeu de Camargo, 832 – Jd. Leonor
Campinas/SP 13041-025



StarLink e Starkey são marcas comerciais da Starkey Laboratories, Inc.

©2023 Starkey Laboratories, Inc. Todos os direitos reservados. P00002572 8/23 BKLT3201-00-PT-XX

Patente: www.starkey.com/patents

Versão 01/BR/2024