

Uw StarLink- afstandsbediening 2.0 Gebruikershandleiding



Accessoire voor:

Draadloze hoortoestellen

P00003341

Gefeliciteerd met uw nieuwe afstandsbediening 2.0!

Gebruik deze handige handleiding om uw nieuwe afstandsbediening te leren kennen. Verbeter de controle die u over uw hoortoestellen hebt met eenvoudige en discrete aanpassingen.

Inhoudsopgave

1. Uw afstandsbediening 2.0 leren kennen

Kennismaken met uw afstandsbediening	3
Uw afstandsbediening instellen	4
Uw afstandsbediening gebruiken	6
Gids voor het oplossen van problemen	11


2. Aanvullende richtlijnen

Bedoeld gebruik	13
FCC-informatie	16
Informatie over regelgeving	17

Kennismaken met uw afstandsbediening

Overzicht

1. Indicatielampje
2. Volume omhoog
3. Volume omlaag
4. Favorieten
5. Schakelaar voor vergrendelen/ontgrendelen
6. Wisselen van programma
7. Koord (meegeleverd accessoire)

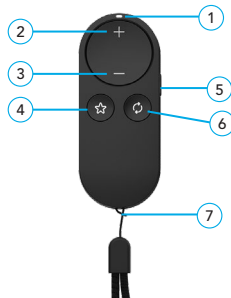

Uw afstandsbediening instellen

Om te koppelen met hoortoestellen:

Voordat u uw afstandsbediening voor het eerst gaat gebruiken, moet u ze koppelen met uw hoortoestel(len). Hierdoor kan uw accessoire uw hoortoestellen herkennen, zodat ze kunnen samenwerken.

OPMERKING: *Schakel Bluetooth op uw telefoon uit voordat u uw afstandsbediening en hoortoestellen koppelt. Schakel Bluetooth op uw telefoon aan nadat het koppelen voltooid is.*

STAP 1: Zet uw hoortoestellen **UIT** en **AAN**.

- **Voor CROS-hoortoestelsystemen:** Schakel uw hoortoestellen en CROS-zender **UIT**. Schakel vervolgens uw hoortoestellen **AAN**, maar laat de CROS-zender **UIT**.

STAP 2: Koppel uw afstandbediening met uw hoortoestel(len):

1. Plaats uw hoortoestellen binnen 15 cm van uw afstandbediening.
2. Houd de knop **Favorieten** 5 seconden ingedrukt tot het indicatielampje snel begint te knipperen.
3. Voor een **set** hoortoestellen of voor een **enkel** hoortoestel:
 - **Succesvolle koppeling:** Het indicatielampje blijft 2 seconden branden.
 - **Niet-succesvolle koppeling:** Het indicatielampje blijft geen 2 seconden branden. Herhaal STAP 1 en 2.
4. Controleer of de instelling gelukt is door op de **Volume omhoog** of **Volume omlaag** knop te drukken en te bevestigen dat het volume van het hoortoestel overeenkomstig aangepast wordt.

Uw afstandsbediening gebruiken

Indicatielampje

Het indicatielampje gaat branden wanneer er via de knop een commando naar het hoortoestel/de hoortoestellen wordt verzonden.

Volume omhoog en volume omlaag



Als u op de knop volume omhoog drukt, wordt het volume van uw hoortoestel(len) verhoogd.

Als u op de knop volume omlaag drukt, wordt het volume van uw hoortoestel(len) verlaagd.

OPMERKING: Wanneer u audio naar uw hoortoestel(len) streamt, regelen de volumeknoppen het volume van de audiostream.

Wisselen van programma



Uw audicien kan meerdere programma's in uw hoortoestel aanmaken. Door op deze toets te drukken, kunt u de beschikbare programma's openen en doorlopen.

Favorieten



Uw audicien kan een favoriete configuratie voor u instellen. Door op de knop Favorieten te drukken, krijgt u toegang tot deze specifieke configuratie.

- Als er geen favoriete configuratie is ingesteld, heeft het drukken op deze knop geen effect op uw hoortoestellen.

Schakelaar voor vergrendelen/ontgrendelen

Gebruik deze schakelaar om uw hoortoestellen aan te passen of om onbedoelde wijzigingen aan het hoortoestel te voorkomen.

- Vergrendelde stand (omlaag):** 

Zet de schakelaar naar beneden om uw afstandsbediening te vergrendelen. Als u uw afstandsbediening vergrendelt, voorkomt u onbedoelde wijzigingen en gaat de batterij langer mee.
- Ontgrendelde stand (omhoog):** 


Zet de schakelaar omhoog om uw hoortoestellen aan te passen.

Koord (meegeleverd accessoire)


Het koord kan om de pols worden gedragen om uw afstandsbediening veilig te houden.

Batterij


- Steek een puntig voorwerp in het gaatje.
- Schuif het batterijklepje omhoog om het te openen.

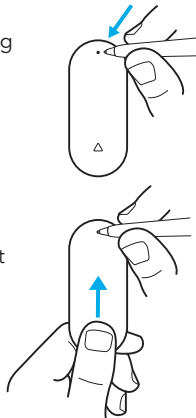

3. Verwijder de gebruikte batterij.

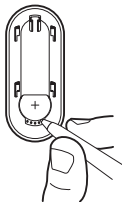

4. Plaats de nieuwe batterij (CR 2032).

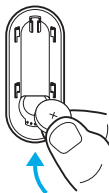

5. Schuif het batterijklepje omlaag om het te sluiten.



Gids voor het oplossen van problemen

Ondervindt u problemen met uw afstandsbediening? Probeer deze tips. Als de problemen aanhouden, neem dan contact op met uw audicien.

Symptoom	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Het indicatielampje brandt niet wanneer de knop wordt ingedrukt.	De afstandsbediening is in vergrendeld.	Zet de schakelaar voor vergrendelen/ontgrendelen van vergrendeld (omlaag) naar ontgrendeld (omhoog).
Het indicatielampje brandt, maar het hoortoestel reageert niet op het indrukken van knoppen.	Na het schakelen van de schakelaar voor vergrendelen/ontgrendelen naar de stand Ontgrendeld, kan het een korte tijd duren om uw hoortoestellen draadloos te 'lokaliseren'.	Na het ontgrendelen wacht u ongeveer een seconde voordat u op een knop drukt.

Symptoom	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Het indicatielampje brandt, maar het hoortoestel reageert niet op het indrukken van knoppen.	De hoortoestellen zijn niet gekoppeld met de afstandsbediening.	Voer het koppelingsproces uit met uw hoortoestellen en de afstandsbediening. Zie <i>Om te koppelen met hoortoestellen</i> op pagina 4.
	Het niveau van de batterij in het hoortoestel is zo laag dat het draadloze activiteit niet langer kan ondersteunen.	Installeer een nieuwe batterij in het hoortoestel.
Het lukt niet om de set hoor- toestellen te koppelen met de afstandsbediening.	Bij het koppelen zijn er minder dan twee hoortoestellen gevonden.	Zorg ervoor dat beide hoortoestellen tijdens het koppelen beschikbaar zijn.

Bedoeld gebruik

De afstandsbediening 2.0 is een accessoire voor een draadloos hoortoestel met luchtgeleiding. Het is bedoeld om een gebruiker op afstand volume en programma's van een luchtgeleid hoortoestel aan te passen.

De afstandsbediening 2.0 is geclassificeerd als een type B toegepast onderdeel onder de IEC 60601-1 norm voor medische hulpmiddelen.

De afstandsbediening 2.0 is ontworpen om te voldoen aan de strengste normen voor internationale elektromagnetische compatibiliteit. Het is echter nog steeds mogelijk dat u storing ondervindt door storingen in elektriciteitsleidingen, metaaldetectoren op luchthavens, elektromagnetische velden van andere medische toestellen, radiosignalen en elektrostatische ontladingen.

De afstandsbediening 2.0 ontworpen om te worden gereinigd met een vochtige doek dat met zeepwater is bevochtigd.

Als u andere medische toestellen gebruikt of implanteerbare medische toestellen draagt, zoals defibrillators of pacemakers, en u vreest dat uw afstandsbediening 2.0 storing kan veroorzaken op uw medische toestel, neem dan contact op met uw arts of de fabrikant van uw medische toestel voor informatie over het risico op storing. De afstandsbediening 2.0 mag niet worden gebruikt tijdens een MRI-procedure of in een hyperbare kamer. De afstandsbediening 2.0 is niet formeel gecertificeerd voor gebruik in explosieve omgevingen zoals in kolenmijnen of bepaalde chemische fabrieken.

Klinisch voordeel

Het accessoire biedt zelf geen direct klinisch voordeel.

Er wordt een indirect klinisch voordeel geboden door het oudertoestel (draadloze hoortoestellen) in staat te stellen hun beoogde doel te bereiken.


Gebruik in vliegtuigen

De afstandsbediening 2.0 mag niet worden gebruikt in vliegtuigen, tenzij het vliegpersoneel dit specifiek toelaat.

Internationaal gebruik

De afstandsbediening 2.0 is goedgekeurd om te werken op radiofrequenties die specifiek zijn voor uw land of regio en is mogelijk niet goedgekeurd voor gebruik buiten uw land of regio.

Houd er rekening mee dat gebruik tijdens internationale reizen storing kan veroorzaken in andere elektronische apparaten, of dat andere elektronische apparaten storing kunnen veroorzaken met uw afstandsbediening 2.0.

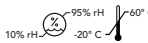 Uw afstandsbediening 2.0 is ontworpen om te werken binnen een temperatuurbereik van -20°C tot +60°C, een relatieve vochtigheid van 10%-95% en een hoogtebeperking van 70 kPa - 106 kPa (gelijk aan hoogtes van 380 m onder zeeniveau tot 3000 m).

Uw afstandsbediening 2.0 is ontworpen om te worden getransporteerd binnen een temperatuurbereik van -40°C tot 60°C, een relatieve vochtigheid van 10%-95% en een hoogtebeperking van 70 kPa - 106 kPa (gelijk aan hoogtes van 380 m onder zeeniveau tot 3000 m).

We zijn wettelijk verplicht de volgende waarschuwingen te geven:

WAARSCHUWING: Gebruik van de afstandsbediening 2.0 direct naast andere elektronische apparatuur moet worden vermeden, omdat dit kan leiden tot slechte prestaties. Indien dit gebruik noodzakelijk is, dient u na te gaan of uw hoortoestellen en de andere apparatuur normaal functioneren.

WAARSCHUWING: Het gebruik van andere accessoires, onderdelen of vervangingsonderdelen dan die door de fabrikant van de afstandsbediening 2.0 zijn geleverd, kan leiden tot verhoogde elektromagnetische emissies en verminderde elektromagnetische immuniteit en kan resulteren in verminderde prestaties.

WAARSCHUWING: Indien draagbare radiofrequentiecommunicatieapparatuur wordt gebruikt op een afstand van minder dan 30 cm van uw afstandsbediening 2.0, kan dit leiden tot prestatievermindering van uw hoortoestel. Ga in dat geval uit de buurt van de communicatieapparatuur staan.

De afstandsbediening 2.0 heeft een IP 52-classificatie volgens IEC 60529. Dit betekent dat de afstandsbediening 2.0 beschermd is tegen stof.

Sluit de afstandsbediening 2.0 niet aan op een ander extern toestel.

De verwachte levensduur van de afstandsbediening 2.0 is 3 jaar.

Technische beschrijving draadloos

De afstandsbediening 2.0 van Starkey Laboratories, Inc. werkt in de 2,4 - 2,4835 GHz-band met een maximaal effectief uitgestraald vermogen van 3 dBm met zendmodulatietype 1M06F1W. Het ontvangergedeelte van de radio heeft een bandbreedte van 2 MHz.

De afstandsbediening 2.0 is getest op en geslaagd voor de volgende emissie- en immuniteitstests:

- IEC 60601-1-2 uitgestraalde en geleide emissie-eisen voor een apparaat van groep 1, klasse B, zoals vermeld in CISPR 11.
- RF-stralingsimmuniteit bij een veldniveau van 10V/m tussen 80 MHz en 2,7 GHz en hogere veldniveaus van communicatieapparatuur zoals vermeld in tabel 9 van IEC 60601-1-2.
- Immuniteit voor magnetische netfrequentievelden met een niveau van 30 A/m en voor magnetische velden in de omgeving, zoals vermeld in tabel 11 van IEC 60601-1-2.
- Immuniteit voor ESD-niveaus van +/- 8kV geleide ontlading en +/-15 kV luchtontlading.

EU-RAPPORTAGE VAN ONGEWENSTE VOORVALLEN

Elk ernstig incident in verband met uw toestel moet worden gemeld aan de lokale vertegenwoordiger van Starkey en de

bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin u bent gevestigd. Een ernstig incident wordt gedefinieerd als elke slechte werking, verslechtering van de kenmerken en/of prestaties van het toestel of onvolkomenheid in de gebruikershandleiding/etikettering van het toestel die de dood of een ernstige verslechtering van de gezondheidstoestand van de gebruiker tot gevolg kan hebben OF dit bij herhaling kan doen.

FCC-informatie.

MEDEDELINGEN DRAADLOOS

FCC ID: EOA-24WR

IC: 6903A-24WR (Model 610)

Dit toestel voldoet aan deel 15 van de FCC-regels en aan de licentievrije RSS-norm(en) van ISED Canada. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit toestel mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit toestel moet elke ontvangen interferentie aanvaarden, met inbegrip van interferentie die een ongewenste werking van het toestel kan veroorzaken.

OPMERKING: De fabrikant is niet verantwoordelijk voor radio- of tv-storingen veroorzaakt door ongeoorloofde wijzigingen aan dit toestel. Dergelijke wijzigingen kunnen het recht van de gebruiker om dit toestel te bedienen tenietdoen.

Hierbij verklaart Starkey Laboratories, Inc. dat de afstandsbediening 2.0 voldoet aan de essentiële vereisten en overige relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. Een kopie van de conformiteitsverklaring is verkrijgbaar op de volgende adressen of op docs.starkeyhearingtechnologies.com.

Hierbij verklaart Starkey Laboratories, Inc. dat de afstandsbediening 2.0 voldoet aan de gewijzigde UK Radio Equipment Regulations SI 2017. Een kopie van de conformiteitsverklaring voor het VK is verkrijgbaar op de volgende adressen of op docs.starkeyhearingtechnologies.com.

Informatie over regelgeving

Neem voor service of reparatie eerst contact op met uw audicien. Indien nodig kunt u uw hoortoestellen sturen naar:



Starkey Laboratories, Inc.
6700 Washington Ave. South
Eden Prairie, MN 55344 VS

www.starkey.nl

www.starkey.be

Starkey Nederland en België:
KIND HOREN B.V.
Laan van de Leeuw 50
7324 BD APELDOORN

Telefoon +31 (0)55 360 21 11
info@kindhoren.nl



Starkey Laboratories (Germany) GmbH
Weg beim Jäger 218-222
22335 Hamburg
Duitsland

Gevolmachtigd vertegenwoordiger voor het VK:

Starkey UK
William F. Austin House
Pepper Rd, Hazel Grove
Stockport SK7 5BX, UK
www.starkey.co.uk



Afval van elektronische apparatuur moet volgens de plaatselijke regelgeving worden behandeld



Raadpleeg de gebruikershandleiding



Droog houden

Symbool	Betekenis van symbool	Toepasselijke norm	Symbool-nummer
	Fabrikant	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.1
	Gevolmachtigde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.2
	Productiedatum	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.3
	Catalogusnummer	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.6
	Serienummer	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.7
	Medisch apparaat	BS EN ISO 15223-1:2021	5.7.7
	Droog houden	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.4
	Temperatuurlimiet	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.7
	Luchtvochtigheidslimiet	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.8
	Let op	BS EN ISO 15223-1:2021	5.4.4
	Algemene waarschuwingsaanduiding	IEC 60601-1, referentienr. Tabel D.2, veiligheidsaanduiding 2	ISO 7010-W001
	Raadpleeg de instructiehandleiding	IEC 60601-1, referentienr. Tabel D.2, veiligheidsaanduiding 10	ISO 7010-M002
	Gescheiden inzamelen	RICHTLIJN 2012/19/EU (AEEA)	Bijlage IX
	Apparatuur uit klasse II	IEC 60417 Referentienr. Tabel D.1	Symbool 9 (IEC 60417- 5172)
	Gelijkstroom	IEC 60601 -1 Referentienr. Tabel D.1	IEC 60417-5031
	Symbool voor recycling	Richtlijn 94/62/EC van het Europees Parlement en de Europese Raad	Annex I-VII



P00003341



StarLink en Starkey zijn handelsmerken van
Starkey Laboratories, Inc.

©2025 Starkey Laboratories, Inc. Alle rechten voorbehouden.
P00003341 11/25 BKLT3201-02-NL-XX

Patent: www.starkey.com/patents