


Gebruikers- handleiding voor de app van uw hoortoestel

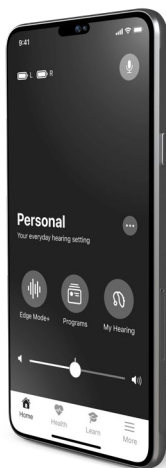

Krijg volledige controle over uw
hoortoestellen om u te helpen beter
te horen en beter te leven.

Inhoudsopgave

1. Aan de slag	
Koppelen met uw Apple-toestel	8
Koppelen met uw Android-telefoon	10
Over uw app	12
2. Home	
Overzicht home	16
Batterij-/verbindingsstatus	20
Volume en dempen	22
3. Edge Mode+	
Wanneer Edge Mode+ gebruiken	24
Hoe gebruikt u Edge Mode+	25
Geluid aanpassen	30
4. Programma's	
Wat zijn programma's	34
Wanneer kunt u programma's gebruiken	35
Programma's wijzigen	36
Een programma toevoegen	38
Een aangepast programma maken	40
Een aangepast programma bewerken	43
Een aangepast programma verwijderen	47
5. Programmaopties	50
6. Handmatige aanpassingen	54

Inhoudsopgave

7. Mijn Gehoor	
Overzicht Mijn Gehoor	58
Volume microfoon	60
Tinnitus	62
CROS Balans	65
Spraak AI	67
8. Vind Mijn Hoortoestellen	70
9. Zelfcheck	
Zelfcheck gebruiken	74
Resultaten zelfcheck	76
10. Mijn instellingen	
Overzicht Mijn instellingen	80
Over mijn hoortoestellen	82
Firmware updates	83
Dubbeltik bediening	84
Audio streaming met Apple telefoon	87
Audiostreaming met Android-telefoon	90
Audiostreaming met accessoire	93
Smart Assistant-microfoon	96
Auto aan/uit	98
Een oproep accepteren/beëindigen/wijzigen	99
Offline modus	100

Inhoudsopgave

11. Gezondheid	
Overzicht Gezondheid	104
Gehoorrapport	109
Stappen	112
Staan	116
Beweging	120
Wandelen	124
Hardlopen	128
Indoor fietsen	132
Aerobics	136
Verander doelen	140
12. Hear Share	
Een zorgverlener uitnodigen	144
Contactpersonen bekijken/ bewerken	151
13. Val Alarmering	
Overzicht Val Alarmering	156
Een contactpersoon uitnodigen	158
Geluidssignalen	161
Instellingen	163
Geschiedenis	167
14. Leer	170
15. Meer	
Overzicht meer	176
Account	178

Inhoudsopgave

Instellingen app	179
Over en privacy	180
Meldingen	182
16. TeleHear	
Overzicht TeleHear	186
TeleHear instellen	188
Een sessie op afstand starten	191
Een hulpverzoek indienen	195
Een nieuwe geluidsinstelling proberen	200
17. Herinneringen	
Overzicht Herinneringen	206
Een herinnering maken	207
Een herinnering bewerken	210
Een herinnering voltooien	212
18. Smart Assistant	216
19. Vertalen	220
20. Spraak naar Tekst	224
21. Aanvullende richtlijnen	
Veiligheidsinformatie	228
Informatie over regelgeving	229

Aan de slag

- Koppelen met uw Apple-toestel
- Koppelen met uw Android-telefoon
- Over uw app

Koppelen met uw Apple-toestel

Koppel uw hoortoestellen met uw **Apple-toestel**. Hierdoor kunt u het gebruik van uw hoortoestellen regelen en optimaliseren met deze app.

Volg deze stappen:

(Herhaal deze stappen als uw hoortoestellen de verbinding met uw toestel verliezen.)

1. Zet uw hoortoestellen uit/aan om de koppelingsmodus te activeren: **Als uw hoortoestellen niet oplaadbaar zijn:**

- Zorg ervoor dat elk hoortoestel een nieuwe batterij heeft.
- Open het batterijklepje van elk hoortoestel. Dit schakelt hen **UIT**.
- Sluit het batterijklepje van elk hoortoestel. Dit schakelt hen **IN**.

OF

Als uw hoortoestellen oplaadbaar zijn:

- Zorg ervoor dat de oplader van uw hoortoestel in het stopcontact zit of een volle batterij heeft.
- Plaats elk hoortoestel in de oplader. Dit schakelt hen **UIT**.
- Neem elk hoortoestel uit de oplader. Dit schakelt hen **IN**.

Koppelen met uw Apple-toestel

2. Ga op uw Apple-toestel naar **Instellingen**. Selecteer **Toegankelijkheid > Hoortoestellen**. Als de Bluetooth®-schakelknop **UIT** staat, zet hem dan op **AAN**.
3. Wanneer uw hoortoestellen ontdekt zijn, moeten ze verschijnen onder **MFI HOORTOESTELLEN** (bv. 'Jane's hoortoestellen'). Tik **hierop** om uw hoortoestellen aan uw Apple-toestel te koppelen.
4. Er verschijnen **twee koppelingsverzoeken** (één voor elk hoortoestel). Selecteer **'Koppelen'** voor elk verzoek. *(De verzoeken kunnen verschillende seconden uit elkaar liggen.)*

Het koppelen is voltooid wanneer de naam van uw hoortoestel verandert van zwart naar **blauw**.

Herinnering – Er kan slechts een paar hoortoestellen met uw toestel worden verbonden.

Koppelen met uw Android-telefoon

Koppel uw hoortoestellen met uw **Android-telefoon**. Hierdoor kunt u het gebruik van uw hoortoestellen regelen en optimaliseren met deze app.

Volg deze stappen:

(Herhaal deze stappen als uw hoortoestellen de verbinding met uw toestel verliezen.)

1. Als uw hoortoestellen niet oplaadbaar zijn:

- Zorg ervoor dat elk hoortoestel een nieuwe batterij heeft.
- Open het batterijklepje van elk hoortoestel. Dit schakelt hen **UIT**.
- Sluit het batterijklepje van elk hoortoestel. Dit schakelt hen **IN**.

OF

Als uw hoortoestellen oplaadbaar zijn:

- Zorg ervoor dat de oplader van uw hoortoestel in het stopcontact zit of een volle batterij heeft.
- Plaats elk hoortoestel in de oplader. Dit schakelt hen **UIT**.
- Neem elk hoortoestel uit de oplader. Dit schakelt hen **IN**.

Koppelen met uw Android-telefoon

2. Ga op uw Android-telefoon naar **Instellingen > Bluetooth** en schakel **Bluetooth** in.
3. Wanneer uw hoortoestellen ontdekt zijn, moeten ze verschijnen onder **Gekoppelde toestellen** (bv. 'Jane's hoortoestellen').
4. Tik op de naam van **elk hoortoestel** om te koppelen.

Herinnering – Er kan slechts een paar hoortoestellen met uw toestel worden verbonden.

Over uw app

Welkom bij een geavanceerde hoorervaring

De mobiele app voor hoortoestellen beschikt over een vooruitstrevende selectie van functies en eigenschappen. En biedt de gebruiksvriendelijkheid die hierbij hoort. Allemaal binnen handbereik.

Deze app is gemaakt met de hulp van dragers van hoortoestellen en stelt u in staat om:

Overal beter te horen;

direct aanpassingen te maken om u beter te helpen horen, waar u ook bent. Met één tikje krijgt u duidelijkere spraak en minder ruis in de moeilijkste luisteromgevingen. Bovendien kunt u de geluidsinstellingen voor uw favoriete plaatsen aanpassen. Equalizer en volume? U regelt ze. Uw hoortoestellen zijn dus precies zoals u ze wilt hebben voor uw individuele behoeften.

Geniet van slimme functies – en beter leven

Vereenvoudig uw leven met slimme functies die u helpen op uw hoortraject. Laat uw hoortoestel op afstand aanpassen door uw audicien – gewoon vanuit uw luie stoel. Traceer de locatie van verloren hoortoestellen. Wen sneller aan hoortoestellen met korte handleidingen, tips en video's. Allemaal op maat gemaakt voor uw hoortraject.

Over uw app

Monitor uw gezondheid

Monitor uw dagelijkse gehoor en lichamelijke activiteit om u te helpen gezond te blijven. Stel doelen voor gehoor, stappen, beweging en meer en bereik deze. Krijg persoonlijk en gedetailleerd inzicht in uw activiteitsniveaus. Deze app kan het zelfs detecteren als u valt en de mensen die u kiest waarschuwen zodat u veilig blijft terwijl u actief bent.

En veel meer

Het is nog nooit zo eenvoudig geweest om beter te horen. En uw beste leven te leiden.

Vind de belangrijkste functies die het gebruik van uw hoortoestel verbeteren op het **Home-scherm**.

Home

- Overzicht home
- Batterij-/verbindingstatus
- Volume en dempen

Overzicht home

1. **Batterij-indicatoren.** Tonen de batterijgebruiksniveaus van uw linker en rechter hoortoestel.




2. **Smart Assistant.** Tik om Smart Assistant te activeren. Gebruik uw stem om: programma's te wijzigen; herinneringen in te stellen; vragen te stellen over hoortoestellen, en meer.



3. **Van programma wisselen.** Swipe om van programma te wisselen.




4. **Programma in gebruik.** Wordt weergegeven en bijgewerkt wanneer u van programma wisselt.

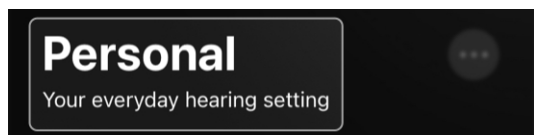


5. **Programmaopties.** Tik voor snelle informatie over het programma dat u gebruikt. Voer geluidsaanpassingen uit en meer.


Overzicht home

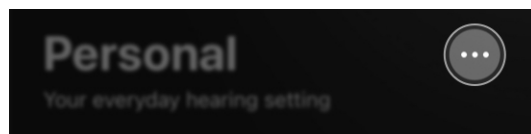

6. **Edge Mode+.** Tik om direct het beste geluid te krijgen voor uw huidige omgeving.*

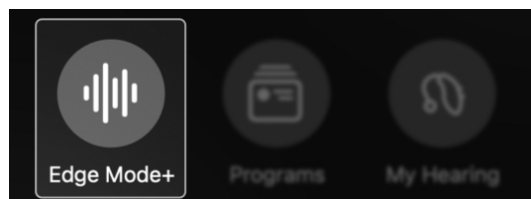


7. **Programma's.** Tik om een programma te kiezen (indien ingesteld door uw audicien) om u te helpen beter te horen in een specifieke luisteromgeving. Bovendien kunt u aangepaste programma's maken voor uw favoriete of veelbezochte plekken, zoals cafés, parken en meer.

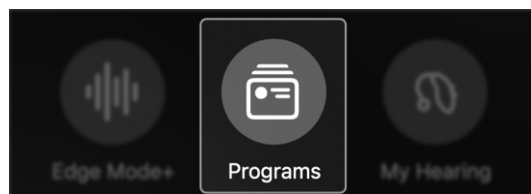

*Functie kan verschillen per hoortoestelmodel

Overzicht home

8. **Mijn Gehoor.** Tik om naar meer hoortoestelfuncties te gaan, zoals Vind Mijn Hoortoestellen of Zelfcheck. Of stel hoorfuncties in die door uw audicien zijn ingesteld voor specifieke hoorbehoeften.

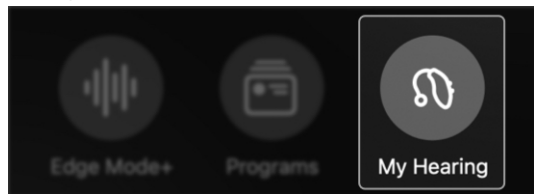

9. **Dempen.** Tik om het geluid dat door uw hoortoestellen komt uit te zetten.



10. **Volumeregelaar.** Verplaats de schuifregelaar om het volume van uw hoortoestel(len) aan te passen.



11. **Home.** Tik om direct terug te keren naar het Home-scherm voor programma's en hooraanpassingen.



Overzicht home

12. **Gezondheid.** Tik om de vooruitgang en inzichten over gehoor en lichamelijke activiteit (stappen, beweging, meer) te bekijken.



13. **Leer.** Tik voor handige how-to's, tips en video's over hoortoestelonderwerpen.



14. **Meer.** Tik voor informatie over uw account, instellingen van de app, TeleHear, vertaling, herinneringen en meer.



Batterij-/verbindingsstatus

De **batterijpictogrammen** aan de bovenkant van het **Home-scherm** geven het gebruiksniveau en de verbindingsstatus van uw linker en rechter hoortoestel aan.

Batterijvermogen/gebruik

De batterijpictogrammen bevatten visuals waarmee u kunt bepalen hoeveel vermogen elke hoortoestelbatterij heeft:

- **Vaste balk** in het batterijpictogram:
Hoe langer de balk, hoe meer batterijvermogen uw hoortoestel heeft.



- **Kleur** van het batterijpictogram:
Een rode batterij geeft aan dat de batterij bijna leeg is.
(**Volgende stap:** Laad uw hoortoestellen zo snel mogelijk op).



Batterij-/verbindingsstatus

Verbinding

De batterijpictogrammen kunnen u ook helpen om te bepalen of uw hoortoestellen verbonden zijn met uw telefoon:

- **Uitroepteken (!)** naast het batterijpictogram: Dit geeft aan dat uw hoortoestel(len) niet verbonden zijn met uw telefoon.
(**Volgende stap:** Probeer uw hoortoestellen **UIT** te schakelen en dan opnieuw **IN** te schakelen.)



Volume en dempen

Met de **volumeregeling**, te vinden op het **Home-scherm**, kunt u instellen hoe hard of zacht u geluid hoort via uw hoortoestellen.

Om het volume aan te passen:

Verplaats de **schuifregelaar** naar **LINKS** of **RECHTS**. (U kunt ook terugkeren naar het **standaardvolume** door twee keer op de **regelaar** te klikken.)



Om het volume te dempen:

Schuif de **schuifregelaar** helemaal naar **LINKS** (het **pictogram** verandert om aan te geven dat het volume is gedempt). U kunt ook op het **pictogram van de linker luidspreker** tikken om het geluid in te schakelen of te dempen.




Edge Mode+

- Wanneer Edge Mode+ gebruiken
- Hoe gebruikt u Edge Mode+

Wanneer Edge Mode+ gebruiken

Edge Mode+ biedt onmiddellijke hoorhulp wanneer u die het meeste nodig hebt. Gebruik Edge Mode+ als hoorsituaties moeilijk worden om mee om te gaan. Of wanneer u **snel tijdelijke hulp** nodig hebt om **het beste te horen** in uw huidige omgeving. Edge Mode+ kan achtergrondgeluid verminderen en spraak helderder maken.

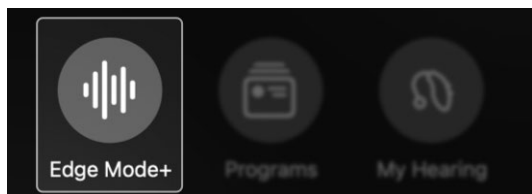

Voorbeelden van wanneer u Edge Mode+ kunt gebruiken:


- Wanneer een restaurant plotseling druk en luidruchtig wordt.
- Wanneer u in een auto rijdt die een snelweg oprijdt.
- Tijdens het opstijgen/landen met een vliegtuig.
- Wanneer heldere spraak nodig is tijdens het tv-kijken.

Hoe gebruikt u Edge Mode+

Gebruik **Edge Mode+** om beter te horen in uitdagende of onvoorspelbare luisteromgevingen – onmiddellijk. Edge mode+ stappen kunnen verschillen per model hoortoestel en technologieniveau. Vraag uw audicien om specifieke informatie.


Om Edge Mode+ te gebruiken:

1. Tik op het **Home**-scherm op de **knop Edge Mode+**. Edge Mode+ scant onmiddellijk uw huidige luisteromgeving en past de beste geluidsinstellingen toe. Zodat u beter kunt horen.

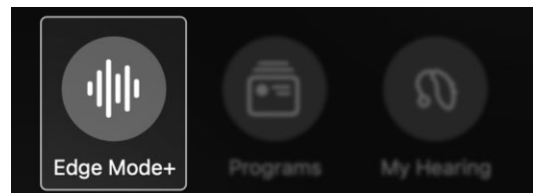

2. Het **Edge Mode+ scherm** verschijnt. Doe **een** van de volgende dingen:
 - Niets. Het **beste geluid** van Edge Mode+ voldoet al aan uw behoeften. Er is geen verdere actie nodig. **Ga naar stap 3.**
 - Tik op **Verbeter spraak** om nog meer duidelijkheid te bekomen en anderen helderder te horen. **Ga naar stap 3.**
 - Tik op **Reduceer lawaai** om nog meer comfort te krijgen door achtergrondgeluid te verminderen. **Ga naar stap 3.**

Hoe gebruikt u Edge Mode+

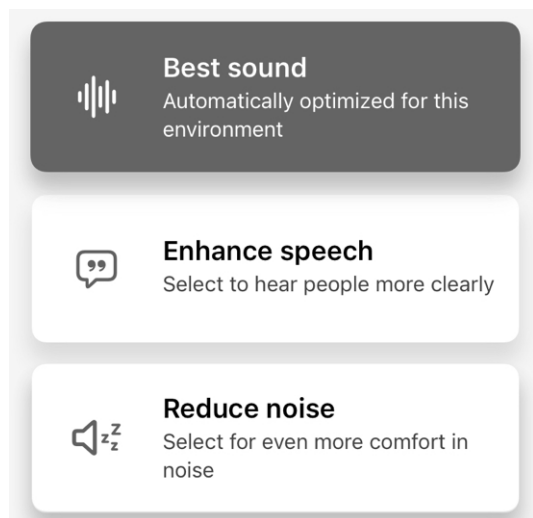

Of, als een laatste toevlucht:


- Als geen van bovenstaande acties u helpt, tik dan op **Geluid handmatig aanpassen**. Het scherm Geluid aanpassen verschijnt met 3 aanpassingsopties:

Adjust sound manually


- **Ruisonderdrukking** Verplaats de **schuifregelaar**: naar **RECHTS** voor meer ruisonderdrukking, naar **LINKS** voor minder geluidsonderdrukking.

Hoe gebruikt u Edge Mode+

- **Windreductie** Verplaats de **schuifregelaar**: naar **RECHTS** voor meer windreductie, naar **LINKS** voor minder windreductie.

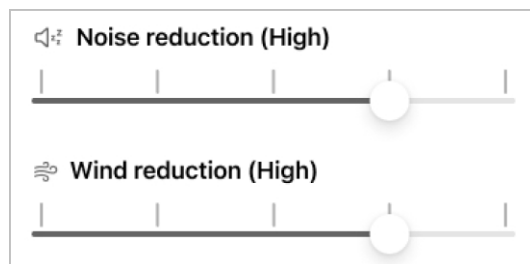

- **Equalizer** Verplaats de regelaars voor **lage**, **middelste** en **hoge** tonen: **Naar OMHOOG** of **naar OMLAAG** om te kiezen hoeveel nadruk u wilt leggen op geluiden met hoge of lage tonen om u heen.

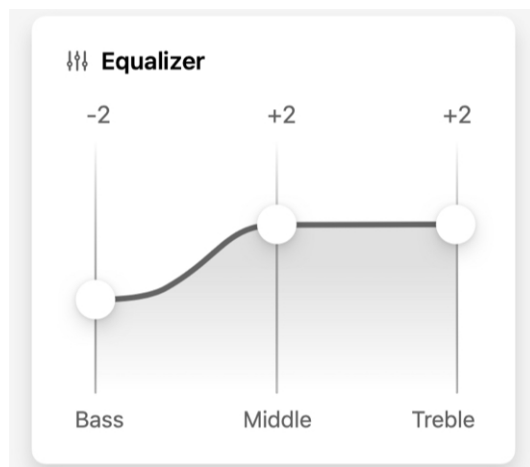

Hoe gebruikt u Edge Mode+

3. Tik op **Opslaan**. Hierdoor blijft u in Edge Mode+. 'Edge Mode+' blijft uw huidige programma op het Home-scherm totdat u het programma verandert of het niet meer gebruikt.



4. Om uw wijzigingen te negeren en terug te keren naar het **Home-scherm**, tikt u op **Annuleren**.

Aanpassen

- Geluid aanpassen

Geluid aanpassen


Met **Geluid aanpassen** kunt u de geluidsinstellingen van uw hoortoestel handmatig veranderen. Dit helpt u beter te horen in uitdagende luisteromstandigheden.

Wanneer gebruikt u Geluid aanpassen

- Tijdens gesprekken wanneer u spraak duidelijker moet horen of wanneer er meerdere sprekers zijn.
- In omgevingen met veel achtergrondlawaai, zoals restaurants of bijeenkomsten.
- Als wind of ander lawaai uw gehoor stoort.

Om Geluid aanpassen te gebruiken:

1. Tik op het **Home-scherm** op de knop **Geluid aanpassen**.

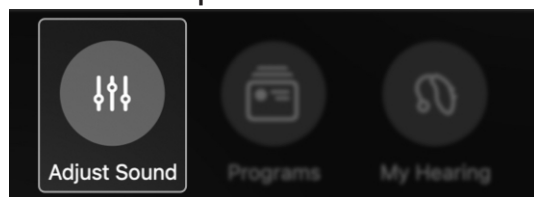


2. Het **scherm Geluid aanpassen** verschijnt met 3 aanpassingsopties:


- **Ruisonderdrukking**
Verplaats de **schuifregelaar**: **naar RECHTS** voor meer ruisonderdrukking, **naar LINKS** voor minder geluidsonderdrukking.

Geluid aanpassen

- **Windreductie** Verplaats de **schuifregelaar**: **naar RECHTS** voor meer windreductie, **naar LINKS** voor minder windreductie.

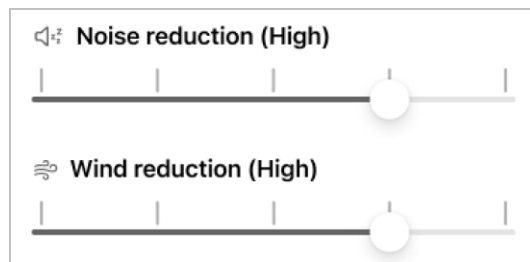

- **Equalizer** Verplaats de regelaars voor **lage, middelste** en **hoge tonen**: **Naar OMHOOG** of **naar OMLAAG** om te kiezen hoeveel nadruk u wilt leggen op geluiden met hoge of lage tonen om u heen.

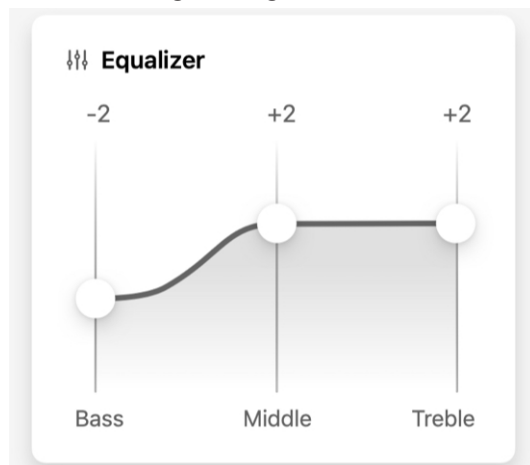


Geluid aanpassen

3. **Tik op Opslaan.** Hierdoor blijft u in uw aangepaste geluidsinstellingen totdat u overschakelt naar een ander programma of uw hoortoestellen opnieuw opstart.



OF

Tik op **Opslaan als aangepast.** Hiermee kunt u uw nieuwe geluidsinstellingen opslaan als een programma dat u later kunt openen en gebruiken.

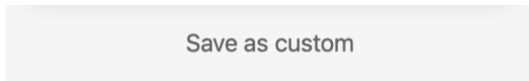

4. Om uw wijzigingen te negeren en terug te keren naar het **Home-scherm**, tikt u op **Annuleren**.



Programma's

- Wat zijn programma's
- Wanneer kunt u programma's gebruiken
- Programma's wijzigen
- Een programma toevoegen
- Een aangepast programma maken
- Een aangepast programma bewerken
- Een aangepast programma verwijderen

Wat zijn programma's?

Programma's bieden een manier om u te helpen beter te horen in specifieke omgevingen waar u vaak komt met behulp van vooraf ingestelde geluidsinstellingen.

Voorbeelden van programma's:

- Persoonlijk
- Restaurant
- Buiten
- Aangepast

Soorten programma's:

Professioneel

Uw audicien kan standaard standaardprogramma's instellen wanneer u uw hoortoestellen krijgt. Op basis van gesprekken over uw dagelijkse leven en levensstijl kunnen deze programma's 'Persoonlijk' (gebaseerd op uw individuele hoorvoorkeuren), 'Meetings', 'Restaurant', 'Buiten', of andere programma's zijn.

Aangepast

U kunt uw eigen aangepaste programma's maken voor specifieke plaatsen waar u vaak komt. Locaties kunnen bijvoorbeeld een koffiebar zijn waar u graag komt of een park bij u in de buurt. Pas gewoon een professioneel programma aan uw behoeften aan en sla het onder een nieuwe naam op.

Wanneer kunt u programma's gebruiken

Gebruik programma's om snel uw geluidsinstellingen aan te passen op plaatsen waar u vaak komt. Zoals uw werkplek, park in de buurt enz.


Voor tijdelijke hoorhulp of directe aanpassingen van de geluidsinstellingen waar u ook bent, gebruikt u Edge Mode+ of Geluid aanpassen.

Gebruik het gedeelte Programma's om:

- Een programma te kiezen om u te helpen beter te horen in een dagelijkse of specifieke omgeving. *Voorbeelden: Persoonlijk, Buiten.*
- Maak uw eigen aangepaste programma voor een plek waar u vaak komt. *Voorbeelden: Uw favoriete park of café, of de sportschool.*
- Een aangepast programma bewerken of verwijderen.

Om naar de sectie Programma's te gaan:

Tik in het **Home-scherm** op de **knop Programma's**. Het **menu Programma's** verschijnt, met **pictogrammen** die elk programma vertegenwoordigen.

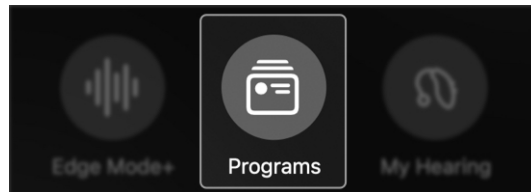


Programma's wijzigen


Volg deze stappen om programma's te kiezen of te wijzigen.

Vanuit uw scherm Programma's:

1. Tik in het Home-scherm op de **knop Programma's**.

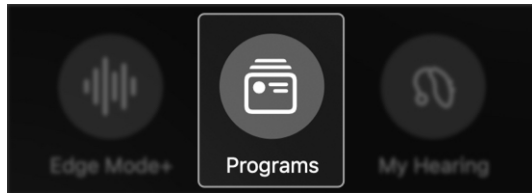

2. Het **menu Programma's** verschijnt.

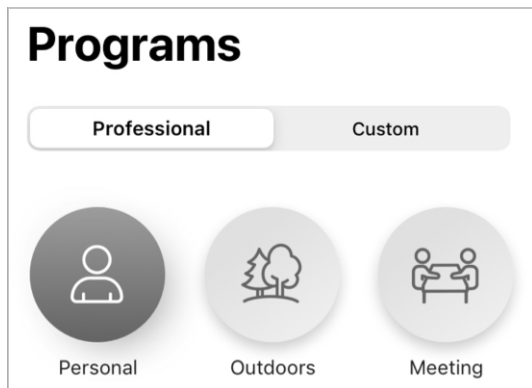


3. Gebruik de tabbladen aan de bovenkant van het scherm om het programma **Professioneel** (ingesteld door audicien) of **Aangepast** (door u ingesteld) te selecteren.



Programma's wijzigen

4. Tik op het **pictogram van het programma** dat u wilt. De specifieke geluidsinstellingen van het programma worden geactiveerd in uw hoortoestellen. Vervolgens keert uw app terug naar het **Home-scherm**.

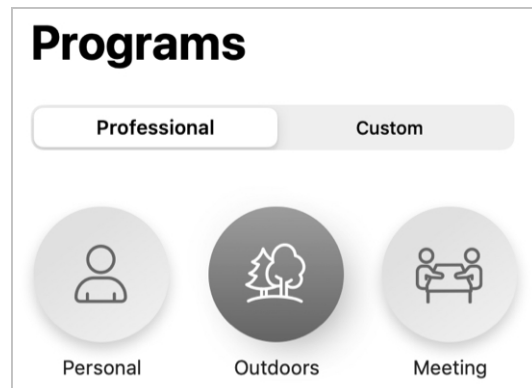

Vanaf uw Home-scherm:

Swipe in de open ruimte van uw **Home-scherm**. (U zult zien dat de **programmanamen** veranderen waar ze normaal worden weergegeven, zodat u altijd weet welk **programma** u gebruikt.)



Een programma toevoegen

Verschillende vooraf geïnstalleerde programma's zijn beschikbaar in uw app om toe te voegen en te gebruiken als aangepaste programma's. Deze hebben al specifieke geluidsinstellingen. Ze zijn dus klaar om te worden gebruikt en helpen u beter te horen in specifieke omgevingen.


Voorbeelden van vooraf geïnstalleerde programma's:

- Auto
- Menigte
- Theater

Herinnering: Uw audicien kan al een aantal van deze programma's in uw hoortoestellen hebben ingesteld.

Om een vooraf geïnstalleerd programma toe te voegen:

1. Tik op het **Home**-scherm op de knop **Programma's**.

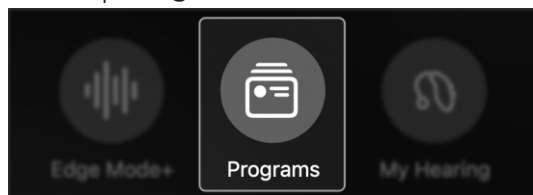


2. Tik op het **tabblad Aangepast** bovenaan het scherm.




Een programma toevoegen


3. Tik op het volgende scherm op de knop **Toevoegen**.

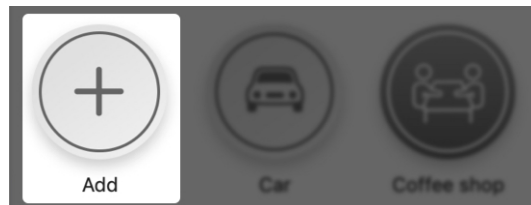

4. Vanuit het **menu Programma toevoegen**, tikt u op het **programma dat uw wilt toevoegen**. Uw hoortoestel verandert naar het nieuwe programma met een vinkje ernaast.

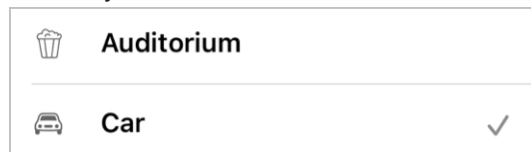

5. Kies ervoor om:
 - dit nieuwe aangepaste programma te bewaren door op **Gereed** te tikken. Hierdoor wordt het programma toegevoegd aan uw **menu Aangepaste programma's**.

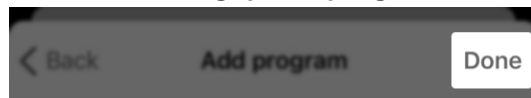


OF

- Probeer een ander nieuw aangepast programma door op de naam van het nieuwe aangepaste programma te tikken om de selectie ongedaan te maken.

Een aangepast programma maken

U kunt uw eigen aangepaste programma maken om u te helpen beter te horen op plaatsen waar u vaak komt. Dus wanneer u in een specifieke setting of omgeving bent, staan de beste geluidsinstellingen klaar voor gebruik.


- 1. Tik in het **Home-scher** op de **knop Programma's**.

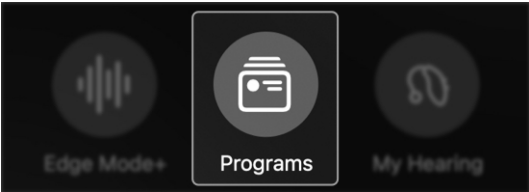

- 2. Het **scherm Programma's** verschijnt. Tik op het **tabblad Aangepast**.



- 3. Tik op het **pictogram Toevoegen** ('+'). Het **scherm Creëer programma** verschijnt.

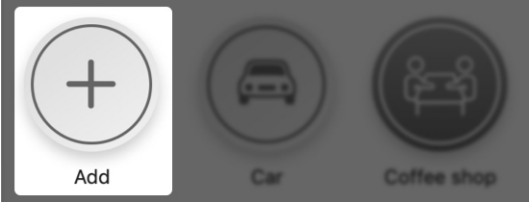


- 4. Het **scherm Programma toevoegen** verschijnt. Tik in de lijst op **Aangepast**.




Een aangepast programma maken


- 5. Het **scherm Creëer programma** verschijnt. Typ in het **veld NAAM een naam** in voor uw nieuwe aangepaste programma.

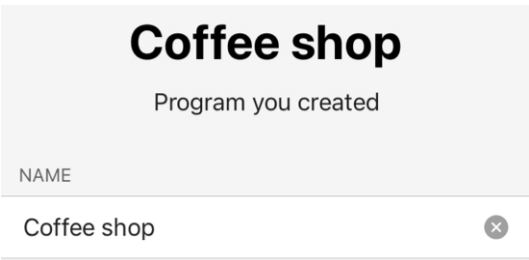

- 6. Tik in the **veld LOCATIE** op **Locatie toevoegen** om de **locatie** van uw nieuwe aangepaste programma toe te voegen.

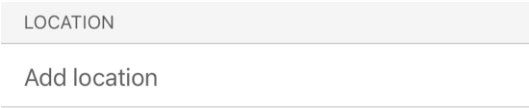


- 7. Er verschijnt een **kaart** met een punaise die de **locatie** van uw aangepaste programma aangeeft en het **adres** eronder. (Dit is uw huidige locatie, of waar u op dit moment bent.)

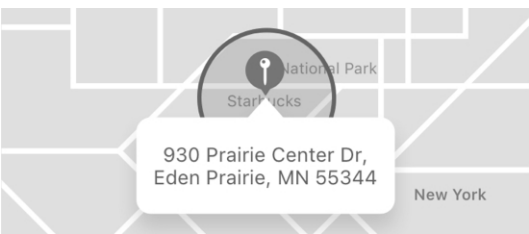


Een aangepast programma maken


Tik op **Gereed** om deze **locatie en het adres** op te slaan in uw nieuwe aangepaste programma.

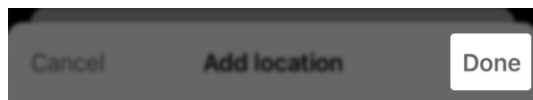

8. Tik op een **pictogram om uw aangepaste programma te vertegenwoordigen** uit de onderste lijst met pictogrammen.

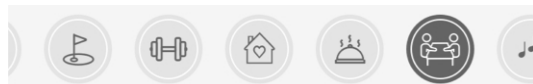

9. Tik op **Opslaan**. Uw nieuwe aangepaste programma wordt nu getoond in het **tabblad Aangepast**. Te allen tijde te gebruiken.

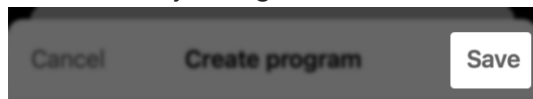


Herinnering – Om de geluidsinstellingen van uw aangepaste programma aan te passen, zie **Een aangepast programma bewerken** in deze Gebruikershandleiding.

Een aangepast programma bewerken


Bewerk op elk gewenst moment een aangepast programma door deze stappen te volgen.

Om de geluidsinstellingen van een aangepast programma te bewerken:

1. Zorg ervoor dat u in het aangepaste programma bent dat u wilt bewerken.
2. Tik op het **Home-scherf** op de **knop Programmaopties** (weglatingsteken).

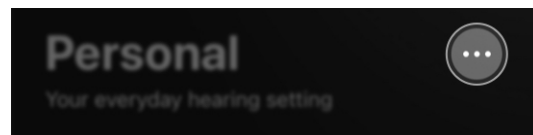


3. De **lijst met programmaopties** verschijnt. Tik op **Geluid aanpassen**.

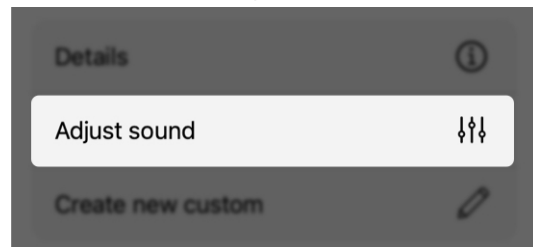

Een aangepast programma bewerken

4. Pas de instellingen voor ruis en equalizer aan als dat nodig is.

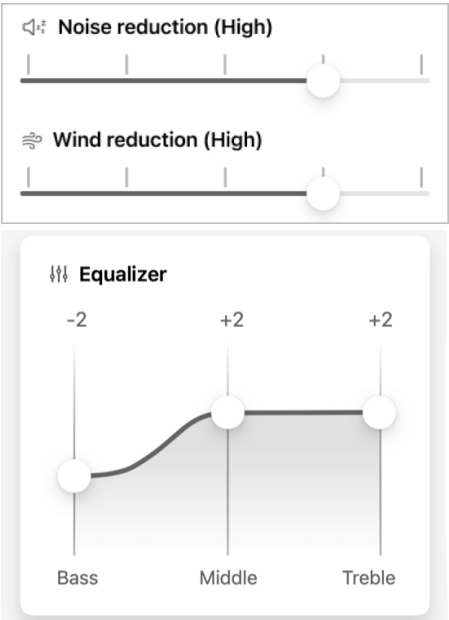


5. Tik op **Opslaan** wanneer u klaar bent met uw wijzigingen.




Om de details van het aangepaste programma te bewerken:

1. Tik in het **Home-scherm** op de **knop Programma's**.

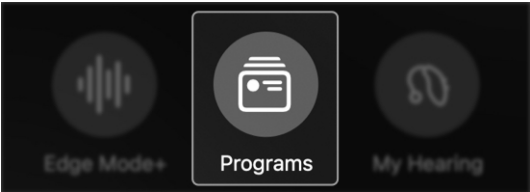


Een aangepast programma bewerken


2. Tik op de **knop Programma's beheren**. Het **scherm Programma's beheren** verschijnt.

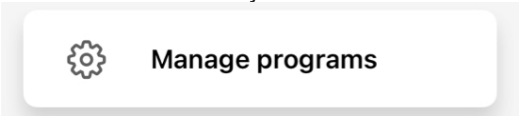


3. Tik op het **aangepaste programma** dat u wilt wijzigen.

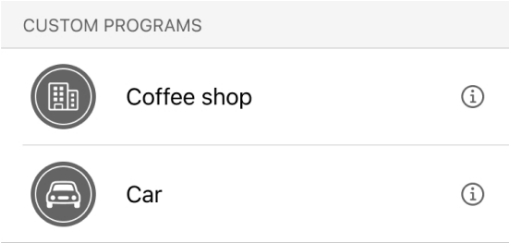

4. Het scherm **Details** verschijnt. Volg de onderstaande stappen om de beschrijvende elementen van uw aangepaste programma te bewerken.
- **Veld NAAM:** Tik in dit veld en typ een nieuwe naam in voor het aangepaste programma.

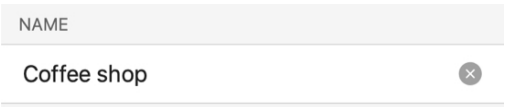


- **Veld LOCATIE:** Als u nog geen locatie voor uw aangepaste programma hebt toegevoegd, tik dan op **Locatie toevoegen**. Of, als u de locatie wilt wijzigen, tik dan op **Locatie verwijderen**.

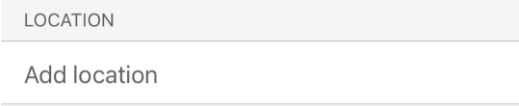


Een aangepast programma bewerken

In beide gevallen verschijnt er een **kaart** met een punaise die de nieuwe **locatie van uw aangepaste programma** aangeeft en het **adres** eronder. (Dit is uw huidige locatie, of waar u op dit moment bent.) Tik op **Gereed** om dit op te slaan als de **nieuwe locatie en het nieuwe adres** voor uw aangepaste programma.

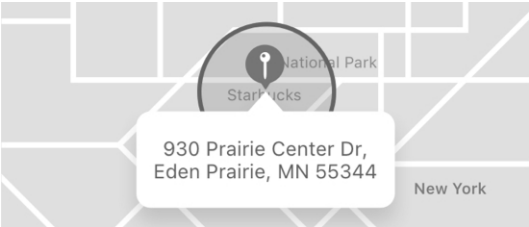

- **Veld PICTOGRAM:** Tik op een **nieuw pictogram** uit de onderste lijst met pictogrammen.

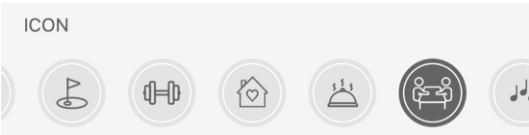


5. Tik op **Opslaan** wanneer u klaar bent met uw wijzigingen.




Een aangepast programma verwijderen

Verwijder te allen tijde een aangepast programma door deze stappen te gebruiken:


1. Tik in het **Home-scherm** op de **knop Programma's**.

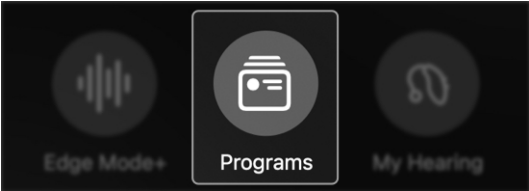

2. Het **scherm Programma's** verschijnt.

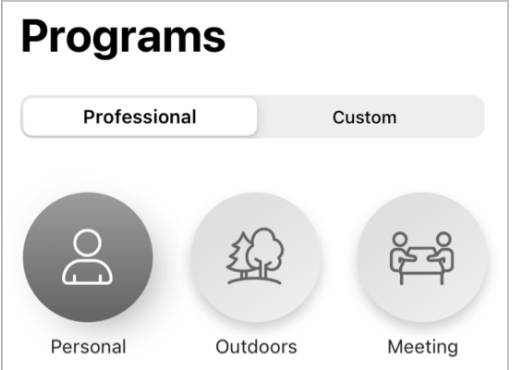

3. Tik op de **knop Programma's beheren**.

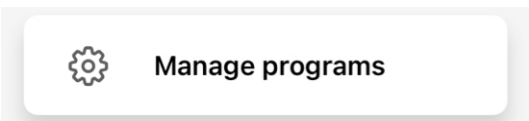


4. Tik op het **aangepaste programma** dat u wilt verwijderen. (Of swipe het **aangepaste programma** dat u wilt verwijderen naar **LINKS**, en tik dan op **Verwijderen**.)



Een aangepast programma verwijderen

5. Het **scherm Details** verschijnt. Tik op **Dit programma verwijderen** aan de onderkant van het scherm. Wanneer het **dialogvenster** u vraagt of u het programma permanent wilt verwijderen, tik dan op **Ja**.

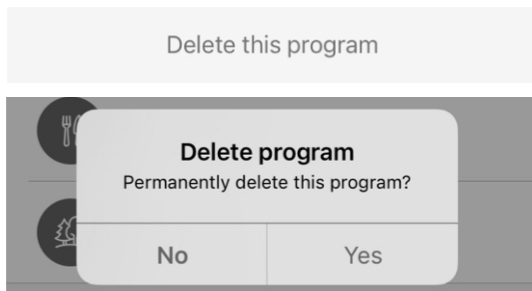

6. Uw **aangepaste programma** zal worden verwijderd en verdwijnen uit het **tabblad Aangepast**.

Programmaopties

Programmaopties

Uw **Programmaopties** omvatten verschillende keuzes voor het programma dat u momenteel gebruikt.



Programmaopties kunnen het volgende omvatten:

- **Stap terug**
Hiermee kunt u EdgeMode+ UITSCHAKELEN en alle gemaakte wijzigingen ongedaan maken. Dit verschijnt alleen als u EdgeMode+ gebruikt.
- **Details**
Toont de programmatitel en het pictogram.
- **Geluid aanpassen**
Hiermee kunt u handmatig uw geluidsinstellingen wijzigen, en deze instellingen opslaan als een nieuw aangepast programma.
- **Creëer aangepast programma**
Hiermee kunt u een nieuw aangepast programma maken met een nieuwe naam en een nieuw pictogram.


Programmaopties

Om programmaopties te gebruiken:

1. Tik op het **Home-scherm** op de **3 weglatingstekens** naast de **programma-naam**. De **lijst met Programmaopties** verschijnt.
2. Tik op de **optie*** die betrekking heeft op de update die u wilt uitvoeren. Volg de volgende aanwijzingen.

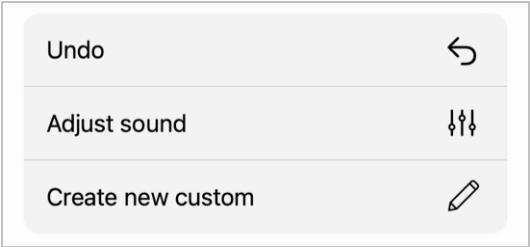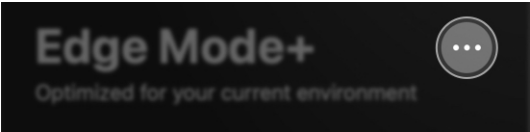

3. Nadat u de update hebt voltooid, tikt u op **Gereed**.

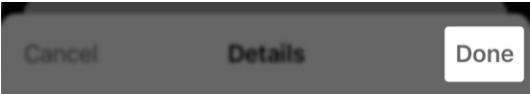

**Opties kunnen verschillen per programma.*


Handmatige aanpassingen

Handmatige aanpassingen


Met uw app kunt u handmatig geluidsaanpassingen maken voor uw unieke hoorbehoeften. U kunt ervoor kiezen om deze tijdelijk te maken voor uw huidige omgeving. Of maak ze permanent door een aangepast programma te maken als het een plaats is waar u vaak komt.

Volg deze stappen om uw geluidsinstellingen handmatig aan te passen:


1. Tik op het **Home-scherm** op de **3 weglatingstekens** naast de **programmanaam**. Dit is het menu **Programmaopties**.

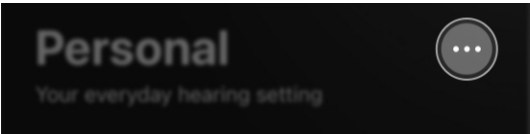

2. De **menulijst Programmaopties** verschijnt. Kies **Geluid aanpassen**. Pas de instellingen voor ruis en equalizer naar wens aan.

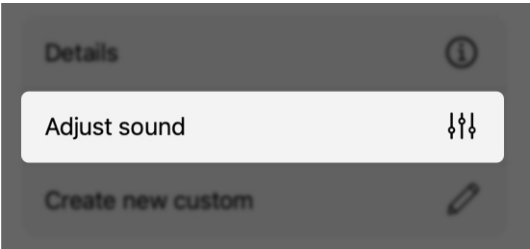

Handmatige aanpassingen

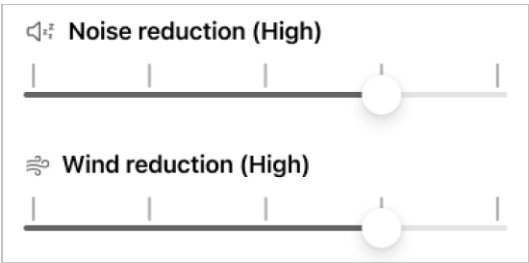


3. Tik op **Opslaan** als u wilt dat de aanpassingen tijdelijk zijn voor uw huidige programma.



OF

Tik op **Opslaan als aangepast** om uw aanpassingen permanent op te slaan als een nieuw aangepast programma dat u opnieuw kunt gebruiken.

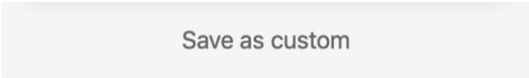

Mijn Gehoor

- Overzicht Mijn Gehoor
- Volume microfoon
- Tinnitus
- CROS Balans
- AI-spraak

Overzicht Mijn Gehoor

Uw **menu Mijn Gehoor** biedt meer opties voor het gebruik van hoortoestellen. De opties zijn afhankelijk van het model hoortoestel, de functies en hoe het is geprogrammeerd door uw audicien.

Menu Mijn Gehoor:


- **Volume microfoon.** Met de rechter en linker volumeregelaars kunt u instellen hoe hard/zacht het geluid doorkomt op uw hoortoestelmicrofoons.
- **Tinnitus.** Krijg verlichting voor tinnitus door middel van geruststellende geluiden. Pas aan door het volume of de snelheid te regelen.
- **CROS Balans.** Zoek hoorhulp als één oor beter hoort dan het andere. Pas indien nodig de audiobalans aan met een schuifregelaar.
- **Accessoires.** Stream audio van uw draadloze hoortoestelaccessoires naar uw hoortoestellen. Regel het volume voor elk hoortoestel.
- **AI-spraak.** Kunstmatige intelligentie helpt u om duidelijkere spraak te krijgen en achtergrondruis te verminderen.
- **Zelfcheck.** Controleer de prestaties van uw hoortoestel. Ga na of onderhoud nodig is.

Overzicht Mijn Gehoor

- **Vind Mijn Hoortoestellen.** Zoek verloren hoortoestellen met uw app.
- **Mijn instellingen.** Verbeter het gebruik van uw hoortoestel nog verder met toegevoegde instellingen zoals Dubbeltik bediening, Audio streaming, en meer.

Om naar het menu Mijn Gehoor te gaan:

Tik op het **Home-scherm** op de knop **Mijn Gehoor**. Het **menu Mijn Gehoor** verschijnt, waarin alle hoortoestelopties worden getoond.

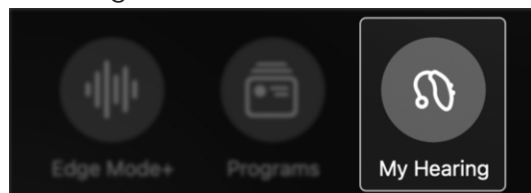

Volume microfoon

Met het **microfoonvolume** kunt u regelen hoe hard of zacht u het geluid door uw hoortoestellen wilt laten klinken.

Uw microfoonvolume aanpassen


Voor beide oren:

Verplaats de **volumeregelaar** onderaan het **Home-scherm** om het **microfoonvolume** voor beide oren aan te passen.




Voor elk oor apart:

1. Tik op het **Home-scherm** op de knop **Mijn Gehoor**.

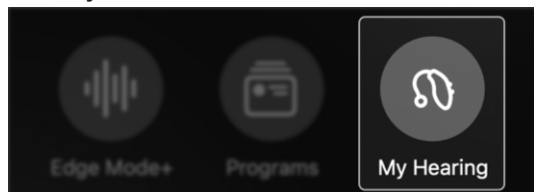


2. Het menu **Mijn Gehoor** verschijnt.
Tik op **Microfoonvolume**.

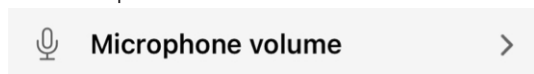


Volume microfoon

3. De **rechter en linker schuifregelaars** verschijnen. Verplaats deze om het **microfoonvolume** voor elk corresponderend hoortoestel aan te passen.

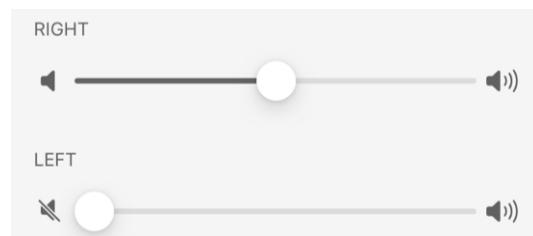

4. Tik op **Gereed** om op te slaan en af te sluiten.

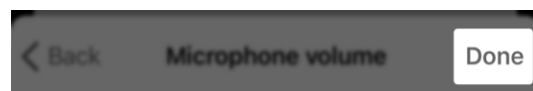


Tinnitus


Tinnitus is een 'piepend' of ander continu geluid in uw oor dat alleen u kunt horen. Uw app kan tinnitus helpen verlichten door technologie te gebruiken die geruststellende geluiden via uw hoortoestellen afspeelt. Deze kunnen de tinnitus 'geluiden' helpen maskeren.

Om het Tinnitus scherm te gebruiken (indien van toepassing):

1. Tik op het **Home-scher** op de knop **Mijn Gehoor**.

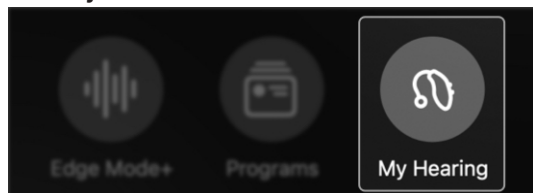

2. Het **menu Mijn Gehoor** verschijnt. Tik op Tinnitus.

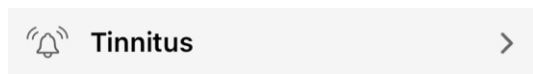

3. Pas het **volume** of de **snelheid** van de tinnitusverlichtingsgeluiden aan uw persoonlijke behoeften aan.



Tinnitus

Om het volume van de geruststellende geluiden te regelen:

1. Zorg ervoor dat het **tabblad Volume** open staat. (Dit tabblad dient standaard open te staan).



2. Beweeg de **rechter** (rechter hoortoestel) en **linker** (linker hoortoestel) **schuifregelaars** om het **volume** van de geruststellende geluiden aan te passen:

- Voor **MINDER volume**: verplaats de schuifregelaars naar **LINKS**.
- Voor **MEER volume**: verplaats de schuifregelaars naar **RECHTS**.



Tinnitus


Om de snelheid van de geruststellende geluiden te regelen:

1. Tik op het tabblad **Snelheid**.



2. Beweeg de **rechter** (rechter hoortoestel) en **linker** (linker hoortoestel) **schuifregelaars** om de snelheid en variatie van de geruststellende geluiden aan te passen:

- Voor **MINDER** snelheid/variatie: verplaats de schuifregelaars naar **LINKS**.
- Voor **MEER** snelheid/variatie: verplaats de schuifregelaars naar **RECHTS**.

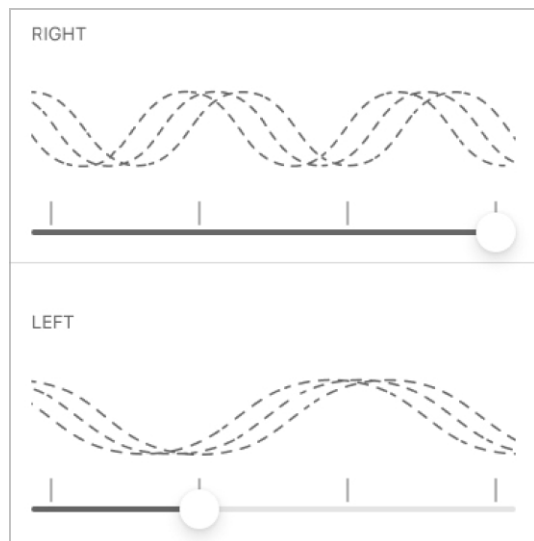


CROS Balans


Uw hoortoestellen kunnen **CROS Balans** (Contralateral Routing of Signals of contralaterale geleiding van signalen) gebruiken om u te helpen beter te horen wanneer één oor meer gehoorverlies heeft dan het andere.

Om CROS Balans te gebruiken teneinde de audiobalans aan te passen (indien van toepassing):

1. Tik op het **Home-scherf** op de knop **Mijn Gehoor**.

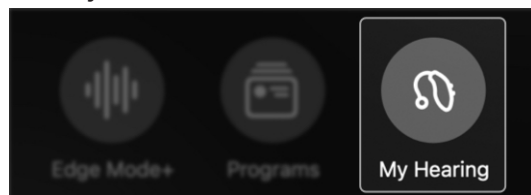

2. Het menu **Mijn Gehoor** verschijnt. Tik op **CROS Balans**.

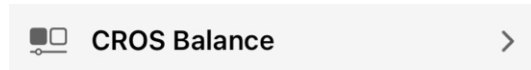


3. Het **CROS Balans scherm** verschijnt. Verplaats de **schuifregelaar** om de **geluidsbalans** tussen het slecht horende oor (zender) en beter horende oor (ontvanger) aan te passen.



CROS Balans

- U kunt de **zender** ook dempen door te tikken op de **knop Zender dempen** aan de bovenkant van het scherm.

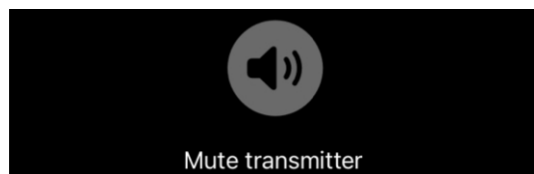


AI-spraak


Uw hoortoestellen gebruiken misschien AI-spraak (Artificial Intelligence of kunstmatige intelligentie) om spraak in de buurt duidelijker te maken en achtergrondlawaai te verminderen.

Om AI-spraak te gebruiken (indien van toepassing):


- Tik op het **Home-scherm** op de knop **Mijn Gehoor**.

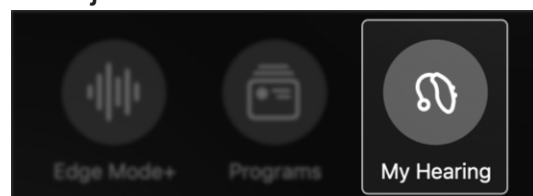

- Het menu **Mijn Gehoor** verschijnt. Tik op **AI-spraak**.

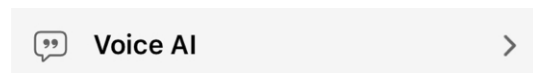

- Richt de **microfoon** van uw telefoon in de richting van de persoon/personen die u wilt horen.
- Tik op de **knop Afspelen** bovenaan het scherm om **audio** te ontvangen.

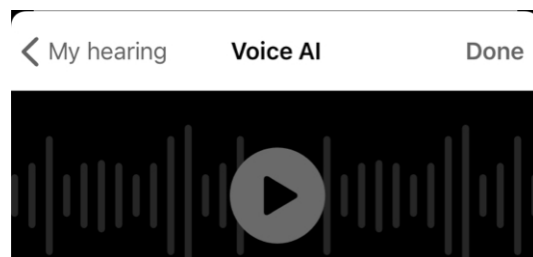


AI-spraak

5. Houd het **tabblad Normaal** geselecteerd of tik op het **tabblad Verbeterd** om de spraak verder te verbeteren.



6. Pas indien nodig het microfoonvolume van uw telefoon of hoortoestel aan door de **schuifregelaars** te verplaatsen.

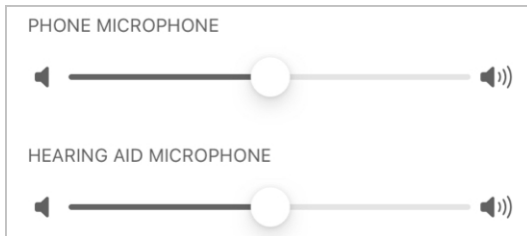


Vind Mijn Hoortoestellen

Vind Mijn Hoortoestellen


Met **Vind Mijn Hoortoestellen** kunt u de laatst bekende algemene locatie van uw hoortoestellen traceren. Ideaal als u ontdekt dat u een van uw hoortoestellen hebt verloren.

Vind Mijn Hoortoestellen gebruiken

1. Tik op het **Home-scher**m op de knop **Mijn Gehoor**.

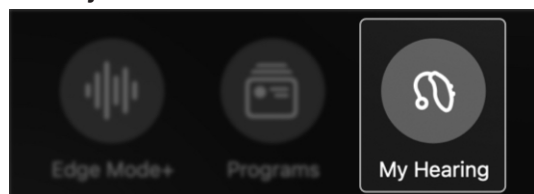

2. Het menu **Mijn Gehoor** verschijnt. Tik op **Vind Mijn Hoortoestellen**.

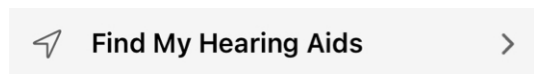


3. Er verschijnt een **kaart** met indicatoren die de algemene locatie tonen van:

- waar uw hoortoestel(len) het laatst verbonden was/waren met uw telefoon of ander toestel.

OF

- waar uw hoortoestel(len) momenteel verbonden is/zijn met uw telefoon of een ander toestel.


Vind Mijn Hoortoestellen

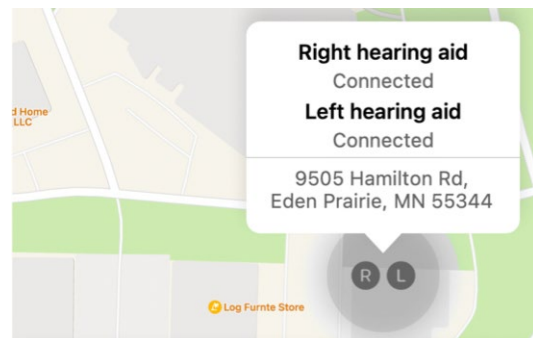

4. Zorg ervoor dat uw app toegang heeft gekregen tot **Locatie services**. Ga naar **Instellingen > Privacy > Locatie services**. Zet indien nodig **Locatie services AAN**.

5. Bekijk onder de kaart de **signaalbalken** voor elk hoortoestel. De lengte van de balken geeft aan hoe dicht uw hoortoestellen bij u in de buurt zijn:

- Hoe **langer** de balk, hoe **dichter** uw hoortoestel bij u is.
- Hoe **korter** de balk, hoe **verder** uw hoortoestel van u vandaan is.

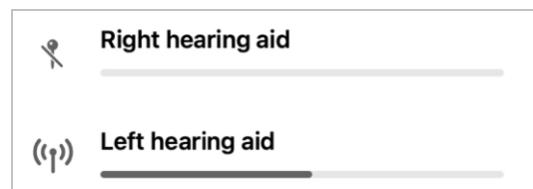

Herinnering – De signaalbalken worden alleen weergegeven als uw hoortoestel stroom heeft en verbonden is met uw toestel.

Zelfcheck

- Zelfcheck gebruiken
- Resultaten zelfcheck

Zelfcheck gebruiken

Gebruik **Zelfcheck** om een diagnostische test uit te voeren op de elektronische componenten van uw hoortoestellen. Dit vertelt u of uw hoortoestellen in orde zijn of dat er onderhoud nodig is - inclusief de stappen die u zelf kunt proberen.

Het is het beste om Zelfcheck maandelijks uit te voeren, of eerder als u problemen opmerkt.

Elektronische onderdelen omvatten:


- Microfoon
- Ontvanger
- Circuit

Mogelijke problemen omvatten:

De ophoping van oorsmeer of ander vuil op/in de buurt van de elektronische onderdelen.


Om Zelfcheck uit te voeren:

1. Tik op het **Home-scherm** op de knop **Mijn Gehoor**.

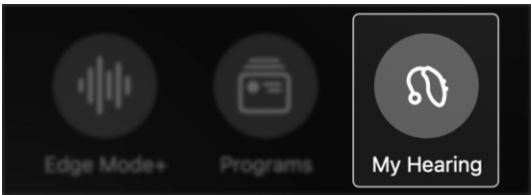

Zelfcheck gebruiken

2. Het menu **Mijn Gehoor** verschijnt. Tik op **Zelfcheck**.

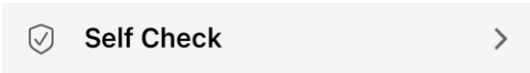

3. Zet uw hoortoestellen in het **eerste/standaard programma**.
4. Zoek een rustige plek en neem uw **hoortoestellen** uit uw oren.
5. Plaats uw **hoortoestellen** op een vlak oppervlak. Zorg ervoor dat de kant die in uw oor gaat naar boven gericht is.
6. Tik op **Start Zelfcheck** om de Zelfcheck te beginnen.



7. **Zelfcheck** wordt uitgevoerd, en dan verschijnt er een **resultatenscherm** dat u kunt bekijken.

Last check: 01/05/2023	Left	Right
Receiver Details	✓	✓
Microphone Details	✓	✓
Circuit Details	✓	✓

Resultaten zelfcheck

Nadat de Zelfcheck is uitgevoerd, verschijnt er een **resultatenscherm**. Dit geeft de conditie van uw rechter en linker hoortoestel weer. En mogelijke problemen die aandacht nodig hebben.

Sleutel voor resultaten:

- **Groen** ✓ = Normale prestatie
- **Geel** ! = Heeft aandacht of reiniging nodig
- **Rood** X = Audicien nodig voor reiniging of reparatie

Last check: 01/05/2023	Left	Right
Receiver Details		
Microphone Details		
Circuit Details		

Resultaten zelfcheck

1. Tik op **Details** onder '**Ontvanger**', '**Microfoon**' of '**Circuit**' om meer info over het resultaat te bekijken. Bovendien krijgt u instructies voor reiniging of onderhoud.



2. Tik op **Nogmaals Controleren** na het onderhoud om er zeker van te zijn dat eventuele problemen zijn opgelost.



Mijn instellingen

- Overzicht Mijn instellingen
- Over mijn hoortoestellen
- Firmware updates
- Dubbeltik bediening
- Audio streaming met Apple-telefoon
- Audio streaming met Android-telefoon
- Audio streaming met accessoire
- Smart Assistant-microfoon
- Auto Aan/Uit
- Oproep accepteren/beëindigen/weigeren
- Offline modus

Overzicht Mijn instellingen

Uw menu **Mijn instellingen** biedt extra mogelijkheden en functies om u te helpen het meeste uit uw hoortoestellen te halen. Deze zijn allemaal aanpasbaar en omvatten Dubbeltik bediening, Audio streaming, Auto aan/uit en meer. (Menu-items kunnen variëren.)

Menu Mijn instellingen:


- **Over mijn hoortoestellen.**
Krijg informatie over het model hoortoestel, serienummer en firmware updates.
- **Dubbeltik bediening.**
De instellingen voor Dubbeltik bediening openen en wijzigen.
- **Audio streaming.** De instellingen voor Audio streaming openen en wijzigen.
- **Smart Assistant microfoon.**
De instellingen voor Smart Assistant microfoon openen en wijzigen.
- **Auto aan/uit.** Verplaatst de schakelknop om uw hoortoestellen AAN of UIT te laten schakelen na 15 minuten en als er geen beweging wordt gedetecteerd.
- **Een oproep accepteren/beëindigen/afwijzen.** Verplaatst de schakelknop om met de bediening van uw hoortoestel oproepen te beantwoorden, beëindigen of te weigeren.

Overzicht Mijn instellingen

- **Offline modus.** Schakel de Bluetooth-verbinding in uw hoortoestellen UIT, zodat ze niet met andere toestellen kunnen communiceren.

Om Mijn instellingen te gebruiken:

1. Tik op het Home-scherf op de **knop Mijn Gehoor**.

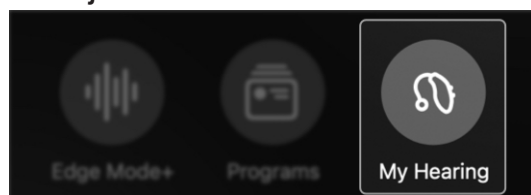

2. Het **menu Mijn Gehoor** verschijnt. Tik op **Mijn instellingen**.



3. Pas de **instellingen voor elke functie** aan uw hoorbehoefte aan of activeer ze.

Over mijn hoortoestellen


Kom meer gedetailleerde informatie te weten over uw hoortoestellen met behulp van **Over mijn hoortoestellen**.

Dit omvat:

- de naam van uw hoortoestel;
- het type hoortoestel;
- Het serienummer van uw hoortoestel;
- de firmwareversie van uw hoortoestel en
- de beschikbaarheid van een firmware update van uw hoortoestel.

Om toegang te krijgen tot **Over mijn hoortoestellen**:


1. Tik op het **Home-scherm** op de knop **Mijn Gehoor**.

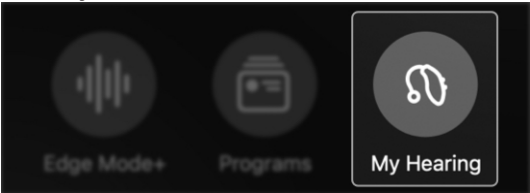

2. Het menu **Mijn Gehoor** verschijnt. Tik op **Mijn instellingen**.



3. Het menu **Mijn instellingen** verschijnt. Tik op **Over mijn hoortoestellen**.

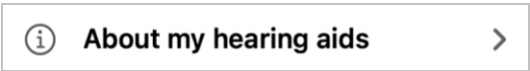

4. Bekijk de informatie over uw hoortoestel.

Firmware updates zijn wijzigingen in


Firmware Updates

de algoritmes en processen van het besturingssysteem van uw hoortoestel. Deze wijzigingen zijn bedoeld om uw hoorervaring te verbeteren.

Wanneer er een firmware update voor uw hoortoestellen beschikbaar is, verschijnt er een melding op het beginscherm van uw app. Om de update te installeren, tikt u op deze melding en volgt u de instructies op de daaropvolgende schermen van de app. Deze instructies omvatten:

- Uw hoortoestellen uitdoen.
- Ze naast uw smartphone of ander toestel leggen.
- Uw app open laten staan en wachten tot de update voltooid is.

Herinnering – U hebt ook toegang tot eventuele firmware updates door te tikken op **Mijn Gehoor > Mijn instellingen > Over mijn hoortoestellen**.

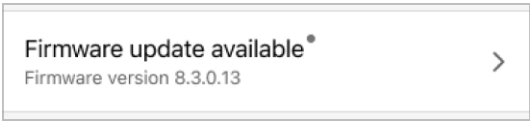


Met **Dubbeltik bediening** kunt u een

Dubbeltik Bediening


actie uitvoeren door met uw vingers dubbel op of naast uw hoortoestel te tikken. *Voorbeelden: EdgeMode+ inschakelen. Smart Assistant starten. Starten/stoppen met audio streaming.* De opties kunnen variëren.

Om Dubbeltik bediening te activeren:

- 1. Tik op het **Home-scherm** op de **knop Mijn Gehoor**.

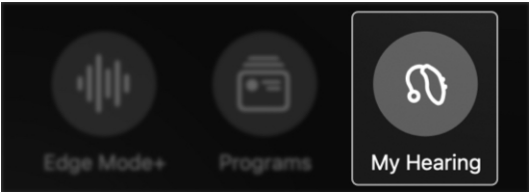

- 2. Het **menu Mijn Gehoor** verschijnt. Tik op **Mijn instellingen**.

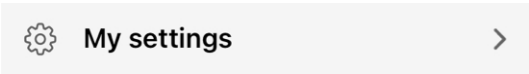

- 3. Het **menu Mijn instellingen** verschijnt. Selecteer **Dubbeltik bediening**.




- 4. Schakel **Dubbeltik bediening** in door de schakelaar naar **RECHTS** te bewegen.



Om de acties van Dubbeltik bediening in te stellen:

Dubbeltik Bediening

Tik op de **functie** die u voor elk hoortoestel geactiveerd wilt hebben. Of als u Dubbeltik bediening wilt **UITSCHAKELEN**, verplaatst u de **schakelknop**. (Dubbeltik bediening staat standaard **AAN**.)

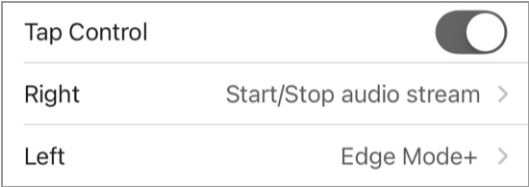

Opties voor rechter hoortoestel:

- Geen
- Smart Assistant
- Edge Mode+
- Starten/stoppen met audiostream

Opties voor linker hoortoestel:

- Geen
- Smart Assistant
- Edge Mode+
- Starten/stoppen met audiostream

Om Aanraakgevoeligheid in te stellen:

U kunt kiezen hoeveel kracht op uw hoortoestellen nodig is om Dubbeltik bediening te activeren.



Dubbeltik Bediening

Tik op een optie:

- **Minder** (er zijn stevigere tikken nodig om Dubbeltik bediening te activeren)
- **Standaard** (de standaard gevoeligheid bij Dubbeltik bediening)
- **Meer** (lichtere tikken activeren Dubbeltik bediening)

Less	
Default	✓
More	

Gebruik deze app om audio naar uw hoortoestellen te streamen vanaf uw Apple-telefoon. Bovendien kunt u aanpassen hoe u de audio wilt horen.


Audio streaming met Apple-telefoon

Audio-opties omvatten:

- Microfoonvolume bij streamen
- Audio telefoongesprek
- Audio van andere gestreamde media

Om uw gestreamde audio aan te passen:


1. Tik op het **Home-scher**m op de **knop Mijn Gehoor**.

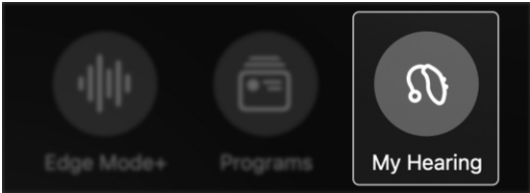

2. Het **menu Mijn Gehoor** verschijnt. Tik op **Mijn instellingen**.



3. Het **menu Mijn instellingen** verschijnt. Tik op **Audio streaming**.

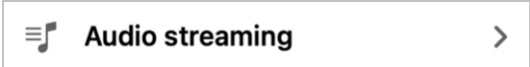

4. Tik onder '**GESTREAMDE AUDIO VANAF TELEFOON**' op de **instellingen** die u wilt aanpassen. Tik vervolgens op 1 van de **3 aanpassingsopties**:

Audio streaming met Apple-telefoon

STREAMED AUDIO FROM PHONE	
Mic volume during stream	Mute >
Phone call audio	Treble boost >
Media audio	Treble boost >

1. **Microfoonvolume tijdens stream.** Pas de hoeveelheid achtergrondgeluid aan die u hoort wanneer u de microfoon van uw telefoon gebruikt.
 - **Geen wijziging:** Behoudt het volledige geluid van de microfoons van de hoortoestellen.
 - **Verlagen:** Verlaagt het volume van de hoortoestelmicrofoon tot de helft.
 - **Dempen:** Hoortoestelmicrofoon staat uit. Uitsluitend gestreamde audio.

STREAMED AUDIO FROM PHONE	
Mic volume during stream	Mute >
Phone call audio	Treble boost >
Media audio	Treble boost >

2. **Audio telefoongesprek.** Pas de gestreamde audio van telefoongesprekken aan.
 - **Voor u:** Gestreamde audio wordt aangepast aan uw specifieke gehoorverlies.
 - **Basversterking:** De gestreamde audio heeft een verbeterd basgeluid.

Audio streaming met Apple-telefoon

- **Versterking van hoge tonen:** De gestreamde audio heeft verbeterde hoge tonen.
- **Totale versterking:** De gestreamde audio heeft een verbeterd algemeen geluid.

For you	
Treble boost	✓
Bass boost	
Overall boost	

3. **Audio van media.** Pas de gestreamde audio van media (muziek, podcasts, video's, enz.) aan
 - **Voor u:** Gestreamde audio wordt aangepast aan uw specifieke gehoorverlies.
 - **Basversterking:** De gestreamde audio heeft een verbeterd basgeluid.
 - **Versterking van hoge tonen:** De gestreamde audio heeft verbeterde hoge tonen.
 - **Totale versterking:** De gestreamde audio heeft een verbeterd algemeen geluid.

For you	
Treble boost	✓
Bass boost	
Overall boost	

Gebruik uw app om audio naar uw hoortoestellen te streamen vanaf uw Android-telefoon. Bovendien kunt u aanpassen hoe u de audio wilt horen.


Audio-opties omvatten:

Audio streaming met Android-telefoon


- Microfoonvolume bij streamen
- Gestreamde audio van media.

Om uw gestreamde audio aan te passen:


1. Tik op het **Home-scherm** op de knop **Mijn Gehoor**.

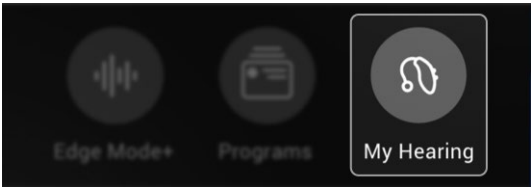

2. Het **menu Mijn Gehoor** verschijnt. Tik op **Mijn instellingen**.

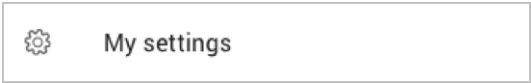


3. Het **menu Mijn instellingen** verschijnt. Tik op **Audio streaming**.

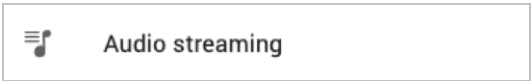

4. Tik onder '**Gestreamde audio vanaf telefoon**' op de **instellingen** die u wilt aanpassen. Kies/tik vervolgens op een **aanpassingsoptie**:

Audio streaming met Android-telefoon

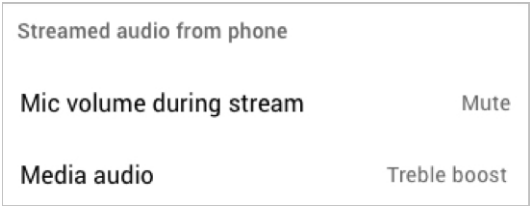

1. **Microfoonvolume tijdens stream.** Pas de hoeveelheid achtergrondgeluid aan die u hoort wanneer u de microfoon van uw telefoon gebruikt.

- **Geen wijziging:** Behoudt het volledige geluid van de microfoons van de hoortoestellen.
- **Verlagen:** Verlaagt het volume van de hoortoestelmicrofoon tot de helft.
- **Dempen:** Hoortoestelmicrofoon staat uit. Uitsluitend gestreamde audio.



2. **Audio van media.** Pas de gestreamde audio van media (muziek, podcasts, video's, enz.) aan

Audio streaming met Android-telefoon

- **Voor u:** Gestreamde audio wordt aangepast aan uw specifieke gehoorverlies.
- **Basversterking:** De gestreamde audio heeft een verbeterd basgeluid.
- **Versterking van hoge tonen:** De gestreamde audio heeft verbeterde hoge tonen.
- **Totale versterking:** De gestreamde audio heeft een verbeterd algemeen geluid.

For you

Treble boost

Bass boost

Overall boost

☐

☒

☐

☐


Gebruik deze app om audio naar uw hoortoestellen te streamen vanaf uw accessoires. Dit kunnen uw tv-streamer, externe minimicrofoon en tafelmicrofoon zijn.

Audio streaming met accessoire


Bovendien kunt u precies instellen hoe u de audio wilt horen.

Om uw gestreamde audio aan te passen:


1. Tik op het **Home-scherm** op de knop **Mijn Gehoor**.

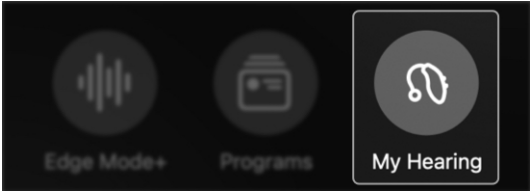

2. Het menu **Mijn Gehoor** verschijnt. Tik op **Mijn instellingen**.

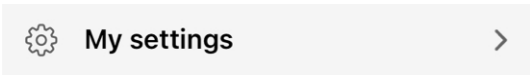

3. Het **menu Mijn instellingen** verschijnt. Tik op **Audio streaming**.

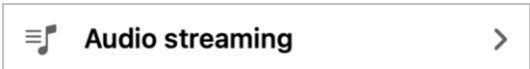

4. Tik onder '**GESTREAMDE AUDIO VANAF ACCESSOIRES**' op de **instellingen** die u wilt aanpassen. Kies/tik vervolgens op een aanpassingsoptie:

Audio streaming met accessoire

STREAMED AUDIO FROM ACCESSORIES	
Mic volume during stream	For you >
TV Streamer audio	Treble boost >
Remote Mic+ audio	Bass boost >

1. **Microfoonvolume tijdens stream.** Pas de hoeveelheid achtergrondgeluid aan die u hoort wanneer u de microfoon van uw telefoon gebruikt.
- **Geen wijziging:** Behoudt het volledige geluid van de microfoons van de hoortoestellen.
 - **Verlagen:** Verlaagt het volume van de hoortoestelmicrofoon tot de helft.
 - **Dempen:** Hoortoestelmicrofoon staat uit. Uitsluitend gestreamde audio.

No Change	
Decrease	
Mute	✓

2. **Accessoire (tv-streamer, externe minimicrofoon of tafelmicrofoon).** Pas de gestreamde audio van het accessoire aan.

Audio streaming met accessoire

- **Voor u:** Gestreamde audio wordt aangepast aan uw specifieke gehoorverlies.
- **Basversterking:** De gestreamde audio heeft een verbeterd basgeluid.
- **Versterking van hoge tonen:** De gestreamde audio heeft verbeterde hoge tonen.
- **Totale versterking:** De gestreamde audio heeft een verbeterd algemeen geluid.

For you

Met **Smart Assistant** kunt u vragen of opdrachten uitspreken naar uw smartphone of apparaat via de microfoon van uw hoortoestel of telefoon. Wijzig programma's, stel herinneringen in, stel vragen over hoortoestellen en meer.

Treble boost

Bass boost


Overall boost

✓

Smart Assistant microfoon

Om de microfoon te kiezen die uw stem opneemt wanneer u Smart Assistant gebruikt:

1. Tik op het **Home-scher** op de knop **Mijn Gehoor**.

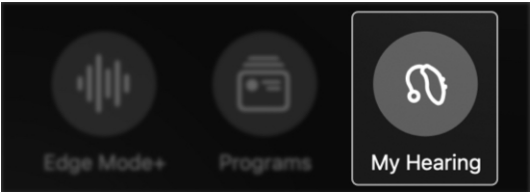

2. Het **menu Mijn Gehoor** verschijnt. Tik op **Mijn instellingen**.



3. Tik in het **menu Mijn instellingen** op **Smart Assistant microfoon**. Het **Smart Assistant scherm** verschijnt.



4. Kies welke microfoon uw stem moet opvangen wanneer u Smart Assistant gebruikt door erop te tikken:
 - Microfoon van hoortoestel


OF

Smart Assistant microfoon

- Microfoon van telefoon



5. Tik op **Gereed**. U kunt beginnen met het inspreken van vragen of opdrachten in de microfoon die u hebt gekozen.

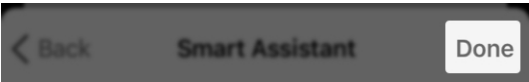


Auto Aan/Uit


Met **Auto aan/uit** worden uw hoortoestellen automatisch uitgeschakeld als er 15 minuten lang geen beweging wordt waargenomen.

Om Auto aan/uit 'IN' of 'UIT' te schakelen:

1. Tik op het **Home-scherm** op de knop **Mijn Gehoor**.

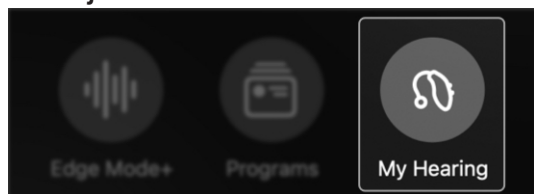

2. Het menu **Mijn Gehoor** verschijnt. Tik op **Mijn instellingen**.

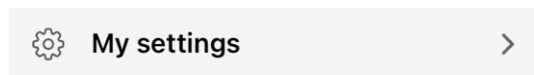

3. Zoek **Auto aan/uit** in het **Menu Mijn instellingen**. Schakel de functie in door de **schakelknop** naar **RECHTS** te verplaatsen. Of schakel **UIT** door de **schakelknop** naar **LINKS** te verplaatsen.




Oproep accepteren/beëindigen/weigeren


Met **Een oproep accepteren/beëindigen/afwijzen** kunt u een mobiele telefoonoproep beantwoorden of weigeren met de bediening van uw hoortoestel.

Om deze functie IN of UIT te schakelen:

1. Tik op het **Home-scherm** op de knop **Mijn Gehoor**.

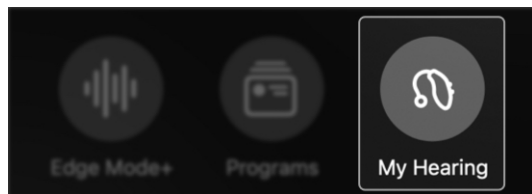

2. Het menu **Mijn Gehoor** verschijnt. Tik op **Mijn instellingen**.

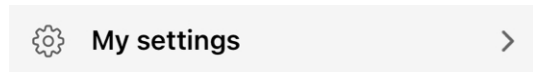

3. Zoek **Een oproep accepteren/beëindigen/afwijzen** in het menu **Mijn instellingen**. Schakel de functie in door de **schakelknop** naar **RECHTS** te verplaatsen. Of schakel ze **UIT** door de **schakelknop** naar **LINKS** te verplaatsen.




Offline modus

Met offline modus kunt u de Bluetooth-verbinding in uw hoortoestellen uitschakelen, zodat ze niet met andere toestellen kunnen communiceren.


De offline modus wordt meestal gebruikt om toegang te krijgen tot een gebied waar Bluetooth-toestellen niet zijn toegestaan. Bijvoorbeeld: Een beveiligde faciliteit.

Om offline modus in te schakelen:


1. Tik op het **Home**-scherm op **Mijn Gehoor**.

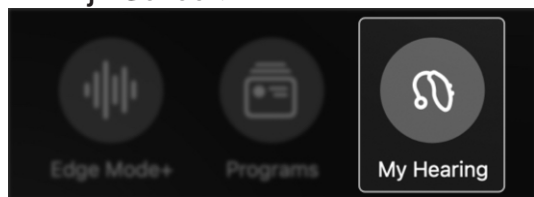


2. Tik op het menu **Mijn Gehoor** op **Mijn instellingen**.

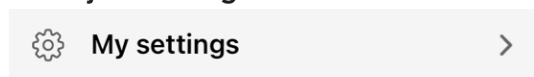

3. Tik in het menu **Mijn instellingen** op **Offline modus**.

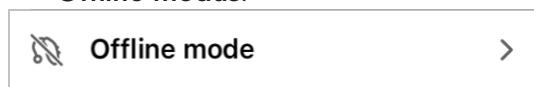


4. Tik aan de onderkant van het **scherm** **Offline modus** op **Offline gaan**.

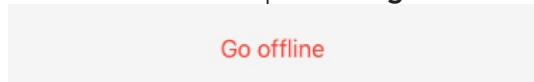

Offline modus

5. Er verschijnt een **dialogvenster** met de bevestiging dat offline gaan de Bluetooth in uw hoortoestellen en elke verbinding met andere toestellen zal **UITSCHAKELEN**. Tik op **Offline gaan**.

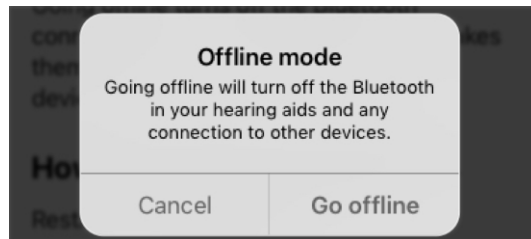

Uw hoortoestellen bevinden zich nu in offline modus. Ze zijn niet langer verbonden met Bluetooth of andere toestellen.

Om de verbinding met Bluetooth en uw hoortoestellen te herstellen:

Herinnering – Als elk hoortoestel een bediening heeft, kunt u de **knop** ingedrukt houden om Bluetooth weer **AAN** te zetten.

Uw hoortoestellen zullen opnieuw verbinding maken met Bluetooth en andere toestellen waarmee ze verbonden waren voordat ze offline gingen.

Gezondheid

- Overzicht Gezondheid
- Gehoorrapport
- Stappen
- Staan
- Beweging
- Wandelen
- Hardlopen
- Indoor fietsen
- Aerobics
- Verander doelen

Overzicht Gezondheid

Studies tonen aan dat een beter gehoor bijdraagt aan de algehele gezondheid - en dat is waar de **sectie Gezondheid** over gaat. Hiermee kunt u uw gezondheid monitoren. En u kunt gehoor- en fitnessdoelen instellen om u te helpen gezond te blijven.

Uw scherm Gezondheid vinden

Tik op het **Homescherm** op de **knop Gezondheid**.




Het scherm Gezondheid gebruiken

1. Lees uw Gehoorrapport (wordt elke zondag bijgewerkt):

- Bekijk in één oogopslag **inzichten** over hoe u vordert met uw hoortoestelgebruik en interactiedoelen.
- Tik op het **Gehoorrapport** voor meer info over uw hoortoestelgebruik per **dag of week**. Of wijzig uw **doelen**.

Overzicht Gezondheid

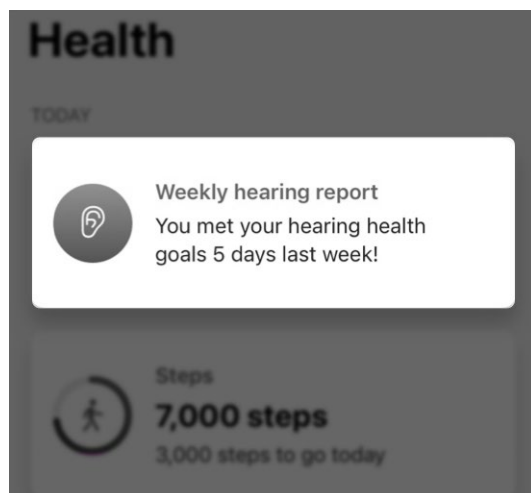

2. Bekijk dagelijkse updates over uw fysieke activiteit:

- Bekijk in één oogopslag **updates** van de activiteiten van de dag.

Overzicht Gezondheid

Health

TODAY



Weekly hearing report
You met your hearing health goals 5 days last week!



Steps
7,000 steps
3,000 steps to go today



Standing
3 hr
9 hr to go today



Exercise
1 hr 30 min
0 min to go today

Herinnering – Alleen uw **top 3 activiteiten** voor de huidige dag verschijnen op het **hoofdscherm Gezondheid**.

- Tik op **een van deze categorieën** om meer te weten te komen over wat er wordt gemonitord. U kunt ook vooruitgang of inzichten bekijken. Of uw doel wijzigen. De activiteitenopties kunnen variëren.

Overzicht Gezondheid

3. **Bekijk inzichten in gehoor, gezondheid en welzijn (onder 'Browse'):**
- Activiteit:** Tik in dit menu op de activiteit die u wilt bekijken.
 - Gehoor:** Maak gebruik van uw **Gehoorrapport** om het gebruik en de interactie van hoortoestellen te bekijken en **doelen** te veranderen.
 - Welzijn:** Houd uw valincidenten bij om te bepalen of Val Alarmering of andere hulp nodig is. (Ga naar **Stap 4 - 'Extra instellingen'** om Val Alarmering in te stellen.)

Browse



Activity



Hearing



Wellness

Overzicht Gezondheid

4. Stel functies in om uw gezondheidsdoelen te ondersteunen (onder 'Extra instellingen'):

- Stel **Val Alarmering** in om uw naaste contactpersonen op de hoogte te brengen als u valt.
- Nodig uw zorgverlener(s) uit op de **Hear Share-app** om hen op de hoogte te houden van uw vooruitgang.

Additional setup



Fall Alerts

Send text alerts to contacts if you fall.

Set up Fall Alerts



Share with caregivers

Give loved ones peace of mind with Hear Share.

Set up sharing

Gehoorrapport

Uw **Gehoorrapport** biedt een momentopname van uw gehoorgezondheid. Dit omvat uw vooruitgang in het gebruik van hoortoestellen en interactiedoelen:

- **Hoortoestelgebruik:** Houdt bij hoeveel tijd u uw hoortoestellen draagt.
- **Interactie:** Houdt bij hoeveel tijd u gesprekken voert of audio streamt.
- **Omgeving:** Geeft inzicht in geluidsniveaus en de functies voor lawaaimanagement van hoortoestellen.

Het Gehoorrapport gebruiken:

1. Tik op het **Home**-scherm op de **knop Gezondheid**.



2. Het **scherm Gezondheid** verschijnt. Tik op uw **Wekelijkse gehoorrapport**.



Weekly hearing report

You met your hearing health goals 5 days last week!

Gehoorrapport

3. Op het **scherm Gehoor** dat verschijnt: Tik op de **knop Week** of **Dag** om de **hooractiviteit** voor het gewenste tijdsbestek te bekijken. Selecteer vervolgens (indien gewenst) een **specifieke dag of week** van het **vervolgkeuzemenu voor datums** onder **Uw naam**.



4. Bekijk voor elke categorie (**Hoortoestelgebruik, interactie en omgeving**):
- **Details** over de vooruitgang van uw activiteit.
 - **Inzicht** in de gezondheid van uw gehoor en hoe u uw doelen bereikt.

Gehoorrapport

**Hearing aid usage**

Down 12% this week

Train your brain by using hearing aids for at least 6 hours per day.

**Interaction**

Up 45% this week

An hour of conversation per day can improve cognitive health.

**Environments**


Extended periods in noise last week

Sound levels were high last week and potentially harmful if exposed for extended periods of time. Remember to wear hearing protection.

Om een Hoordoel te wijzigen:

Tik op **Verander doel** op het **scherm Gehoor**. Dit brengt u naar het **scherm Hoordoel**, waar u uw dagelijkse **Hoortoestelgebruik** en interactiedoelen kunt aanpassen aan uw behoeften.

Opmerking: De locatie van de **knop Verander doel** kan naargelang de telefoon variëren.

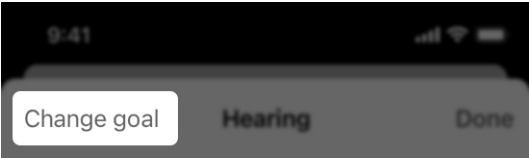

Stappen


Uw hoortoestellen meten het aantal stappen dat u gedurende de dag zet. Het **scherm Stappen** toont uw vooruitgang bij het nemen van stappen. De getelde stappen kunnen afkomstig zijn van wandelen, hardlopen en andere dagelijkse activiteiten.

Uw scherm Stappen gebruiken.

1. Tik op het **Homescherm** op de **knop Gezondheid**.



2. Het **scherm Gezondheid** verschijnt. Tik op uw **kaart Stappen** (indien weergegeven).

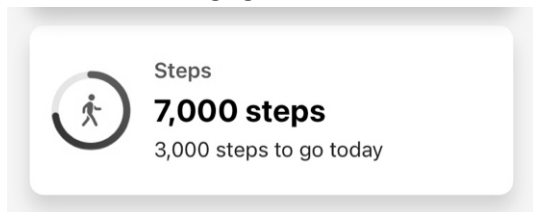


OF

3. Tik op **Activiteit** onder '**Browse**'. Tik op het **scherm Activiteit** dat verschijnt op **Stappen**.




Stappen

4. Tik op een **Dag, Week, Maand** of **Jaar knop** om de **vooruitgang** voor het gewenste tijdsbestek te bekijken. Kies vervolgens (indien gewenst) een **specifieke datum** uit het **vervolgkeuzemenu** onder uw huidige stappentelling.

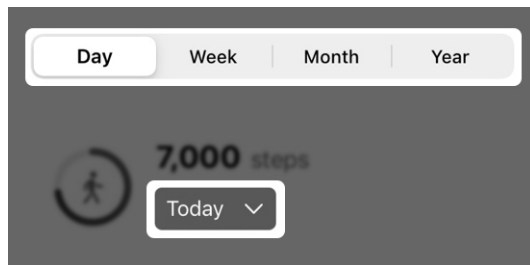


5. Bekijk:
 - uw **totale en gemiddelde aantal** stappen;
 - een **grafische weergave** van uw vooruitgang inzake stappen;
 - **verbruikte calorieën plus afstand en bereikte minuten/uren**;
 - **inzicht** in uw stappen.
 - **algemene informatie** over stappen en hoe ze worden bijgehouden.

Stappen

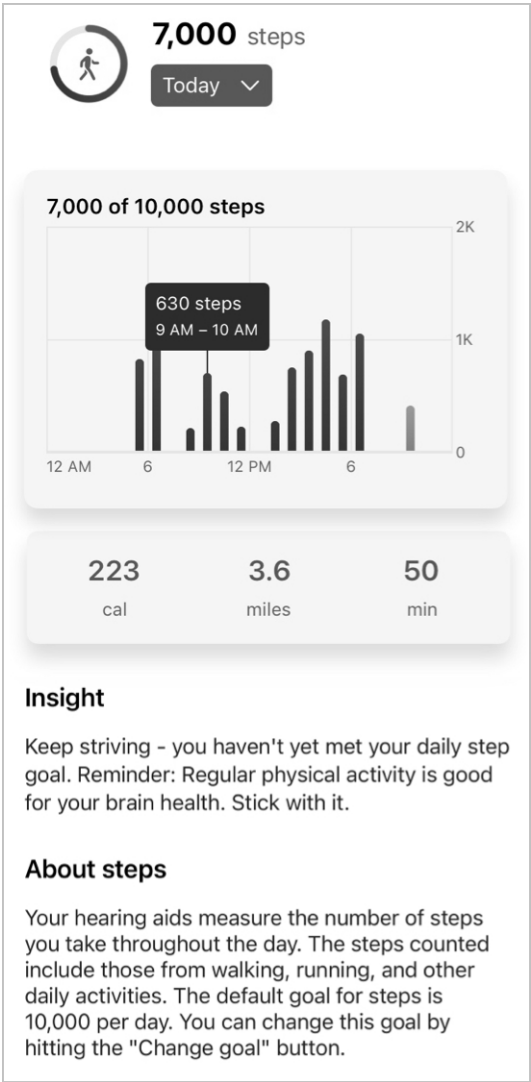

Stappen

Om uw stappendoel te wijzigen:
Tik op **Verander doel** op het **scherm Stappen**. Dit brengt u naar het **scherm Stappendoel**, waar u uw doel kunt aanpassen aan uw behoeften.
Opmerking: De locatie van de **knop Verander doel** kan naargelang de telefoon variëren.

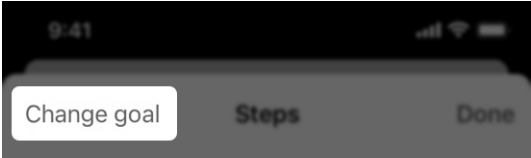

Staan;


Uw hoortoestellen kunnen detecteren wanneer u staat en beweegt. Uw **scherm Staan** toont uw vooruitgang inzake staan. De telling die u ziet, kent punten toe voor elk uur dat u gedurende de dag minstens 1 minuut hebt gestaan en bewogen.

Uw scherm Staan gebruiken

1. Tik op het **Home-scherm** op de **kaart Gezondheid**.



2. Het **scherm Gezondheid** verschijnt. Tik op uw **kaart Staan** (indien weergegeven).

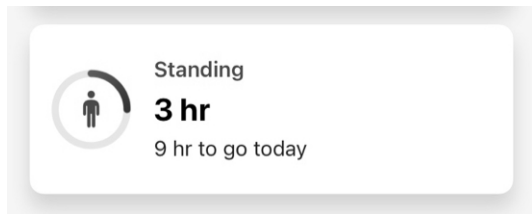


OF

3. Tik op **Activiteit** onder '**Browse**'. Tik op het scherm **Activiteit** dat verschijnt op **Staan**.



Staan

4. Tik op een **Dag, Week, Maand of Jaar knop** om de vooruitgang voor het gewenste tijdsbestek te bekijken. Kies vervolgens (indien gewenst) een **specifieke datum** uit het **vervolgkeuzemenu** onder uw huidige telling **Staan**.

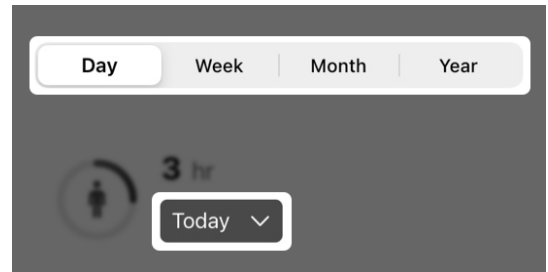

5. Bekijk:
 - uw **totale en gemiddelde tijd** die u hebt gestaan;
 - een **grafische weergave** van de vooruitgang bij het staan;
 - **inzicht** in uw staan;
 - **algemene informatie** over staan en hoe het worden bijgehouden.

Staan



3 hr

Today ▾

3 of 12 hr



12 AM 6 12 PM 6

Insight

Finding it hard to meet your daily standing goal? Stay the course. Studies show standing and moving regularly throughout the day can reduce your risk of obesity and heart disease.

About standing


Your hearing aids can detect when you stand and move. The count displayed here is a credit for each hour that you stood and moved for at least one minute. The default goal for standing is 12 hours. You can change this goal by hitting the "Change goal" button.

Staan

Om uw staan doel te wijzigen:

Tik op **Verander doel** op het **scherm Staan**. Dit brengt u naar het **scherm Staan doel**, waar u uw doel kunt aanpassen aan uw behoeften.

Opmerking: De locatie van de **knop Verander doel** kan naargelang de telefoon variëren.

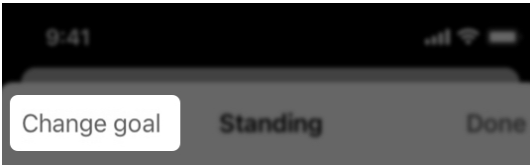

Beweging


Uw hoortoestellen kunnen uw lichamelijke activiteiten categoriseren en meten hoeveel tijd u gedurende de dag aan beweging spendeert. Uw **scherm Beweging** toont de vooruitgang inzake beweging. Dit kan de tijd omvatten die voor alle activiteiten wordt bijgehouden, inclusief stevig wandelen, hardlopen, indoor fietsen en aerobics.

Uw scherm Beweging gebruiken

1. Tik op het **Homescherm** op de **knop Gezondheid**.



2. Het **scherm Gezondheid** verschijnt. Tik op uw kaart **Beweging** (indien weergegeven).

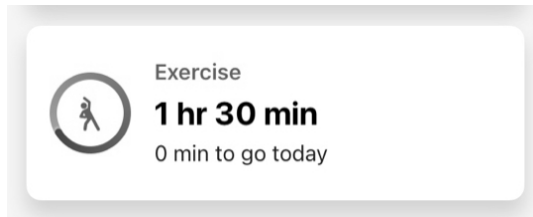


OF

3. Tik op **Activiteit** onder '**Browse**'. Tik op het **scherm Activiteit** dat verschijnt op **Beweging**.




Beweging

4. Tik op een **Dag, Week, Maand** of **Jaar knop** om de vooruitgang op het gebied van beweging voor het gewenste tijdsbestek te bekijken. Kies vervolgens (indien gewenst) een **specifieke datum** uit het **vervolgkeuzemenu** onder uw huidige telling **Beweging**.

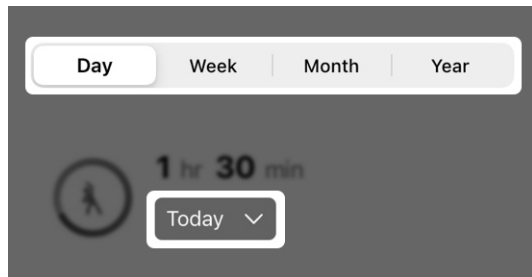

5. Bekijk:
 - uw **totale en gemiddelde tijd die u hebt besteed** aan beweging;
 - een **grafische weergave** van de vooruitgang op het gebied van beweging;
 - **verbruikte calorieën en minuten of uren die u hebt besteed** aan beweging;
 - **inzicht** in uw beweging;
 - **algemene informatie** over beweging en hoe het wordt bijgehouden.

Beweging

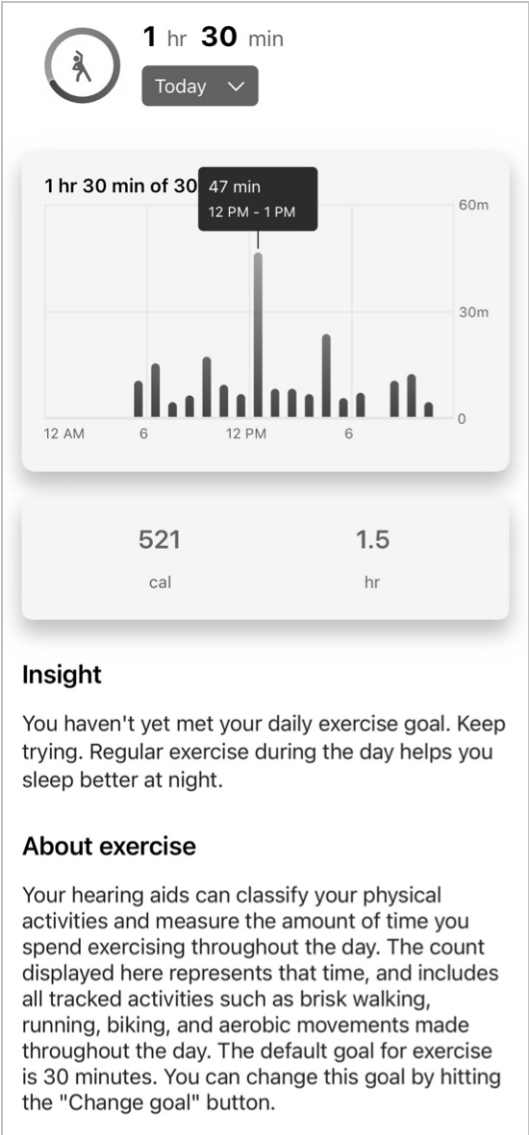


Beweging

Om uw bewegingsdoel te wijzigen:

Tik op **Verander doel** op het **scherm Beweging**. Dit brengt u naar het **scherm Bewegingsdoel**, waar u uw doel kunt aanpassen aan uw behoeften.

Opmerking: De locatie van de **knop Verander doel** kan naargelang de telefoon variëren.

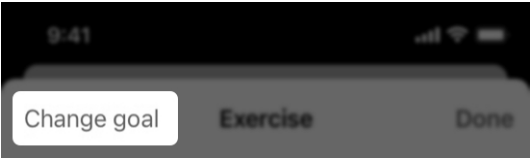

Uw hoortoestellen kunnen het aantal stappen dat u gedurende de dag zet meten. Uw **scherm Wandelen** toont uw vooruitgang inzake wandelen.

Herinnering – De stappen die op dit scherm worden getoond, zijn specifiek voor wandelen. Ze omvatten geen stappen die tijdens andere activiteiten worden genomen. (Bijvoorbeeld: hardlopen.)


Wandelen

Uw scherm Wandelen gebruiken

1. Tik op het **Homescherm** op de **knop Gezondheid**.



2. Het **scherm Gezondheid** verschijnt. Tik op uw **kaart Wandelen** (indien weergegeven).

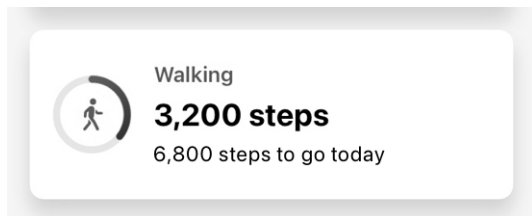


OF

3. Tik op **Activiteit** onder 'Browse'. Tik op het **scherm Activiteit** dat verschijnt op **Wandelen**.




Wandelen

4. Tik op een **Dag, Week, Maand** of **Jaar knop** om de **voortgang op het gebied van wandelen** voor het gewenste tijdsbestek te bekijken. Kies vervolgens (indien gewenst) een **specifieke datum** uit het **vervolgkeuzemenu** onder uw huidige telling voor wandelen.

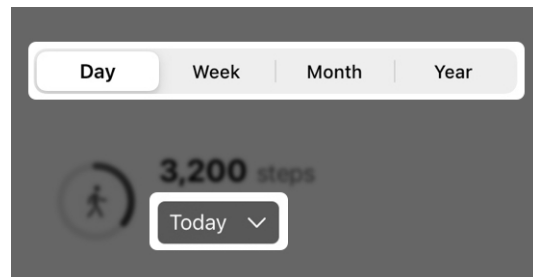

5. Bekijk:
 - uw **totale en gemiddelde aantal** stappen;
 - een **grafische weergave** van uw voortgang inzake wandelen;
 - **verbruikte calorieën plus afstand en bereikte minuten/uren**;
 - **inzicht** in uw wandelen;
 - **algemene informatie** over wandelen en hoe het wordt bijgehouden.

Wandelen

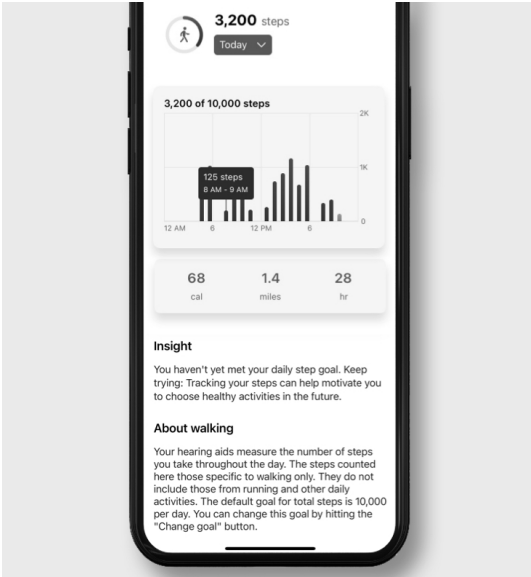


Herinnering – De tijd die u besteedt aan wandelen telt mee voor uw doel inzake totaal aantal stappen. Dit doel houdt het aantal stappen bij dat u neemt tijdens het wandelen, hardlopen en andere dagelijkse activiteiten.

Om uw stappendoel te wijzigen:
Tik op **Verander doel** op het **scherm Wandelen**. Dit brengt u naar het **scherm Stappendoel**, waar u uw doel kunt aanpassen aan uw behoeften.

Wandelen

Opmerking: De locatie van de **knop Verander doel** kan naargelang de telefoon variëren.

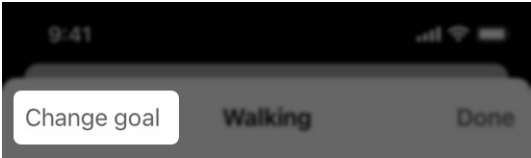

Opmerking: De opties voor het bijhouden van activiteiten kunnen variëren naargelang het product.

Hardlopen

Uw hoortoestellen kunnen uw fysieke activiteiten categoriseren en het:

- aantal stappen meten dat u zet tijdens het hardlopen;
- de hoeveelheid tijd meten die u aan hardlopen besteedt.


Uw **scherm Hardlopen** toont uw vooruitgang inzake hardlopen.

Uw scherm Hardlopen gebruiken

1. Tik op het **Homescherm** op de **knop Gezondheid**.




2. Het **scherm Gezondheid** verschijnt. Tik op uw **kaart Hardlopen** (indien weergegeven).

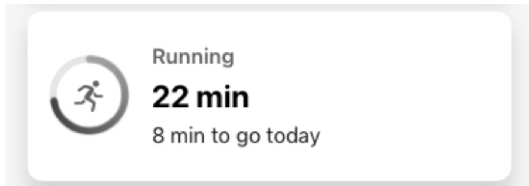


OF

3. Tik op **Activiteit** onder '**Browse**'. Tik op het scherm **Activiteit** dat verschijnt op **Hardlopen**.

Hardlopen

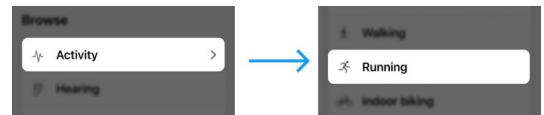

4. Tik op een **Dag-, Week-, Maand-** of **Jaar-knop** om de **vooruitgang op het gebied van hardlopen** voor het gewenste tijdsbestek te bekijken. Kies vervolgens (indien gewenst) een **specifieke datum** uit het **vervolgkeuzemenu** onder uw huidige telling Hardlopen.

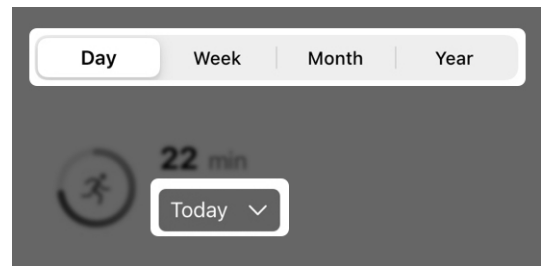

5. Bekijk:
 - uw **totale en gemiddelde tijd** die u hebt hardgelopen;
 - een **grafische weergave** van de vooruitgang op het gebied van hardlopen;
 - **verbruikte calorieën plus afstand en bereikte minuten/uren**;
 - **inzicht** in uw hardlopen;
 - **algemene informatie** over hardlopen en hoe het wordt bijgehouden.


Hardlopen



22 min

Today ▾

22 of 30 min

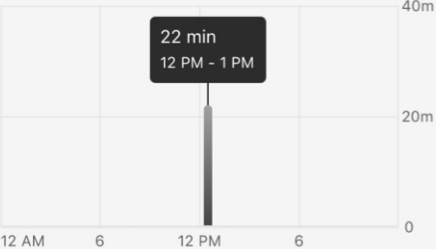

155

cal

2.2

miles

3,800

steps

Insight

Finding it hard to meet your daily exercise goal?
Get motivated by asking a friend or family member to join you.

About running


Your hearing aids classify your physical activities and can measure the amount of steps taken and time spent running. The count displayed here is distinct to running and does not count time from other activities such as biking and aerobics. Time spent running will count towards your total exercise goal. The default goal for total exercise is 30 minutes per day. You can change this goal by hitting the "Change goal" button.

Hardlopen

Herinnering – De tijd die u besteedt aan hardlopen telt mee voor uw **doel inzake totaal aantal beweging**. Dit doel houdt de tijd bij die u besteedt aan stevig wandelen, hardlopen, indoor fietsen en aerobics doen.

Om uw bewegingsdoel te wijzigen:
Tik op **Verander doel** op het **scherm Hardlopen**. Dit brengt u naar het **scherm Bewegingsdoel**, waar u uw doel kunt aanpassen aan uw behoeften.

Opmerking: De locatie van de **knop Verander doel** kan naargelang de telefoon variëren.

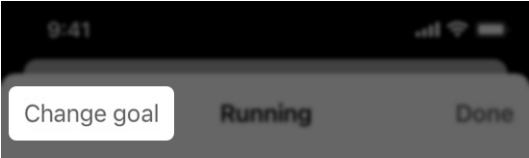

Opmerking: De opties voor het bijhouden van activiteiten kunnen variëren naargelang het product.

131 | Gezondheid

Indoor fietsen


Uw hoortoestellen kunnen uw lichamelijke activiteiten categoriseren en meten hoeveel tijd u besteedt aan fietsen op een stationaire fiets. Uw **scherm Indoor fietsen** toont uw vooruitgang op een stationaire fiets.

Uw scherm Indoor fietsen gebruiken

1. Tik op het **Homescherm** op de **knop Gezondheid**.



2. Het **scherm Gezondheid** verschijnt. Tik op uw **kaart Indoor fietsen** (indien weergegeven).

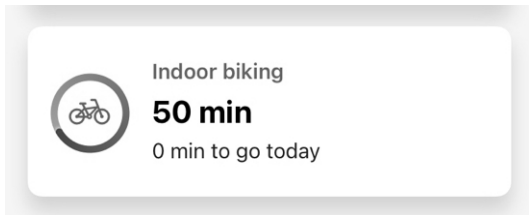


OF

3. Tik op **Activiteit** onder 'Browse'. Tik op het scherm **Activiteit** dat verschijnt op **Indoor fietsen**.



Indoor fietsen

4. Tik op een **Dag-, Week-, Maand-** of **Jaar-knop** om de doelstatistieken voor het gewenste tijdsbestek te bekijken. Kies vervolgens (indien gewenst) een **specifieke datum** uit het **vervolgkeuzemenu** onder uw huidige telling Indoor fietsen.

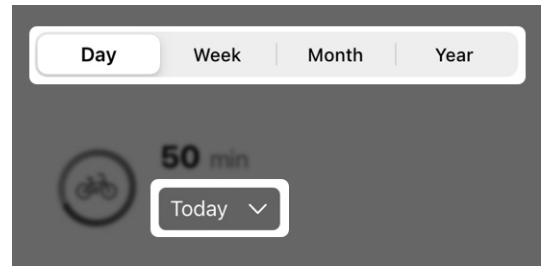

5. Bekijk:
 - uw totale en gemiddelde aantal minuten die u hebt besteed aan indoor fietsen;
 - een grafische weergave van uw vooruitgang inzake Indoor fietsen;
 - verbruikte calorieën plus bereikte minuten/uren;
 - inzicht in uw indoor fietsen;
 - algemene informatie over indoor fietsen en hoe het wordt bijgehouden.


Indoor fietsen



50 min

Today ▾

50 of 30 min

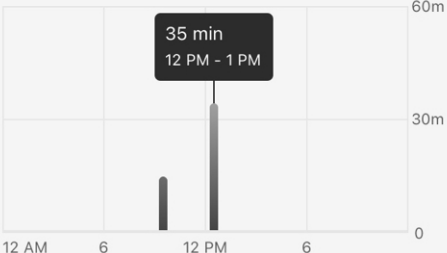

300 cal

50 min

Insight

Finding it hard to meet your daily exercise goal? Get motivated by asking a friend or family member to join you.

About indoor biking


Your hearing aids can classify your physical activities and can measure the amount of time you spend riding a bike. The count displayed is distinct to indoor biking and does not count time from other activities such as walking, running, or aerobics. The default goal for total exercise is 30 minutes per day. Time spent indoor biking counts toward this goal. You can change this goal by hitting the "Change goal" button.

Indoor fietsen

Herinnering – De tijd die u besteedt aan indoor fietsen telt mee voor uw **doel inzake totaal aantal beweging**. Dit doel houdt de tijd bij die u besteedt aan stevig wandelen, hardlopen, indoor fietsen en aerobics doen.

Om uw bewegingsdoel te wijzigen:
Tik op **Verander doel** op het **scherm Indoor fietsen**. Dit brengt u naar het **scherm beweging**, waar u uw doel kunt aanpassen aan uw behoeften.

Opmerking: De locatie van de **knop Verander doel** kan naargelang de telefoon variëren.

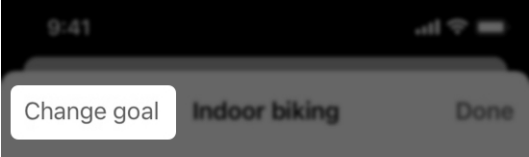

Opmerking: De opties voor het bijhouden van activiteiten kunnen variëren naargelang het product.

Aerobics

Uw hoortoestellen kunnen uw lichamelijke activiteiten categoriseren en meten hoeveel tijd u besteedt aan bewegingen die u doet tijdens aerobics. Uw scherm Aerobics toont uw vooruitgang op het gebied van aerobics.


Aerobics omvat springen en andere verticale oefeningen: (Voorbeelden: *jumping jacks, lunges, squats, toe-touches, dansen en wat yoga.*)

Uw scherm Aerobics gebruiken

1. Tik op het **Homescherm** op de **knop Gezondheid**.



2. Het **scherm Gezondheid** verschijnt. Tik op uw **kaart Aerobics** (indien weergegeven).

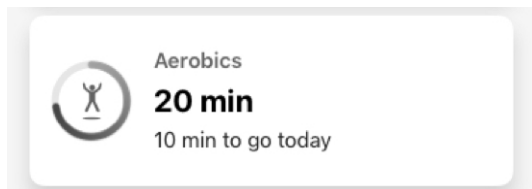


OF

3. Tik op **Activiteit** onder 'Browse'. Tik op het scherm **Activiteit** dat verschijnt op **Aerobics**.

Aerobics




Tik op een **Dag-, Week-, Maand- of Jaar-knop** om de doelstatistieken voor het gewenste tijdsbestek te bekijken. Kies vervolgens (indien gewenst) een **specifieke datum** uit het **vervolgkeuzemenu** onder uw huidige telling Aerobics.

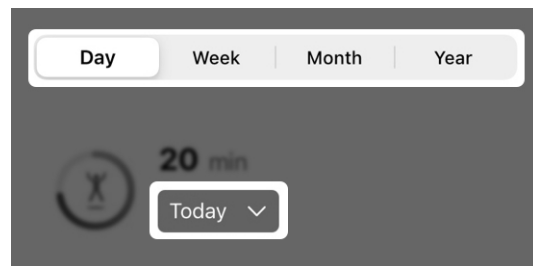

4. Bekijk:

- uw totale en gemiddelde aantal minuten die u hebt besteed aan aerobics doen;
- een grafische weergave van uw vooruitgang inzake aerobics;
- verbruikte calorieën plus bereikte minuten/uren;
- inzicht in uw aerobics.
- algemene informatie over aerobics en hoe de beweging wordt bijgehouden.

Aerobics

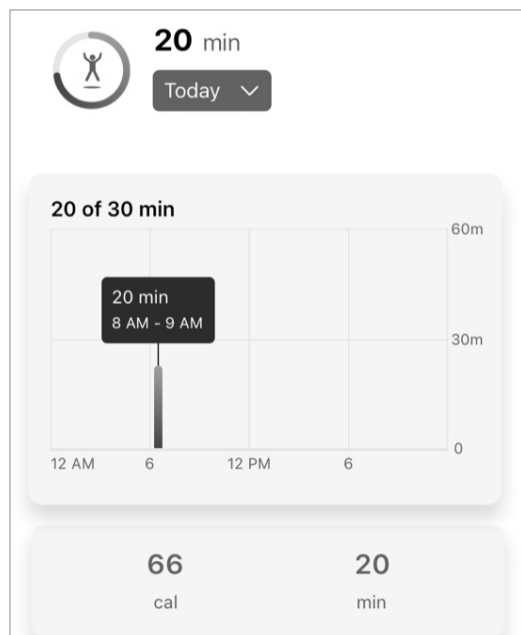

Insight

Finding it hard to meet your daily exercise goal?
Get motivated by asking a friend or family
member to join you.

About aerobics

Your hearing aids can classify your physical activities and can measure the amount of time you spend performing a aerobic-type activity. The count displayed here is distinct to aerobics and does not count time from other activities such as running and indoor biking. Activities that constitute aerobics include jumping jacks, lunges, squats, toe touches, and some yoga and dancing. The default goal for total exercise is 30 minutes per day. Aerobic exercise counts toward this goal. You can change this goal by hitting the "Change goal" button.


Aerobics

Herinnering – De tijd die u besteedt aan het doen van aerobics telt meer voor uw **doel inzake totaal aantal beweging**. Dit doel houdt de tijd bij die u besteedt aan stevig wandelen, hardlopen, indoor fietsen en aerobics doen.

Om uw doel inzake aerobics te wijzigen:

Tik op **Verander doel** op het **scherm**
Aerobics. Dit brengt u naar het **scherm**
beweging, waar u uw doel kunt
aanpassen aan uw behoeften.

Opmerking: De locatie van de knop **Verander doel** kan naargelang de telefoon variëren.

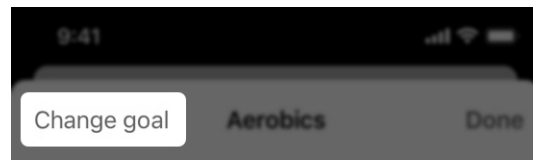

Opmerking: De opties voor het bijhouden van activiteiten kunnen variëren naargelang het product.

Verander doelen


Wijzig **Gezondheidsdoelen** op elk gewenst moment om ze aan te passen aan uw hoorbehoefte. Dit omvat doelen die zijn gesteld voor:

- horen (gebruik en interactie);
- stappen;
- staan;
- beweging.

Om een doel te wijzigen:

1. Tik op een van uw **activiteitschermen** op **Verander doel**.

Opmerking: De locatie van de **knop Verander doel** kan naargelang de telefoon variëren.

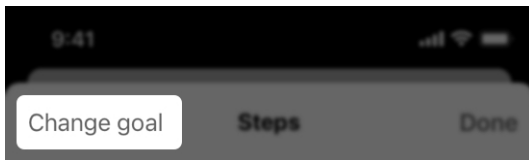

Verander doelen

2. Selecteer op het volgende scherm **EEN van de drie keuzes voor dagelijkse doelen**.

SELECT DAILY STEPS GOAL

5,000 steps



7,000 steps

10,000 steps

OF

Typ uw eigen doel in het **veld Aangepast doel instellen**.

SET CUSTOM GOAL

| Custom goal

Hear Share

- Een zorgverlener uitnodigen
- Contactpersonen bekijken/bewerken

Een zorgverlener uitnodigen

Behoud uw onafhankelijkheid door de informatie over uw gehoor, activiteiten en veiligheid te delen met een zorgverlener, familielid of goede vriend. Nodig een zorgverlener uit om de bijbehorende **Hear Share**-app te downloaden.

Om een zorgverlener uit te nodigen voor **Hear Share**:

- 1. Tik op het **Homescherm** op de knop **Gezondheid**.




- 2. Het **scherm Gezondheid** verschijnt:
Tik in de rechterbovenhoek op het pictogram **Hear Share**.



OF

Tik onder **‘Extra instellingen’** op de knop **Delen instellen**.

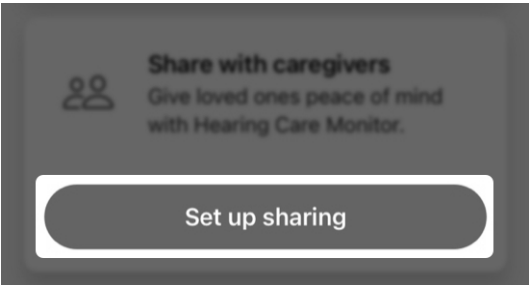


Een zorgverlener uitnodigen

Het **scherm Hear Share** verschijnt.

Herinnering – Als u al een zorgverlener hebt toegevoegd aan Hear Share en u voegt een extra zorgverlener toe, dan brengt deze app u naar het **scherm Zorgverleners** (zie **Extra zorgverlener toevoegen** onder).

- 3. Meer informatie over **Hear Share** vindt u op het **welkomtscherm**.
Tik op **Zorgverleners uitnodigen** om een zorgverlener uit te nodigen.

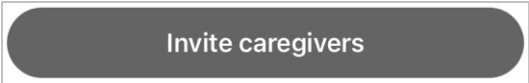

- 4. Voer de **voornaam** en het **e-mailadres** in van de persoon die u wilt uitnodigen voor Hear Share in de daarvoor bestemde velden.

First name	+
Email	

Herinnering – Er kan een **toestemmingsvenster** verschijnen waarin u wordt gevraagd of Hear Share toegang mag hebben tot uw **contactpersonen**. Hierdoor krijgt de app toegang tot de **lijst met contactpersonen** van uw telefoon om de **velden voornaam** en **e-mailadres** in te vullen. Als u hiervoor geen toestemming geeft, moet u de **gegevens van de zorgverlener** gewoon zelf in deze **velden** invoeren.

Een zorgverlener uitnodigen

5. Selecteer de **gezondheidsgegevens** die u wilt delen met deze persoon:
- **Activiteitsgegevens** (over uw stappen, beweging en staan)
 - **Gehoorgegegevens** (over uw hoortoestelgebruik en interactie)
 - **Welzijnsgegevens** (over uw valincidenten als uw Val Alarmering hebt ingeschakeld)

CHOOSE WHAT TO SHARE

Activity data

Includes steps, exercise and standing data

Hearing data

Includes hearing aid use and interaction data

Wellness data

Includes fall data

6. Tik op **Verzenden**. U zult **bevestiging** ontvangen dat uw uitnodiging is verstuurd. Uw contactpersoon ontvangt per e-mail **instructies** voor het downloaden van de **Hear Share-app** en een **code** om in te voeren teneinde de verbinding te bevestigen.

9:41

Cancel

Invite caregiver

Send

Een zorgverlener uitnodigen

Extra zorgverleners toevoegen

1. Tik op het **Homescherm** op de knop **Gezondheid**.
2. Het **scherm Gezondheid** verschijnt. Tik in de rechterbovenhoek op het pictogram **Hear Share**.



3. Het **scherm Zorgverleners** verschijnt en toont uw **huidige zorgverlener contactpersonen**.

< Settings

Caregivers

L

Lisa

Pending

S

Sofie

Joined 01/15/21

R

Richard

Joined 12/03/20

L

Lizzie

Joined 12/02/20

Een zorgverlener uitnodigen

4. Tik op **Zorgverlener toevoegen** ('+' pictogram). Het **scherm Zorgverlener uitnodigen** verschijnt.

+

Add caregiver

5. Voer de **voornaam** en het **e-mailadres** in van de persoon die u wilt uitnodigen voor Hear Share in de daarvoor bestemde velden.

First name

Email

6. Selecteer de **gezondheidsgegevens** die u wilt delen met deze persoon:
- **Activiteitsgegevens** (over uw stappen, beweging en staan)
 - **Gehoorgegegevens** (over uw hoortoestelgebruik en interactie)
 - **Welzijnsgegevens** (over uw valincidenten als uw Val Alarmering hebt ingeschakeld)

Een zorgverlener uitnodigen

CHOOSE WHAT TO SHARE

Activity data

Includes steps, exercise and standing data

Hearing data

Includes hearing aid use and interaction data

Wellness data

Includes fall data

7. Tik op **Verzenden**. U zult **bevestiging** ontvangen dat uw uitnodiging is verstuurd. Uw contactpersoon ontvangt per e-mail instructies voor het downloaden van de **Hear Share-app** en een code om in te voeren teneinde de verbinding te bevestigen.

9:41

Cancel

Invite caregiver

Send

Om te weten te komen of uw contactpersoon uw uitnodiging voor Hear Share heeft aanvaard:

1. Tik op het **Home-scherm** op de **knop Meer**.
- Home

Health

Learn

More

Een zorgverlener uitnodigen

2. Selecteer **App-instellingen > Hear Share-instellingen** en zie of uw contactpersoon **in de lijst staat** of **'In afwachting'** is.



Zodra uw contactpersoon uw uitnodiging heeft aanvaard, begint hij/zij uw vooruitgang op het gebied van gehoor te zien.

Contactpersonen bekijken/bewerken

Gebruik deze app om uw huidige Hear Share-contactpersoon/contactpersonen (zorgverleners) te bekijken en hun gegevens indien nodig te bewerken.

Om uw huidige Hear Share-contactpersonen te bekijken:

1. Tik op het **Home-scher** op de knop **Meer**.




2. Selecteer **App-instellingen > Hear Share-instellingen**. Uw **bestaande** contactpersonen en deze die **'In afwachting'** zijn, verschijnen om te bekijken.



Om een Hear Share-contactpersoon te bewerken:


1. Vanuit uw **Hear Share-lijst met contactpersonen** op uw **scherm Hear Share instellingen**: Tik op de huidige contactpersoon of de contactpersoon die in afwachting is die u wilt bewerken.

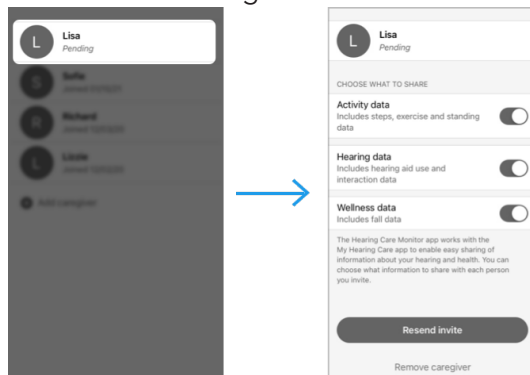


Contactpersonen bekijken/bewerken

2. Verplaats in het **scherm Contactpersonen de schakelknop naar LINKS of RECHTS** om te kiezen wat u met uw contactpersoon wilt delen (of niet delen):

- **Activiteitsgegevens** (over stappen, beweging en staan)
- **Gehoorgegegevens** (over hoortoestelgebruik en interactie)
- **Welzijnsgegevens** (over uw valincidenten als uw Val Alarmering hebt ingeschakeld)

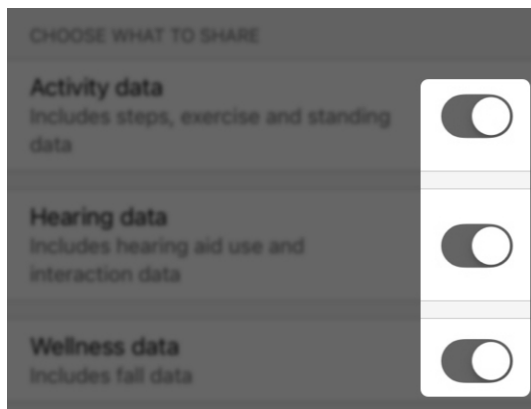


3. Als uw contactpersoon 'in afwachting' is en u uw uitnodiging opnieuw moet sturen, tik dan op de knop **Uitnodiging herhalen**.

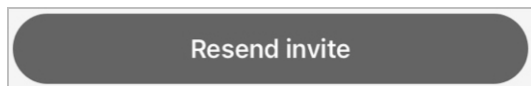


Contactpersonen bekijken/bewerken

4. Als u deze zorgverlener wilt verwijderen, tikt u op **Zorgverlener verwijderen**.

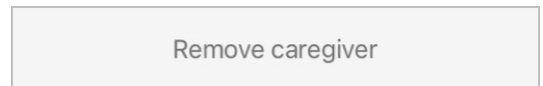

5. Wanneer u klaar bent met bewerken, tikt u op **Gereed** in de rechterbovenhoek van het scherm.

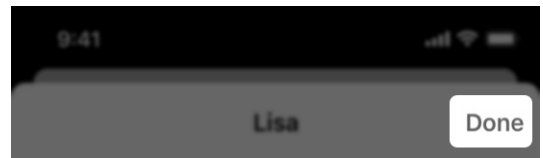

Val Alarmering

- Overzicht Val Alarmering
- Een contactpersoon uitnodigen
- Geluidssignalen
- Instellingen
- Geschiedenis


Overzicht Val Alarmering

Val Alarmering helpt u te beschermen wanneer u valt door vrienden, familie of anderen op de hoogte te stellen. Dit zijn uw contactpersoon Val Alarmering.

Hoe Val Alarmering werkt

Uw hoortoestellen detecteren het wanneer u valt. Wanneer dit gebeurt, wordt u gewaarschuwd door een bericht via uw hoortoestellen.

Vervolgens:

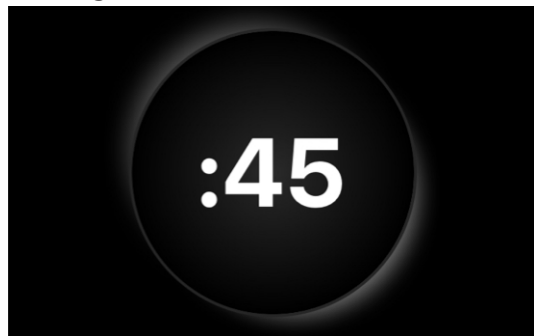

Na een korte aftelling stuurt deze app een waarschuwingssms'je naar uw Val Alarmering contactpersonen. Dit bevat details over uw val en een kaart met uw locatie.


Fall detected

It looks like you fell. Your Fall Alert contacts will be alerted at the end of this countdown. Press Send Fall Alert to send immediately.

Herinnering – Geen hulp nodig?

U kunt de waarschuwingssms annuleren voordat deze wordt verzonden. Zie **Een Val Alarmering annuleren** onder.

Overzicht Val Alarmering

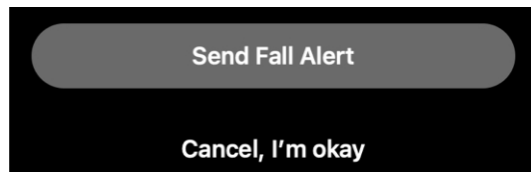


U hoort ook een **indicator 'Alarm verzonden'** en ontvangt een **bevestigingsbericht** dat uw alarm werd verzonden.

Uw contactpersoon Val Alarmering zal een waarschuwingssms ontvangen van deze app, die hem/haar op de hoogte brengt van uw val. Nadat hij/zij dit ontvangt, zult u een **indicator 'Alarm Ontvangen'** horen door uw hoortoestellen.

Een Val Alarmering annuleren

Annuleer een **waarschuwingssms** naar uw contactpersoon door op een **willekeurige knop** op uw hoortoestellen te drukken. Of tik **Annuleer, het gaat goed met mij** op het **timerschermb** voordat het aftellen eindigt. Wanneer u hebt geannuleerd, zult u een **indicator 'Alarm geannuleerd'** horen door uw hoortoestellen.

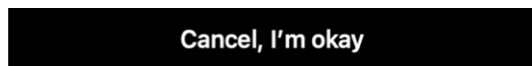

Een contactpersoon uitnodigen


Stel Val Alarmering in door een contactpersoon uit te nodigen die door een waarschuwingssms op de hoogte kan worden gebracht als u valt.

Om Val Alarmering in te stellen:

1. Tik op het **Homescherm** op de **knop Gezondheid**.



2. Het **scherm Gezondheid** verschijnt. Tik op **Extra instellingen > Val Alarmeringen**.

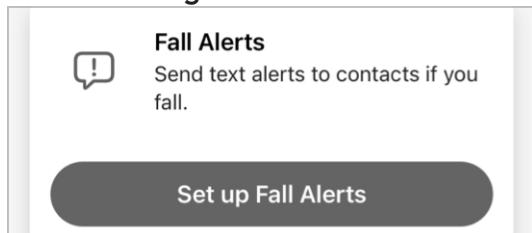


3. Kom meer te weten over Val Alarmering op de eerste 2 **welkomstschermen**.
4. Vul op het **derde scherm** uw **contactgegevens** in.

Een contactpersoon uitnodigen


Herinnering – Er kan een **toestemmingsvenster** verschijnen waarin u wordt gevraagd of **Val Alarmering** toegang mag hebben tot uw contactpersonen.

Hierdoor krijgt de app toegang tot de lijst met contactpersonen van uw telefoon om de **velden voornaam** en **telefoonnummer** in te vullen. Als u hiervoor geen toestemming geeft, moet u de gegevens van de contactpersoon gewoon zelf in de velden invoegen.

5. Tik op **Verzenden** om hem/haar uit te nodigen om uw contactpersoon Val Alarmering te zijn.

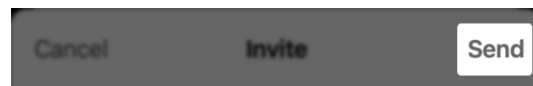

6. Het **scherm Uitnodiging Verzonden** bevestigt de uitnodiging die naar uw contactpersoon werd ge-sms't. (U kunt ook een andere contactpersoon Val Alarmering toevoegen.)

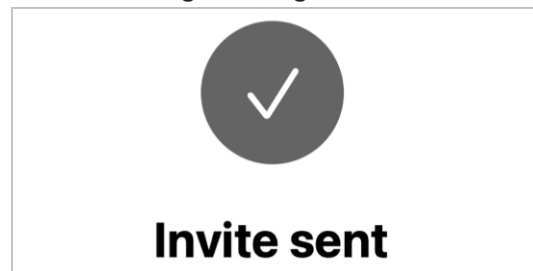

Een contactpersoon uitnodigen

Uw contactpersoon zou het sms'je met de uitnodiging moeten ontvangen. Dit vraagt hem/haar om uw uitnodiging en meldingen van deze app te aanvaarden als u valt. Totdat u antwoord krijgt, wordt uw contactpersoon als **'In afwachting'** weergegeven op het **scherm met Instellingen voor Val Alarmering**. **Val Alarmering** wordt ook weergegeven als **'Systeem inactief'**.

Geluidssignalen

Wanneer uw hoortoestellen een val detecteren en Val Alarmering wordt geactiveerd, worden er indicatoren gespeeld door uw hoortoestellen. Deze brengen u op de hoogte van de status van uw waarschuwingssms'jes.

Types indicatoren voor Val Alarmering

- **Alarm Verzonden**

Wanneer uw hoortoestellen een val detecteren (of u handmatig een Val Alarmering activeert), wordt er na een korte aftelling een waarschuwingssms naar uw contactpersoon voor Val Alarmering gestuurd. Een indicator 'Alarm Verzonden' wordt dan in uw hoortoestellen afgespeeld.

- **Alarm Ontvangen**

Wanneer uw contactpersoon Val Alarmering uw waarschuwingssms opent, speelt de indicator 'alarm ontvangen'.

- **Alarm geannuleerd**

Nadat u de waarschuwingssms hebt geannuleerd, wordt de indicator 'alarm geannuleerd' afgespeeld.

- **Alarm mislukt**

Als uw waarschuwingssms niet met succes wordt verzonden, wordt de indicator 'alarm mislukt' afgespeeld.

Geluidssignalen

Het beluisteren van de geluiden van uw indicator voor Val Alarmering is een goede manier om ermee vertrouwd te raken en beter voorbereid te zijn als u valt.

Om uw indicatoren voor Val Alarmering te beluisteren:

1. Tik op het **Home-scher** op de **knop Meer**.



2. Selecteer **App-instellingen > Instellingen Val Alarmering**.



3. Tik op **Alarm geluiden**. Op het **scherm Alarm geluiden** dat verschijnt: Swipe door elke indicatorsample en tik op de **knop Indicator afspelen** om elke sample door uw hoortoestellen af te spelen.



Instellingen

Het **menu Instellingen voor Val Alarmering** bevat opties om:

- uw contactpersonen te bekijken/toe te voegen/te bewerken;
- u te herinneren aan indicatoren die via uw hoortoestellen worden afgespeeld als u valt.

Pas meer opties aan, waaronder de gevoeligheidsinstelling en de lengte van de afteltimer.

Om Instellingen voor Val Alarmering te gebruiken:

1. Tik op het **Home-scher** op de **knop Meer**.



2. Selecteer **App-instellingen > Instellingen Val Alarmering**.



Het **menuscher** **Instellingen Val Alarmering** geeft deze instellingen weer:

Systeem actief/inactief

Vind deze melding aan de bovenkant van het scherm. Het systeem is **actief** als u een contactpersoon voor Val Alarmering hebt ingesteld om waarschuwingssms'jes te ontvangen, en **inactief** als u geen

Instellingen

contactpersoon voor Val Alarmering hebt ingesteld. (Schakel Val Alarmering op elk gewenst moment **IN/UIT** met de **schakelknop Automatisch Alarmeren**.)

< Settings

Fall Alert settings

System active

Gevoeligheid

Hiermee kunt u instellen hoe snel uw hoortoestellen reageren op plotselinge bewegingen versus een echte val. Maak uw hoortoestellen meer of minder gevoelig op basis van uw dagelijkse activiteit. (De **standaard instelling** wordt aanbevolen.)

Sensitivity

Default >

Handmatig Alarm

Door deze optie op **'AAN'** te zetten kunt u een bedieningselement op uw hoortoestel gebruiken om een **waarschuwingssms** naar uw **contactpersoon/contactpersonen Val Alarmering** te sturen. (Dit doet u door de **schakelknop naar RECHTS** te verplaatsen.) Handmatig Alarm is ingesteld door uw audicien.

Manual alert

Instellingen

Afteltimer

Gebruik deze om de **tijd** in te stellen die verstrijkt tussen het **detecteren van een val** en het verzenden van een **waarschuwingssms**.

Countdown timer

60 seconds >

Alarm geluiden

Hiermee kunt u vertrouwd raken met de **Indicatorgeluiden van Val Alarmering**. Swipe door elke **indicatorsample** en tik op de **knop afspelen** om elke sample door uw hoortoestellen af te spelen.

Alert sounds

Alarm Bericht


Wanneer Val Alarmering een **waarschuwingssms** stuurt naar uw contactpersoon/contactpersonen Val Alarmering, bevat dit uw naam en een **link naar uw locatie**. Bewerk hoe uw naam in het getoonde veld wordt weergegeven.

Alert message

Instellingen

Contactpersonen

Hier staan uw contactpersonen voor Val Alarmering. Tik **op de naam van een contactpersoon** om de contactgegevens te bekijken of te bewerken, of om de contactpersoon te verwijderen. Om een contactpersoon toe te voegen, tikt u op **Contactpersoon toevoegen** ('+'-pictogram) en volgt u de instructies in de **sectie Instellingen Val Alarmering**.

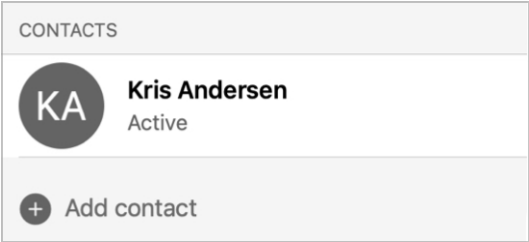

Geschiedenis

Het **scherm Vallen (welzijn)** biedt een gedetailleerde geschiedenis van vallen die uw hoortoestellen hebben gedetecteerd.

Dit omvat:

- Gedetecteerde vallen waarbij de waarschuwingssms naar uw contactpersoon/contactpersonen voor Val Alarmering werd verzonden.
- Gedetecteerde vallen waarbij u de waarschuwing annuleerde voordat de waarschuwingssms was verzonden.

Om het **scherm Vallen (welzijn)** te gebruiken:


1. Tik op het **Homescherm** op de **knop Gezondheid**.



2. Het **scherm Gezondheid** verschijnt. Tik onder **Browse** op **Welzijn**.




3. Het **scherm Vallen** verschijnt. Bovenaan het scherm wordt aangegeven of het Val Alarmering systeem **actief of inactief** is.

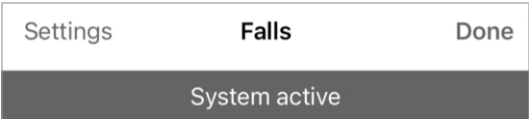


Geschiedenis


4. Tik op **Dag, Week, Maand** of **Jaar** om het tijdsbestek aan te geven van de valgegevens die u wilt bekijken.

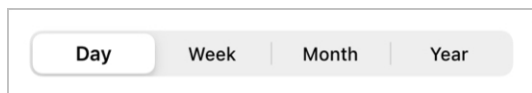

5. Gebruik de **datumkeuzelijst** om een **specifieke dag, week, maand of jaar** te selecteren.

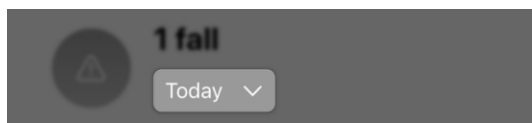

6. Gebruik de **sleutel onder de geschiedenis** om de **gedetecteerde** of **geannuleerde** vallen te identificeren:
- **Oranje pictogram** = val gedetecteerd en waarschuwingssms verzonden
 - **Grijs pictogram** = val gedetecteerd, maar geen waarschuwingssms verzonden

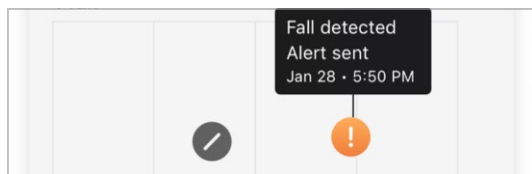

7. Lees de **inzichtinfo** voor meer informatie over vallen en/of handige tips om vallen te voorkomen.
8. Lees **Over vallen** om meer te weten te komen over de functie **Val Alarmering**.

Leer

Leer

De sectie **Leer** is bedoeld om u te helpen wennen aan uw nieuwe hoortoestellen en om belangrijke functies te ontdekken. Deze nuttige, gebruiksvriendelijke inhoud is beschikbaar wanneer u het nodig hebt en omvat:

- tips om aan uw hoortoestellen te wennen;
- hulp bij verzorging en onderhoud;
- begeleiding bij gebruik van de app;
- en meer.


U vindt deze inhoud in de vorm van 'how-to' lessen, video's, artikels, en meer.

Leer gebruiken

1. Tik op het **Home**-scherm op de knop **Leer**.



2. Als u Leer voor de eerste keer gebruikt, tikt u op **Uw inhoud personaliseren** onder de kop 'Nieuw voor u'.

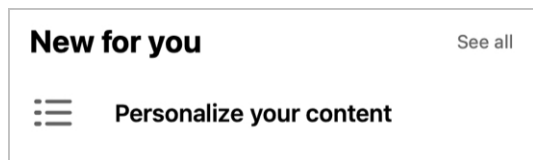


Leer

3. Het volgende **scherm** vraagt u om aan te geven hoe bekend u bent met hoortoestellen door op 1 van de 2 knoppen te tikken:


- **Ik ben nieuw op het gebied van hoortoestellen: Begin bij de basis**

OF

- **Ik heb eerder hoortoestellen gedragen: Sla de basis over**

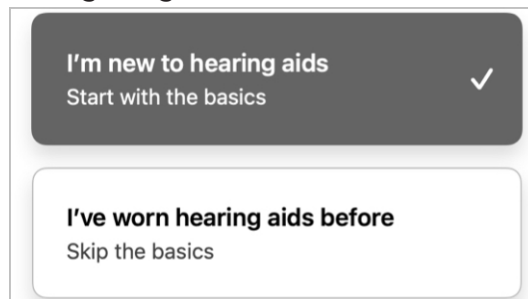

Tik op de **knop** die het beste uw ervaring met hoortoestellen beschrijft, en tik op **Indienen**.

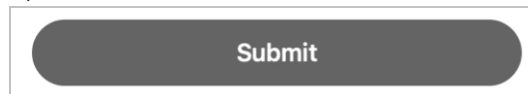

Leer

4. Als u de **eerste optie kiest (nieuw op het gebied van hoortoestellen)**:

- Op het volgende scherm vindt u korte basislessen, artikels en video's om u te helpen uw hoortoestellen te leren kennen en vertrouwen op te bouwen met elke week een persoonlijk onderwerp.

Great! Let's start with the basics

Get to know your new hearing aids and build confidence with personalized topics each week.

OF

Als u de **tweede optie koos (ik heb eerder hoortoestellen gedragen)**:

- Het **volgende scherm** toont **korte lessen, artikels en video's** om u te helpen uw vaardigheden en kennis uit te breiden.

Build your skills and knowledge

Get the most out of your hearing aids with brief lessons and tips just for you.

Leer

5. Telkens wanneer u Leer gebruikt, zal het **scherm Leer 2 secties** bevatten:

- **'Nieuw voor u'**: content op basis van uw specifieke hoortoesteltraject. Deze veranderen/worden bijgewerkt naarmate u uw hoortoestellen en deze app blijft gebruiken.

New for you

[See all](#)



What to expect from new hearing aids



Getting to know your app Home screen



Tips for adjusting to hearing aids

- **Populaire onderwerpen**: content die alle gebruikers gemeen hebben, waar u misschien nog eens naar verwijst.

Popular topics

Get started



Using your hearing aids



Leer

6. Gebruik de **Zoekbalk** om een **onderwerp naar keuze** te vinden. Typ een paar woorden in het veld en deze app zoekt in het hele systeem naar **onderwerpen die overeenkomen**.



Meer

- Overzicht Meer
- Account
- App-instellingen
- Over & privacy
- Meldingen

Overzicht Meer

Het **menu Meer** geeft u toegang tot app- en accountgegevens, overeenkomsten en toestemmingen, en extra app-functies. Deze omvatten:

- **accountinformatie (inclusief opties om naam, e-mailadres, wachtwoord te bewerken);**
- **app-instellingen;**
- **juridische disclaimers;**
- **hulpcentrum;**
- **TeleHear**
- **Herinneringen**
- **meldingen;**
- **vertalen;**
- **spraak naar tekst.**


Om Meer te gebruiken:

1. Tik op het **Home-scher** op de **knop Meer**.



Overzicht Meer

2. Tik in het **menuscher** **Meer** dat verschijnt op de **instelling of functie** die u wilt bekijken/gebruiken.

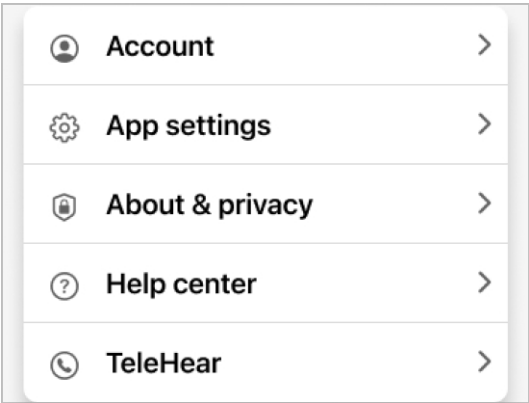

Account

In het **scherm Account** worden de gegevens van uw app-account opgeslagen. Deze gegevens kunnen op elk moment worden gewijzigd, en omvatten:

- uw **voornaam**;
- uw **e-mailadres**;
- uw **wachtwoord**;
- uw **account deactiveren**;
- **afmelden van de app**.

< More

Account

First name

Jane

Email

jseymore@gmail.com

Change password

Deactivate your account

Om uw scherm Account te gebruiken:

1. Tik op het **Home-scherm** op de **knop Meer**.

Home

Health

Learn

More

2. Tik in het **menu Meer** dat verschijnt op **Account** om uw gegevens te bekijken of te wijzigen.

Account

>

app-instellingen;

In uw **scherm App-instellingen** kunt u speciale functie-instellingen beheren die u helpen bij uw gehoortraject. Deze omvatten:

- instellingen voor Val Alarmering;
- instellingen voor Hear Share.

App settings

Fall Alert settings

>

Hear Share settings

>

Om uw App-instellingen te gebruiken:

1. Tik op het **Home-scherm** op de **knop Meer**.

Home

Health

Learn


More

2. In het **menu Meer** dat verschijnt: Tik op **App-instellingen** en dan op de **functie-instellingen** waarmee u wilt werken.

Over & privacy

Op uw **scherm Over en privacy** kunt u informatie over deze app, gebruikersrichtlijnen en overeenkomsten bekijken. Deze omvatten:

- **over;**
- **privacybeleid;**
- **EULA;**
- **toestemmingen.**

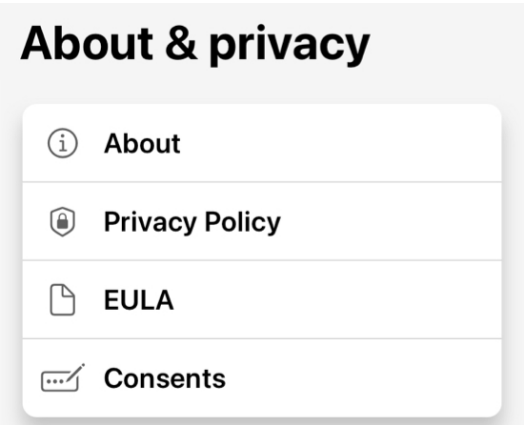

Over

Dit geeft u informatie over het doel van uw app en de fabrikant van de app, Starkey Laboratories, Inc.

Privacybeleid

Dit beschrijft uw recht op privacy met betrekking tot de persoonlijke gegevens die u in deze app invoert. Dit beleid is in overeenstemming met de privacy- en beschermingswetten.

Over & privacy

EULA (End User License Agreement of eindgebruikerslicentieovereenkomst)

Dit is een overeenkomst met de fabrikant over de manieren waarop u de app kunt gebruiken.

Toestemmingen

Hiermee kunt u uw machtigingen voor het delen van specifieke soorten gegevens bekijken en bewerken. Er zijn bijvoorbeeld bepaalde toestemmingen nodig als u uw app gebruikt om te communiceren met derden, zoals uw audicien of een zorgverlener.

Meldingen

Meldingen zijn berichten die door uw app worden verzonden om u attent te maken op herinneringen, mededelingen van anderen en andere tijdige informatie.

Voorbeelden:


- updates van uw hoortoestel;
- aanvaarde uitnodigingen (bv. voor Val Alarmering, Hear Share).

Om toegang te krijgen tot uw meldingen:

1. Tik op het **Home-scherm** op **Meer**.




2. Tik in het **menuscherm Meer** op het **belpictogram** rechtsboven. Ongelezen meldingen worden aangegeven met een rode stip ernaast die een nummer bevat. Dit nummer geeft aan hoeveel ongelezen meldingen u heeft.

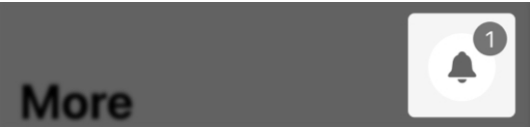


Meldingen

3. Het **scherm Meldingen** verschijnt. Ongelezen meldingen worden aangegeven met een punt. Om **een melding** volledig te lezen, tikt u op de **melding**.

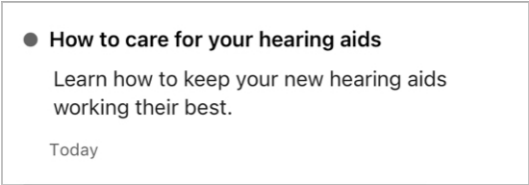

- Om een melding te verwijderen, swipet u de **melding** van rechts naar links en tikt op de rode **knop Pullenbak** die verschijnt.

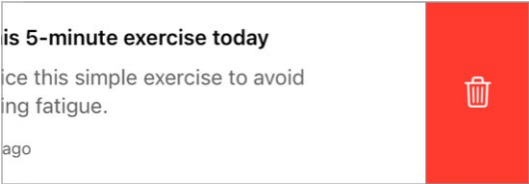

4. Tik op **Gereed** wanneer u klaar bent.



TeleHear

- Overzicht TeleHear
- TeleHear instellen
- Een TeleHear-sessie op afstand starten
- Een hulpverzoek indienen
- Een nieuwe geluidsinstelling proberen

Overzicht TeleHear

Met **TeleHear** kunt u een virtuele afspraak maken met uw audicien. Met TeleHear kan uw audicien ook op afstand aanpassingen aan uw hoortoestellen uitvoeren. Ze kunnen dit doen met behulp van de live videochat in twee richtingen van TeleHear.

Hoe TeleHear werkt

Uw audicien kan u een eenmalige toegangscode voor deze app geven. Door deze code in te voeren, ontstaat er een verbinding tussen u en hem/haar, waardoor hij/zij de prestaties van uw hoortoestel kan bekijken en uw hoortoestelprogramma's op afstand kan aanpassen.

Please enter the 6 character code provided by your hearing professional.

U

P

4

K

8

0

Herinnering – U kunt uw TeleHear-verbinding op elk moment verwijderen.

Overzicht TeleHear

Om TeleHear te gebruiken:

1. Tik op het **Home**-scherm op **Meer**.



2. Tik op het **menuscherm Meer** dat verschijnt op **TeleHear**.



Zodra u een toegangscode hebt ontvangen en verbinding hebt gemaakt met uw audicien, kunt u deelnemen aan een TeleHear-sessie.

TeleHear instellen

Om TeleHear in te stellen:

1. Tik op uw **Home-scher**m op de **knop Meer**.



2. Tik op het **menu Meer** dat verschijnt op **TeleHear**.




3. Tik op **Professional toevoegen**.



(Als **Val Alarmering** niet 'actief' is/ gebruikt wordt op uw app, ga dan naar **Stap 5**.)

4. Het **venster Val Alarmering uitgeschakeld** verschijnt om u te informeren dat **Val Alarmering** en **andere app-functies** tijdelijk uitgeschakeld zullen zijn tijdens uw TeleHear-sessie. Tik op **OK**.
5. In het volgende scherm wordt u gevraagd om een **6-cijferige code** van uw audicien in te voeren. Als u deze hebt, tikt u op de **knop 'Ik heb een code'**. Als u deze niet hebt, moet u contact opnemen met uw audicien om de code te krijgen en dan terugkeren naar dit scherm.

TeleHear instellen

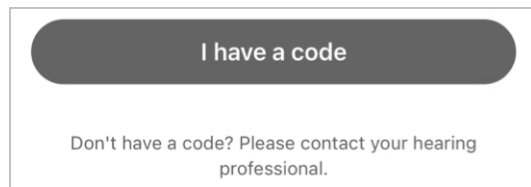

6. Voer uw **6-cijferige code** in.

Please enter the 6 character code provided by your hearing professional.




7. Tik op **1** van de 2 keuzes:

- Tik op de **knop Aanvaarden** om uw audicien toestemming te geven uw **hoortoestellen** aan te passen en toegang te krijgen tot uw **gehoorgegevens (gebruik en interactie)**.

OF

- Tik op **Afstellen op afstand** als u wilt dat uw audicien uitsluitend toegang heeft tot uw **hoortoestellen** voor aanpassingen.

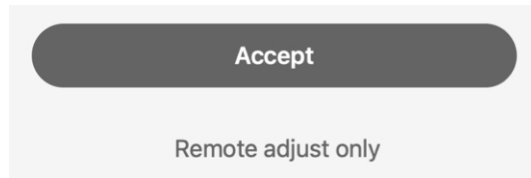

TeleHear instellen

Herinnering – U kunt uw voorkeuren voor het delen van gegevens op elk moment wijzigen.

8. Het scherm met contactgegevens van uw audicien verschijnt.

Gebruik dit scherm om uw **voorkeuren voor het delen van gegevens** te wijzigen. Dit houdt in dat u moet kiezen of u uw **gehoorgegevens** met uw audicien wilt delen:

- Beweeg de **schakelknop** naar '**AAN**' (**RECHTS**) om '**Gehoorgegevens te delen**'.

OF

- Beweeg de **schakelknop** naar '**UIT**' (**LINKS**) om uw gehoorgegevens niet te delen.

Share data

☐

Share your hearing aid data, such as usage and interaction details, with your hearing professional.

9. Tik op **Gereed** (bovenaan rechts) om verder te gaan.

Hearing professional


Done

Een sessie op afstand starten

Zodra u TeleHear hebt ingesteld, bent u klaar om een TeleHear-sessie met uw audicien te beginnen.


Om een TeleHear-sessie te starten:

1. Maak samen met uw audicien een afspraak om op afstand verbinding te maken.
2. Wanneer het tijd is voor de afspraak:
 - Zorg ervoor dat uw hoortoestellen verbonden zijn met uw telefoon.
 - Tik op het **Home-scherf** op **Meer**. Tik op het **menuscherf Meer** dat verschijnt op **TeleHear**.

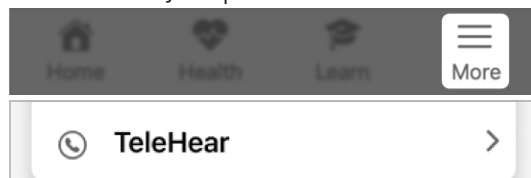

- Tik op het scherm **TeleHear** op de **knop van de audicien** met wie u een sessie wilt hebben. Tik vervolgens op de **knop Start Sessie**.

Your hearing professional

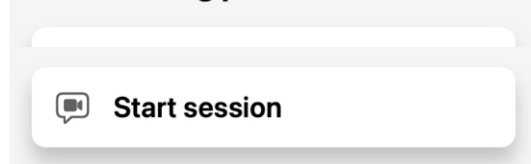

Een sessie op afstand starten

(Als **Val Alarmering** niet 'actief' is/ gebruikt wordt op uw app, ga dan naar **Stap 4.**)

3. Het **venster Val Alarmering uitgeschakeld** verschijnt om u te informeren dat **Val Alarmering** en andere app-functies tijdelijk uitgeschakeld zullen zijn tijdens uw TeleHear-sessie. Tik op **OK**.
4. Als de sessie begint, verschijnt er een **dialogovenster** waarin wordt gevraagd of de app toegang kan krijgen tot uw camera voor de sessie:
 - Tik op **OK** als u wilt dat uw audicien u ziet of **afbeeldingen deelt tijdens uw sessie**.

OF

- Tik op **Niet toestaan** als u niet wilt dat uw audicien u ziet of afbeeldingen deelt. TeleHear heeft alleen toegang tot de microfoon van uw toestel.

Een sessie op afstand starten


Als u de app toegang tot uw camera hebt gegeven, zal uw sessie beginnen met uw camera aan de voorkant '**AAN**'. U ziet alleen uzelf op het scherm totdat uw audicien zich bij de sessie aansluit. Hij/zij zal verschijnen op het scherm en u verschijnt in een kleiner kader.

5. Gebruik uw sessie als een kans om met uw audicien te communiceren terwijl hij/ zij uw hoortoestellen aanpast.


Gebruik de functies van het onderste menu:

Swipe omhoog van de **onderkant van het scherm** om een **bedieningsmenu te zien** dat u kunt gebruiken tijdens het programmeren op afstand. De opties omvatten:


- uw video uit-/inschakelen;

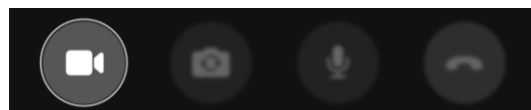

- wisselen tussen camera's voor/achter op uw telefoon;

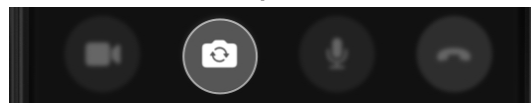


- uw microfoon dempen/inschakelen;

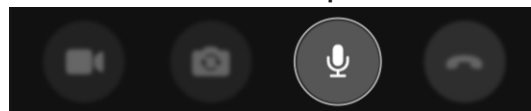


Een sessie op afstand starten

- de sessie op elk moment kunnen beëindigen;

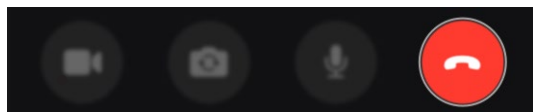


- het huidige programma bekijken;

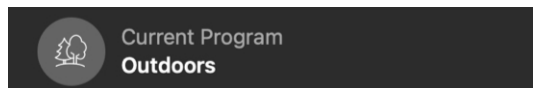

- batterijniveaus van het hoortoestel.



6. Als uw sessie afgerond is, tikt u op de **knop Sessie Beëindigen** (rood telefoonpictogram).

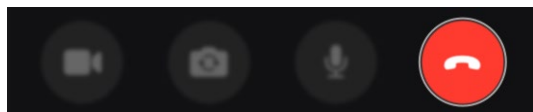

7. Er verschijnt een **dialogovenster** met de vraag of u zeker weet dat u de sessie wilt beëindigen. Tik op **Ja**.

Een hulpverzoek indienen

Als u een geluidsprobleem hebt met uw hoortoestellen, kunt u op afstand hulp krijgen van uw audicien door een hulpverzoek in te dienen via TeleHear.

Opmerking: Voordat u een hulpverzoek begint, moet u ervoor zorgen dat TeleHear op uw app is ingesteld. (Zie **sectie TeleHear-overzicht**.)

Herinnering – Voordat u een hulpverzoek indient, voert u het best een Zelfcheck uit om te bevestigen dat uw hoortoestellen goed werken.

Om een hulpverzoek in te dienen:

1. Tik op het **Home-scherf** op **Meer**.



2. In het **menu Meer** tikt u op **TeleHear**.



3. Aan de onderkant van het **TeleHear-scherf** onder '**Hulpverzoek**' tikt u op **Nieuw hulpverzoek**.

Help request

Before you request help, it is recommended that you run Self Check first to confirm your hearing aids are in working order.

 **New help request**

Een hulpverzoek indienen

4. Het **Hulpverzoek scherm** verschijnt. Lees het **introductiebericht** van de **Berichten-assistent**, en tik dan op **Aan de slag**.

TeleHear

Help request

Messaging Assistant

Hi! Looks like you have a remote help request for your hearing care professional today.

Please begin by describing your sound issue. Answer each question that appears below.

5. De **eerste vraag** verschijnt: **Wat omschrijft uw geluidsprobleem het beste?** Selecteer **een antwoord** en tik dan op **Volgende**.

Which best describes your sound issue? Select one:

Own voice

Tinny / sharp / shrill

Too loud

Too soft / muffled

Other

Next

Een hulpverzoek indienen

6. De **tweede vraag*** verschijnt: **Wat omschrijft ook uw geluidsprobleem?** Selecteer alles dat van toepassing is en tik dan op **Volgende**.

Which also describes your sound issue? To help your hearing care professional find the best solution, select all that apply:

☐ Music

☐ Voices in background noise

☒ Voices - female / children

☐ Voices - male

☐ Other

Next

7. De **derde vraag** verschijnt: **Welk programma moet worden aangepast voor het geluidsprobleem?** Selecteer alles dat van toepassing is en tik dan op **Volgende**. (U moet misschien naar beneden scrollen om al uw programma's te bekijken.)

**Vragen kunnen verschillen op basis van selecties.*

Een hulpverzoek indienen

Which program needs adjusting for the sound issue? Select all that apply:

☒ Personal

☐ Outdoor

☐ Meeting

☒ Car

Next

8. De **vierde vraag** verschijnt:
Welk hoortoestel moet worden aangepast voor het geluidsprobleem? Selecteer een antwoord en tik dan op **Volgende**.

Which hearing aid needs adjusting for the sound issue?

Left

Right

Both

Next

Een hulpverzoek indienen

9. De **Berichten-assistent** vraagt of u nog meer details over uw geluidsprobleem heeft waarvan u wilt dat uw audicien ze weet:

Messaging Assistant

Thank you for describing your sound issue.

If there are any other details you'd like your hearing care professional to know, please send in a message below.

If not, complete this help request.

- Zo **ja**, typ dan een **bericht** in het **veld** aan de onderkant van het scherm. Tik vervolgens op **Verzenden**.

Write a message...



- Is het antwoord **nee**, tik dan op de knop **Maak Hulpverzoek compleet**.

Complete help request

Uw TeleHear-hulpverzoek is voltooid, en uw audicien zal u binnenkort antwoorden.


Een nieuwe geluidsinstelling proberen

Na uw Telehear-hulpverzoek zal uw audicien een aangepaste instelling voor uw hoortoestellen maken en u op de hoogte stellen om deze uit te proberen.


Nadat u deze met uw oude geluidsinstelling hebt vergeleken, hebt u de mogelijkheid om de instelling op te slaan, te weigeren en/of meer wijzigingen aan te vragen. Zodra dit is gebeurd en eventuele problemen zijn opgelost, is uw hulpverzoek voltooid.

Om een nieuwe geluidsinstelling te proberen:

1. Tik op het **Home-scher** op **Programma's**.

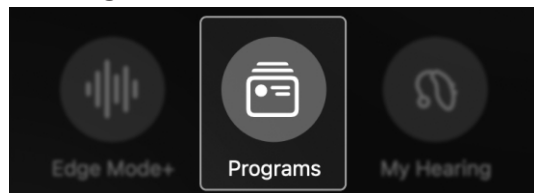


2. Het **menu Programma's** verschijnt. Tik op het **programma dat werd aangepast** door uw audicien. Dit wordt aangegeven door een **rode stip** op het programmapictogram.

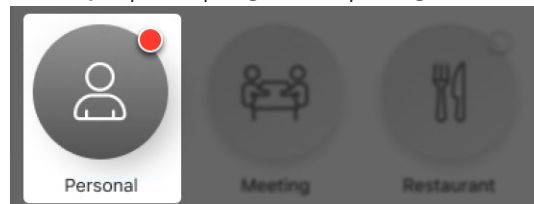


Een nieuwe geluidsinstelling proberen

3. Dit brengt u naar het **Home-scher**, waar u een **knop Nieuw Geluid Proberen** zult zien. Tik **hierop**.

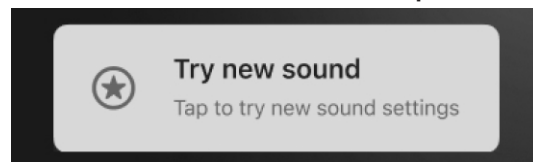

4. Het scherm **Geluidsinstellingen vergelijken** verschijnt. Beluister en vergelijk de nieuwe geluidsinstelling met uw oude (huidige) geluidsinstelling door op **elke toepasselijke knop** te tikken.

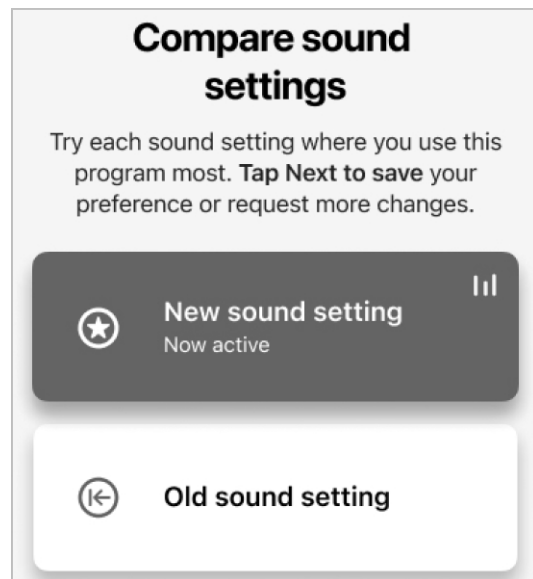


Een nieuwe geluidsinstelling proberen

U hebt nu **2 keuzes**:


- De **nieuwe geluidsinstelling** behouden.
- De **oude geluidsinstelling** behouden.

Om de nieuwe geluidsinstelling te behouden:

1. Tik op de **knop Nieuwe geluidsinstelling**, en tik dan op **Volgende**.

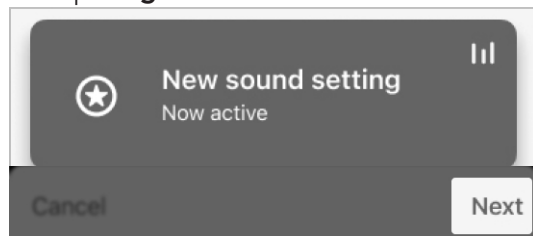


2. Het **scherm Nieuwe geluidsinstelling behouden** verschijnt. Tik op **Geluidsinstelling opslaan**.

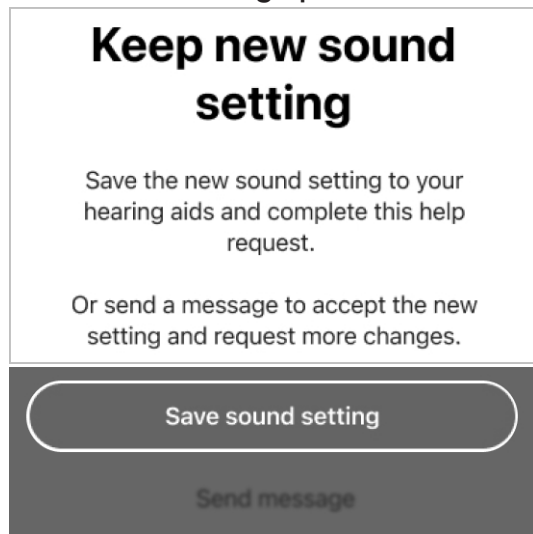

Een nieuwe geluidsinstelling proberen

Opmerking: Als u een bericht wilt verzenden om verdere wijzigingen aan te vragen, tikt u op **Verstuur bericht**. U keert dan terug naar het **scherm TeleHear-hulpverzoek**, waar u uw **verzoek** kunt typen en verzenden.

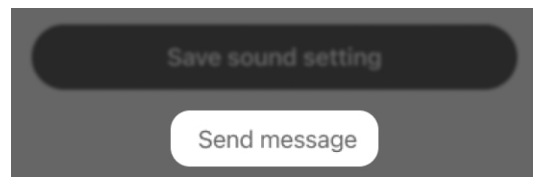

3. De app informeert u dat hij wijzigingen aanbrengt in uw hoortoestellen en voltooit vervolgens uw hulpverzoek. U kunt nu uw **nieuwe geluidsinstelling (programma)** beginnen gebruiken.


Making program changes to your hearing aids

This could take up to 5 seconds.

OF

Om de oude geluidsinstelling te behouden:


1. Tik op de **knop Oude geluidsinstelling**, en tik dan op **Volgende**.

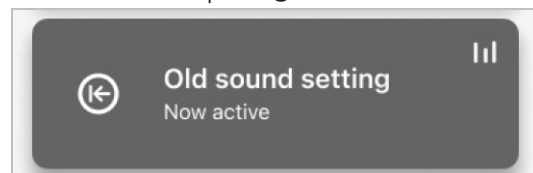


Een nieuwe geluidsinstelling proberen



2. Het **scherm Oude geluidsinstelling behouden** verschijnt. Tik op **Geluidsinstelling opslaan**.

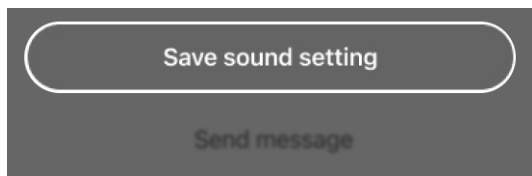

Opmerking: Als u een bericht wilt verzenden om verdere wijzigingen aan te vragen, tikt u op **Verstuur bericht**. U keert dan terug naar het **scherm TeleHear-hulpverzoek**, waar u uw **verzoek** kunt typen en verzenden.

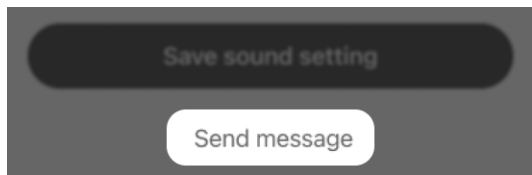

3. De app informeert u dat hij wijzigingen aanbrengt in uw hoortoestellen en voltooit vervolgens uw hulpverzoek. U kunt nu uw **oude geluidsinstelling (programma)** blijven gebruiken.

Making program changes to your hearing aids

This could take up to 5 seconds.

Herinneringen

- Overzicht Herinneringen
- Herinnering maken
- Herinnering bewerken
- Herinnering voltooien

Overzicht Herinneringen

Stel herinneringen in om te streamen door uw hoortoestellen. Dit kan u helpen om belangrijke taken, afspraken en meer bij te houden - zonder dat u ze allemaal hoeft te onthouden.

Stel herinneringen in om:

- medicatie te nemen / voorschriften te verlengen;
- uw hoortoestellen schoon te maken;
- een afspraak te maken;
- te bewegen, en meer.

Herinnering maken

Om een nieuwe herinnering in te stellen:

1. Tik op het **Home-scher** op de knop **Meer**.




2. Het **scherm Meer** verschijnt. Tik op **Herinneringen**.



Opmerking: Als u voor de eerste keer naar de **sectie Herinneringen** gaat, verschijnt er een **Welkomstscher**. Lees dit om meer te weten te komen over Herinneringen, en ga dan naar **Stap 3**.

3. Op het **scherm Herinneringen** dat verschijnt:
 - Kies een **voorbeeldherinnering** uit de lijst. Dit wordt de **titel** van uw nieuwe herinnering en wordt automatisch ingevuld op het volgende scherm.

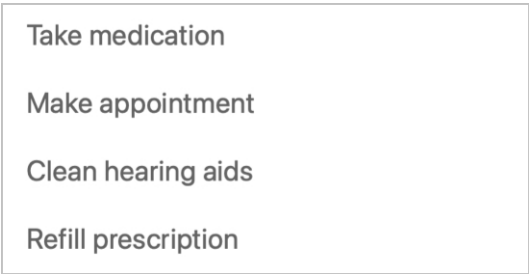

Herinnering maken

OF

- Tik op de **knop Nieuwe herinnering maken** om uw eigen herinnering aan te passen. Typ op het volgende scherm een **titel** voor uw herinnering in de bovenste **lege ruimte**. (U hebt ook nog steeds de optie om hier een **voorbeeldherinnering** te kiezen).

Create new reminder

Remind me to...

SUGGESTIONS

Take medication

Refill prescription

4. Tik op **Toevoegen** bovenaan het scherm.

Cancel

New reminder

Add

5. Selecteer op het **volgende scherm timingopties** voor uw herinneringen en volg de aanwijzingen voor elk. De opties omvatten:
- **datum (maand, dag, jaar);**
 - **tijd;**
 - **herhalen (hoe vaak de herinnering zal plaatsvinden).**

Herinnering maken

Date

Today

Time

9:41 AM

Repeat

Never

6. Verplaats de **schakelknop Hoorbare herinnering naar 'AAN' (RECHTS)** of **'UIT' (LINKS)**. Dit geeft u de optie om uw herinnering mondeling naar uw hoortoestellen te sturen; of niet.

Audible reminder

7. Tik aan de bovenkant van uw scherm op **Toevoegen** om uw herinnering te bewaren.

Cancel

New reminder

Add

Herinnering bewerken

Om een bestaande herinnering te wijzigen:


1. Tik op het **Home**-scherm op de knop **Meer**.



2. Tik op het scherm **Meer** dat verschijnt op **Herinneringen**.




3. Er verschijnt een **lijst van al uw herinneringen**. Tik op de **herinnering die u wilt bewerken**.

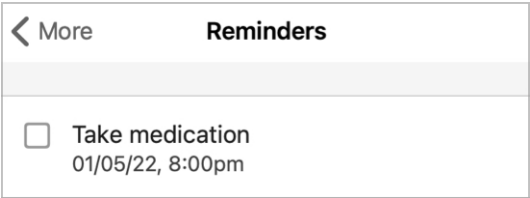


4. Typ of tik in het scherm **Details** op de **opties die u wilt bewerken**. U kunt desgewenst ook de **schakelknop Hoorbare herinnering naar 'AAN' (RECHTS) of 'UIT' (LINKS)** zetten.

Herinnering bewerken

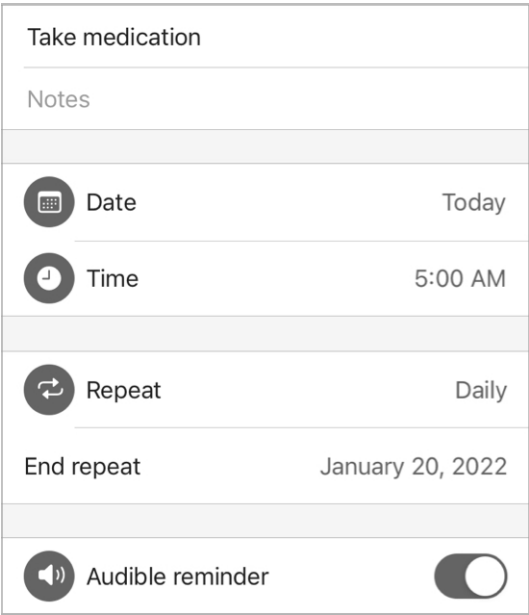

5. Wanneer u klaar bent met bewerken, tikt u op **Gereed** om uw **bijgewerkte herinnering** te bewaren.

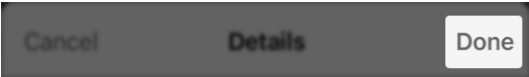

Herinnering voltooien

Om een herinnering als ‘voltooid’ te markeren nadat u de herinneringstaak hebt voltooid:



1. Tik op het **Home-scher** op de **knop Meer**.



2. Tik op het **scherm Meer** dat verschijnt op **Herinneringen**.




3. Selecteer in de **lijst met uw herinneringen**, het **selectievakje** naast een rood gemarkeerde herinnering. Dit betekent dat de herinnering is afgeleverd, maar niet als ‘**compleet**’ is gemarkeerd.

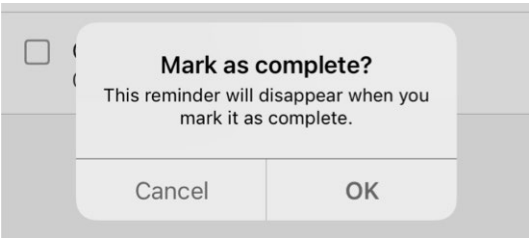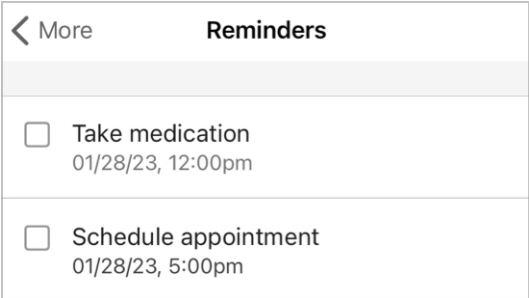

Herinnering voltooien

4. Nadat u de taak als voltooid hebt gemarkeerd door het **selectievakje** in te schakelen, verdwijnt de gemarkeerde herinnering uit de lijst met herinneringen.

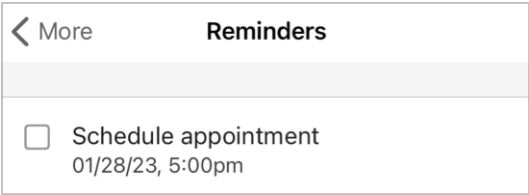

Smart Assistant

Smart Assistant

Met **Smart Assistant** kunt u handsfree hulp krijgen door uw stem te gebruiken. Stel vragen of zeg commando's om de instellingen van het hoortoestel te regelen, herinneringen in te stellen en nog veel meer.

Smart Assistant kan u helpen bij de volgende dingen:

- **problemen** met uw hoortoestellen of accessoires oplossen;
- **volume, programma's, herinneringen** en meer wijzigen;
- **uw telefoon vinden** (zeg woorden zoals 'vind mijn telefoon' of 'ik ben mijn telefoon kwijt' en Smart Assistant kan u helpen hem te vinden door de beltoon van uw telefoon af te spelen en zo de locatie te onthullen. Zelfs als uw telefoon vergrendeld is of op stil staat).

Om Smart Assistant te gebruiken:

1. Tik op het **Home**-scherm op het **pictogram Smart Assistant (microfoon)** in de rechterbovenhoek van het scherm.



Smart Assistant

OF

Als u **Dubbeltik bediening** hebt ingesteld op Smart Assistant, **dubbeltik dan op uw hoortoestel**.

U hoort een **toon** door uw hoortoestellen wanneer Smart Assistant luistert.

2. Gebruik **uw stem** om een **vraag** te stellen of een **bevel** te geven. De taal hoeft niet specifiek te zijn. Voorbeelden: 'Volume verhogen.'

Smart Assistant voert uw **bevel** uit of zoekt naar een **antwoord** op uw vraag vanuit de hulpbestanden van deze app of internet-/cloudgebaseerde diensten.

Reacties kunnen verschijnen als:

- hulpbestandsinformatie op het scherm (van deze app);
- verbale reacties via uw hoortoestellen.

Vertalen

Vertalen

Met **Vertalen** kunt u eenvoudig communiceren met iemand die een andere taal spreekt. Stuur een vertaald bericht en krijg een vertaald antwoord gestreamd naar uw hoortoestellen.

Hoe Vertalen werkt

Kies uw taal en de taal van de andere persoon in deze app. Spreek vervolgens in uw telefoon. Deze app vertaalt uw spraak en geeft het weer als tekst in de taal van de andere persoon.

Wanneer de andere persoon uw bericht in hun taal ziet, gebruikt hij/zij zijn/haar stem om in uw telefoon te antwoorden. Deze app vertaalt dan zijn/haar spraak en streamt het naar uw hoortoestellen in uw taal.


Om Vertalen te gebruiken:

1. Tik op het **Home-scher**m op **Meer**.




2. Tik op het **menuscherm Meer** dat verschijnt op **Vertalen**. De **taalkiezer** aan de linkerkant wordt standaard ingesteld op de taal van uw telefoon. Dit is de taal die u op dat moment spreekt.


Vertalen

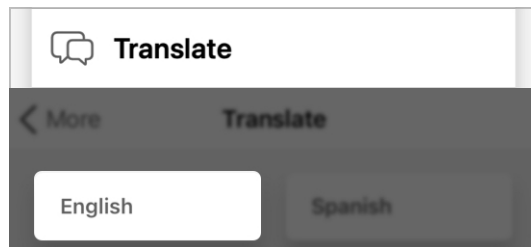

3. Selecteer met de **taalkiezer** rechts de **taal die u wilt vertalen**.

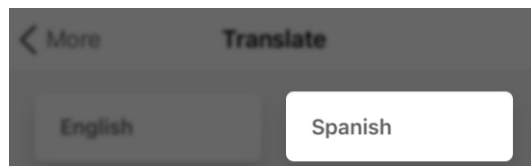


4. Tik op het **microfoonpictogram** en begin in de microfoon van uw telefoon te spreken. De app herkent uw taal en geeft deze weer in het **eerste vak, 'Uw taaltekst'**.

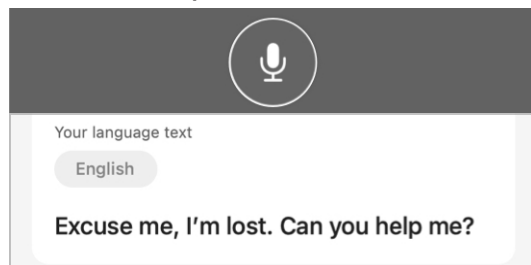


Vertalen

5. **Uw taaltekst** wordt onmiddellijk vertaald en weergegeven in het **tweede vak, 'Vertaalde tekst'**.

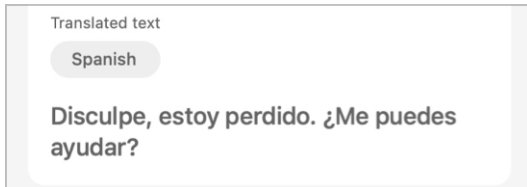

6. U kunt de vertaalde tekst laten zien aan de persoon die de andere taal spreekt. Wanneer hij/zij reageert door in uw telefoon te spreken, toont de app zijn/haar spraak. U hoort de vertaalde tekst ook in uw eigen taal via uw hoortoestellen.
7. Om te stoppen met vertalen, tikt u opnieuw op het **microfoonpictogram**.

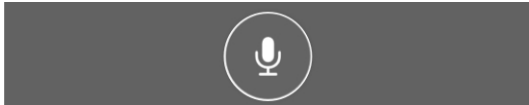

Spraak naar tekst

Spraak naar tekst

Met **Spraak naar tekst** kunt u gesproken woorden als tekst op uw telefoon weergeven. Gebruik dit om gesprekken of spraakmemo's te om te zetten van spraak naar tekst.

Hoe Spraak naar tekst werkt


Wanneer u of anderen in uw telefoon spreken, geeft uw app de spraak als tekst weer op uw scherm. U kunt de omgezette tekst ook opslaan, sms'en, kopiëren of e-mailen.

Om Spraak naar tekst te gebruiken:

1. Tik op het **Home-scherf** op **Meer**.



2. Tik op het **menuscherm Meer** dat verschijnt op **Spraak naar tekst**. De **taalkiezer** wordt standaard ingesteld op de taal van uw telefoon. Dit is de taal die u op dat moment spreekt.

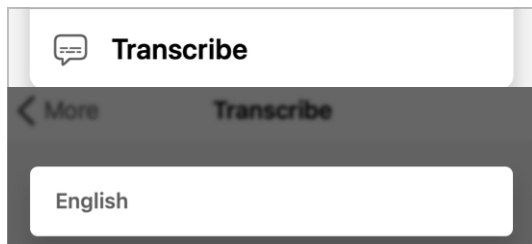


Spraak naar tekst

3. Tik op het **microfoonpictogram**:

- Spreek in de microfoon van de telefoon.


OF

- Plaats de telefoon dicht bij diegene die aan het woord is.

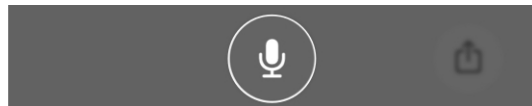


Spraak naar tekst 'luistert' onmiddellijk naar spraak. Terwijl het spraak 'hoort', geeft Spraak naar tekst het weer als tekst op uw telefoon, zodat u het kunt lezen.

4. De tekst blijft verschijnen en het scherm scrollt terwijl de spraak wordt vastgelegd.

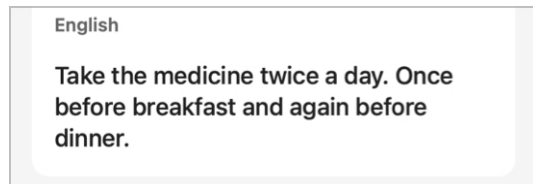


5. Om te stoppen met spraak naar tekst, tikt u opnieuw op het **microfoonpictogram**.

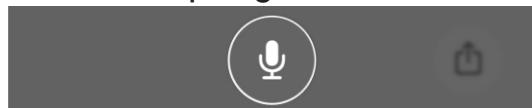

Spraak naar tekst

6. Om de transcriptie op te slaan of te delen (via sms of e-mail), tikt u op het **vierkante 'deelpictogram'** aan de onderkant rechts van uw scherm. Er verschijnt een **menu Delen**, met opties voor opslaan, delen en kopiëren.

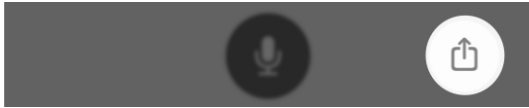

Aanvullende richtlijnen

- Veiligheidsinformatie
- Informatie over regelgeving

Veiligheidsinformatie

We zijn wettelijk verplicht de volgende waarschuwingen te geven:

⚠️ WAARSCHUWING: We bevelen u aan zichzelf vertrouwd te maken met de aanmeetsoftware, voor de veiligheid en het juiste gebruik ervan. Aanvullende hulpmiddelen zoals gedetailleerde aanmeethandleidingen en online cursussen zijn beschikbaar via de Prosite.

Wees extra voorzichtig bij het instellen van de tinnitusstimulans, en controleer of het stimulansniveau nog wel comfortabel is voor de patiënt.

Wees voorzichtig bij het aanmeten van een vermogensinstrument waarvan het maximale geluidsdrukvermogen meer bedraagt dan 132 dB SPL, aangezien u hiermee schade aan het gehoor van de patiënt kunt veroorzaken.

Volg de instructies voor het verwijderen van de hoortoestellen uit het oor van de patiënt bij bepaalde procedures zoals het bijwerken van de firmware.

Elk ernstig incident in verband met uw Starkey-toestel moet worden gemeld aan de lokale vertegenwoordiger van Starkey en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin u bent gevestigd. Een ernstig incident wordt gedefinieerd als elke slechte werking, verslechtering van de kenmerken en/of prestaties van het toestel of onvolkomenheid in de handleiding/etikettering van het toestel die de dood of een ernstige verslechtering van de gezondheidstoestand van de gebruiker tot gevolg kan hebben OF dit bij herhaling kan doen.

Bedoeld gebruik

De mobiele app voor hoortoestellen is een medisch softwareproduct waarmee een gebruiker op afstand het volume, de geheugenselectie, dempen/inschakelen, starten/stoppen met media streaming en de tinnitusmaskeerfunctie van draadloze 2,4 GHz-hoortoestellen van Starkey kan regelen. Het biedt ook een mobiele telefooninterface voor deze hoortoestellen en stelt de gebruiker in staat om zijn iOS- of Android-toestel te gebruiken als audiostreamingtoestel.

Indicaties voor gebruik

De mobiele app voor hoortoestellen is een optioneel programma voor patiënten die draadloze 2,4 GHz hoortoestellen van Starkey gebruiken en die een iOS- of Android-toestel willen gebruiken als afstandsbediening, mobiele telefooninterface of mediastreamer.

Informatie over regelgeving

Starkey Laboratories, Inc.
6700 Washington Ave. South
Eden Prairie, MN 55344 VS



Starkey Laboratories (Germany) GmbH
Weg beim Jäger 218-222
22335 Hamburg
Duitsland



Afval van elektronische apparatuur moet volgens de plaatselijke regelgeving worden behandeld



Raadpleeg de gebruikershandleiding



Medisch apparaat



2797



Voor een elektronische versie van deze gebruikershandleiding, gaat u naar <https://i.strky.co/my-userguide/en>.

Voor informatie over hoe we gebruikersgegevens beschermen, gaat u naar www.starkey.com/privacy-and-terms.

Android en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC. Het Bluetooth®-woordmerk en de logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Starkey is onder licentie.

Het gebruik van de Made for Apple-badge betekent dat een accessoire specifiek is ontworpen voor aansluiting op het/de in de badge vermelde Apple-product(en) en door de ontwikkelaar is gecertificeerd om te voldoen aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit toestel of de naleving van veiligheidsnormen en regelgeving. Apple, het Apple-logo, en App Store zijn handelsmerken van Apple Inc, geregistreerd in de VS en andere landen. iOS is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Cisco in de VS en andere landen en wordt onder licentie gebruikt.

TeleHear, Hear Share en Edge Mode zijn handelsmerken van Starkey Laboratories, Inc.

Alle handelsnamen en handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.