


دليل المستخدم لجهاز التحكم عن بعد 2T الخاص بك

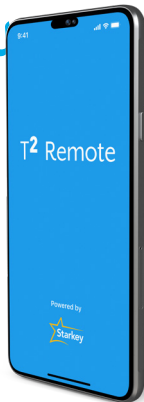

احصل على السيطرة الكاملة على أجهزة السمع الخاصة بك لمساعدتك على السمع
بشكل أفضل والعيش بشكل أفضل

جدول المحتويات

1. ابدأ الآن

التوافق

3 _____

2. نظرة عامة على الصفحة الرئيسية

4 _____

3. معلومات

حول والخصوصية

6 _____

4. إرشادات إضافية

معلومات السلامة

7 _____

معلومات تنظيمية

9 _____

التوافق

للحصول على أفضل أداء، نوصي باستخدام أحدث إصدار من البرنامج المتاح لجهازك.

تفاحة

آيفون، آيباد، آيبود

- يعمل التطبيق على جميع إصدارات iOS و iPadOS 0.61 أو الأحدث.


أندرويد

- يعمل التطبيق على جميع إصدارات أندرويد 0.8 أو الأحدث.

نظرة عامة على الصفحة الرئيسية

اكتشف الميزات الرئيسية التي تعزز استخدام جهاز السمع الخاص بك على الشاشة الرئيسية.

1. مستوى صوت مكبر الهاتف
2. برنامج
3. الحجم
4. كتم / إلغاء الكتم
5. الرئيسية
6. معلومات: جولة التطبيق، دعم العملاء، دليل المستخدم داخل التطبيق

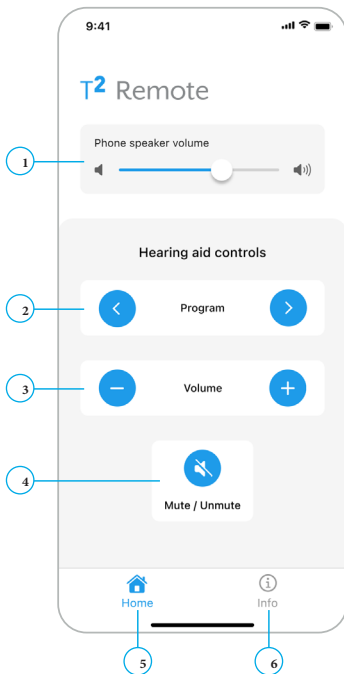

شاشة حول والخصوصية الخاصة بك تتيح لك عرض معلومات عن هذا التطبيق، إرشادات المستخدم والاتفاقيات. وتشمل هذه:

- حول

هذا يزودك بمعلومات عن هدف تطبيقك وشركة تصنيع التطبيق، مختبرات ستاري، إنك.

- سياسة الخصوصية

هذا يصف حقك في الخصوصية وفقًا لقوانين الخصوصية والحماية.

- اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي (EULA)

هذه اتفاقية مع الشركة المصنعة حول طرق استخدام التطبيق.

- الموافقات

يتيح لك هذا مراجعة وتعديل أذوناتك لمشاركة أنواع محددة من البيانات. الموافقة على مشاركة التحليلات تسمح لمصنع التطبيق بإجراء تحسينات من خلال جمع بيانات حول كيفية استخدام التطبيق.

معلومات السلامة

⚠ تحذير: يجب ألا يكون الصوت الصادر مرنجًا أو مؤلمًا. يجب عليك خفض مستوى الصوت أو إزالة الجهاز إذا كان الصوت مرتفعًا بشكل مرنج أو مؤلم. إذا كنت بحاجة باستمرار إلى خفض مستوى الصوت، فقد تحتاج إلى ضبط جهازك بشكل أكبر.

إشعار هام لمستخدمي أجهزة السمع المحتملين:

من الممارسات الصحية الجيدة للشخص الذي يعاني من فقدان السمع أن يخضع لتقييم طبي من قبل طبيب مريض (ويفضل أن يكون طبيبًا متخصصًا في أمراض الأذن) قبل شراء جهاز سمع بوصفة طبية. يُشار غالبًا إلى الأطباء المخصصين المتخصصين في أمراض الأذن بأطباء الأذن والحنجرة، أو أطباء الأذن، أو أطباء الأنف والأذن والحنجرة. الهدف من التقييم الطبي هو التأكد من تحديد وعلاج جميع الحالات الطبية التي يمكن علاجها والتي قد تؤثر على السمع قبل شراء جهاز السمع.

بعد التقييم الطبي، سيقدّم لك الطبيب بيانًا مكتوبًا يوضح أن فقدان السمع لديك قد تم تقييمه طبيًا وأنه قد يتم اعتباره مرشحًا لسماعة طبية. سيقوم الطبيب بإحالتك إلى أخصائي سمعيات أو موزع سماعات طبية، حسب الاقتضاء، لإجراء تقييم لسماعة الأذن.

سيقوم أخصائي السمع أو موزع أجهزة السمع بإجراء تقييم لجهاز السمع لتقييم قدرتك على السمع مع جهاز السمع وبدونه.

سيمكن تقييم جهاز السمع أخصائي السمعيات أو الموزع من اختيار وتركيب جهاز سمع يناسب احتياجاتك الفردية.

إذا كانت لديك تحفظات بشأن قدرتك على التكيف مع التخصيص، يجب أن تستفسر عن توفر برنامج تجربة أو استئجار أو خيار شراء. يقدم العديد من موزعي أجهزة السمع الآن برامج تتبع لك ارتداء جهاز سمع لفترة زمنية مقابل رسوم رمزية، ويعدها يمكنك أن تقرر ما إذا كنت ترغب في شراء جهاز السمع.

في بعض المناطق الجغرافية، يجب أن تخضع لتقييم طبي قبل شراء جهاز سمعي بوصفة طبية. تسمح بعض الولايات للبائعين بالتنازل عن التقييم الطبي.

لن يعيد جهاز السمع السمعي الطبيعي ولن يمنع أو يحسن ضعف السمع الناتج عن حالات عضوية. استخدام جهاز السمع هو جزء فقط من تأهيل السمع وقد يحتاج إلى أن يُكمل بالتدريب السمعي والتعليم على قراءة الشفاه. في معظم الحالات، لا يسمح الاستخدام غير المتكرر لجهاز السمع للمستخدم بالاستفادة الكاملة منه.

⚠ تحذير: إذا تم ضبطه على أقصى مستوى إخراج وارتدّي لفترات زمنية تتجاوز التوصيات أدناه، فإن تعرض المريض للطاقة الصوتية قد يتجاوز حدود التعرض للضوضاء. هذا الجهاز مخصص للاستخدام لمدة أقصاها ستة عشر (61) ساعة يوميًا عند ضبطه على أقصى مستوى إخراج.

الإبلاغ عن الأحداث السلبية

يجب الإبلاغ عن أي حادث خطير حدث فيما يتعلق بجهاز ستاركي الخاص بك إلى ممثل ستاركي المحلي والسلطة المختصة في الدولة العضو التي تتواجد فيها. يُعرف الحادث الخطير بأنه أي عطل أو تدهور في خصائص الجهاز وأو أدائه، أو قصور في دليل تشغيل الجهاز/الوسم الذي قد يؤدي إلى الوفاة أو تدهور خطير في حالة صحة المستخدم، أو قد يؤدي إلى ذلك عند التكرار.

الاستخدام المقصود

جهاز التحكم عن بُعد 2T مخصص لتمكين المستخدم من التحكم عن بُعد في مستوى الصوت، اختيار البرنامج، وتم/إلغاء/كتم أجهزة السمع المدعومة بتقنية 2T.

مؤشرات الاستخدام

جهاز التحكم عن بُعد 2T هو برنامج اختياري مخصص للمرضى الذين يستخدمون أجهزة السمع المزودة بتقنية 2T والذين يرغبون في استخدام جهاز iOS أو Android ليعمل كجهاز تحكم عن بُعد.

المستخدم المقصود وبيئة المستخدم

الأشخاص العاديون في بيئة منزلية.

الفائدة السريرية

جهاز التحكم عن بُعد 2T نفسه لا يوفر فائدة سريرية مباشرة. يتم توفير فائدة سريرية غير مباشرة من خلال تمكين أجهزة السمع من تحقيق الغرض المقصود منها.

تعليمات الاستخدام تنطبق على ما يلي:

- ستاري: بيكاسو، إيفولف إيه آي، جينيسيس إيه آي، سلسلة التوقيع، إيدج إيه آي، سلسلة جي إيه آي، أوميغا إيه آي
- أوديبيل: دافنشي، أرك إيه آي، إنترغ إيه آي، سلسلة التوقيع، فيتالتي إيه آي، سلسلة A إيه آي، أريس إيه آي
- نواير: كانفاس، سافانت، بي إن إكس جي إيه آي، سلسلة التوقيع، إيدج إيه آي، سلسلة بي إيه آي، نوبل إيه آي
- مايكروتيك: بورتريه، مايكروتيك إنفي، إم بي إن جي إكس إيه آي، سلسلة التوقيع، إيدج إيه آي
- النوع: KINDvitalo و KINDvaro، KINDviano، x.KINDviano
- برو أكوستيكا: آي برو AI
- تليفونك: فايشن 2-01FT، X، 2-8FT، 5-7FT، X، 2-5FT، X، 2-3FT، X
- أوديجي: AGXs، pi AGXs، AI Evolv AGXs، AI Genesis AGXs، سلسلة Signature، AI Edge، سلسلة AI G، AI Omega

إشعار أمني

- بيانات المرضى خاصة وحمايتها مهمة، لذا يرجى الرجوع إلى ما يلي:
- تأكد من تحديث الهواتف الذكية بأحدث تحديثات أمان نظام التشغيل.
 - تأكد من أن نسخة التطبيق المثبتة لديك محدثة.
 - استخدم تطبيقات ستاري فقط من المتاجر الرسمية مع أجهزة السمع الخاصة بك.
 - تأكد من أن التطبيقات المثبتة تمتلك فقط الأذونات التي نحتاجها.
 - لا تستخدم هاتفاً مخترقاً لضمان بقاء البيانات آمنة في جميع الأوقات.
 - احجم نسخ احتياطية لهاتفك الذي من فقدان البيانات والسرقة.
 - قم بحذف جميع البيانات من الهاتف الذي إذا لم يعد سيتم استخدامه من قبلك أو سيتم التخلص منه.

يرجى ملاحظة أن هذه ليست قائمة شاملة.

المعلومات التنظيمية

للحصول على الخدمة أو الإصلاح، يرجى الاتصال بأخصائي رعاية السمع الخاص بك أولاً. إذا لزم الأمر، يمكنك إرسال أجهزة السمع الخاصة بك إلى:

" الشركة المصنعة وفقاً لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية ولوائح الأجهزة الطبية للاتحاد الأوروبي 547/7102 ستاري، شركة

0076 شارع واشنطن الجنوبي

إيدن بري، مينيسوتا 44355 الولايات المتحدة الأمريكية

com.starkey.www



شخص المفوض في المملكة المتحدة:

ستاري المملكة المتحدة

مختبرات ستاري (ألمانيا) ذات المسؤولية المحدودة، نينغ بيغر 812-222n/53322 هامبورغ ألمانيا

طريق بير، هازل جروف

ستوكبورت XBS 7KS، المملكة المتحدة

uk.co.starkey.www



شركة QUNIQUE ذات المسؤولية

المحدودة

شارع محطة القطار 71

0165 ووهلن

الشركة المصنعة وفقاً لهيئة الصحة الكندية

شركة ستاري لايز كندا

103 طريق أرجنتيا، الجناح 6742

ميسيسوجا، أونتاريو IM6 NSL

ca.starkeycanada.www

رقم الرمز	المعيار المعمول به	معنى الرمز	رمز
1.1.5	1202:1-32251 ISO EN BS	الشركة المصنعة	
2.1.5	1202:1-32251 ISO EN BS	الممثل للمفوض في الجماعة الأوروبية	
8.1.5	1202:1-32251 ISO EN BS	المستورد	
3.1.5	1202:1-32251 ISO EN BS	بلد الصنع	
3.1.5	1202:1-32251 ISO EN BS	تاريخ الصنع	
6.1.5	1202:1-32251 ISO EN BS	رقم الكتالوج	
7.1.5	1202:1-32251 ISO EN BS	الرقم التسلسلي	
7.7.5	1202:1-32251 ISO EN BS	جهاز طبي	
4.3.5	1202:1-32251 ISO EN BS	حافظ على الجفاف	
7.3.5	1202:1-32251 ISO EN BS	حد درجة الحرارة	
8.3.5	1202:1-32251 ISO EN BS	تحديد الرطوبة	
4.4.5	1202:1-32251 ISO EN BS	تحذير	
100W-0107 ISO	EC 10606:1- رقم للمرجع الجدول 2.D، علامة السلامة 2	علامة تحذير عامة	
200M-0107 ISO	EC 10606:1- رقم للمرجع الجدول 2.D، علامة السلامة 01	راجع دليل التعليمات/الكتيب	
للمنتج المتاح	التوجيه 91/2 102/الاتحاد الأوروبي (التفصيلات الإلكترونية)	أجمع بشكل منفصل	
الرمز 9 (71406 IEC 2715)	رقم للمرجع IEC 71406 الجدول 1.D	معدات من الفئة الثانية	
غير متوفر	2102:1.7144 NZS/AS	علامة الامتثال التنظيمي (RCM)	
غير متوفر	المرسوم التقني رقم 816 لعام 2002، مع تعديلات (الوائح الأجهزة الطبية في المملكة المتحدة 2002)	علامة UKCA	
غير متوفر	القانون الياباني للإذاعة	علامة جينيبي	
IEC 1305-71406	رقم للمرجع IEC 10606:1- الجدول 1.D	التيار المستمر	
للمنح 4-VII	توجيه البرلمان الأوروبي والمجلس EC/26/49	رمز إعادة التدوير	
للمنح 4-VII	توجيه البرلمان الأوروبي والمجلس EC/26/49	رمز إعادة التدوير للمعدات الكهربائية وبطاريات المحموة	
الرمز 2	الجدول 3.D من المعيار IEC 10606 (IEC 92506)	رمز شهادة NOM	
الرمز 2	الجدول 3.D من المعيار IEC 10606 (IEC 92506)	درجة الحماية	
		علامة KOC الكورية	
8.7.5	1202:1-32251 ISO EN BS	الترجمة	

[illegible]



للوصول إلى نسخة إلكترونية من دليل المستخدم هذا، يرجى زيارة: <https://eifu/com.starkey.eifu/>

CE
2797

ستاري هي علامات تجارية لشركة مختبرات ستاري، إنك.

© 2020 مختبرات ستاري، شركة. جميع الحقوق محفوظة. 52/11 56300000P XX-EN-10-1623TLKB براءة اختراع: patents.com.starkey.www