


Ihr T2-Fernbedi- enungs-

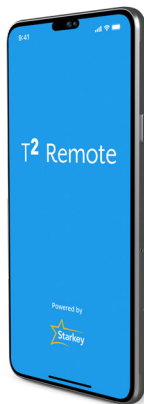

Erhalten Sie die volle Kontrolle über Ihre
Hörgeräte, um besser zu hören und besser zu

Inhaltsverzeichnis

1. Loslegen

Kompatibilität.....	3
---------------------	---

2. Übersicht Startseite..... 4

3. Info

Über & Datenschutz.....	6
-------------------------	---

4. Zusätzliche Anleitung

Sicherheitsinformationen.....	7
-------------------------------	---

Regulatorische Informationen.....	9
-----------------------------------	---

Kompatibilität

Für beste Leistung empfehlen wir, die aktuellste verfügbare Softwareversion für Ihr Gerät zu verwenden.

Apfel

iPhone, iPad, iPod

- Die App läuft auf allen Versionen von iOS & iPadOS 16.0 oder höher.


Android

- Die App läuft auf allen Versionen von Android 8.0 oder höher.

Startseitenübersicht

Finden Sie die wichtigsten Funktionen, die Ihre Nutzung des Hörgeräts verbessern, auf dem **Startbildschirm**.

1. Lautstärke des Telefonlautsprechers
2. Programm
3. Lautstärke
4. Stummschalten / Stummschaltung aufheben
5. Startseite
6. Info: *App-Tour, Kundensupport, In-App-*

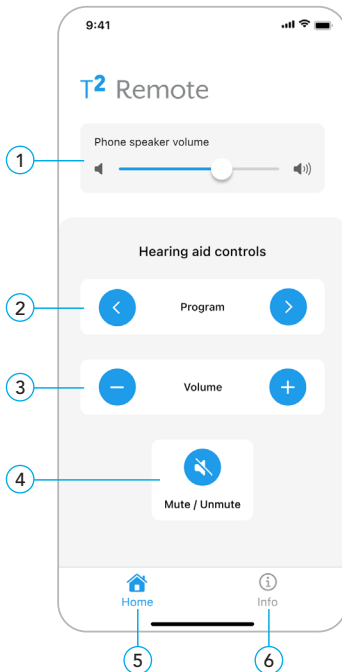

Ihr **Über & Datenschutz** -Bildschirm ermöglicht es Ihnen, Informationen über diese App, Benutzerleitlinien und Vereinbarungen einzusehen. Diese umfassen:

- **Über**

Diese Informationen geben Ihnen Auskunft über den Zweck Ihrer App und den App-Hersteller, Starkey Laboratories, Inc.

- **Datenschutzerklärung**

Dies beschreibt Ihr Recht auf Privatsphäre gemäß den Datenschutz- und Schutzgesetzen.

- **EULA (Endbenutzer-Lizenzvereinbarung)**

Dies ist eine Vereinbarung mit dem Hersteller über die Nutzungsbedingungen der App.

- **[TRANSLATION FAILED - ORIGINAL TEXT: Consents]**

 **VORSICHT:** Die Klangwiedergabe sollte weder unangenehm noch schmerzhaft sein. Sie sollten die Lautstärke verringern oder das Gerät abnehmen, wenn der Klang unangenehm laut oder schmerzhaft ist. Wenn Sie die Lautstärke ständig reduzieren müssen, sollten Sie Ihr Gerät weiter anpassen.

WICHTIGER HINWEIS FÜR POTENZIELLE HÖRGERÄTEBENUTZER:

Es ist eine gute gesundheitliche Praxis für eine Person mit Hörverlust, vor dem Kauf eines verschreibungspflichtigen Hörgeräts eine medizinische Untersuchung durch einen zugelassenen Arzt (vorzugsweise einen Arzt, der auf Erkrankungen des Ohrs spezialisiert ist) durchführen zu lassen. Zugelassene Ärzte, die auf Erkrankungen des Ohrs spezialisiert sind, werden oft als Hals-Nasen-Ohren-Ärzte, Otologen oder Otorhinolaryngologen bezeichnet. Der Zweck der medizinischen Untersuchung besteht darin, sicherzustellen, dass alle medizinisch behandelbaren Zustände, die das Hören beeinträchtigen können, erkannt und behandelt werden, bevor das Hörgerät gekauft wird.

Nach der medizinischen Untersuchung wird Ihnen der Arzt eine schriftliche Bescheinigung ausstellen, die bestätigt, dass Ihr Hörverlust medizinisch beurteilt wurde und dass Sie als Kandidat für ein Hörgerät in Betracht gezogen werden können. Der Arzt wird Sie, je nach Bedarf, an einen Audiologen oder Hörgeräteakustiker zur Hörgeräteanpassung überweisen.

Der Audiologe oder Hörgeräteakustiker wird eine Hörgerätebewertung durchführen, um Ihre Hörfähigkeit mit und ohne Hörgerät zu beurteilen.

Die Hörgerätebewertung ermöglicht es dem Audiologen oder Hörgeräteakustiker, ein Hörgerät auszuwählen und an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen.

Wenn Sie Bedenken hinsichtlich Ihrer Fähigkeit haben, sich an die Verstärkung anzupassen, sollten Sie sich nach der Verfügbarkeit eines Probe-Miet- oder Kaufoptionsprogramms erkundigen. Viele Hörgeräteakustiker bieten inzwischen Programme an, die es Ihnen ermöglichen, ein Hörgerät für eine bestimmte Zeit gegen eine geringe Gebühr zu tragen, nach der Sie entscheiden können, ob Sie das Hörgerät kaufen möchten.

In einigen Regionen ist vor dem Kauf eines verschreibungspflichtigen Hörgeräts eine medizinische Untersuchung erforderlich. Einige Bundesstaaten erlauben es Erwachsenen, auf die medizinische Untersuchung zu verzichten.

Ein Hörgerät stellt das normale Hören nicht wieder her und verhindert oder verbessert keine Hörbeeinträchtigung, die durch organische Ursachen bedingt ist. Die Verwendung eines Hörgeräts ist nur ein Teil der Hörrehabilitation und muss möglicherweise durch Hörtraining und Lippenleseunterricht ergänzt werden. In den meisten Fällen erlaubt die seltene Nutzung eines Hörgeräts dem Benutzer nicht, den vollen Nutzen daraus zu ziehen.

 **VORSICHT:** Wenn das Gerät auf die maximale Ausgangsleistung eingestellt

ist und über die unten empfohlenen Zeiträume hinaus getragen wird, kann die Schallenergieexposition des Patienten die zulässigen Lärmbelastungsgrenzen überschreiten. Dieses Instrument ist für eine maximale tägliche Nutzungsdauer von sechzehn (16) Stunden bei maximaler Ausgangsleistung vorgesehen.

Meldung von unerwünschten Ereignissen

Jeder schwerwiegende Vorfall, der im Zusammenhang mit Ihrem Starkey-Gerät aufgetreten ist, sollte Ihrem örtlichen Starkey-Vertreter und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem Sie niedergelassen sind, gemeldet werden. Ein schwerwiegender Vorfall wird definiert als jede Fehlfunktion, Verschlechterung der Eigenschaften und/oder Leistung des Geräts oder Unzulänglichkeit in der Bedienungsanleitung/Etikettierung des Geräts, die zum Tod oder zu einer ernsthaften Verschlechterung des Gesundheitszustands des Benutzers führen könnte ODER dies bei Wiederholung tun könnte.

Verwendungszweck

Die T2-Fernbedienung soll es einem Benutzer ermöglichen, die Lautstärke, Programmauswahl sowie das Stummschalten/Aufheben der Stummschaltung von T2-fähigen Hörgeräten aus der Ferne zu steuern.

Anwendungsgebiete

Die T2-Fernbedienung ist ein optionales Programm, das für Patienten vorgesehen ist, die T2-fähige Hörgeräte verwenden und ein iOS- oder Android-Gerät als Fernbedienung nutzen möchten.

Beabsichtigter Benutzer und Benutzerumgebung

Laienpersonen in einer häuslichen Umgebung.

Klinischer Nutzen

Die T2-Fernbedienung selbst bietet keinen direkten klinischen Nutzen. Ein indirekter klinischer Nutzen wird dadurch erzielt, dass die Hörgeräte ihre beabsichtigte Funktion erfüllen können.

Gebrauchsanweisung gilt für Folgendes:

- Starkey: Picasso, Evolv KI, Genesis KI, Signature Series, Edge KI, G Series KI, Omega KI
- Audibel: DaVinci, Arc AI, Intrigue AI, Signature-Serie, Vitality AI, A Series AI, Aris AI
- NuEar: Canvas, Savant, NE NXG KI, Signature Series, Edge KI, NE Series KI, Nobel KI
- MicroTech: Portrait, MicroTech Envy, MT NGX AI, Signature Series, Edge AI
- KIND: KINDvitalo & KINDvaro, KINDviano x, KINDviano
- Pro Akustik: ipro AI
- Telefunken: Vation & TF10-2 Plus X, TF8-2 Plus, TF7-5 Plus X, TF5-2 Plus X, TF3-2 Plus X
- Audigy: AGXs pi, AGXs Evolv KI, AGXs Genesis KI, Signature Series, Edge KI, G Series KI, Omega KI

Sicherheitshinweis

Patientendaten sind vertraulich und deren Schutz ist wichtig, daher beachten Sie bitte Folgendes:

- Stellen Sie sicher, dass Smartphones mit den neuesten Sicherheitsupdates des

Regulatorische

Für Service oder Reparatur wenden Sie sich bitte zuerst an Ihren Hörgeräteakustiker. Falls erforderlich, können Sie Ihre Hörgeräte an folgende Adresse senden:



Hersteller gemäß FDA und EU-Medizinprodukteverordnung 2017/745
Starkey Laboratories, Inc.

6700 Washington Ave. South Eden Prairie, MN 55344 USA www.starkey.com

EC**REP**

Starkey Laboratories (Germany) GmbH
Weg beim Jäger 218-222
22335 Hamburg
Deutschland

UK Bevollmächtigte

Person:

Starkey UK William F.
Austin House Pepper Rd,
Hazel Grove Stockport
SK7 5BX, UK www.starkey.co.uk

CH**REP**

QUNIQUE GmbH
Bahnhofweg 17
5610 Wohlen
Schweiz

Hersteller gemäß Health Canada

Starkey Labs Canada Co.
2476 Argentia Road, Suite 301
Mississauga, ON L5N 6M1
www.starkeycanada.ca

Symbol	Symbolbedeutung	Anwendbarer Standard	Symbolnummer
	Hersteller	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.1
	Bevollmächtigter Vertreter in der Europäischen Gemeinschaft	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.2
	Importeur	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.8
	Herstellungsland	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.3
	Herstellungsdatum	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.3
	Katalognummer	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.6
	Seriennummer	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.7
	Medizinisches Gerät	BS EN ISO 15223-1:2021	5.7.7
	Trocken halten	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.4
	Temperaturgrenze	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.7
	Feuchtigkeitsbegrenzung	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.8
	Vorsicht	BS EN ISO 15223-1:2021	5.4.4
	Allgemeines Warnzeichen	EC 60601-1, Referenz-Nr. Tabelle D.2, Sicherheitszeichen 2	ISO 7010-W001
	Siehe Bedienungsanleitung/Heft	EC 60601-1, Referenz-Nr. Tabelle D.2, Sicherheitszeichen 10	ISO 7010-M002
	Getrennt sammeln	RICHTLINIE 201 2/19/EU (WEEE)	Anhang IX
	Geräte der Klasse II	IEC 60417 Referenz-Nr. Tabelle D.1	Symbol 9 (IEC 60417-5172)
	Regulatorische Konformitätskennzeichnung (RCM)	AS/NZS 4417.1:2012	k.A.
	UKCA-Kennzeichnung	SI 2002 Nr. 618, in der jeweils geltenden Fassung (UK MDR 2002)	k.A.
	Giteki Mark	Japanisches Rundfunkgesetz	k.A.
	Gleichstrom	IEC 60601-1 Referenz-Nr. Tabelle D.1	IEC 60417-5031
	Recyclingsymbol	Richtlinie 94/62/EG des Europäischen Parlaments und des Rates	Anhang I-VII
	Recyclingsymbol für elektrische Geräte und tragbare Batterien	Richtlinie 94/62/EG des Europäischen Parlaments und des Rates	Anhang I-VII
	NOM-Zertifizierungssymbol	IEC 60601-1 (IEC 60529) Tabelle D.3	Code 2
	Schutzgrad	IEC 60601-1 (IEC 60529) Tabelle D.3	Code 2
	Korea KCC Kennzeichen		
	Übersetzung	BS EN ISO 15223-1:2021	5.7.8

Notizen

[illegible]



Um auf eine elektronische Version dieses Benutzerhandbuchs zuzugreifen,
besuchen Sie bitte: <https://eifu.starkey.com/eifu/>

CE
2797

Starkey sind Marken von Starkey Laboratories, Inc.

©2025 Starkey Laboratories, Inc. Alle Rechte vorbehalten. P00000365 11/25 BKLT3261-01-
DE-XX