


Your T2 Remote User Manual

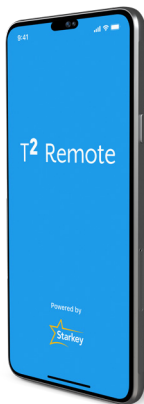

Get full control over your hearing aids to help
you hear better and live better

Table of contents

1. Get started

التوافق.....	3
--------------	---

٢. نظرة عامة على المنزل.....	4
------------------------------	---

٣. معلومات

حول وخصوصية.....	6
------------------	---

4. Additional guidance

معلومات السلامة.....	7
----------------------	---

معلومات تنظيمية.....	9
----------------------	---

التوافق

لأفضل أداء، نوصي باستخدام أحدث إصدار متاح من البرنامج لجهازك.

Apple

iPhone, iPad, iPod

- The app runs on all versions of iOS & iPadOS 16.0 or later.

Android


- The app runs on all versions of Android 8.0 or later.

نظرة عامة على الصفحة الرئيسية

اعثر على الميزات الرئيسية التي تعزز استخدامك لسמاعة الأذن على الشاشة الرئيسية.

1. مستوى صوت مكبر صوت الهاتف
2. البرنامج
3. مستوى الصوت
4. كتم الصوت
5. إلغاء الكتم
6. Edge Mode+ تشغيل/إيقاف *
7. إعادة تعيين جميع التغييرات *
8. الرئيسية
9. معلومات: جولة في التطبيق، دعم العملاء، دليل المستخدم داخل التطبيق

* قد تختلف الميزة حسب طراز جهاز السمع

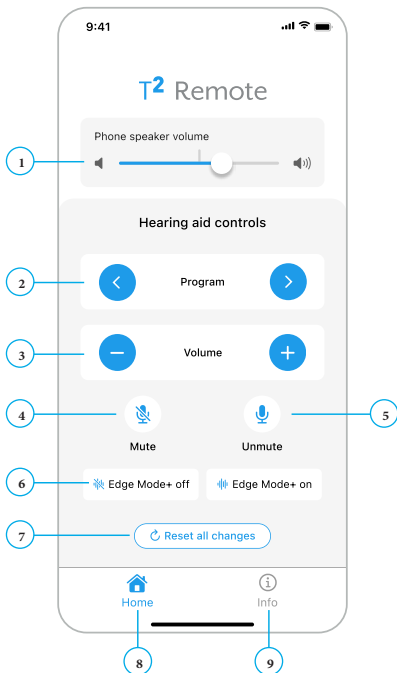

شاشة المعلومات تتيح لك عرض معلومات حول هذا التطبيق، وإرشادات المستخدم والاتفاقيات. وتشمل هذه:

- **جولة التطبيق:** مراجعة جولة إرشادية عبر خيارات الصفحة الرئيسية الخاصة بك.
- **حول والخصوصية:** تفاصيل حول إنشاء التطبيق، وسياسة الخصوصية، واتفاقية ترخيص المستخدم النهائي، وخيارات الموافقة.
- **دعم العملاء:** خيار إرسال بريد إلكتروني إلى دعم العملاء للحصول على مساعدة إضافية عند الحاجة.
- **دليل المستخدم:** دليل مفصل للتطبيق قابل للبحث بالكامل.

Safety information

تحذير: يجب ألا يكون خرج الصوت مربعاً أو مؤلداً. يجب خفض مستوى الصوت أو إزالة الجهاز إذا كان خرج الصوت مرتفعاً بشكل مزعج أو مؤلداً. إذا كنت تحتاج  باستخدام إلى خفض مستوى الصوت، فقد تحتاج إلى ضبط جهازك بشكل إضافي.

إشعار مهم لمستخدمي سماعات الأذن المحتملين:

من الجيد صحياً أن يخفض الشخص الذي يعاني من فقدان السمع لتقييم طبي من قبل طبيب مرخص (ويفضل أن يكون طبيباً متخصصاً في أمراض الأذن) قبل شراء سماعة أذن بوصفة طبية. وغالباً ما يشار إلى الأطباء المرخصين المتخصصين في أمراض الأذن باسم أطباء الأذن والحنجرة أو أطباء الأذن والأذن والحنجرة. والغرض من التقييم الطبي هو التأكد من تحديد جميع الحالات القابلة للعلاج طبياً والتي قد تؤثر في السمع وعلاجها قبل شراء سماعة الأذن.

بعد التقييم الطبي، سيعطيك الطبيب بياناً مكتوباً يفيد بأن فقدان السمع لديك قد تم تقييمه طبياً وأنه يمكن اعتبارك مرشحاً لسماعة أذن. وسيجلبك الطبيب إلى أخصائي سماعات أو موزع سماعات أذن، حسب الاقتضاء، لإجراء تقييم لسماعة الأذن.

سيجري أخصائي السماعات أو موزع سماعات الأذن تقييماً لسماعة الأذن لتقدير قدرتك على السمع مع سماعة الأذن وبدونها.

سيسمح بتقييم سماعة الأذن لأخصائي السماعات أو الموزع باختيار سماعة أذن وملاءمتها لاحتياجاتك الفردية.

إذا كانت لديك تحفظات بشأن قدرتك على التكيف مع التضخيم، فينبغي أن تستفسر عن توفر برنامج للتجربة بالإيجار أو خيار الشراء. يقدم العديد من موزعي سماعات الأذن الآن برامج تتيح لك ارتداء سماعة أذن لفترة من الوقت مقابل رسوم رمزية. وبعد ذلك يمكنك أن تقرر ما إذا كنت ترغب في شراء سماعة الأذن.

في بعض المناطق، يجب أن تخضع لتقييم طبي قبل شراء سماعة أذن بوصفة طبية. وتسمح بعض الولايات للبالغين بالتنازل عن التقييم الطبي.

لن تعيد سماعة الأذن السمع الطبيعي، ولن تمنع أو تحسن ضعف السمع الناتج عن حالات عضوية. إن استخدام سماعة الأذن ليس سوى جزء من إعادة التأهيل السعوي، وقد يحتاج إلى أن يستكمل بالتدريب السعوي والتعليم في قراءة الشفاه. وفي معظم الحالات، فإن الاستخدام غير المتكرر لسماعة الأذن لا يتيح للمستخدم الاستفادة الكاملة منها.

تحذير: إذا تم ضبطها على أقصى مستوى للإخراج وارتدبت لفترات تتجاوز التوصيات أدناه، فقد يتجاوز تعرض المريض لطاقة الصوت حدود التعرض للضوضاء. هذه  الأداة مخصصة للاستخدام لمدة أقصاها ست عشرة (61) ساعة يومياً عند ضبطها على أقصى مستوى للإخراج.

الإبلاغ عن الأحداث الضارة

يجب الإبلاغ عن أي حادث خطير وقع فيما يتعلق بجهاز Starkey الخاص بك إلى ممثل Starkey المحلي والسلطة المختصة في الدولة العضو التي تتواجد فيها. يعرف الحادث الخطير بأنه أي خلل أو تدهور في خصائص الجهاز وأداءه، أو قصور في دليل تشغيل الجهاز/الوسم قد يؤدي إلى الوفاة أو التدهور الخطير في الحالة الصحية للمستخدم، أو قد يؤدي إلى ذلك عند تكراره.

الاستخدام المقصود

The T2 Remote is intended to allow a user to remotely control volume, program selection, Mute/Unmute of T2-enabled hearing aids.

دواعي الاستخدام

T2 Remote هو برنامج اختياري مخصص للمرضى الذين يستخدمون سماعات أذن ممكنة بتقنية T2 والذين يرغبون في استخدام جهاز iOS أو Android ليعمل كجهاز تحكم عن بعد.

المستخدم المقصود وبيئة المستخدم

أشخاص عاديون في بيئة منزلية.

الفائدة السريعة

T2 Remote نفسه لا يوفر فائدة سريعة مباشرة. وتتحقق فائدة سريعة غير مباشرة من خلال تمكين سماعات الأذن من تحقيق الغرض المقصود منها.

دليل الاستخدام ينطبق على ما يلي:

- ستاري: Edge AI, G Series AI, Omega AI, Omega AI+, السلسلة المميزة, Picasso, Evolv AI, Genesis AI,
- Vitality AI, A Series AI, Aris AI, Aris AI+, السلسلة المميزة, Arc AI, Intrigue AI, Audibel: دا فنشي,
- Edge AI, NE Series AI, Noble AI, Noble AI+, السلسلة المميزة, NuEar: Canvas, Savant, NE NXG AI,
- Edge AI, السلسلة المميزة, MicroTech: Portrait, MicroTech Envy, MT NGX AI,
- KINDvaro, KINDviano x, KINDviano وKIND: KINDvitalo
- Pro Akustik: ipro AI
- TF10-2 Plus X, TF8-2 Plus, TF7-5 Plus X, TF5-2 Plus X, TF3-2 Plus X وTelefunken: Vation
- Edge AI, G Series AI, Omega AI, السلسلة المميزة, Audigy: AGXs pi, AGXs Evolv AI, AGXs Genesis AI,

إشعار أمني

بيانات المريض خاصة وحمايتها مهمة، لذا يرجى الرجوع إلى ما يلي:

- تأكد من أن الهواتف الذكية محدثة دائماً بأحدث تحديثات الأمان لنظام التشغيل.
 - تأكد من أن إصدار التطبيق المثبت لديك محدث.
 - استخدم فقط تطبيقات Starkey من المتاجر الرسمية مع أجهزة السمع الخاصة بك.
 - تأكد من أن التطبيقات المثبتة لا تملك إلا الأذونات التي تحتاجها.
 - لا تستخدم هاتفاً مكسور الحماية (jailbreak) لضمان بقاء البيانات آمنة في جميع الأوقات.
 - احم نسخك الاحتياطية على الهاتف الذي من فقدان البيانات والسرقة.
 - أزل جميع البيانات من الهاتف الذي إذا لن يعود مستخدماً من قبلك أو إذا كان سيتم التخلص منه.
- يرجى ملاحظة أن هذه ليست قائمة شاملة.

معلومات تنظيمية

للحصول على الخدمة أو الإصلاح، يرجى الاتصال بأخصائي العناية بالسمع أولاً. إذا لزم الأمر، يمكنك إرسال سماعات الأذن الخاصة بك إلى:



Manufacturer according to FDA and EU Medical Device Regulation 2017/745
Starkey Laboratories, Inc.
6700 Washington Ave. South
Eden Prairie, MN 55344 USA
www.starkey.com



الشخص المخول في المملكة المتحدة: 5BX،
Hazel Grove Stockport SK7
William F. Austin House Pepper
المملكة المتحدة Starkey UK
www.starkey.co.uk



المصنع وفقاً ل Health Canada
ON L5N 6M1 www.starkeycanada.ca
2476 Argentia Road, Suite 301 Mississauga,
Starkey Labs Canada Co.

Wohlen QUNIQUE GmbH
Bahnhofweg 17 5610
سويسرا

[illegible]



To access an electronic version of this user guide, please visit:
<https://eifu.starkey.com/eifu/>

CE
2797

Starkey and T2 Remote are trademarks of Starkey Laboratories, Inc.

4/26 BKLT3261-02-EN-XX . Starkey Laboratories, Inc. ©2020
www.starkey.com/patents P00000365