


Il manuale utente di T2 Remote

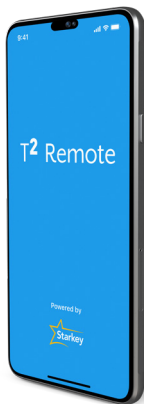

Ottieni il pieno controllo dei tuoi apparecchi
acustici per aiutarti a sentire meglio e vivere

Indice

1. Inizia

Compatibilità.....	3
--------------------	---

2. Panoramica della casa..... 4

3. Info

Informazioni e privacy.....	6
-----------------------------	---

4. Indicazioni aggiuntive

Informazioni sulla sicurezza.....	7
-----------------------------------	---

Informazioni normative.....	9
-----------------------------	---

Compatibilità

Per prestazioni ottimali, consigliamo di utilizzare la versione software più recente disponibile per il tuo dispositivo.

Apple

iPhone, iPad, iPod

- L'app funziona su tutte le versioni di iOS e iPadOS 16.0 o successive.

Android


- L'app funziona su tutte le versioni di Android 8.0 o successive.

Panoramica della Home

Trova le funzionalità principali che migliorano l'uso del tuo apparecchio acustico nella **schermata Home**.

1. Volume altoparlante del telefono
2. Programma
3. Volume
4. Disattiva audio
5. Riattiva audio
6. Edge Mode+ attiva/disattiva*
7. Reimposta tutte le modifiche*
8. Home
9. Info: *Tour dell'app, Assistenza clienti, Guida utente nell'app*

**La funzione può variare in base al modello di apparecchio acustico*

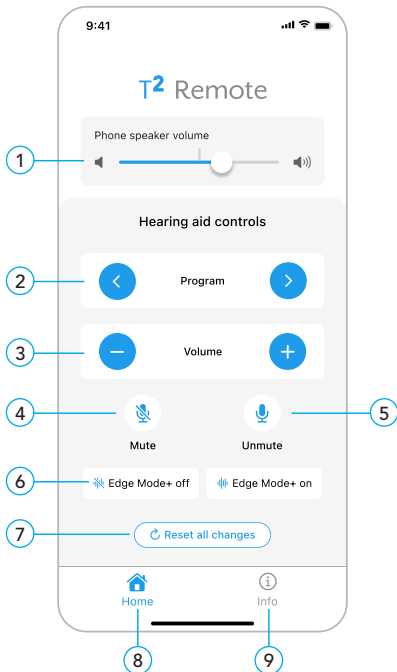

Il tuo **schermo Informazioni** ti consente di visualizzare informazioni su questa app, le linee guida per l'utente e gli accordi. Questi includono:

- **Tour dell'app:** Rivedi una guida alle opzioni della tua pagina iniziale.
- **Informazioni e privacy:** Dettagli sulla creazione dell'app, l'informativa sulla privacy, il Contratto di licenza con l'utente finale e le opzioni di consenso.
- **Assistenza clienti:** Opzione per inviare un'e-mail all'assistenza clienti per ulteriore aiuto, se necessario.
- **Guida utente:** Guida dettagliata dell'app completamente ricercabile.

Informazioni sulla

 **ATTENZIONE:** L'uscita audio non dovrebbe risultare fastidiosa o dolorosa. Dovresti abbassare il volume o rimuovere il dispositivo se il suono è eccessivamente forte o doloroso. Se devi costantemente abbassare il volume, potrebbe essere necessario regolare ulteriormente il dispositivo.

AVVISO IMPORTANTE PER I POTENZIALI UTENTI DI APPARECCHI ACUSTICI:

È buona pratica sanitaria per una persona con perdita dell'udito sottoporsi a una valutazione medica da parte di un medico abilitato (preferibilmente un medico specializzato nelle malattie dell'orecchio) prima di acquistare un apparecchio acustico su prescrizione. I medici abilitati specializzati nelle malattie dell'orecchio sono spesso chiamati otorinolaringoiatri, otologi o otorinolaringologi. Lo scopo della valutazione medica è assicurare che tutte le condizioni trattabili dal punto di vista medico che possono influire sull'udito siano identificate e trattate prima dell'acquisto dell'apparecchio acustico.

Dopo la valutazione medica, il medico le fornirà una dichiarazione scritta che attesti che la sua perdita dell'udito è stata valutata dal punto di vista medico e che può essere considerato un candidato per un apparecchio acustico. Il medico la indirizzerà a un audiologo o a un venditore di apparecchi acustici, a seconda dei casi, per una valutazione dell'apparecchio acustico.

L'audiologo o il venditore di apparecchi acustici eseguirà una valutazione dell'apparecchio acustico per valutare la sua capacità di sentire con e senza un apparecchio acustico.

La valutazione dell'apparecchio acustico consentirà all'audiologo o al venditore di selezionare e adattare un apparecchio acustico alle sue esigenze individuali.

Se ha dubbi sulla sua capacità di adattarsi all'amplificazione, dovrebbe informarsi sulla disponibilità di un programma di prova a noleggio o di opzione di acquisto. Molti venditori di apparecchi acustici offrono ora programmi che le consentono di indossare un apparecchio acustico per un periodo di tempo a fronte di un costo nominale, dopo il quale potrà decidere se desidera acquistare l'apparecchio acustico.

In alcune aree geografiche, è necessario sottoporsi a una valutazione medica prima di acquistare un apparecchio acustico su prescrizione. Alcuni Stati consentono a un adulto di rinunciare alla valutazione medica.

Un apparecchio acustico non ripristina l'udito normale e non previene né migliora una compromissione dell'udito derivante da condizioni organiche. L'uso di un apparecchio acustico è solo una parte della riabilitazione uditiva e può dover essere integrato da addestramento uditivo e istruzioni sulla lettura labiale. Nella maggior parte dei casi, un uso poco frequente di un apparecchio acustico non consente all'utente di trarne pieno beneficio.

 **ATTENZIONE:** Se impostato al livello massimo di uscita e indossato per periodi di tempo superiori alle raccomandazioni riportate di seguito, l'esposizione del paziente

all'energia sonora può superare i limiti di esposizione al rumore. Questo strumento è destinato a essere utilizzato per un massimo di sedici (16) ore al giorno quando è impostato al livello massimo di uscita.

Segnalazione di eventi avversi

Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo Starkey deve essere segnalato al rappresentante locale Starkey e all'Autorità competente dello Stato membro in cui si è stabilito. Un incidente grave è definito come qualsiasi malfunzionamento, deterioramento delle caratteristiche e/o delle prestazioni del dispositivo, o inadeguatezza del Manuale operativo/dell'etichettatura del dispositivo che potrebbe portare alla morte o a un grave peggioramento dello stato di salute dell'utente, OPPURE potrebbe farlo in caso di ricorrenza.

Uso previsto

T2 Remote è destinato a consentire a un utente di controllare da remoto il volume, la selezione del programma, l'attivazione/disattivazione della modalità Muto degli apparecchi acustici abilitati T2.

Indicazioni per l'uso

Il T2 Remote è un programma opzionale indicato per i pazienti che utilizzano apparecchi acustici abilitati T2 e che desiderano usare un dispositivo iOS o Android come telecomando.

Utente previsto e ambiente d'uso

Persone non professioniste in un ambiente domestico.

Beneficio clinico

Il T2 Remote di per sé non fornisce un beneficio clinico diretto. Un beneficio clinico indiretto è fornito consentendo agli apparecchi acustici di raggiungere il loro scopo previsto.

Le istruzioni per l'uso sono applicabili a quanto segue:

- Starkey: Picasso, Evolv AI, Genesis AI, Serie Signature, Edge AI, G Series AI, Omega AI, Omega AI+
- Audibel: DaVinci, Arc AI, Intrigue AI, Serie Signature, Vitality AI, A Series AI, Aris AI, Aris AI+
- NuEar: Canvas, Savant, NE NXG AI, Serie Signature, Edge AI, NE Series AI, Noble AI, Noble AI+
- MicroTech: Portrait, MicroTech Envoy, MT NGX AI, Serie Signature, Edge AI
- KIND: KINDvitalo & KINDvaro, KINDviano x, KINDviano
- Pro Akustik: ipro AI
- Telefunken: Vation & TF10-2 Plus X, TF8-2 Plus, TF7-5 Plus X, TF5-2 Plus X, TF3-2 Plus X
- Audigy: AGXs pi, AGXs Evolv AI, AGXs Genesis AI, Serie Signature, Edge AI, G Series AI, Omega AI

Avviso di sicurezza

I dati del paziente sono privati e la loro protezione è importante; pertanto, fare riferimento a quanto segue:

- Assicurati che gli smartphone siano sempre aggiornati con gli ultimi aggiornamenti di sicurezza del sistema operativo.
- Assicurati che la versione dell'app installata sia aggiornata.
- Usa solo le app Starkey provenienti dagli store ufficiali con i tuoi apparecchi acustici.
- Assicurati che le app installate abbiano solo le autorizzazioni di cui hanno bisogno.

Informazioni normative

For service or repair, please contact your hearing care professional first.
If necessary, you can send your hearing aids to:



Produttore secondo la normativa FDA e il Regolamento sui dispositivi medici dell'UE 2017/745 **Starkey Laboratories, Inc.** 6700 Washington Ave.
South Eden Prairie, MN 55344 USA www.starkey.com

EC	REP
-----------	------------

Starkey Laboratories (Germany) GmbH Weg Personeleutzzentrum 15 Amburgo
Germania

Regno Unito: Starkey
UK William F. Austin
House Pepper Rd, Hazel
Grove Stockport SK7
5BX, Regno Unito www.starkey.com

CH	REP
-----------	------------

QUNIQUE GmbH
Bahnhofweg 17
5610 Wohlen
Svizzera

Produttore secondo Health
Canada Starkey Labs Canada
Co. 2476 Argentia Road, Suite
301 Mississauga, ON L5N
6M1 www.starkeycanada.ca

Simbolo	Significato del simbolo	Standard applicabile	Numero del simbolo
	Produttore	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.1
	Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.2
	Importatore	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.8
	Paese di fabbricazione	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.3
	Data di fabbricazione	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.3
	Numero di catalogo	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.6
	Numero di serie	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.7
	Dispositivo medico	BS EN ISO 15223-1:2021	5.7.7
	Tenere asciutto	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.4
	Limite di temperatura	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.7
	Limite di umidità	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.8
	Attenzione	BS EN ISO 15223-1:2021	5.4.4
	Segnale di avvertimento generale	CE 60601-1, Riferimento n. Tabella D.2, Segnale di sicurezza 2	ISO 7010-W001
	Consultare il manuale/libretto di istruzioni	CE 60601-1, Riferimento n. Tabella D.2, Segnale di sicurezza 10	ISO 7010-M002
	Raccolta separata	DIRETTIVA 201 2/19/UE (RAEE)	Allegato IX
	Apparecchiatura di classe II	IEC 60417 Riferimento n. Tabella D.1	Simbolo 9 (IEC 60417- 5172)
	Marchio di conformità normativa (RCM)	AS/NZS 4417.1:2012	N/D
	Marchio UKCA	SI 2002 n. 618, come modificato (UK MDR 2002)	N/D
	Marchio Giteki	Legge giapponese sulle radiocomunicazioni	N/D
	Corrente continua	IEC 60601-1 Numero di riferimento Tabella D.1	IEC 60417-5031
	Simbolo di riciclaggio	Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 94/62/CE	Allegato I-VII
	Simbolo di riciclaggio per apparecchiature elettriche e	Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 94/62/CE	Allegato I-VII
	Simbolo di certificazione NOM	IEC 60601-1 (IEC 60529) Tabella D.3	Codice 2
	Grado di protezione	IEC 60601-1 (IEC 60529) Tabella D.3	Codice 2
	Marchio KCC della Corea		
	Traduzione	BS EN ISO 15223-1:2021	5.7.8

Note

[illegible]



Per accedere a una versione elettronica di questa guida per l'utente, visita:
<https://eifu.starkey.com/eifu/>

CE
2797

Starkey e T2 Remote sono marchi di Starkey Laboratories, Inc.

©2026 Starkey Laboratories, Inc. Tutti i diritti riservati. P00000365 4/26 BKLT3261-02-EN-XX

Brevetto: www.starkey.com/patents