

Thrive Hearing Control App Bruksanvisning

Gratulerer med ditt aktive
valg om bedre hørsel og
velvære

thrive



Thrive Hearing Control app

Innledning	4
Apple brukere	
Paring/Tilkobling	5
Nedlasting	8
Android brukere	
Nedlasting	9
Paring/Tilkobling	10
Hjemskjerm	
Tilkoblingsstatus	13
Thrive Assistent	13
Velvære Score	13
Aktivt program	13
Innstillinger/Hjelp	13
Volum	14
Mute	14
Edge Mode	14
Navigering	15
Hjem	15
Programvalg	15
Personliggjør	
Personliggjør	16
Equalizer	16
Tale i støy	16
Maskinstøy	17
Vind	17
Retningsmikrofon	18
SoundSpace	18

Velvære Score	
Generelt	19
Sosialt	19
Fysisk	20
Falldeteksjon og varsling	21
Tilbehør	23
Voice AI	23
Innstillinger	
Brukermanual	24
Apparatinnstillinger	24
Velvære Score	25
Falldeteksjon	26
Oversett	27
Transkriber	27
Feilsøking	28
Påminnelser	28
TeleHear fjernprogrammering	30
Thrive Care app	31
Finn mine høreapparater	31
App-innstillinger	32
Om	32
Demomodus	32
Sikkerhetsinformasjon	33

Funksjoner varierer med produkt og teknologinivå. Spør din audiograf hvis du er usikker.

Denne appen kan ha små ulikheter avhengig av din telefonmodell.

Thrive-kompatible høreapparater



Vist ovenfor er de Thrive platform 2.4 GHz høreapparatene som er kompatible med Thrive Hearing Control app.

Apple® eller Android™

Apple®s eller Androids operativsystem er ansvarlig for å administrere tilkoblingen mellom mobil-enheten din og Thrive-kompatible høreapparater. Thrive Hearing Control app er et supplement til høreapparatene dine, som tilbyr en rekke forbedrede justeringsfunksjoner. Med Thrive kan du tilpasse høreapparatene dine til din unike livsstil.

For den nyeste informasjonen om kompatibilitet, besøk: www.starkey.no/hoereapparater/apper/thrive-hearing-control/kompatibilitet



eller scan koden:



Tilkobling for Apple enheter



For å kunne bruke appen Thrive Hearing Control, må du først koble høreapparatene dine til din iOS-enhet.

1. Kontroller at Bluetooth® er aktivert på din iOS-enhet. I Innstillinger-menyen går du til Bluetooth og skifter til På.
2. Slå høreapparatene dine av og på. Enten ved å åpne batteriskuffen og lukke den igjen, eller for oppladbare apparater; sette dem i laderen og ta dem ut igjen. Dette setter høreapparatene i paringsmodus.
3. I Innstillinger-menyen, gå til **Tilgjengelighet > Høreapparater**.
 - Du vil se høreapparatets navn (for eksempel "Kari Hearing Aids") når iOS-enheten først oppdager høreapparatene dine.
 - Hvis navnet ditt ikke vises på listen "MFI-høreapparater" innen 5-7 sekunder, tapper du på **Tilbake** øverst til venstre og klikker igjen på **Høreapparater**.

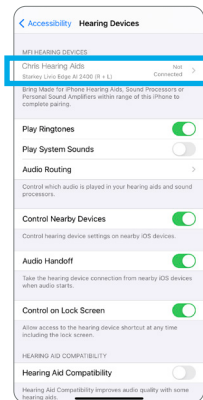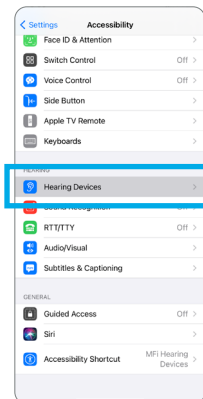

4. Tæpp på høreapparatets navn for å koble høreapparatene til din iOS-enhet.
5. Du vil se to sammenkoblingsforespørsler (en for hvert høreapparat). Velg *Koble sammen* for hver forespørsel. Disse forespørselene kan komme med flere sekunders mellomrom.
6. Når paringen er fullført, endres høreapparatets navn fra svart til blått.

Du er nå klar til å bruke iOS-enheten til å justere høreapparatet. Du kan justere enten med de opprinnelige iOS-kontrollene eller med Thrive-appen.

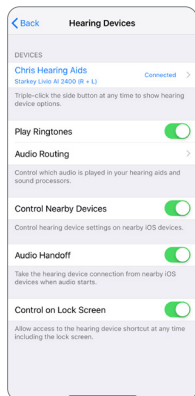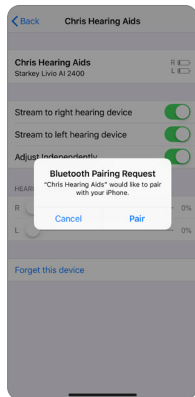

Koble høreapparatene til Apple-enheten din igjen

Når du slår av høreapparatene eller Apple-enheten, er de ikke lenger koblet til hverandre. For å koble til igjen, slå på Apple-enheten din og slå på høreapparatene dine.

Høreapparatene kobles automatisk til din Apple-enhet. Du kan også bekrefte denne tilkoblingen via snarveien til Tilgjengelighet (trippekk på *Hjemknappen* (iPhone 8 eller tidligere) eller sideknappen (iPhone X og nyere) på din iOS enhet.

MERK: IOS OPPDATERING. Når du oppdaterer versjonen av IOS på iPhone, kan høreapparatene miste forbindelsen, og krever at du kobler fra og kobler sammen høreapparatene med iPhone igjen.

Last ned Thrive Hearing Control App for Apple enheter


Thrive Hearing Control gjør det enkelt å kontrollere og justere høreapparatene dine med din kompatible Apple-enhet. Det er enkelt å laste ned appen. Følg de trinnvise instruksjonene nedenfor:

En: Åpne "App Store" på en kompatibel Apple-enhet.

To: Skriv "Thrive Hearing Control" i søkeboksen.

Tre: Tæpp "HENT" for å laste ned appen til enheten din. Følg instruksjonene på skjermen for å sette opp appen.

Fire: Når appen er installert, åpne Thrive Hearing Control-appen fra startskjermen eller applisten.

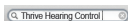

Last ned Thrive Hearing Control app for Android enheter

Thrive Hearing Control gjør det enkelt å kontrollere og justere høreapparatene dine med din kompatible Android-enhet. Det er enkelt å laste ned appen. Følg de trinnvise instruksjonene nedenfor:

En: Åpne "Google Play Store" på en kompatibel Android-enhet.

To: Skriv "Thrive Hearing Control" i søkeboksen.

Tre: Tæpp "HENT" for å laste ned appen til enheten din. Følg instruksjonene på skjermen for å sette opp appen.

Fire: Når appen er installert, åpne Thrive Hearing Control-appen fra startskjermen eller applisten.



Tilkobling for Android enheter

Følg instruksjonene nedenfor for å koble høreapparatene til Android-enheten din. Hvis høreapparatene mister forbindelsen til enheten din, gjenta instruksjonene nedenfor for å koble til igjen.

1. Finn og åpne innstillinger på din telefon
2. Sjekk at Bluetooth er på.
3. Turn your hearing aids off and back on. This puts the hearing aids in pairing mode.
4. Åpne Thrive appen og følg instruksjonene på skjermen.
5. Når et par høreapparater blir oppdaget, vil du bli spurt om å pare hver enkelt sammen med en ekstra melding for å la Thrive-appen administrere høreapparatene dine.
6. Hvis mer enn ett par høreapparater blir oppdaget, vil du se en liste; trykk for å velge og koble til dine.

MERK: Tilkoblingen kan fremdeles fullføres via Bluetooth-menyen på Android-enheten din, hvis du ønsker det.


Tilkoble dine høreapparater til din Android enhet igjen

Når du slår av høreapparatene eller Android-enheten, vil de ikke lenger være koblet til hverandre. For å koble til igjen, slå på Android-enheten din og deretter slå på høreapparatene.

Høreapparatene kobles automatisk til Android-enheten din. Hvis du har problemer med å få høreapparatene og appen til å koble til igjen, sjekk Bluetooth-innstillingene på Android-enheten din for å forsikre deg om at høreapparatene dine fortsatt er sammenkoblet, og hvis ikke, gjenta sammenkoblingsprosessen.

Kom i gang/Oppsett

Første gang du åpner Thrive-appen, blir du bedt om å lese og godta lisensavtalen og personvernreglene, samt tilpasse konfigureringen av appen. Du har muligheten til å sette opp varsler og å sette opp en sky-konto for Hearing Care Anywhere-funksjonen. Thrive-appen vil som standard være i avansert modus. Du kan velge enkel modus når som helst i Innstilling-menyen.

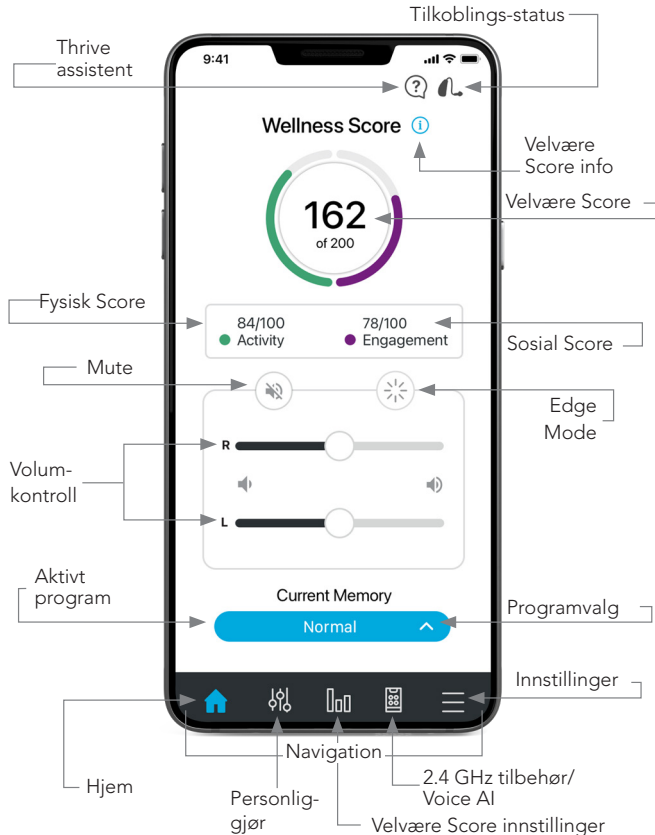

Denne appen kan ha noen ulikheter avhengig av din telefon og høreapparatmodell

Tilkoblings-status

Tæpp for å se gjeldende tilkoblings-status for dine høreapparater.

Thrive assistent*

Med Thrive assistent kan du få talestyrt hjelp i Thrive-appen ved å stille spørsmål som "Hvordan tilpasser jeg innstillingene for høreapparatene mine?" Thrive assistent bruker telefonmikrofonen for å lytte til spørsmålet ditt, og gir deg deretter et svar via en hjelpefil eller skybaserte tjenester. Thrive assistent kan utløses via et ikon i Thrive-appen eller ved å dobbelt-tæppe på Edge AI eller AI premium høreapparater.

Finn min telefon hjelper deg med å finne din forlagte mobiltelefon ved å dobbelt-tæppe på ditt Edge AI 2400 høreapparat og be apparatet om å lokalisere telefonen din. Formuler kommandoen som "Finn min telefon" eller "Hvor er min telefon?"

Velvære Score

En visuell fremstilling av fysisk og sosial aktivitet.

Aktivt program

Navnet på det aktive lytteprogrammet vises her

Innstillinger

Tæpp på ikonet for å åpne menyen. Se Innstillinger-seksjonen for komplett beskrivelse.

Hjelpenfunksjonen forklarer funksjonen til hver tilgjengelig skjerm. Alle hjelpefiler finner du i [Innstillinger > Brukermanual](#).

*Krever en sky-konto

Volum


Øk / senk lydstyrken på høreapparatene dine ved å bevege skyvekontrollen for hver side (H / V) eller ved å bruke glideplaten (området mellom venstre og høyre skyvekontroll) for å justere begge sider samtidig. Dobbel-tæpp hvor som helst på glideplaten for å returnere til programmert lydstyrkenivå. (Indikert ved tynne grå vertikale streker på skyvekontrollene).

Mute

Tæpp på Mute knappen for å slå av mikrofonene på begge høreapparater. Gjenta handlingen for å slå dem på igjen.


Edge Mode

Å denne kommandoen vil Edge AI høreapparater foreta en øyeblikkelig og automatisk vurdering av lyttemiljøet og endre innstillinger for deg, optimalt for det spesifikke miljøet. Edge Mode kan aktiveres (hvis konfigurert) med å trykke på brukerkontrollen, eller dobbel-tæppe på høreapparat/øre, eller via Edge Mode knappen på hjemskjermen. Disse innstillingene er aktive til du manuelt avslutter Edge Mode, bytter lytteprogram, eller restarter dine høreapparater.

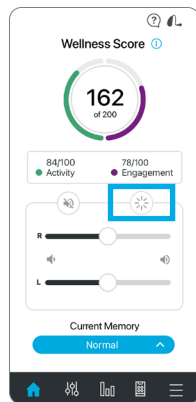

Navigering

Navigeringsmenyen nederst på skjermen gir tilgang til de mest brukte menyene, Personliggjør, Velvære Score, Tilbehør og Innstillinger.

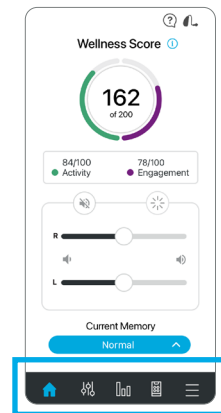


Hjem

Tæpp på Hus- ikonet på navigeringsmenyen for å returnere til hjemskjermen.

Programvalg

Tæpp på ikonet for programvalg for å se og velge mellom tilgjengelige lytteprogrammer, eller for å endre et eksisterende program eller lage egne programmer.

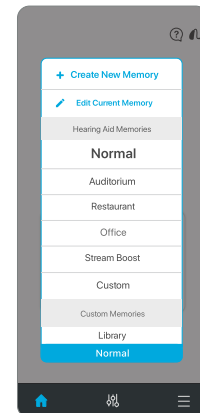


Personliggjør

Tæpp Personliggjør på navigeringsmenyen for å få tilgang til en rekke justeringsfunksjoner for å gjøre individuelle endringer i dine lytteprogrammer.


Equalizer

Få tilgang til equalizer kontroller for flere frekvensområder. Du kan skyve opp/ned for å finne din foretrukne lyd kvalitet. Du kan justere ulikt per lytteprogram.

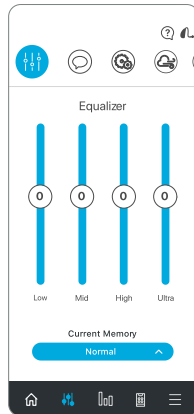


Tale i støy

Tale i støy reduserer mengden bakgrunnsstøy som kommer inn i høreapparatene dine. Du kan justere dette individuelt for hvert lytteprogram. Stillingen lenger til høyre gir mer komfort i støy. Den hvite sirkelen viser gjeldende innstilling.

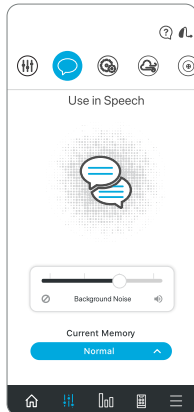


Maskinstøy

Bruk i støy støy reduserer lyder fra maskiner, motorer, vifter etc. for å øke komforten i støvende omgivelser. Stillingen lenger til høyre gir mer komfort i støy. Den hvite sirkelen viser gjeldende innstilling.

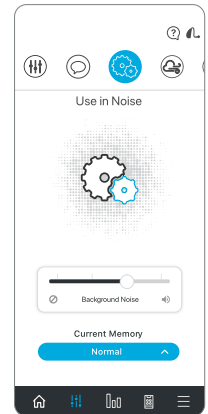


Vind

Vind gir deg mulighet til å redusere lyden av vindsus som blåser over dine høreapparatmikrofoner. Stillingen lenger til høyre gir mer komfort i vind. Den hvite sirkelen viser gjeldende innstilling.

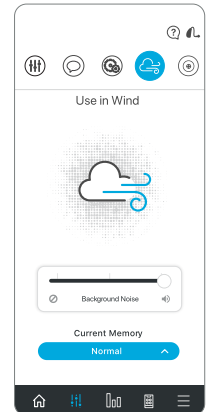


Retningsmikrofon

Retningsmikrofon gir muligheten til å styre lyden rundt deg i hvert program. Bruk dette alternativet for å forbedre evnen til å høre samtale ved å fokusere mikrofonen på lydene foran deg. Den automatiske modusen følger talelyder og undertrykker støy bakfra og fra siden.

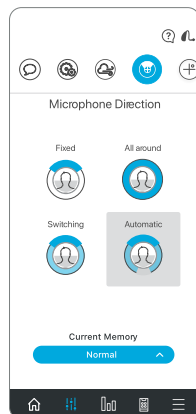

SoundSpace

SoundSpace gjør at du kan bruke mobil-enheten som et personlig finjusteringsverktøy for høreapparater. Det gir muligheten til å modifisere frekvensresponsen for noen av dine egendefinerte Thrive-programmer for bedre ytelse i spesifikke lyd miljøer. Når du beveger fingertuppen rundt på den blanke skjermen, vil innstillingene i høreapparatet ditt midlertidig endres slik at du kan høre med forskjellige innstillinger i apparatet.

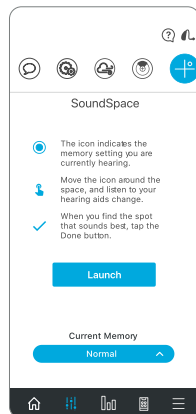

Velvære score


Total Velvære score er en kombinasjon av både sosial og fysisk score. Du har muligheten til å nå en poengsum på 200 hver dag.

Sosial måling består av tre segmenter. Hvert segment har en poengverdi som gjenspeiler hvordan du bruker høreapparatene dine. Appen Thrive Hearing Control leser bruksdata fra høreapparatene dine og viser dine daglige aktivitet i poeng. Målet ditt er 100 poeng per dag.

Bruks score: poeng oppnås ved å bruke dine høreapparater på daglig basis. Jo mer du bruker dem, jo flere poeng opptjent (40 mulige).

Sosial score: poeng oppnås ved å bruke høreapparatene dine til å engasjere deg med andre mennesker. Jo mer tid som tilbringes i miljøer med samtale, desto flere poeng opptjent (40 mulige).

Aktiv lytting: poeng oppnås når høreapparatene tilpasser seg til utfordrende og forskjellige lytmiljøer. (20 mulige).

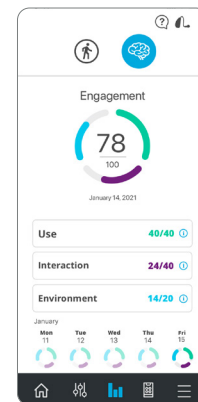


Fysisk måling består av fremgang innen tre daglige mål for fysisk aktivitet. Klarer du alle tre målene vil du oppnå 100 poeng. Høreapparatet måler skritt og aktivitet. Data overføres til appen hele dagen. Du kan angi / endre mål i Innstillinger-menyen.

Skritt: viser din fremgang innen det daglige målet for antall skritt (40 poeng mulig).

Aktivitet: viser din fremgang innen det daglige målet for fysisk trening (40 poeng mulig).

Stå oppreist: viser din fremgang innen det daglige bevegelsesmålet som inkluderer å stå oppreist og bevege seg rundt en gang i timen (20 poeng mulig).

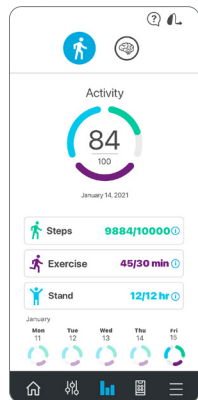

Merk: Høreapparater må regelmessig koble til telefonen i løpet av dagen, og appen Thrive Hearing Control må holdes åpen i bakgrunnen på telefonen din.



Falldeteksjon og varsling

Falldeteksjons-funksjonen kan brukes til å sende en varselstekstmelding som inneholder GPS-posisjonen din til dine utvalgte kontakter, hvis du skulle falle eller oppleve en fallrelatert hendelse. Falldeteksjon kan konfigureres til å sende automatiske og / eller manuelle varsler.

Autovarsling gjør det mulig for sensorene i høreapparatene dine å oppdage et fall automatisk.

Manuell varsling lar deg "trykke og holde" brukerkontrollen på et av høreapparatene for å sende en tekstmelding.


En varselstekstmelding vil bli initiert av Thrive-appen når et fall blir oppdaget eller manuelt initiert av deg. Tekstmeldingen vil bli sendt til maksimalt tre forhåndsdefinerte kontakter, som kan bekrefte mottakelsen av meldingen og få se et kart, som viser din posisjon.

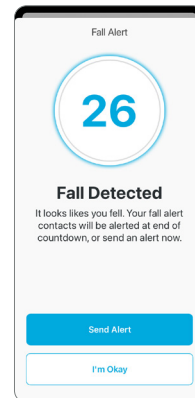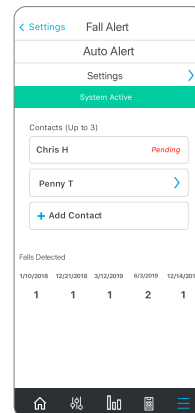

Avbryt varsling lar deg avbryte en automatisk varsling eller manuelt varsel fra enten høreapparatene eller smarttelefonen din. For å avbryte en varselstekstmelding fra høreapparatene dine, trykk på brukerkontrollen på begge høreapparatene. Du vil bli informert om kanselleringen i Thrive-appen og via en talebeskjed i høreapparatene dine. Falldeteksjons-meldinger kan avbrytes innen 60 eller 90 sekunder forhåndsvalgt kanselleringstid etter et varsel er initiert.


Kontakter lar deg identifisere opptil tre kontakter du ønsker tekstmeldinger sendt til.

Du må oppgi navn og smarttelefonnummer for hver kontakt i Thrive-appen. Hver av kontaktene dine vil motta en tekstmelding som ber dem bekrefte deltakelse i Falldeteksjons-systemet.

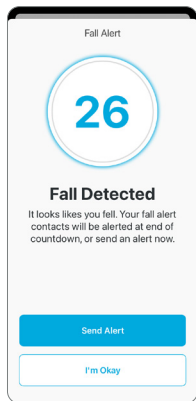


Tilbehør

Thrive Hearing Control app gir deg mulighet til å kontrollere lyd fra 2,4 GHz trådløse tilbehør som Starkey Hearing Technologies TV og Ekstern mikrofon +. Disse tilbehørene strømmer lyd direkte til høreapparatene dine. Fra appen kan du velge et tilkoblet tilbehør, starte og stoppe lydavspilling og kontrollere volumet for både strømming og omgivelseslyd.

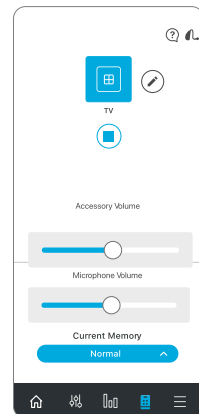

Voice AI* kombinerer fordelene med å bruke smarttelefonens mikrofon sammen med datakraften til kunstig intelligens. Fordelen er kraftigere og mer fleksibel taleforbedring i de mest utfordrende lytmiljøer, for brukere med større hørselstap. Aktiver IntelliVoice ved å tæppe på "spill av" knappen, og pek/legg telefonen med mikrofonen mot den som snakker. Kontakt din audiograf eller Starkey for mer informasjon

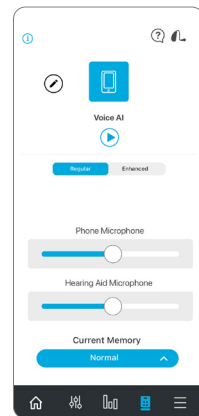

*Kun tilgjengelig på iOS smarttelefoner.

Brukermanual

En oversikt over hver meny / funksjon er tilgjengelig i Thrive appen. Hver seksjon viser skjermdetaljer og beskriver hver funksjon.

Apparatinnstillinger

Avanserte innstillinger for ditt høreapparat kan aktiveres i denne seksjonen.

Varsler - Lar høreapparatet spille en varseltone for bestemte telefonvarsler som kalenderhendelser, e-post og sosiale medier.

Tæpping lar deg aktivere eller deaktivere tæpp-funksjonen, bestemme følsomheten, og hvilken funksjon som skal aktiveres med tæpp-funksjonen (Thrive assistent, Start/Stop strømming fra tilbehør eller Edge Mode).

Auto strømming - Gjør det mulig for høreapparatene å gjenkjenne når en lydstrøm starter og automatisk bytte til et annet program og en mikrofonreduksjon som er spesielt optimalisert for strømming av lyd

Godta/avslutte/avslå anrop lar deg aktivere eller deaktivere funksjonen for å akseptere, avslutte eller avslå et anrop ved å bruke brukerkontrollen på høreapparatet (kun iOS).

Maskemodus er et spesialprogram som oppveier tap av talehørbarhet ved bruk av ansiktsmasker /munnbind ved å øke lyden i de berørte frekvensområdene. Hvis du aktiverer maskemodus, kan det velges som et vanlig lytteprogram i programvalg-menyen.

Comfort boost - Slår på aggressiv støyreduksjon, samtidig som lyd kvaliteten optimaliseres i støyende omgivelser. Denne funksjonen finnes kun i høreapparater som ikke støtter Edge Mode.

Auto Av/På er en enkel og automatisk strømsparing når du ikke bruker høreapparatene dine. Ta dem av, legg dem på en flat og stabil overflate, og de vil gå i strømsparingsmodus etter 15 minutter. De vil automatisk slå seg på igjen når du plasserer dem på øret.

Thrive Assistent Mic Velg hvilken mikrofon som skal fange opp din stemme for Thrive assistent spørsmål og talekommandoer. Det kan være enten høreapparatmikrofon eller *Telefonmikrofon*. Høreapparatmikrofoner standardvalg.

Velvære Score

Endre innstillinger for Thrive Score. Du kan legge til / oppdatere dine demografiske data for mer nøyaktig skrittmåling. I tillegg kan du sette / endre mål for skritt, aktivitet og oppreist.

Falldeteksjon

Auto varsel Følsomhet lar deg justere følsomheten for automatiske varsler i Thrive appen. Å øke følsomheten kan bedre sjansene for å oppdage et fall. Å dempe følsomheten kan redusere muligheten for falske varsler.


Profil lar deg endre dine opplysninger.

Auto varsel og Manuelt varsel varseltoner lar deg se og spille av de ulike varseltonene slik at du er kjent med dem i tilfellet av et fall.

Kontakter lar deg legge til, endre eller slette en kontakt.

Tidsvindu for kansellering lar deg velge 60 eller 90 sekunder som den tilmålte tiden før en varseltekstmelding sendes.

Melding om varsel lar deg endre navn og viser et eksempel på en varseltekstmelding.

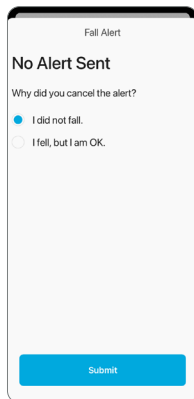


Oversett

Oversett er en funksjon som lar deg velge språk og språket til en annen person for å delta i en samtale. Når du snakker i telefonen, vil appen oversette talen din og vise den på skjermen på den andre personens språk. Når den andre personen snakker i telefonen, vil appen oversette dennes tale, vise den på ditt språk på telefonen, og strøemme den oversatte talen til høreapparatene dine på ditt språk.

Transkriber

Transkriber er en funksjon som fungerer som undertekster for situasjoner i den virkelige verden. Når du eller andre snakker i telefonen, vil Thrive-appen transkribere samtalen og vise den på skjermen din. Det er også mulighet for å lagre, sende som melding, kopiere eller sende den transkriberte teksten som e-post.

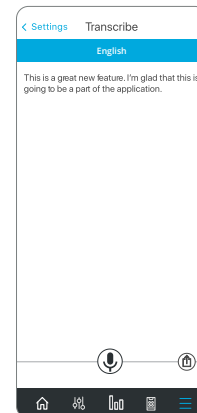



Feilsøking

Feilsøking gir deg en rask og praktisk måte å analysere høreapparatets tilstand på egen hånd. Med Feilsøking kan du få en diagnose av tilstanden til noen av hovedkomponentene i høreapparatet ditt, inkludert mikrofoner, lyd giver, forsterker og sensorer.

Feilsøking vil vise tilstanden til komponenter og gi deg instruksjoner for service om nødvendig (de fleste problemer skyldes voks / rusk og kan løses enkelt). For AI og vanlige høreapparater må audiografen gjøre det første oppsettet av Feilsøking for å etablere et referansenivå for deg. For Edge AI høreapparater vil referansenivået allerede være etablert.

Påminnelser



Påminnelser-funksjonen kan hjelpe deg med å holde rede på viktige oppgaver og avtaler i det travle livet ditt, uten å måtte huske dem alle. Du kan konfigurere og motta visuelle

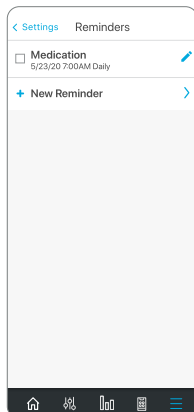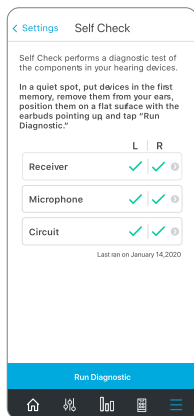

påminnelser på smarttelefonen din og / eller hørbare påminnelser gjennom høreapparatene dine for en rekke oppgaver, for eksempel å ta medisiner, fylle på resepter, rengjøre høreapparatene, trene og drikke vann.

I tillegg kan du tilpasse påminnelsene dine, dvs. ta blodtrykkmedisiner, luften hunden, ring fysioterapeuten, ta med vannflaske og matte til yoga. Etter at du har angitt påminnelsens navn, dato og tid, kan du velge alternativet for å få denne påminnelsen gjentatt daglig, ukentlig, månedlig eller årlig.

Om du trenger ikke bekymre deg hvis du ikke rekker å fullføre oppgaven i det øyeblikket du mottar påminnelsen, fordi forfalte oppgaver vises i rødt på påminnelsesskjermen til du merker dem av som utført.

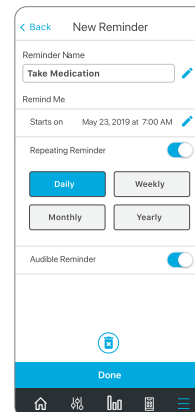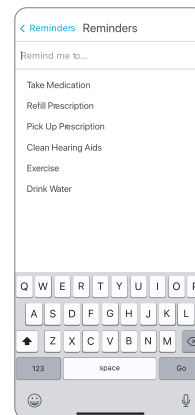

TeleHear fjernprogrammering

Sette opp en konto


TeleHear krever at du oppretter din egen konto. Gjennom denne kontoen kan høreapparatene dine sikkerhetskopieres og synkroniseres mellom flere telefoner. Du kan opprette en konto under installasjonsprosessen eller på et senere tidspunkt om ønskelig. Du kan opprette en konto ved å bruke din eksisterende Facebook eller Google konto, eller ved å opprette din egen konto ved hjelp av e-post og et passord du velger.

Sikkerhetskopi

Når du gjør endringer ved å bruke Thrive-appen, lagres disse endringene på skykontoen din for å sikkerhetskopiere innstillingene dine i sanntid.

Sanntidssesjon

Du kan få en kode fra audiografen din for å aktivere fjernprogrammering som et alternativ. Dette lar deg koble direkte til audiografen din slik at de kan finjustere høreopplevelsen din gjennom en videoøkt.

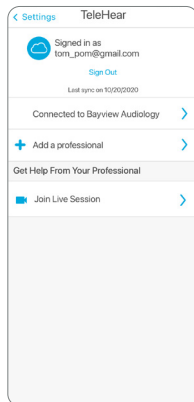

*Ikke tilgjengelig over alt.



Thrive Care App

Appen Thrive Care gir omsorgspersoner muligheten til å følge med på høreapparatbruk, fysisk og sosial aktivitet.

I Thrive Care, kan du dele informasjon om fysisk aktivitet, høreapparatbruk, sosial aktivitet og mer, med dine utvalgte kontakter.

Finn mine høreapparater

Funksjonen Finn mine høreapparater lar deg spore den sist kjøpte fysiske plasseringen til høreapparatene dine på et kart. Når funksjonen Finn høreapparat er aktivert, vil du se en kartvisning med et notat som viser hvor høreapparatene dine sist var tilkoblet. Hvis høreapparatene dine er aktivt koblet til (eller blir tilkoblet), vil indikatorene på undersiden av skjermen animere for å vise hvor nært eller fjernt du er fra høreapparatene dine.

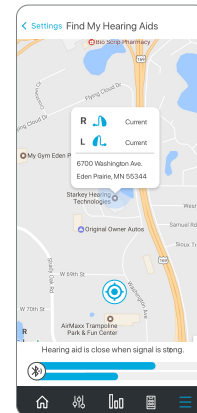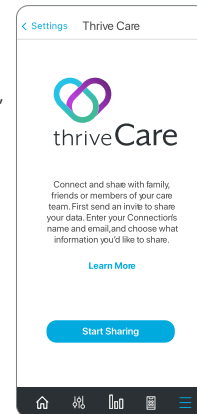

App innstillinger

Alternativer under App-innstillinger inkluderer muligheten til å bytte mellom grunnleggende eller avansert modus og en komplett tilbakestilling av appen Thrive Hearing Control. Avansert modus gir full funksjonalitet for alle funksjonene i appen, mens Enkel modus inneholder grunnleggende fjernkontroll-funksjoner for å holde ting enkelt.

Om

Viser informasjon om Starkey Hearing Technologies, lisensavtalen, personvernregler og app versjonen. Det er også en seksjon hvor man kan gi tilbakemeldinger.

Demo modus

Setter Thrive Hearing Control-appen i en demomodus slik at appen kan fungere uten at høreapparater er tilkoblet, samtidig som de fleste funksjoner er synlige for demonstrasjon. Justeringer som gjøres i Demo modus vil ikke bli brukt i høreapparatene dine.

Sikkerhetsinformasjon

Enhver alvorlig hendelse som har oppstått ved bruk av Starkey-enheten din, bør rapporteres til din lokale Starkey Hearing Technologies-representant og den kompetente myndigheten i medlemsstaten du er etablert. En alvorlig hendelse er definert som enhver funksjonsfeil, forringelse av enhetens egenskaper og/eller ytelse eller utilstrekkelighet i enhetens driftshåndbok/merking som kan føre til død eller alvorlig forverring av helsetilstanden til brukeren, ELLER kan gjøre det ved gjentakelse.

Bruksområde

Thrive Hearing Control-applikasjonen er en medisinsk programvare som er beregnet på å tillate en bruker å fjernstyre volum, minnevalg, Mute/Unmute, Media Streaming Start/Stop og tinnitusmaskeringsfunksjonen til Starkey 2,4 GHz trådløse høreapparater. Det gir også et mobiltelefongrensesnitt for disse høreapparatene og lar brukeren bruke iOS-enheten sin som en lydstrømmeenhet.

Indikasjoner for bruk

Thrive Hearing Control Application er et valgfritt program indikert for pasienter som bruker Starkey 2,4 GHz trådløse høreapparater og som ønsker å bruke en iOS- eller Android-enhet som fjernkontroll, mobiltelefongrensesnitt eller mediastreamer.

For å få tilgang til en elektronisk versjon av denne brukerveiledningen, vennligst besøk www.starkey.no/support/bruksanvisninger

For informasjon om Thrive Hearing Control-appen og iOS/Android-kompatibilitet, vennligst besøk www.starkey.no/hoereapparater/apper/thrive-hearing-control/kompatibilitet

Apple, the Apple logo, iPhone, iPad and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a registered service mark of Apple Inc.

Android and Google Play are trademarks of Google LLC.

Starkey, Starkey logo, SoundSpace, Thrive, Thrive logo, Thrive Care, Thrive Care logo, Edge Mode and TeleHear are trademarks of Starkey Laboratories, Inc.

iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Starkey is under license.



Starkey.no

Postboks 74 Sentrum
4001 Stavanger



2797

